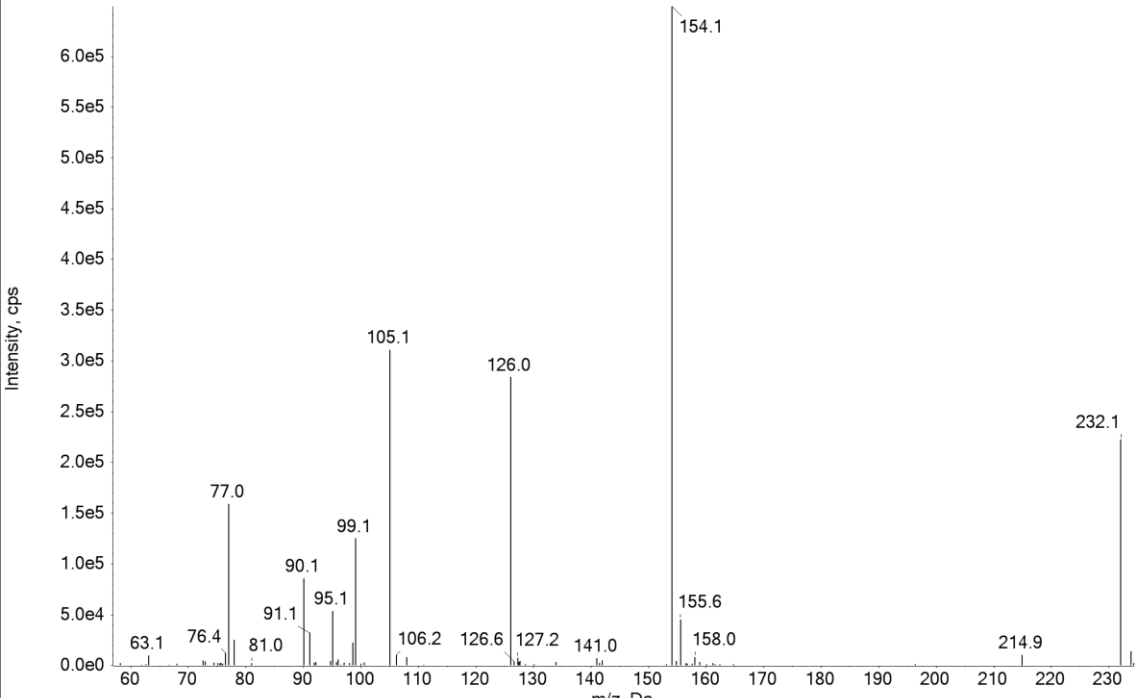
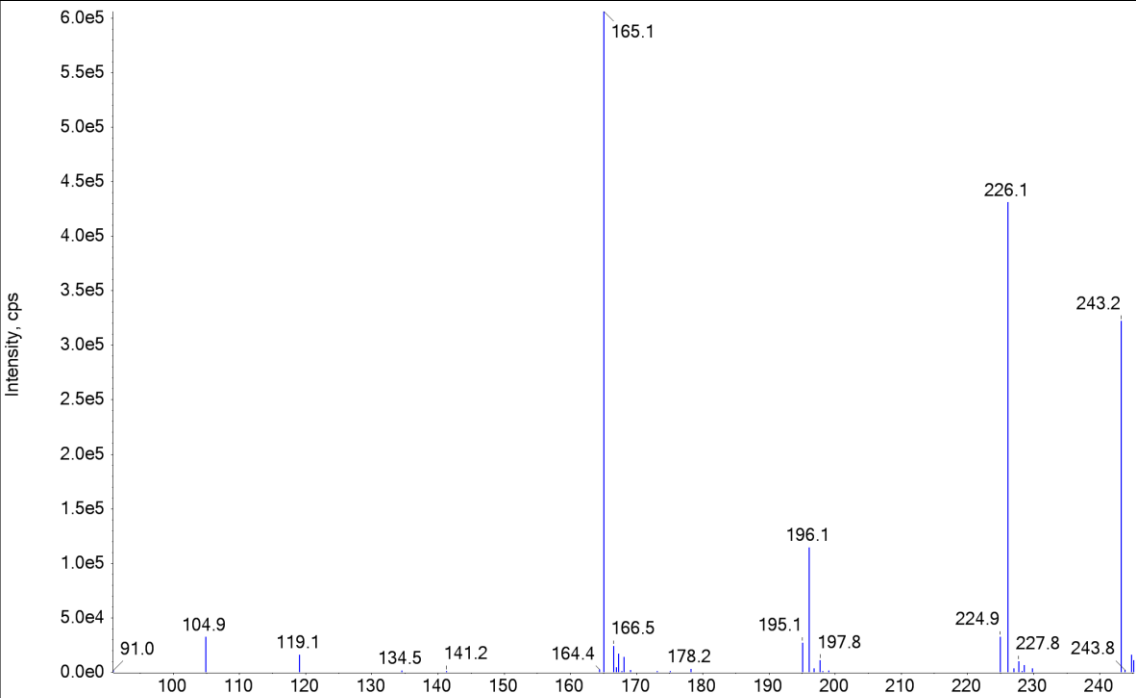
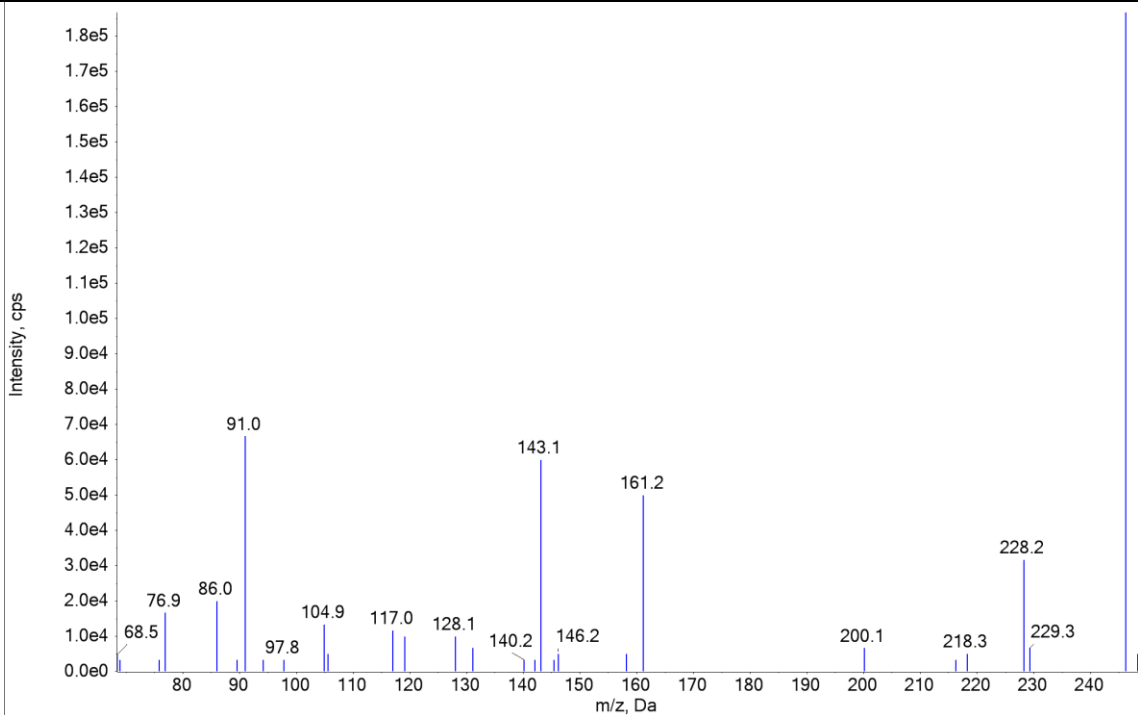
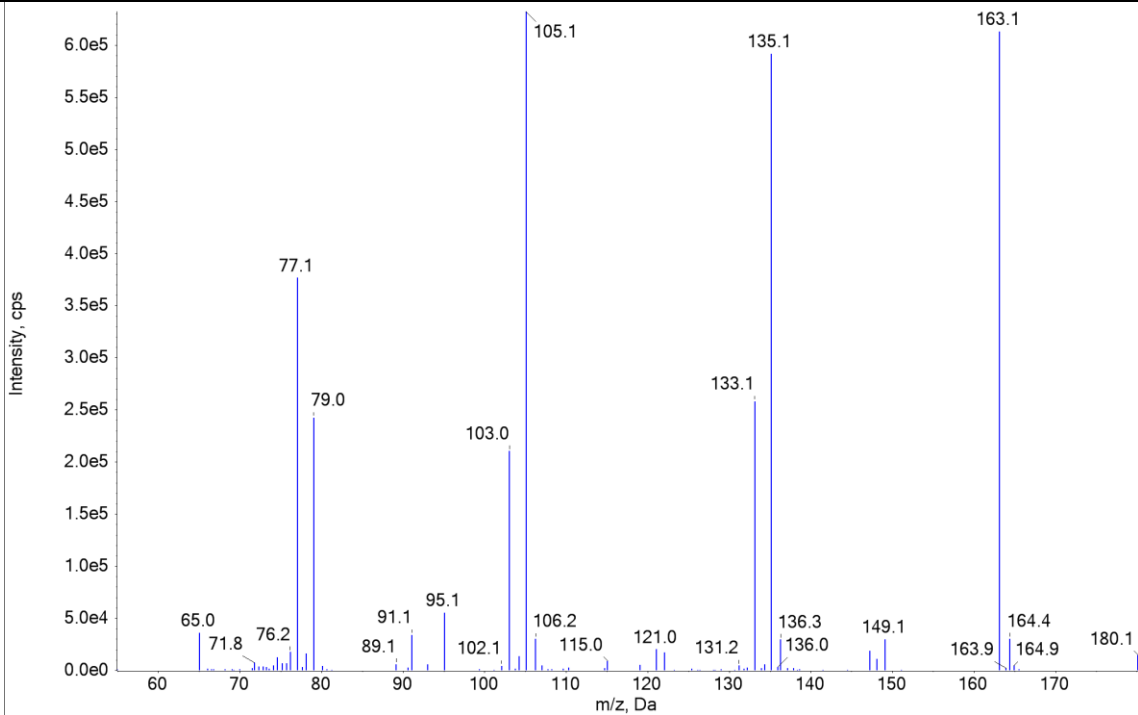
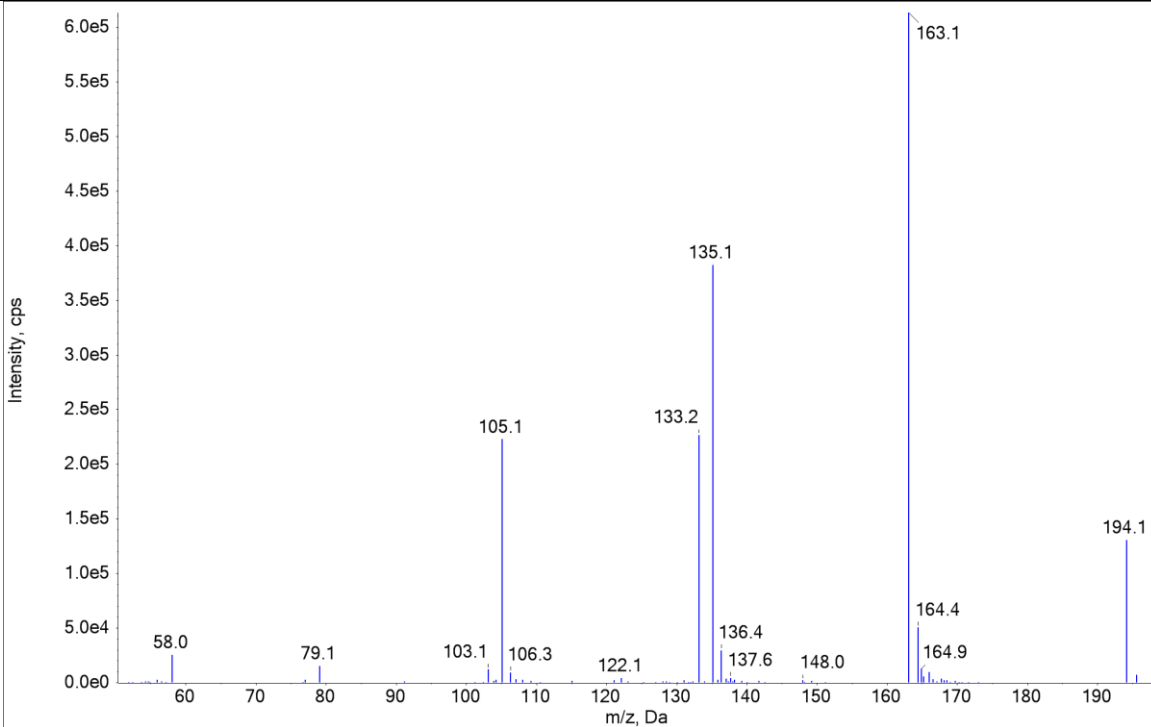
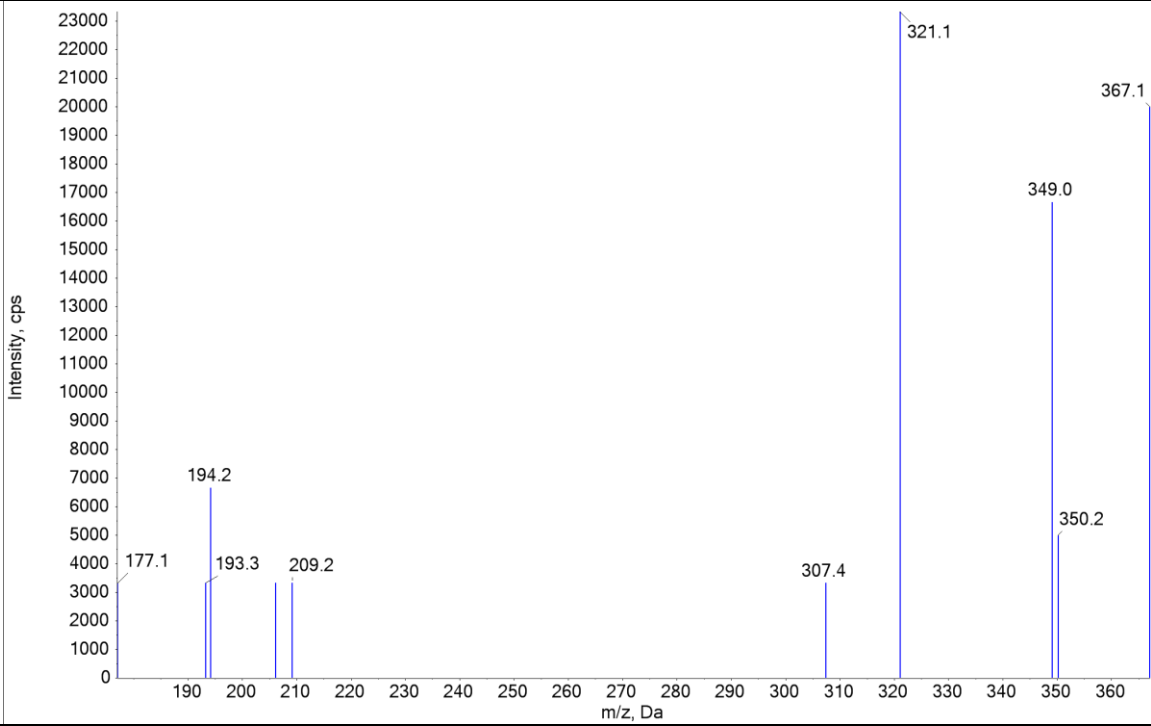


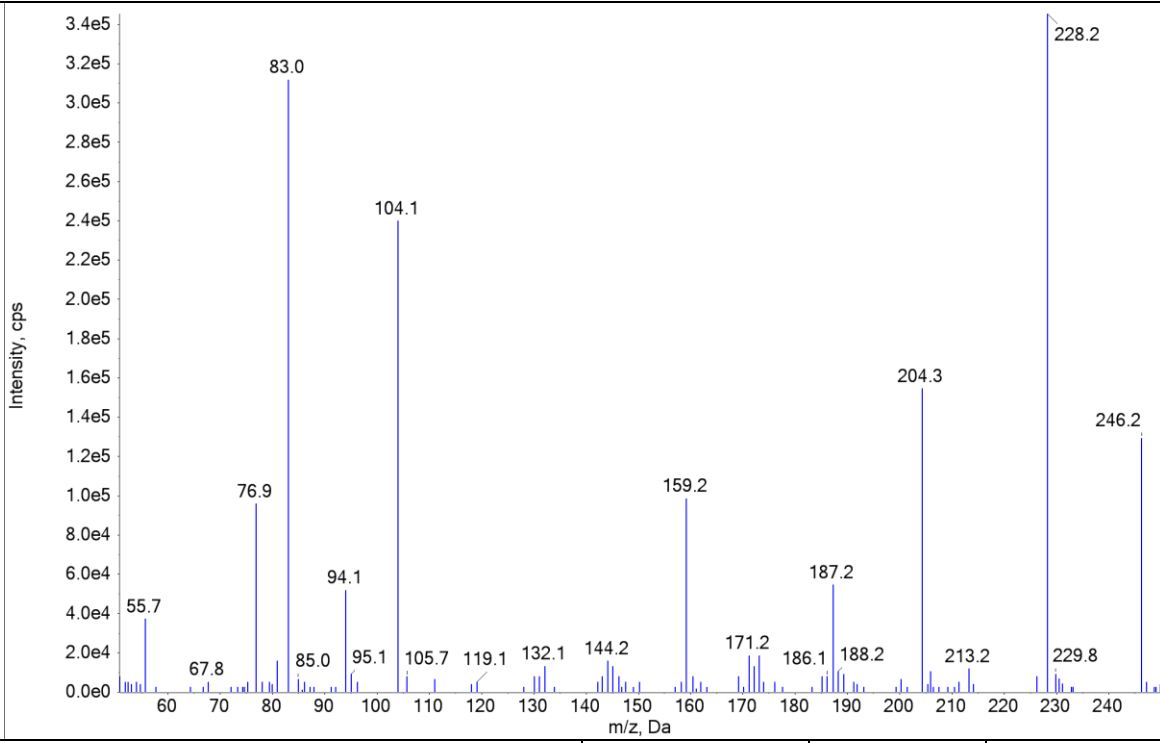
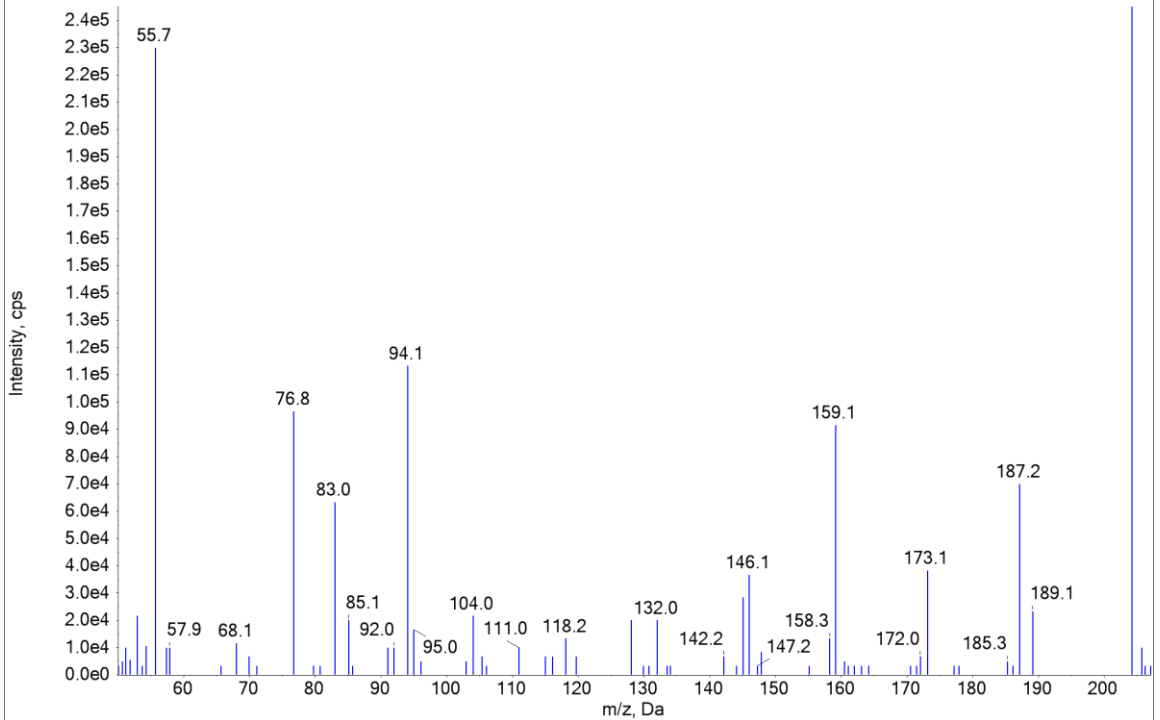
МАСС-СПЕКТРЫ ВЕЩЕСТВ, РЕГИСТРИРУЕМЫХ ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ИОНИЗАЦИИ

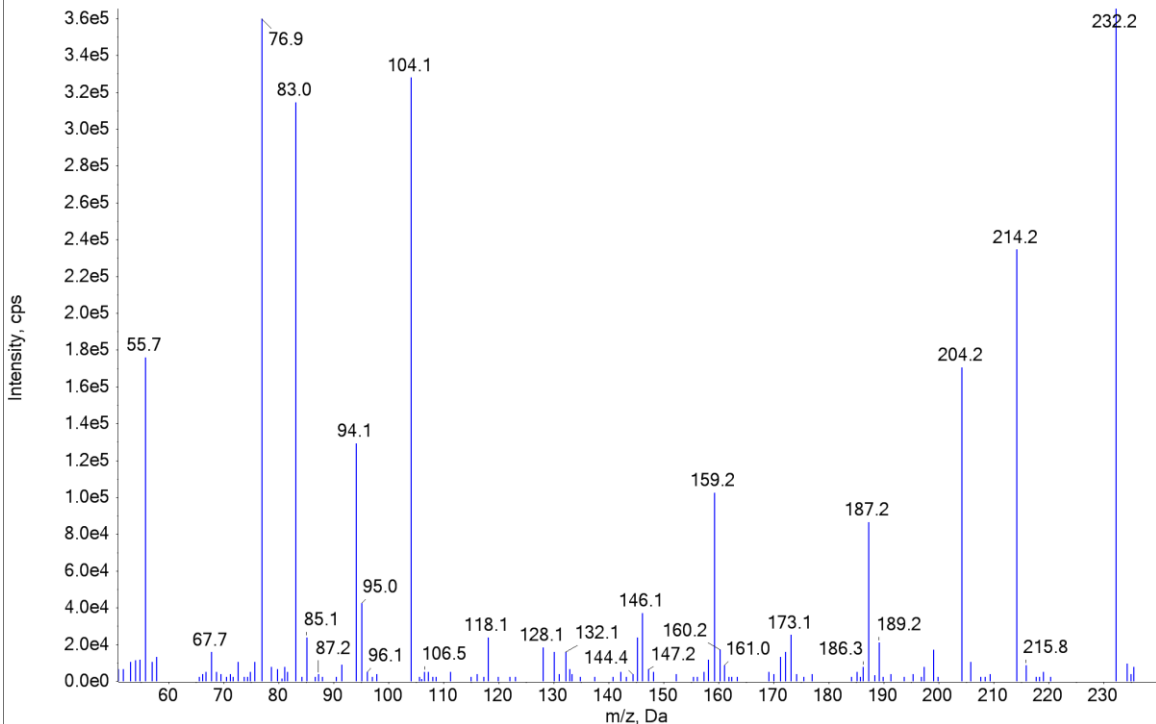
№	Масс спектр			
1				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	2-Amino-5-chlorobenzophenone	6.50	232.1	154.1
2				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	2-Amino-5-nitrobenzophenone	7.00	243.1	165.1

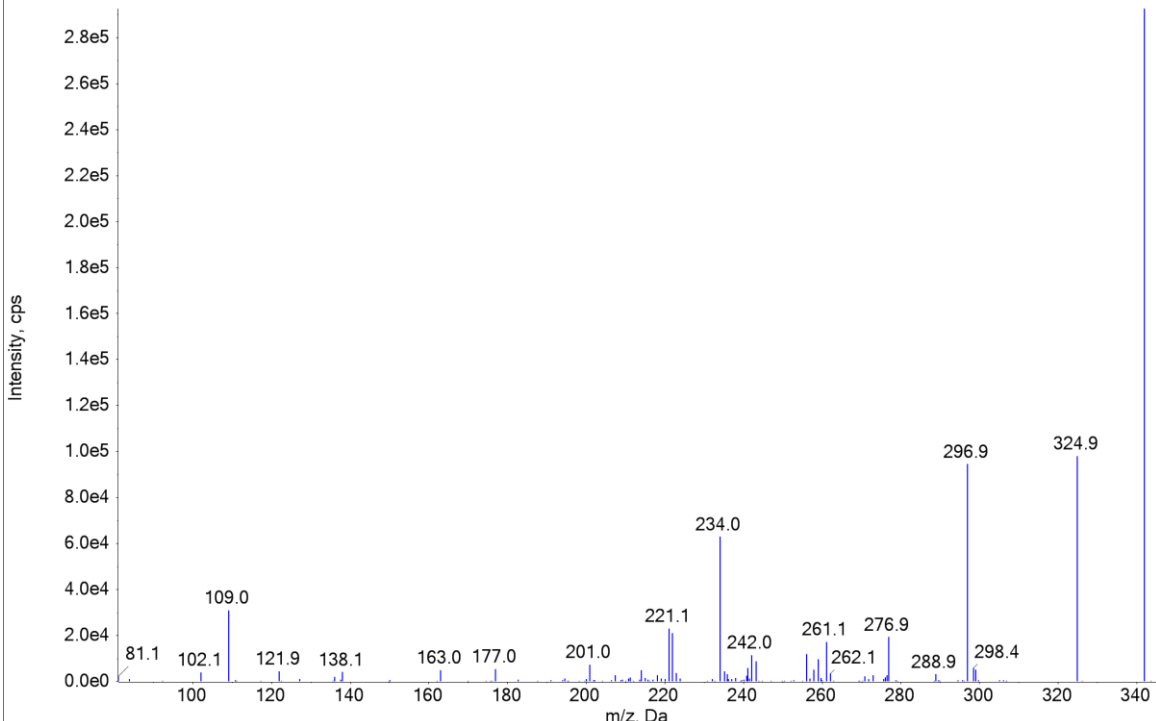
3	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	2-Oxo-alpha-PVP	6.65	246.1	91.1

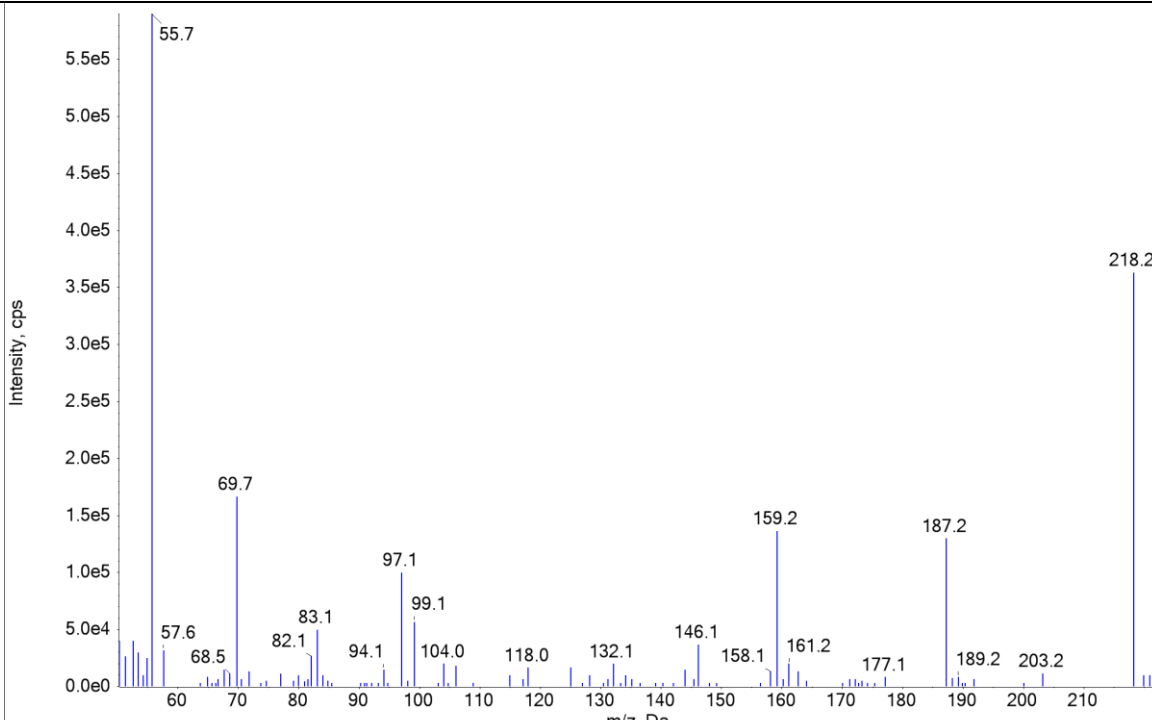
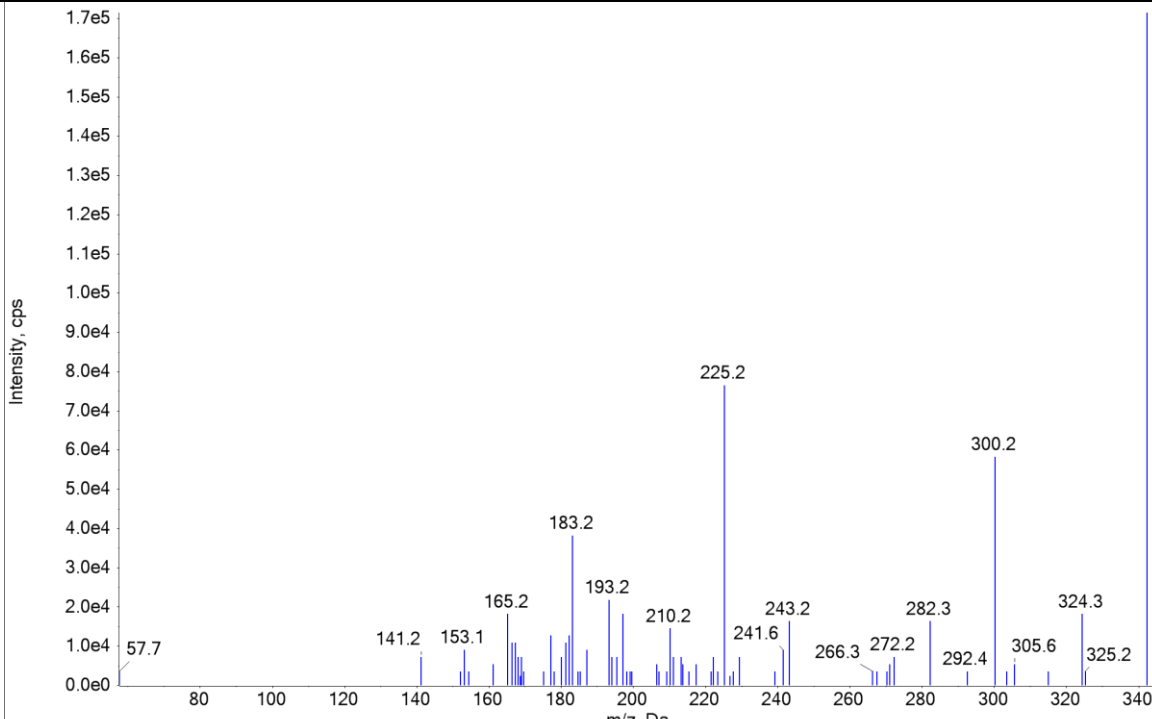
4	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	3,4-Methylenedioxyamphetamine	4.09	180.1	105.1

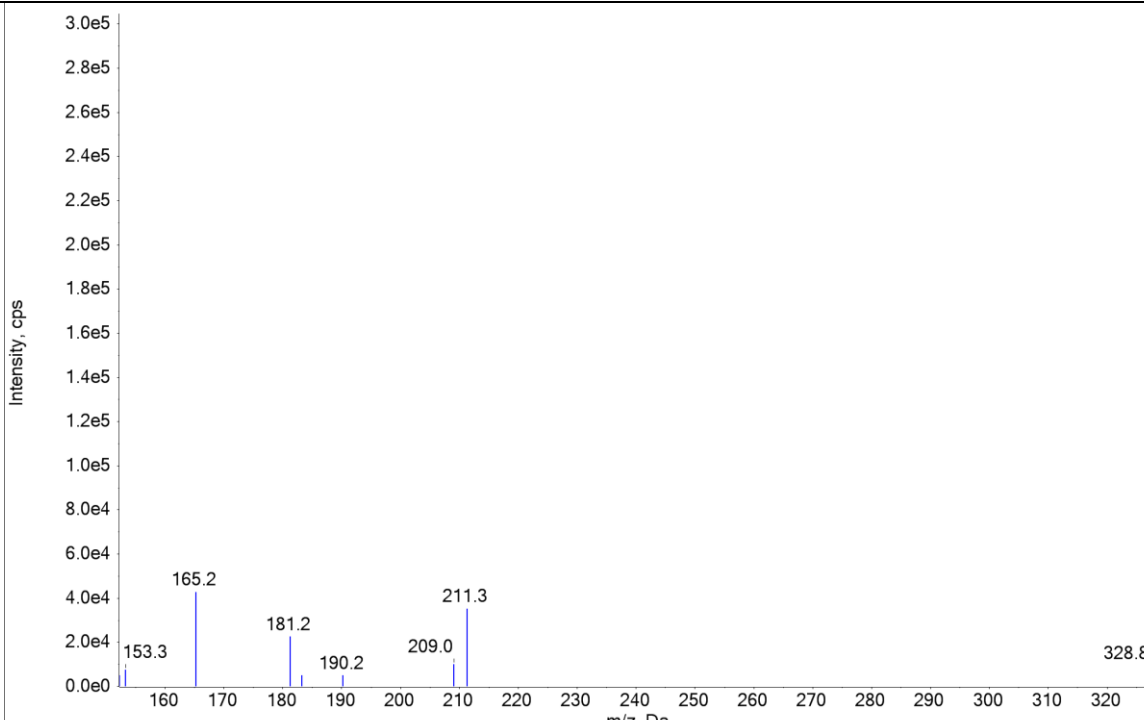
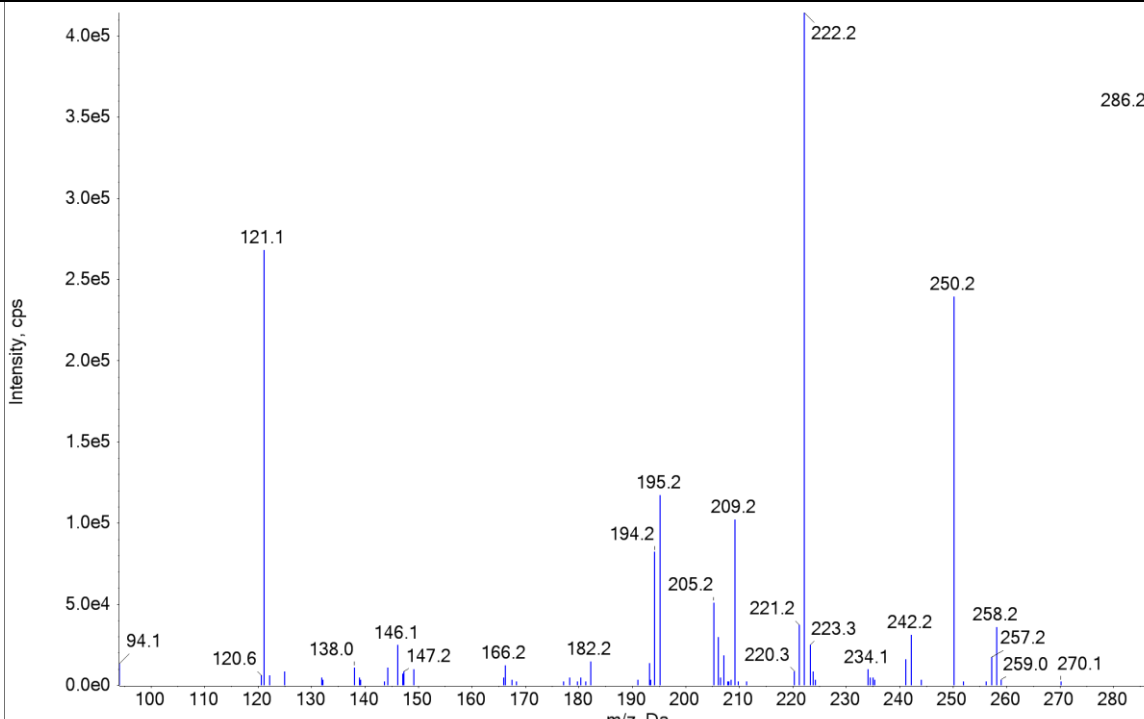
5	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	3,4-Methylenedioxymethamphetamine	4.27	194.1	163.1
6	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	3-Hydrox phenazepam	5.25	367.2	321

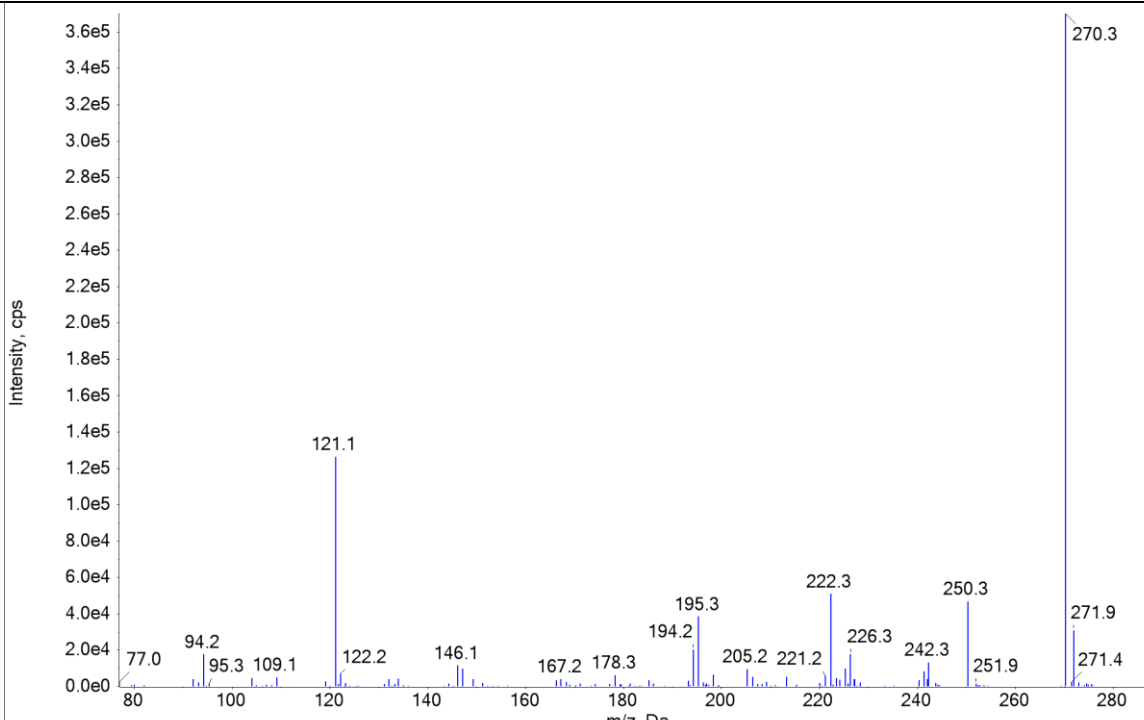
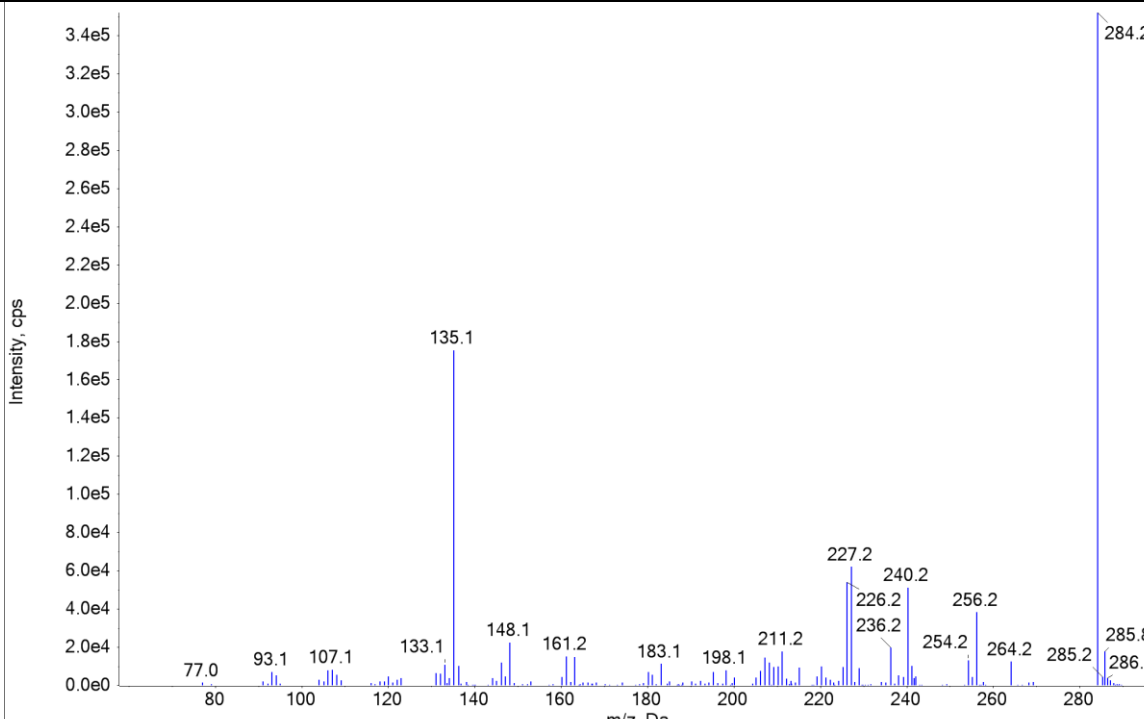
7	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	4-Acetylaminofenazone (Metamizol m4)	4.34	246.0	83
8	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	4-Aminofenazone (Metamizol m3)	4.32	204.0	56

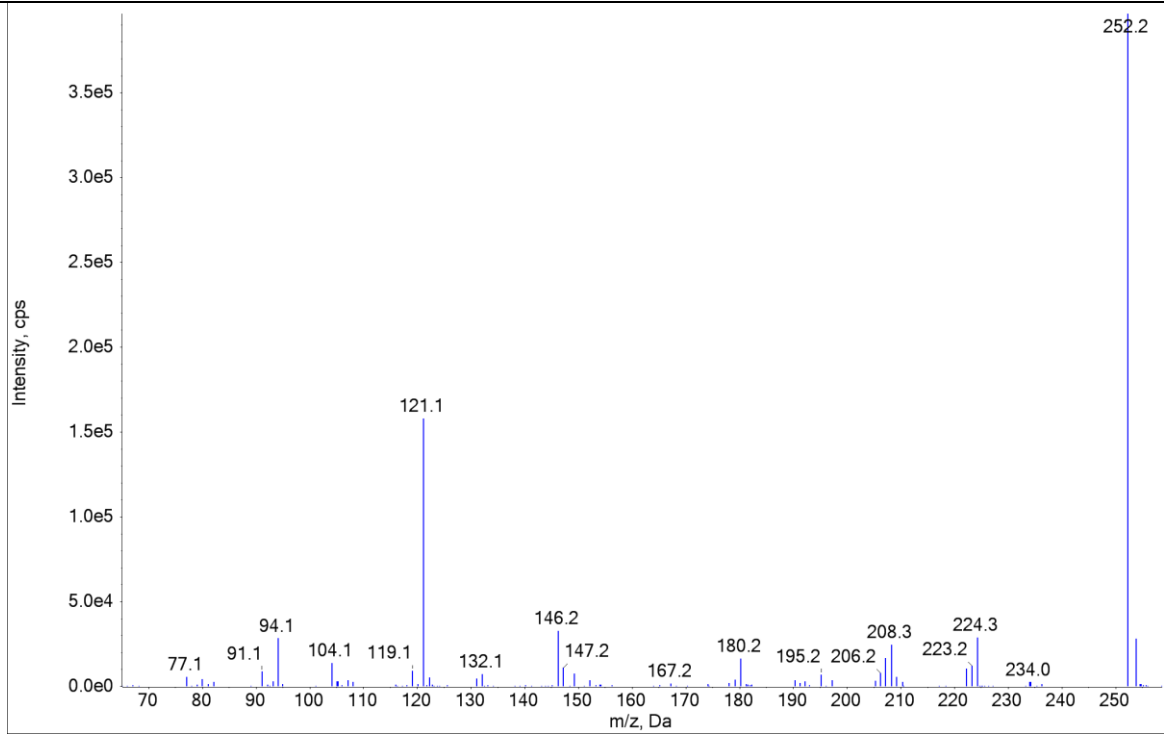
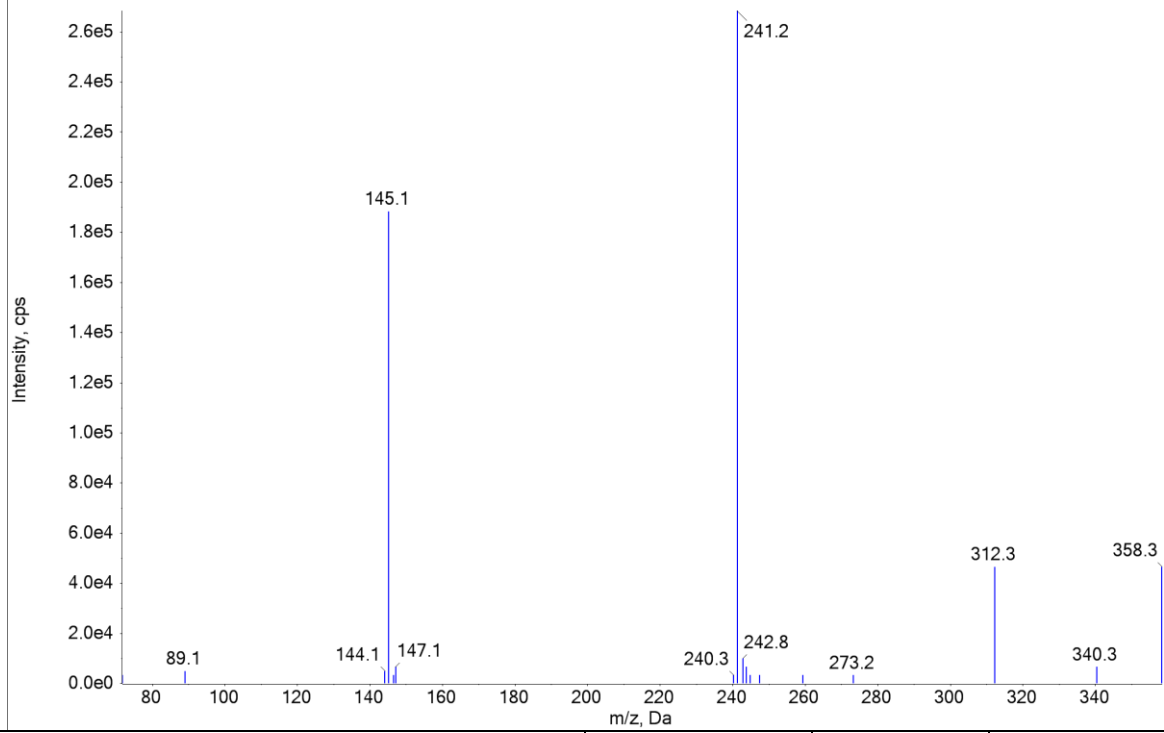
9	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	4-Formylaminofenazone (Metamizol m2)	4.3	232.0	83

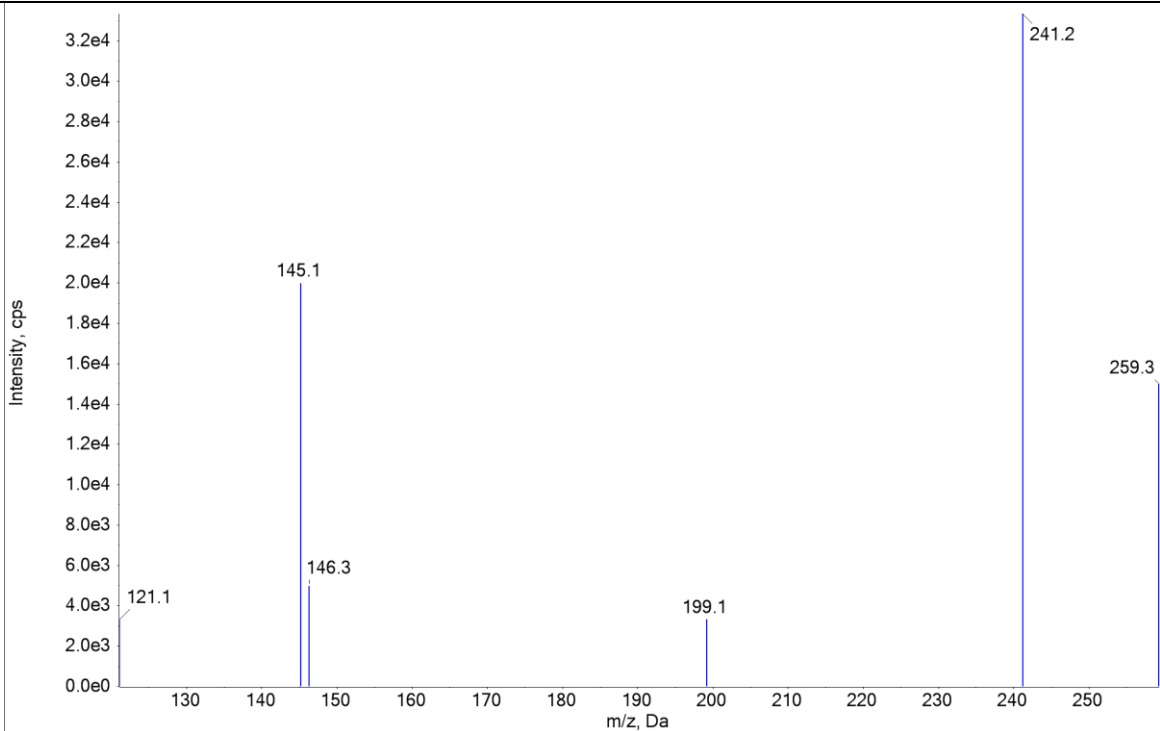
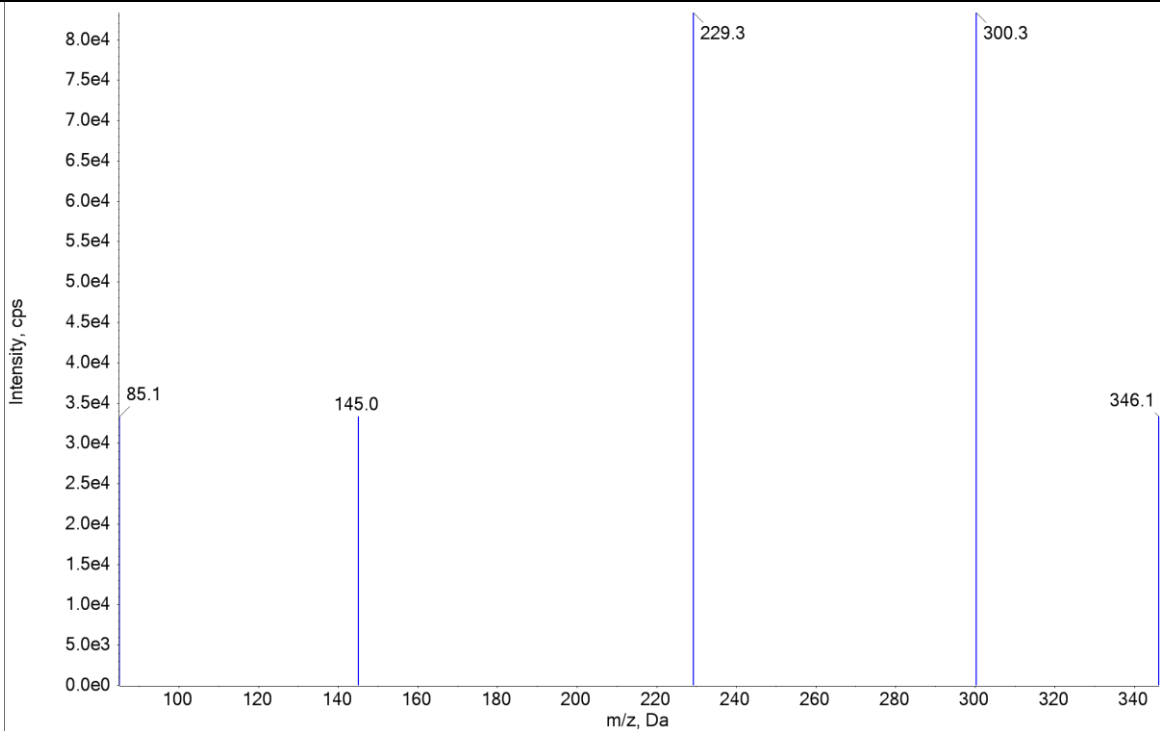
10	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	4-Hydroxymidazolam	6.62	342.0	234

11	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	4-methyloaminofenazone (Metamizol m1)	4.4	218.0	56
12	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	6-Monoacetylcodeine	5.74	342.2	225.1

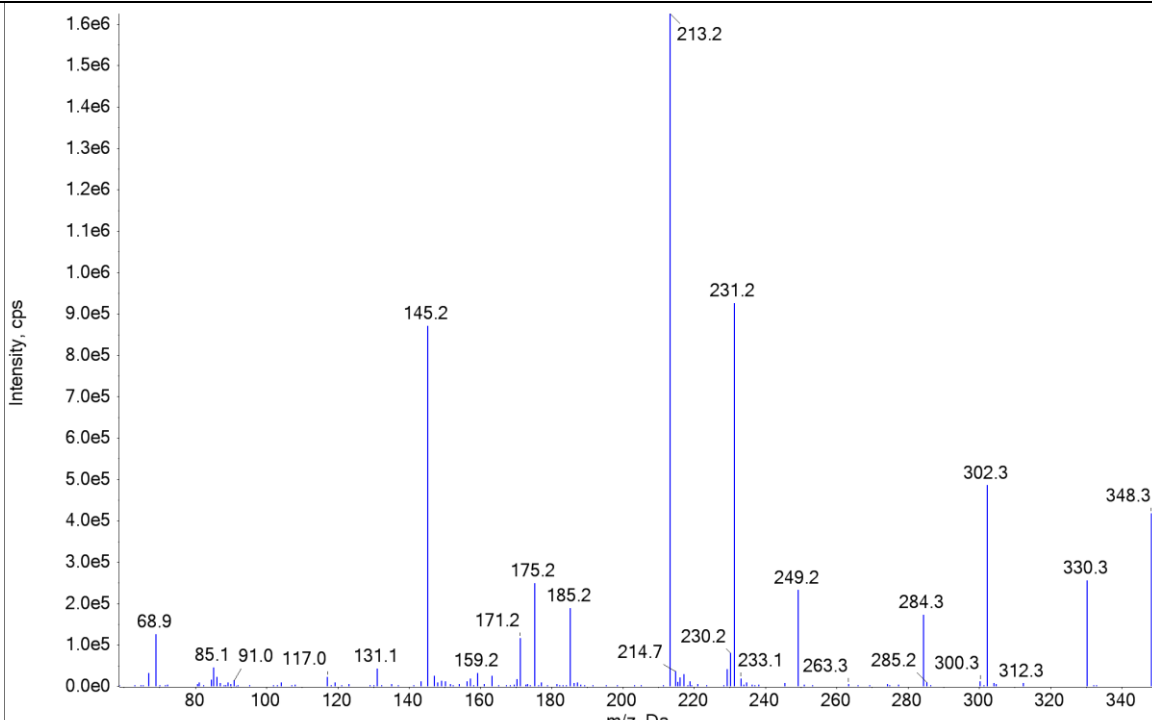
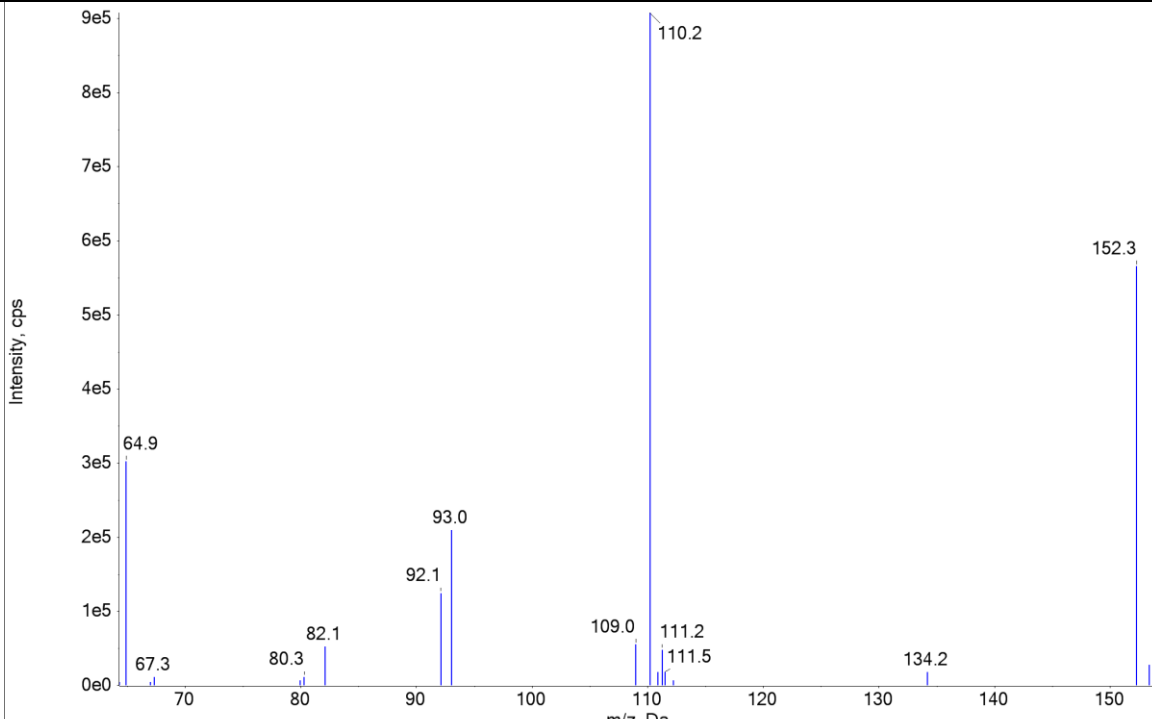
13	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	6-O-Мonoacetylmorphine	4.29	328.2	165.2
14	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	7-Aminoclonazepam	5.24	286.1	121

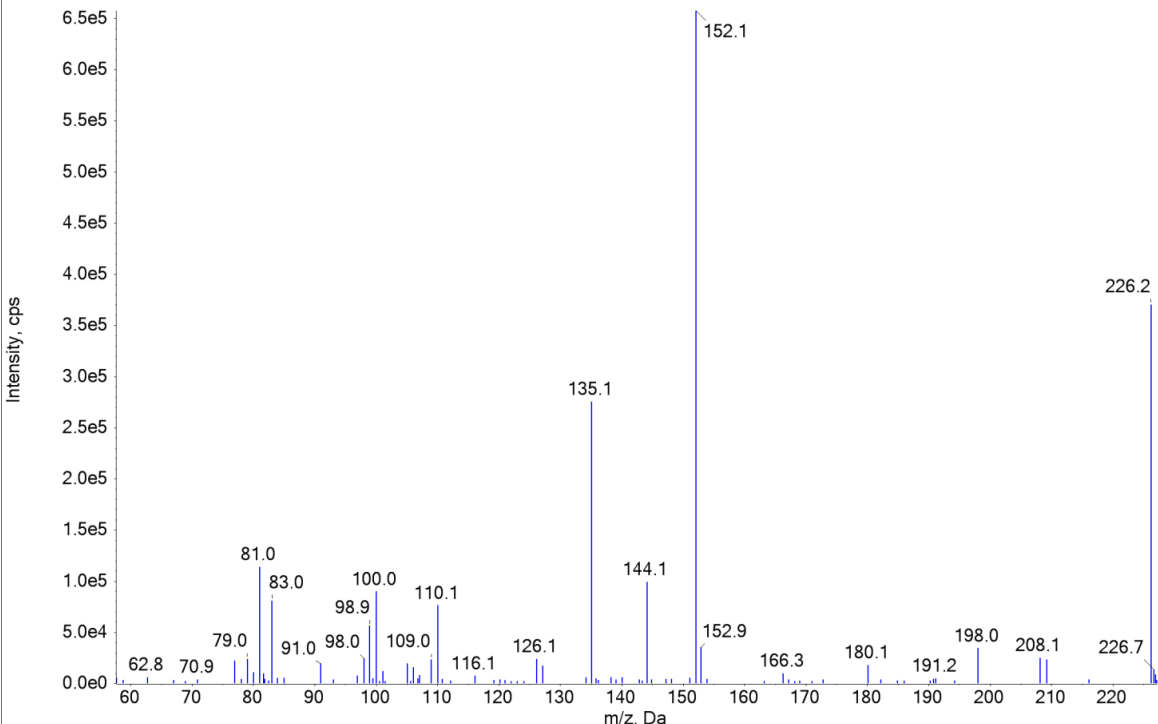
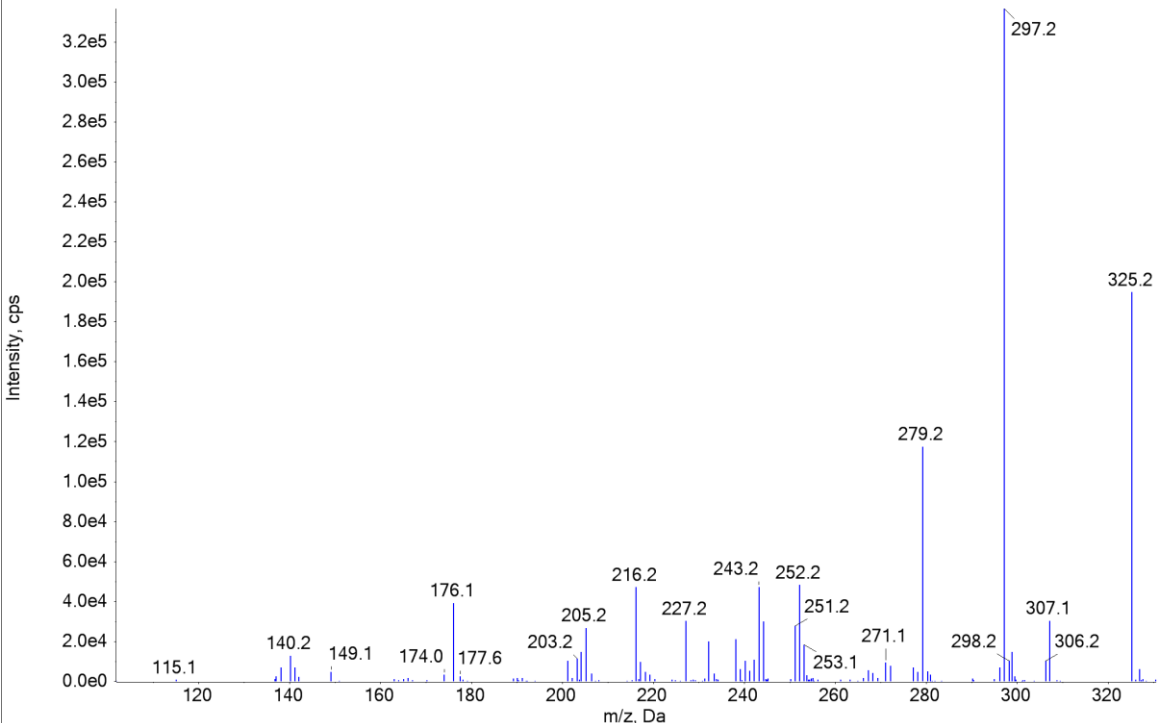
15	Масс спектр			
	 Mass spectrum of 7-Aminodesmethyflunitrazepam. The x-axis represents m/z (Da) from 80 to 280, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 3.6e5. The base peak is at m/z 270.3. Other labeled peaks include 77.0, 94.2, 95.3, 109.1, 121.1, 122.2, 146.1, 167.2, 178.3, 194.2, 195.3, 205.2, 221.2, 222.3, 226.3, 242.3, 250.3, 251.9, 271.4, and 271.9.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	7-Aminodesmethyflunitrazepam	7.9	270.1	121.1
16	Масс спектр			
	 Mass spectrum of 7-Aminoflunitrazepam. The x-axis represents m/z (Da) from 80 to 280, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 3.4e5. The base peak is at m/z 284.2. Other labeled peaks include 77.0, 93.1, 107.1, 133.1, 135.1, 148.1, 161.2, 183.1, 198.1, 211.2, 227.2, 236.2, 240.2, 254.2, 256.2, 264.2, 285.2, 285.8, and 286.4.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	7-Aminoflunitrazepam	3.8	284.1	135.1

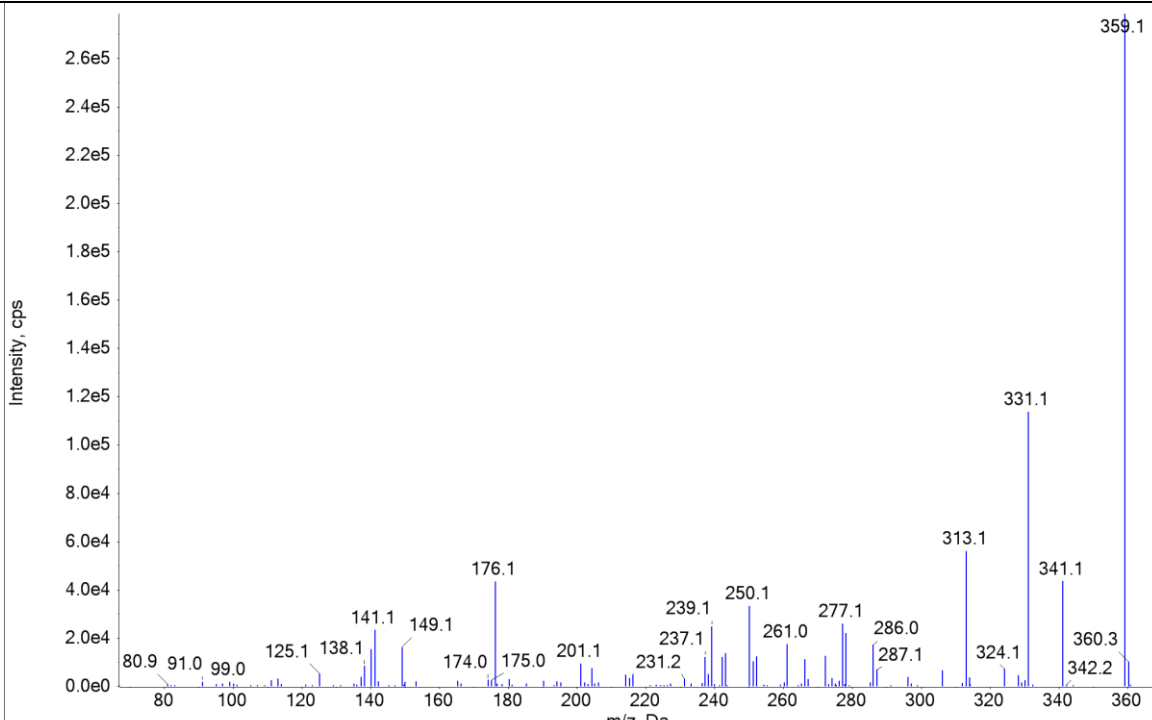
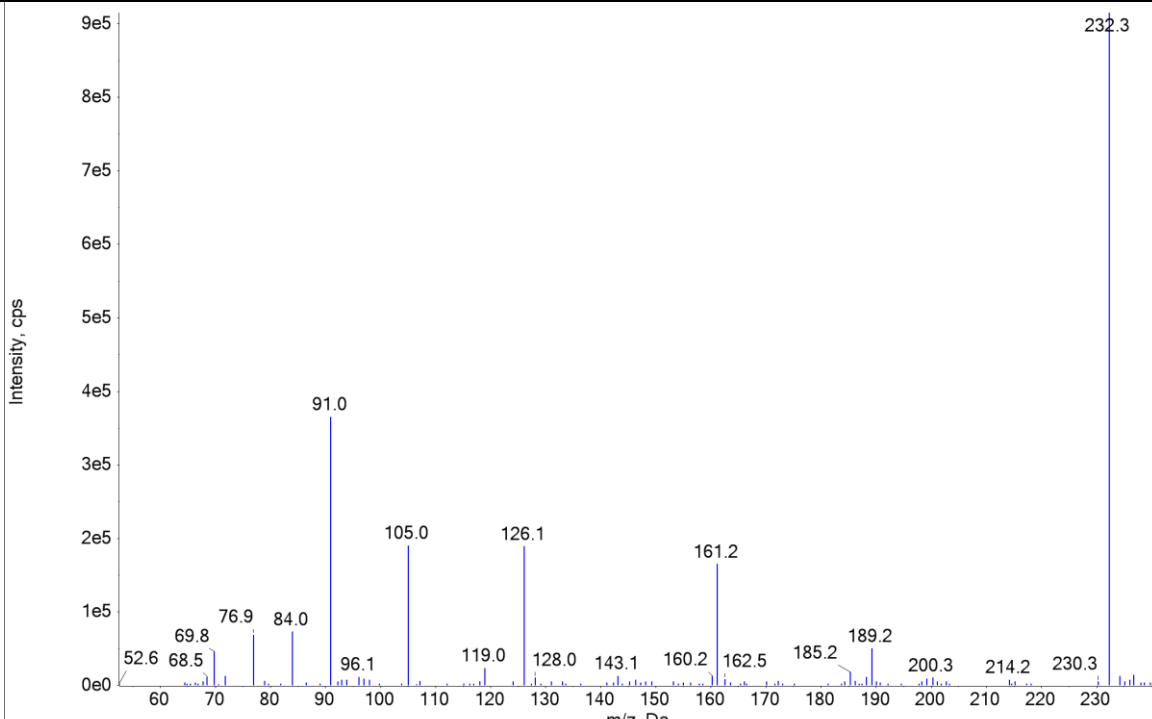
17	Масс спектр			
	 Mass spectrum of 7-Aminonitrazepam. The x-axis represents m/z (Da) from 70 to 250, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 3.5e5. The base peak is at m/z 252.2. Other labeled peaks include 77.1, 91.1, 94.1, 104.1, 119.1, 121.1, 132.1, 146.2, 147.2, 167.2, 180.2, 195.2, 206.2, 208.3, 223.2, 224.3, and 234.0.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	7-Aminonitrazepam	2.7	252.0	121.1
18	Масс спектр			
	 Mass spectrum of AB- Chminaca carboxylated metabolites. The x-axis represents m/z (Da) from 80 to 340, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 2.6e5. The base peak is at m/z 241.2. Other labeled peaks include 89.1, 144.1, 145.1, 147.1, 240.3, 242.8, 273.2, 312.3, 340.3, and 358.3.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	AB- Chminaca carboxylated metabolites	6.94	358.3	241.3

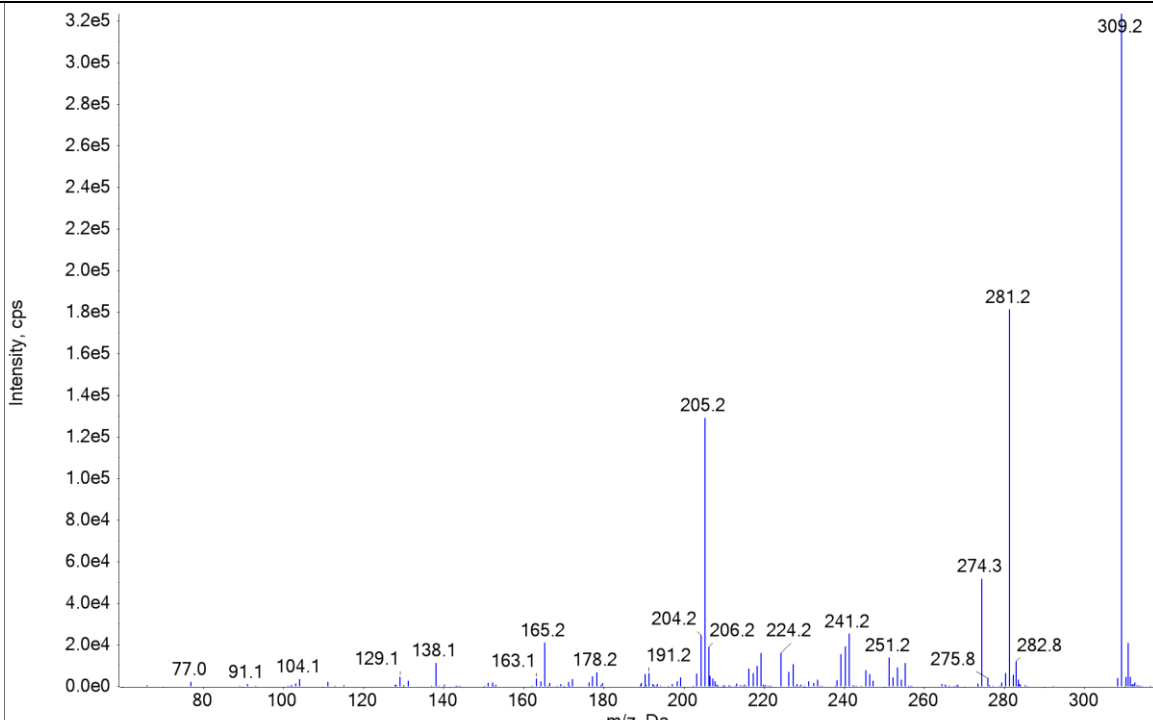
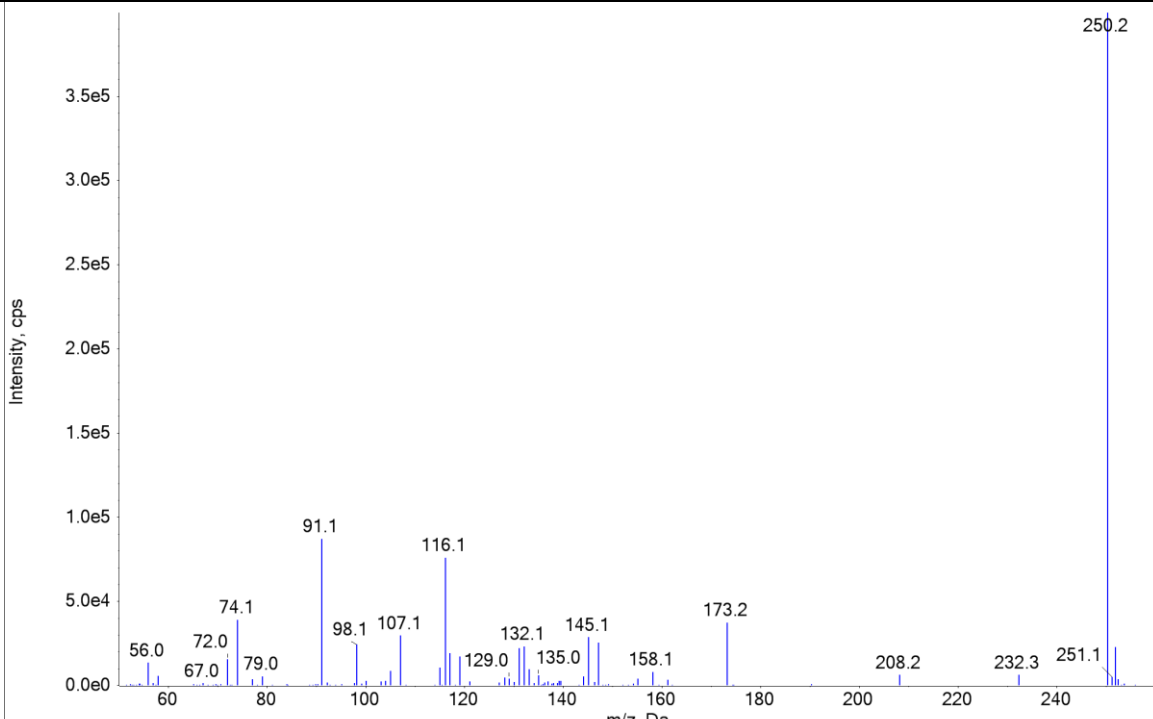
19	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	AB-Chminaca- metabolite -COOH	5.89	259.2	241.2
20	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	AB-Pinaca- ketone metabolite	5.15	346.2	300.2

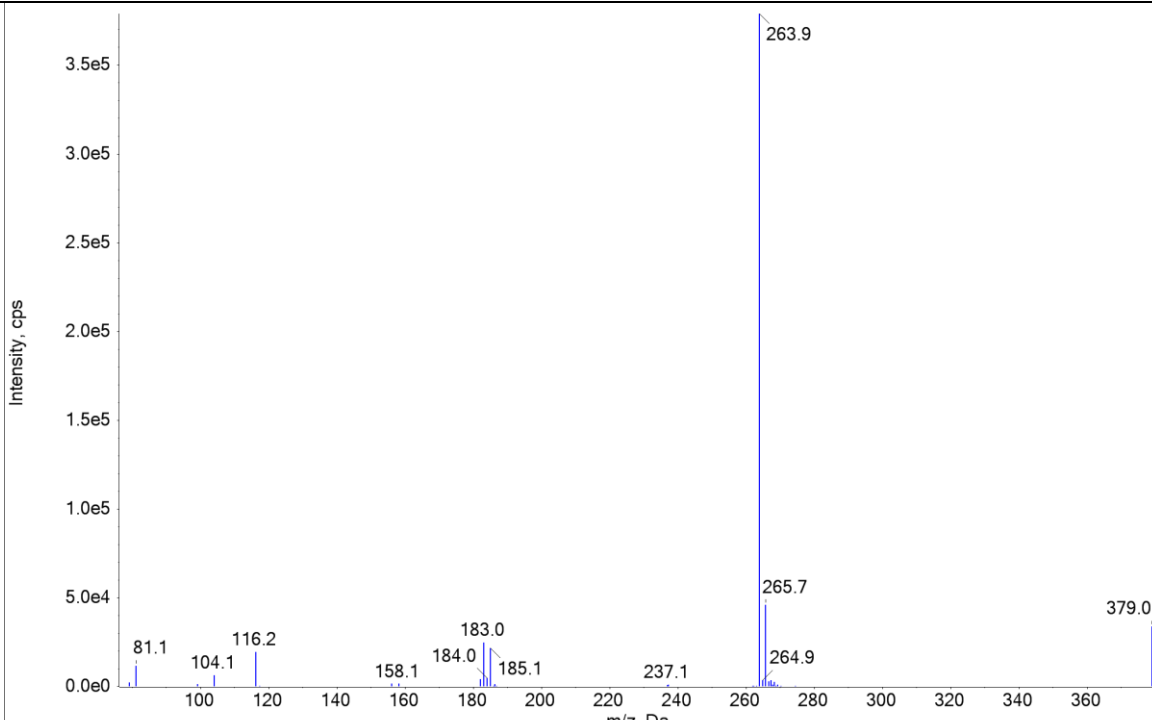
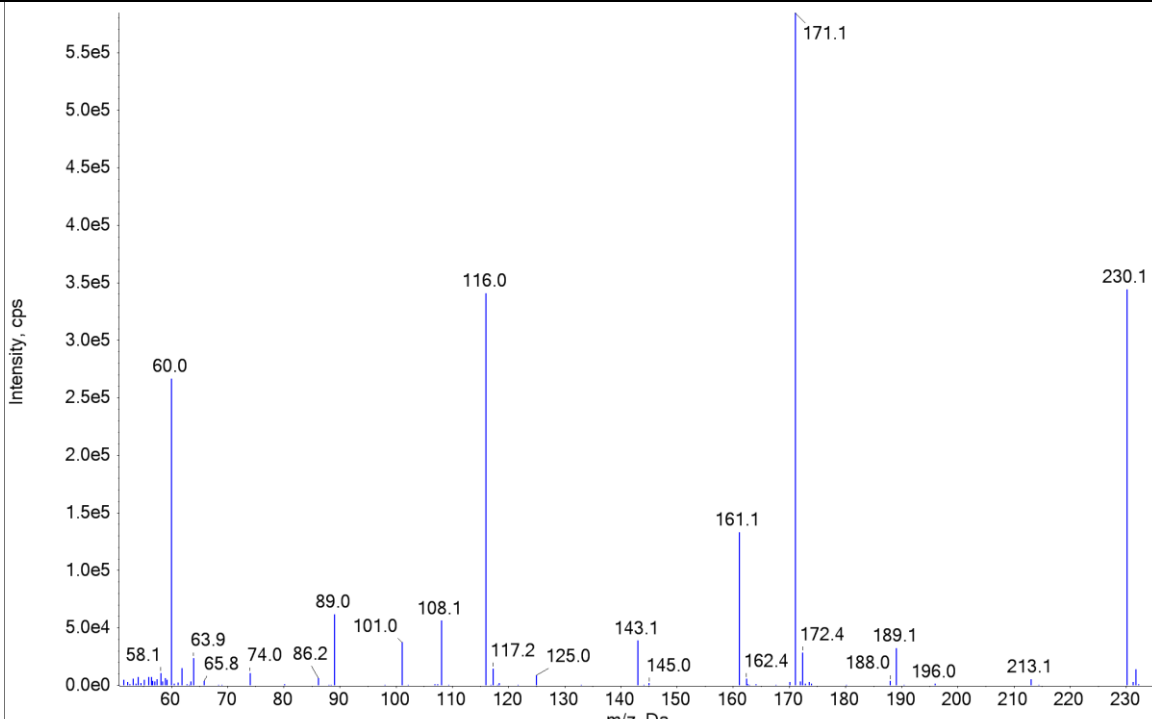
21	Масс спектр			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	AB- Pinaca - metabolite di-OH	5.77	365.2	320.2
22	Масс спектр			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	AB- Pinaca - Amide hydrolysis-oxidation - Glucuronide	5.39	524.2	348.4

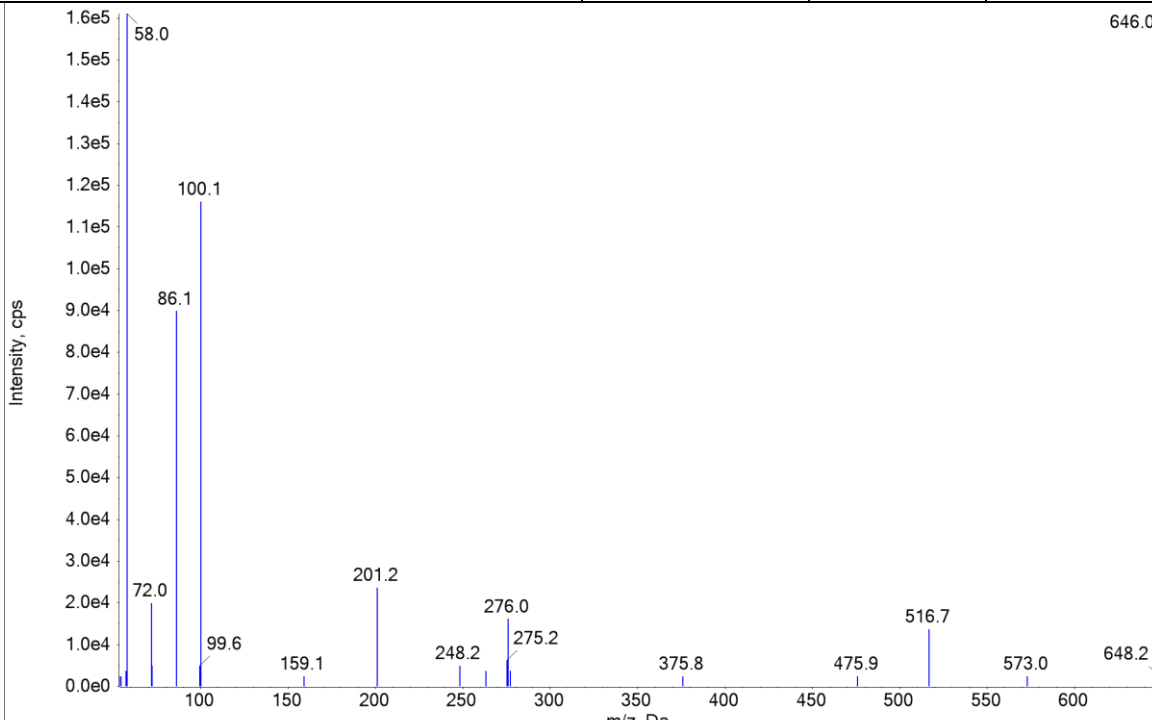
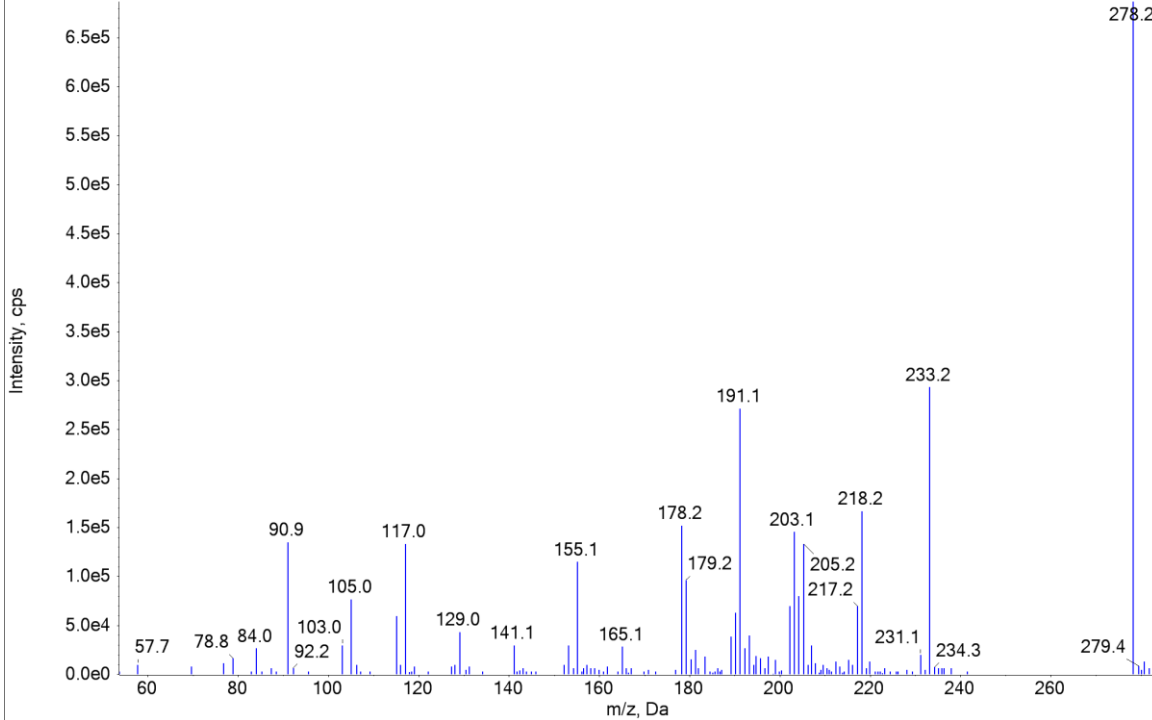
23	Масс спектр			
	 Mass spectrum of AB- Pinaca - OH metabolite. The x-axis represents m/z (Da) from 80 to 340, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 1.6e6. The base peak is at m/z 213.2. Other labeled peaks include 68.9, 85.1, 91.0, 117.0, 131.1, 145.2, 159.2, 171.2, 175.2, 185.2, 214.7, 230.2, 233.1, 249.2, 263.3, 284.3, 285.2, 300.3, 312.3, 330.3, and 348.3.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	AB- Pinaca - OH metabolite	5.32	348.3	213.2
24	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Acetaminophen. The x-axis represents m/z (Da) from 70 to 150, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0e0 to 9e5. The base peak is at m/z 110.2. Other labeled peaks include 64.9, 67.3, 80.3, 82.1, 92.1, 93.0, 109.0, 111.2, 111.5, 134.2, and 152.3.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Acetaminophen	2.26	152.0	110.1

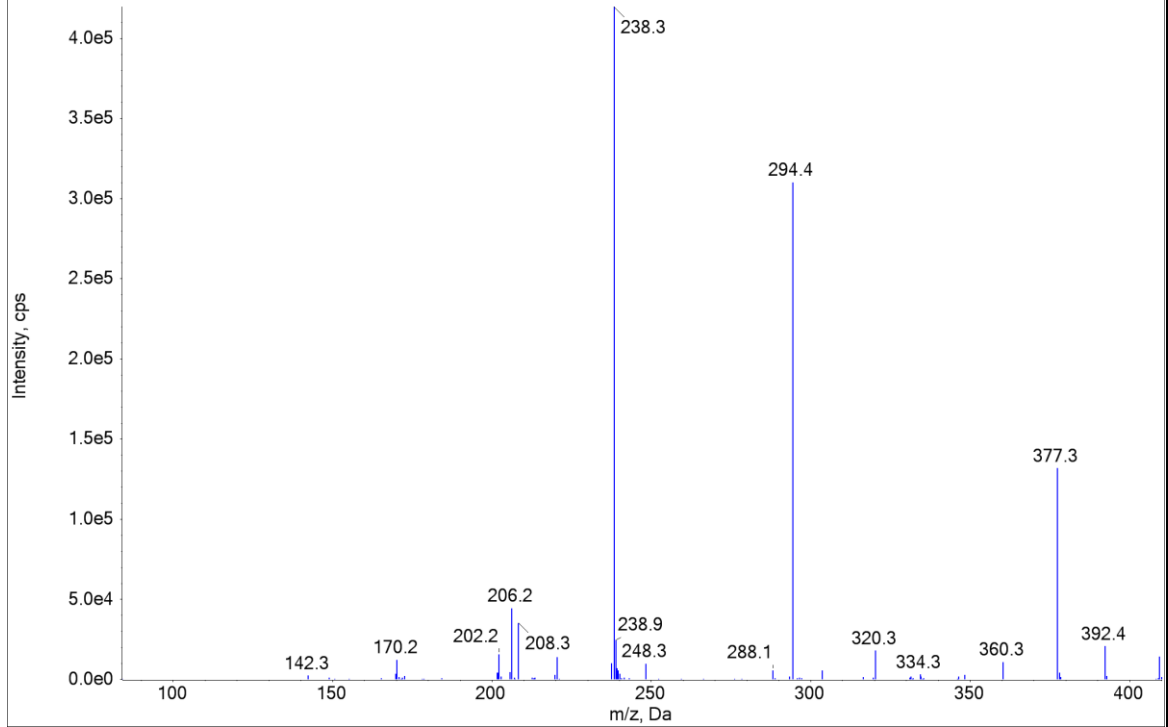
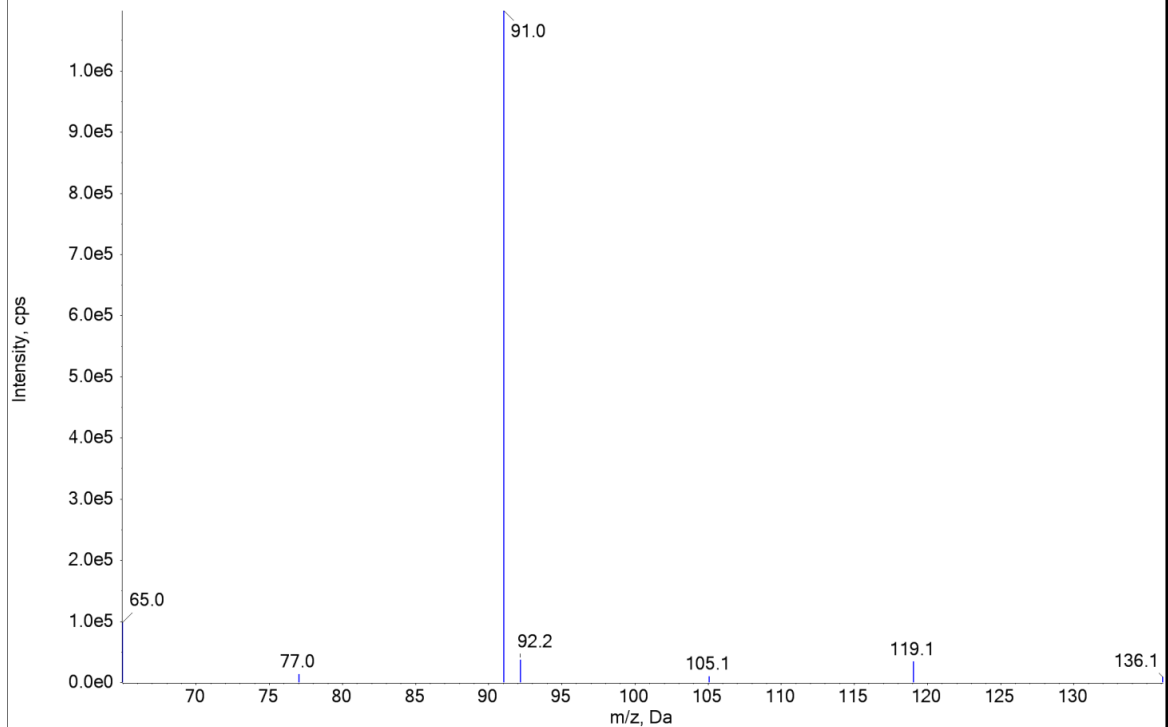
25	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Асикловир	1	226.1	152.1
26	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	alpha-Гидроксиалпразолам	7.11	325.1	297.2

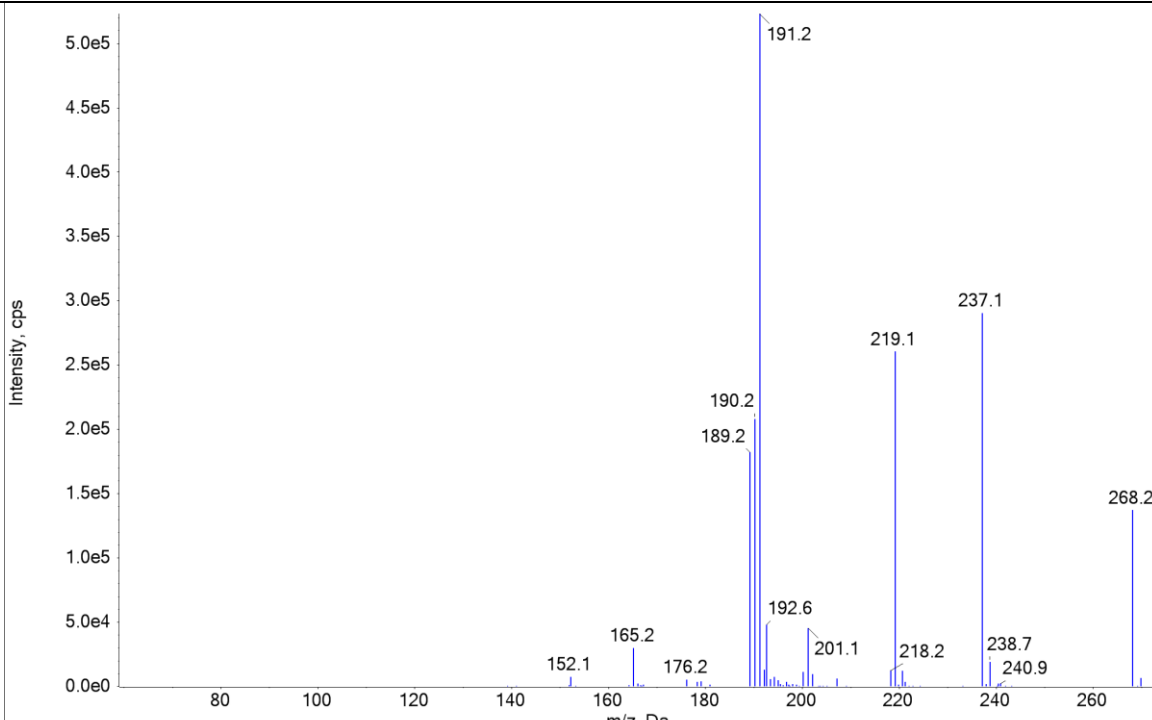
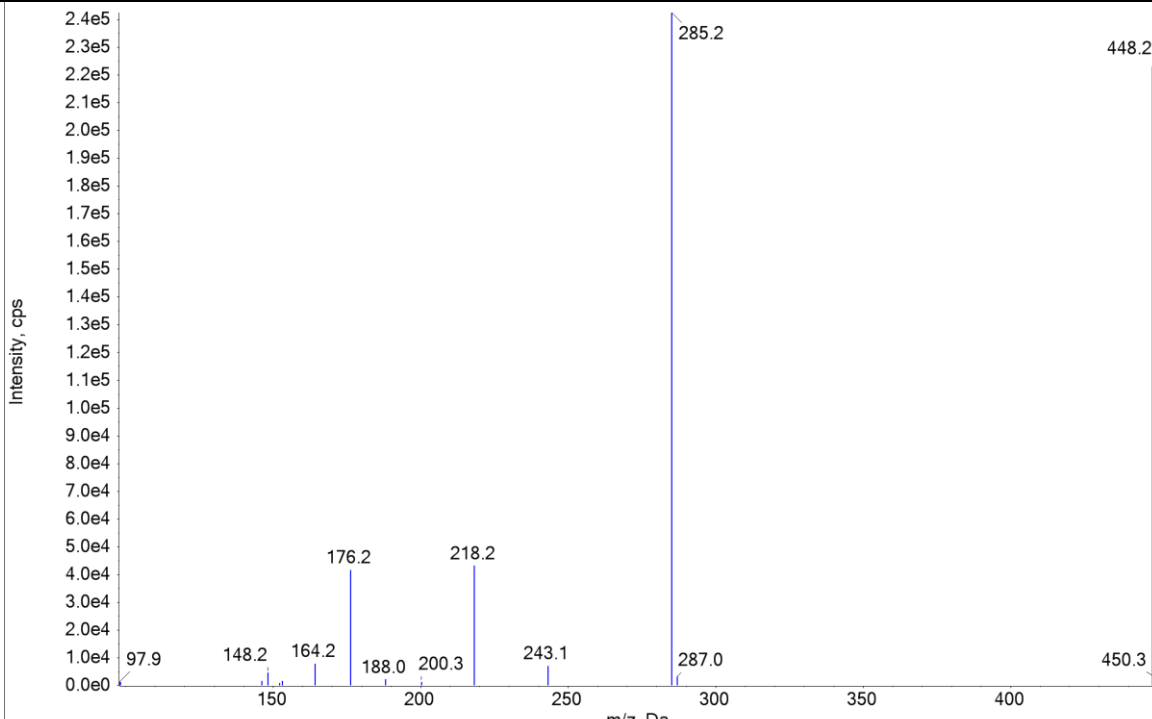
27	Масс спектр			
	 Mass spectrum of alpha-Hydroxytriazolam. The x-axis represents m/z (Da) from 80 to 360, and the y-axis represents intensity in counts per second (cps) from 0.0e0 to 2.6e5. The base peak is at m/z 359.1. Other labeled peaks include 80.9, 91.0, 99.0, 125.1, 138.1, 141.1, 149.1, 174.0, 175.0, 176.1, 201.1, 231.2, 237.1, 239.1, 250.1, 261.0, 277.1, 286.0, 287.1, 313.1, 324.1, 331.1, 341.1, 342.2, 360.3, and 359.1.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	alpha-Hydroxytriazolam	7.05	359.0	331.1
28	Масс спектр			
	 Mass spectrum of alpha-PVP. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 230, and the y-axis represents intensity in counts per second (cps) from 0e0 to 9e5. The base peak is at m/z 232.3. Other labeled peaks include 52.6, 68.5, 69.8, 76.9, 84.0, 91.0, 96.1, 105.0, 119.0, 126.1, 128.0, 143.1, 160.2, 161.2, 162.5, 185.2, 189.2, 200.3, 214.2, and 230.3.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	alpha-PVP	6.59	232.1	91.1

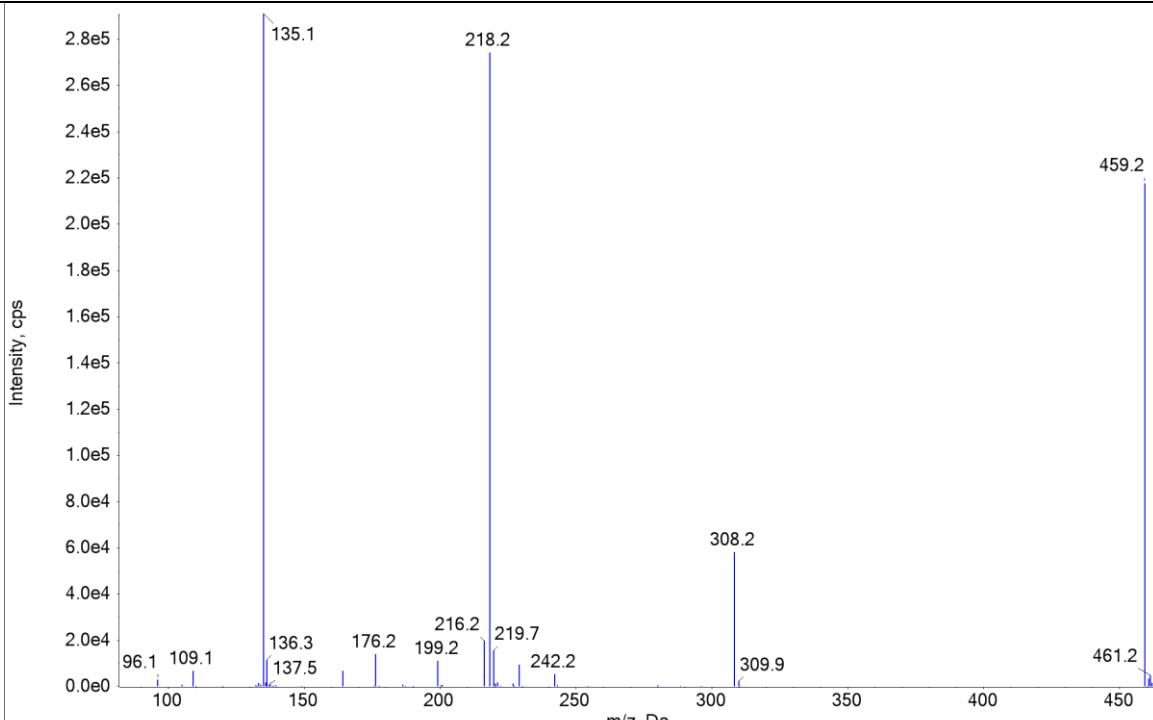
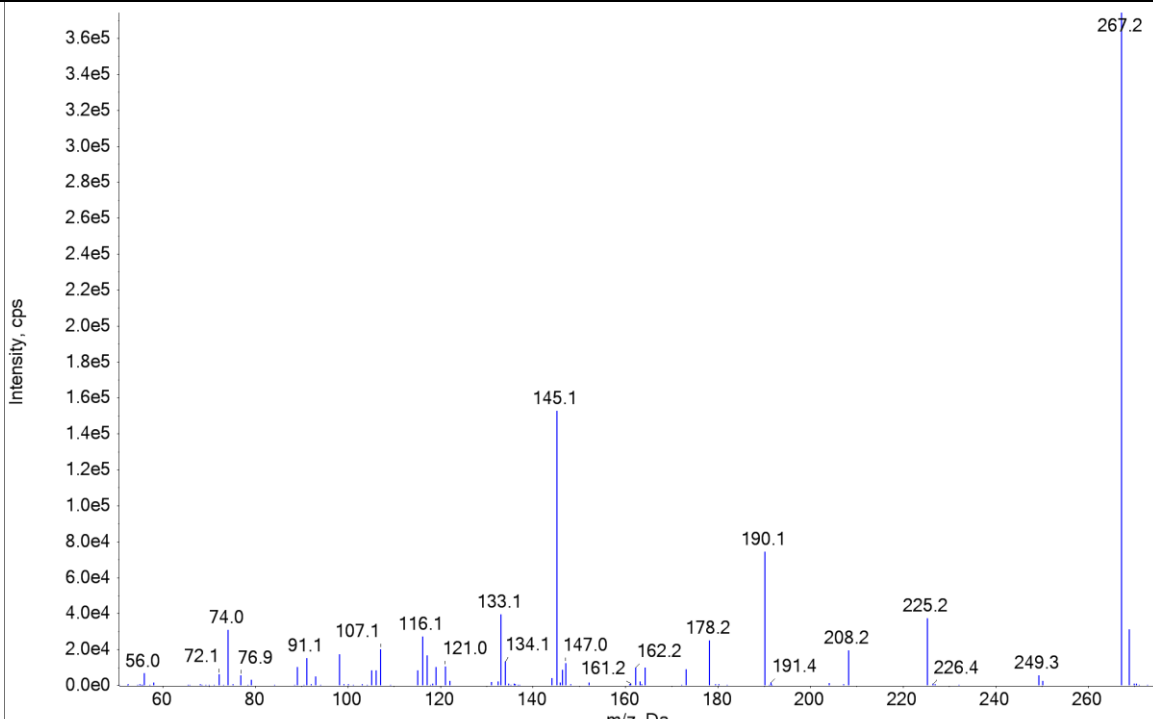
29	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Alprazolam	7.42	309.1	281.1
30	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Alprenolol	6.49	250.2	116.1

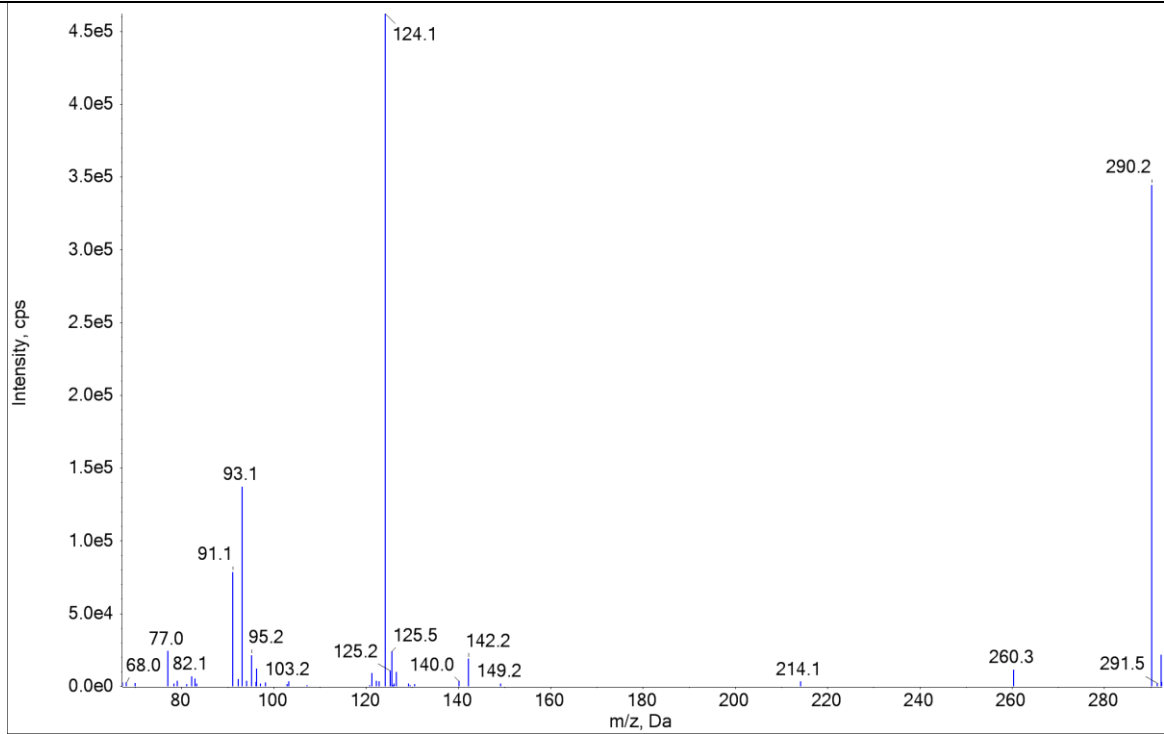
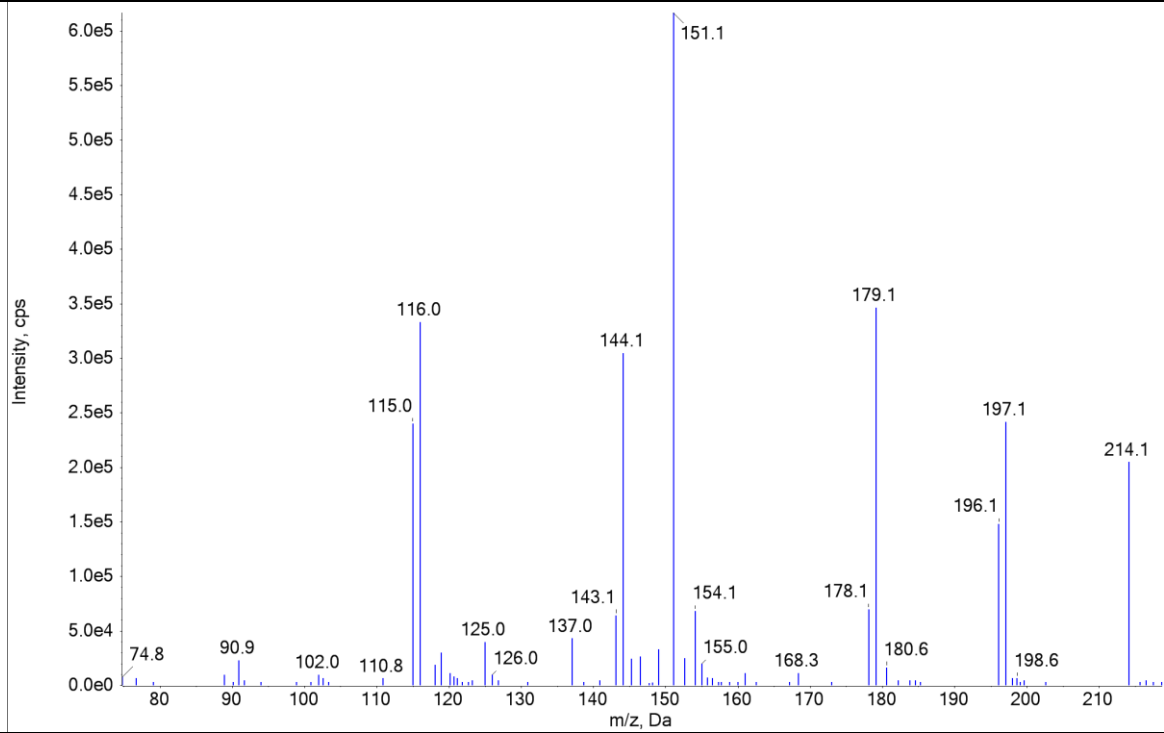
31	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Ambroxol	5.7	379.0	263.9
32	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Amiloride	3.65	230.1	171.1

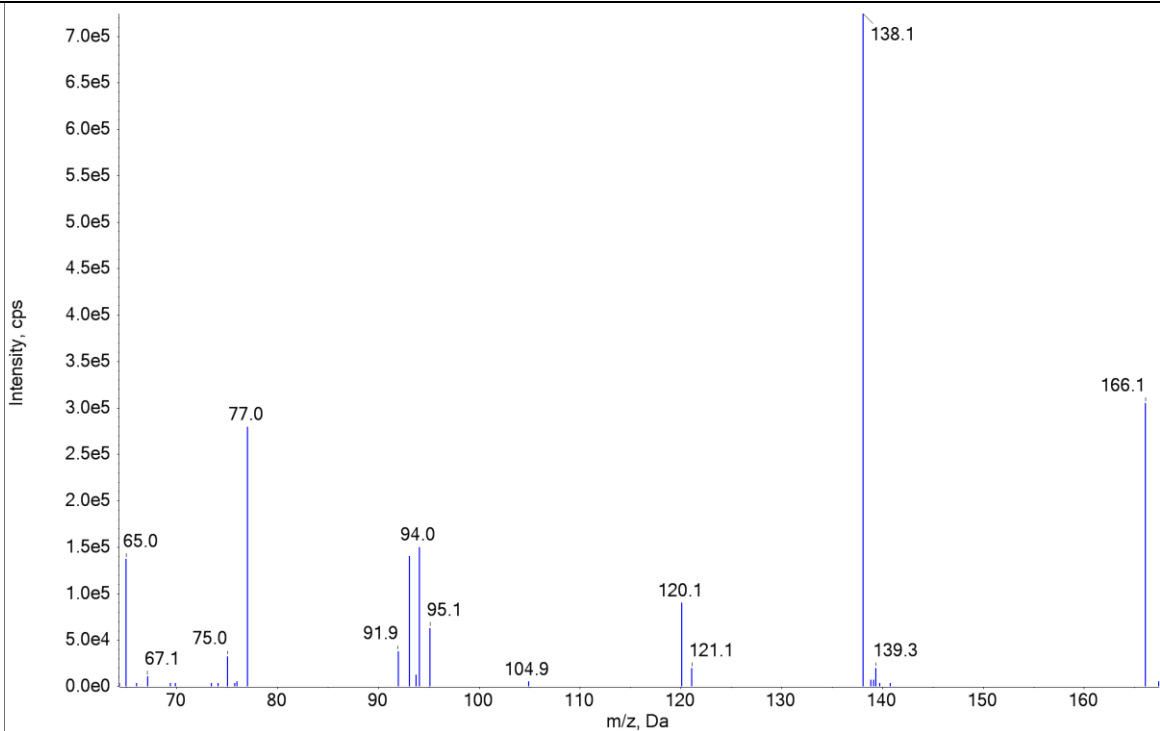
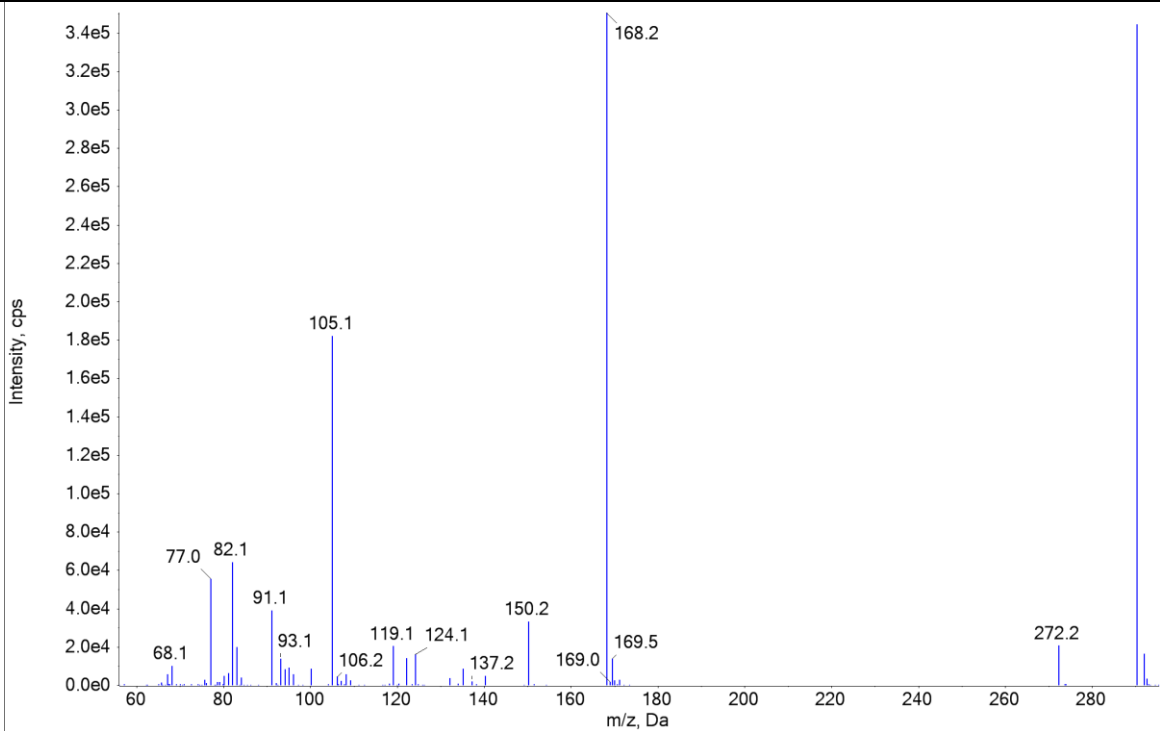
33	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Amiodarone. The x-axis represents m/z (Da) from 0 to 650, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 1.6e5. The base peak is at m/z 58.0. Other labeled peaks include 72.0, 86.1, 99.6, 159.1, 201.2, 248.2, 276.0, 275.2, 375.8, 475.9, 516.7, 573.0, 646.0, and 648.2.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Amiodarone	10.71	646.0	58
34	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Amitriptylin. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 280, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 6.5e5. The base peak is at m/z 278.2. Other labeled peaks include 57.7, 78.8, 84.0, 90.9, 92.2, 103.0, 105.0, 117.0, 129.0, 141.1, 155.1, 165.1, 178.2, 179.2, 191.1, 203.1, 205.2, 217.2, 218.2, 231.1, 233.2, 234.3, 278.2, and 279.4.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Amitriptylin	7.35	278.2	233.2

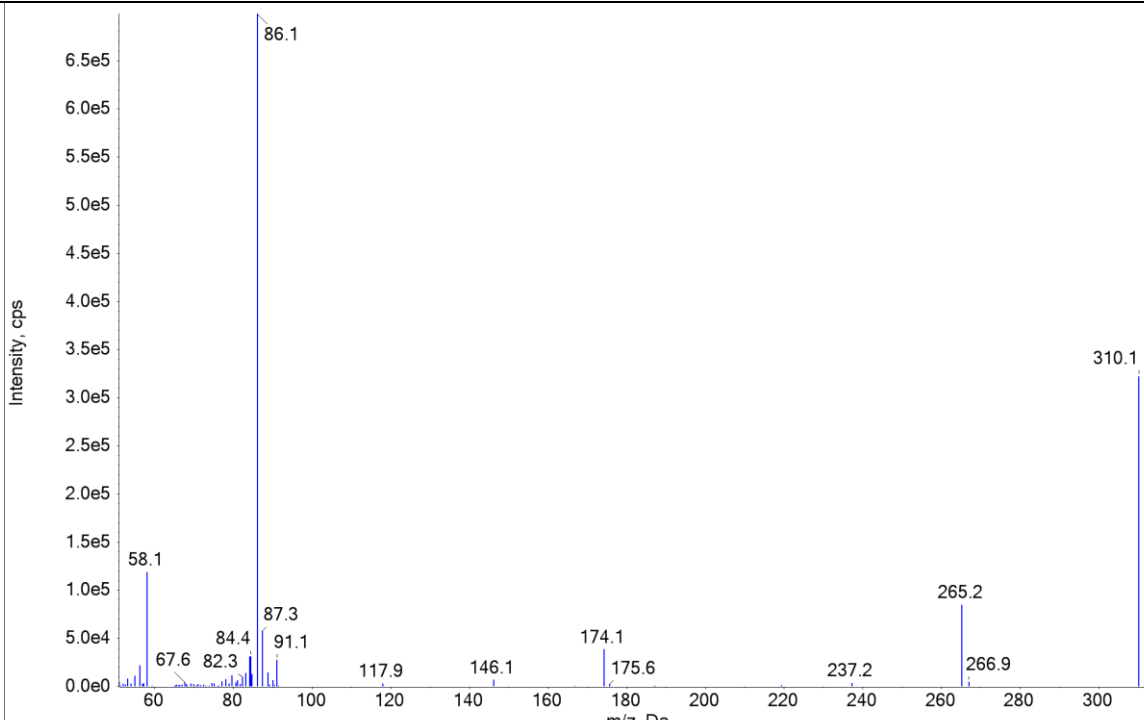
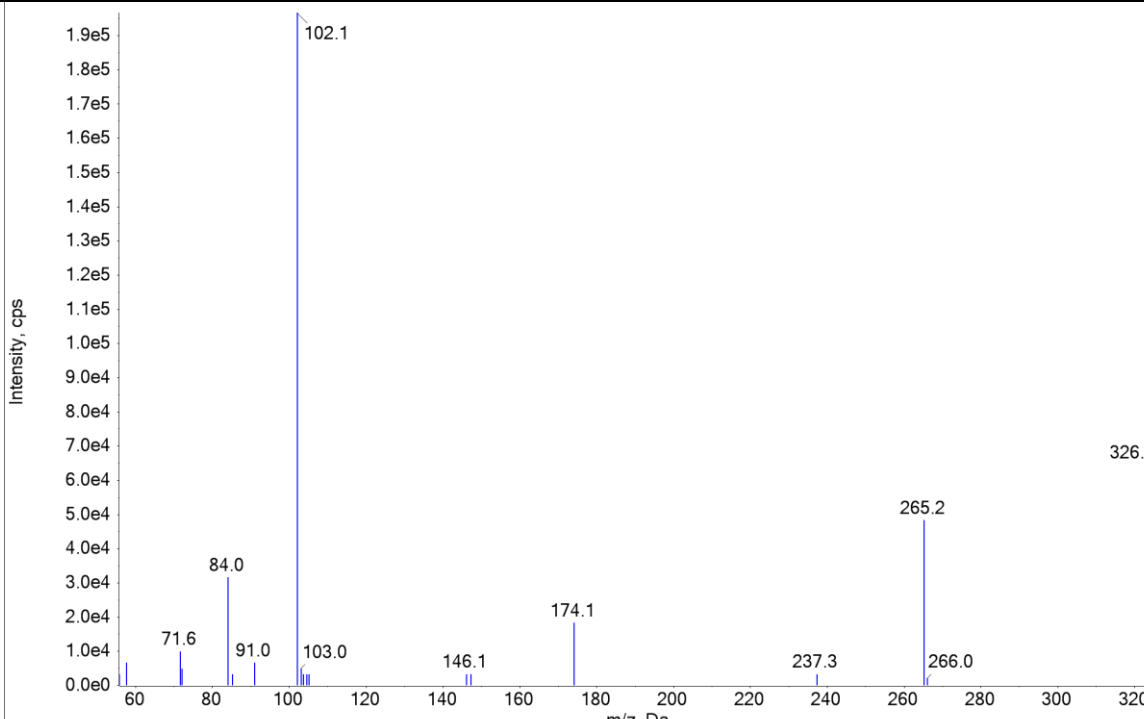
35	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Amlodipine	7.4	409.2	238.1
36	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Amphetamine	4.43	136.1	91

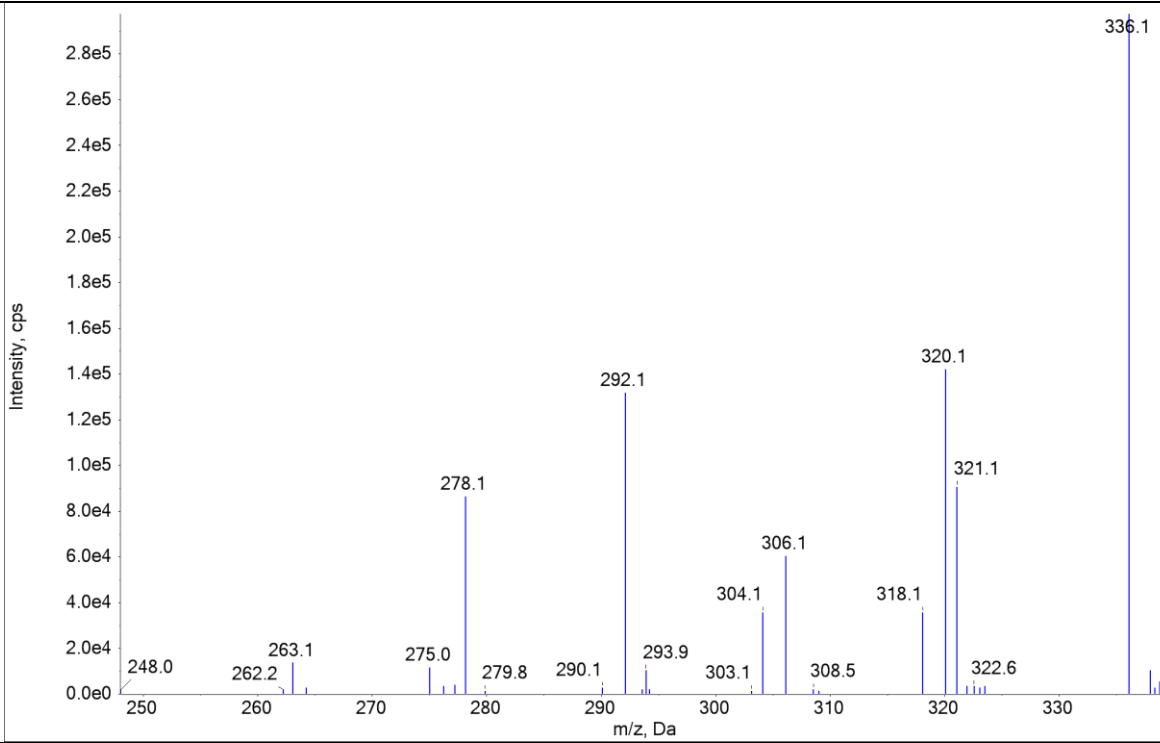
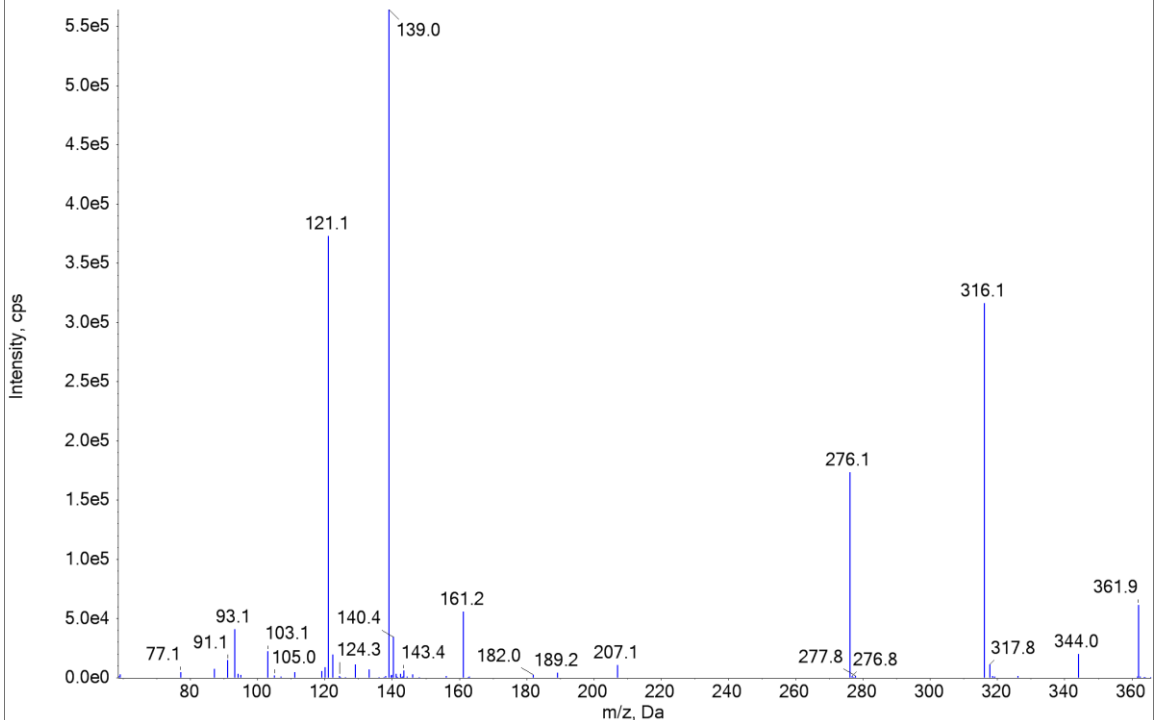
37	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Aromorphine	4.42	268.1	191.2
38	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Aripiprazole	9.06	448.3	285.3

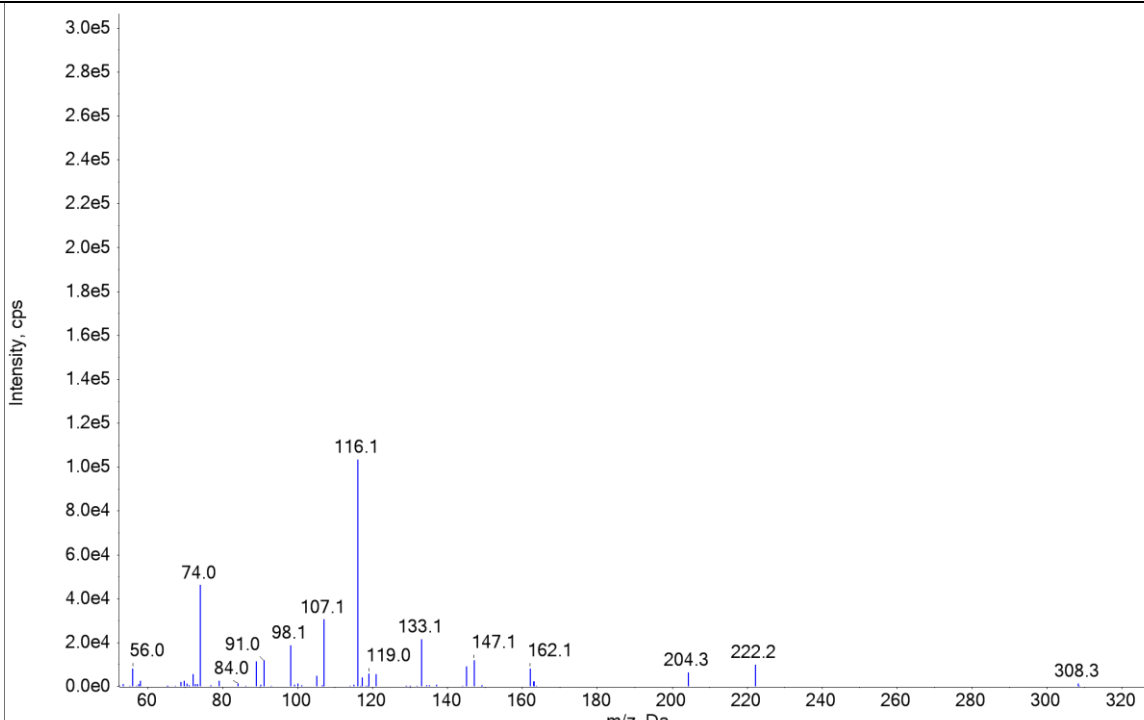
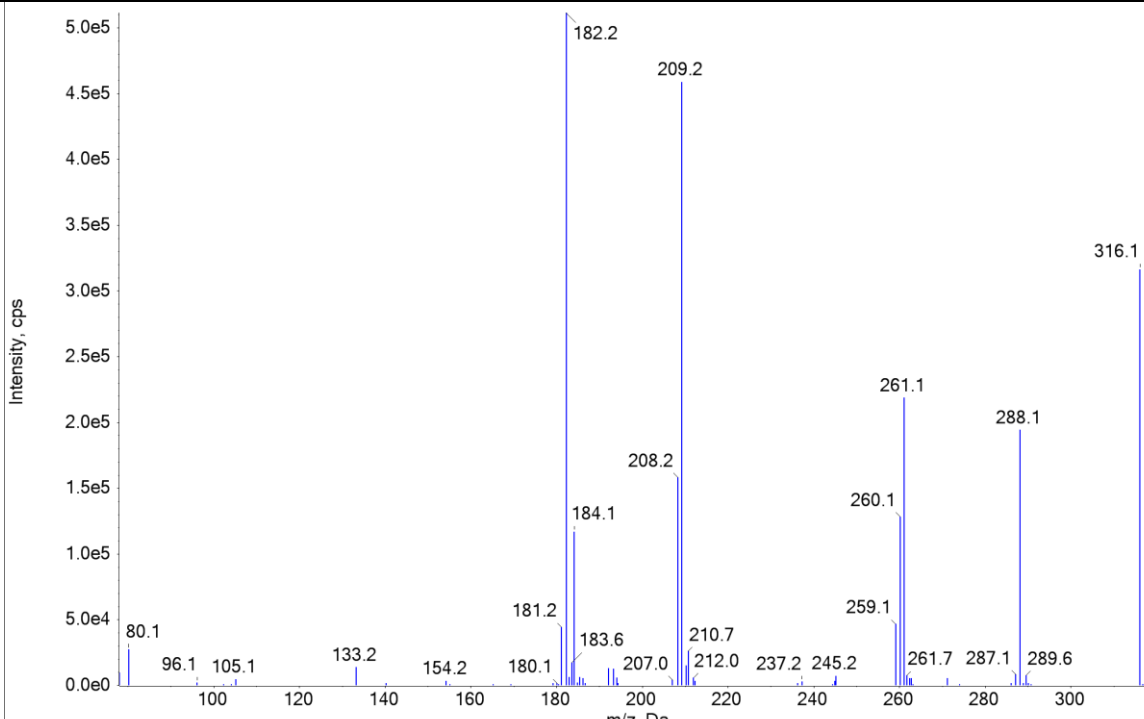
39	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Astemizole. The x-axis represents m/z (Da) from 100 to 450, and the y-axis represents intensity in counts per second (cps) from 0.0e0 to 2.8e5. The base peak is at m/z 135.1. Other labeled peaks include 96.1, 109.1, 136.3, 137.5, 176.2, 199.2, 216.2, 219.7, 242.2, 308.2, 309.9, 459.2, and 461.2.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Astemizole	8.07	459.3	135.1
40	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Atenolol. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 260, and the y-axis represents intensity in counts per second (cps) from 0.0e0 to 3.6e5. The base peak is at m/z 267.2. Other labeled peaks include 56.0, 72.1, 74.0, 76.9, 91.1, 107.1, 116.1, 121.0, 133.1, 134.1, 145.1, 147.0, 161.2, 162.2, 178.2, 190.1, 191.4, 208.2, 225.2, 226.4, 249.3, and 267.2.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Atenolol	3.17	267.2	145.1

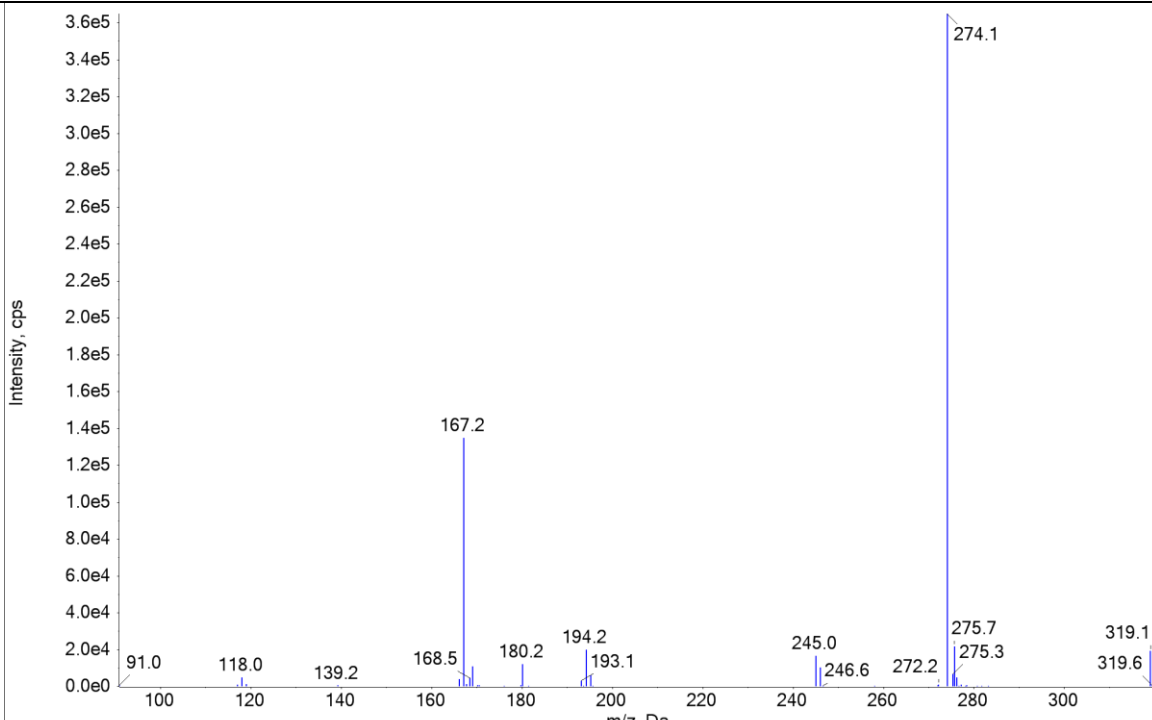
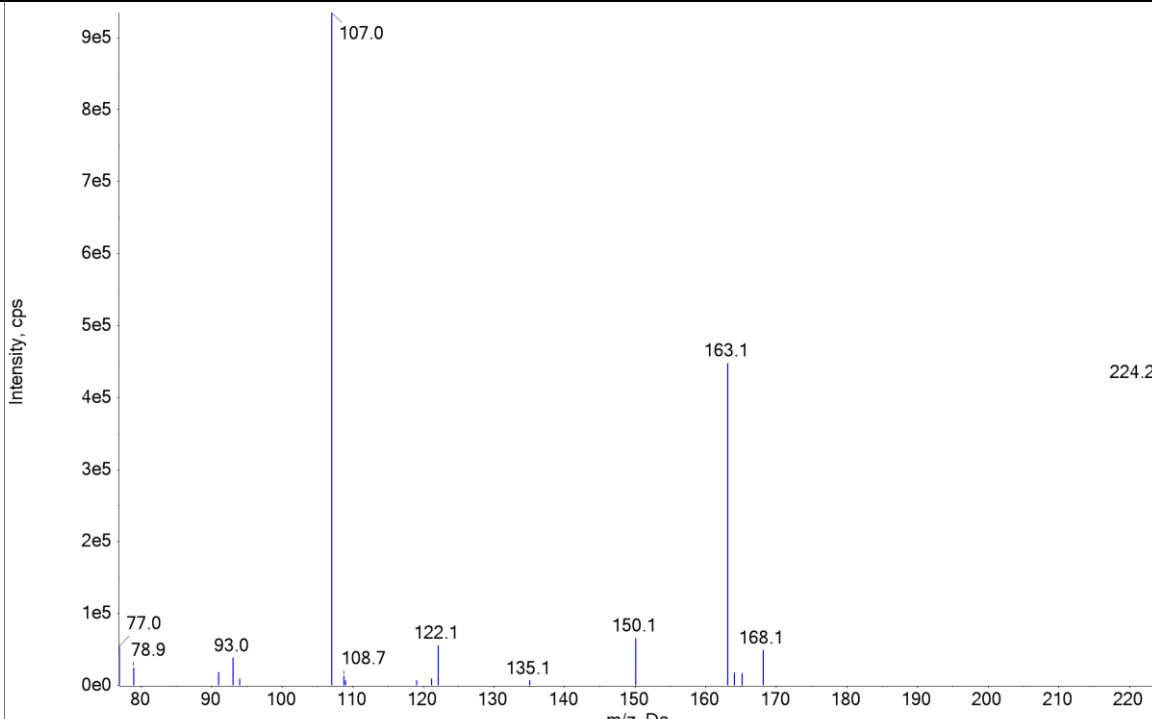
41	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Atropine	4.79	290.2	124.1
42	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Baclofen	2.9	214.1	151.1

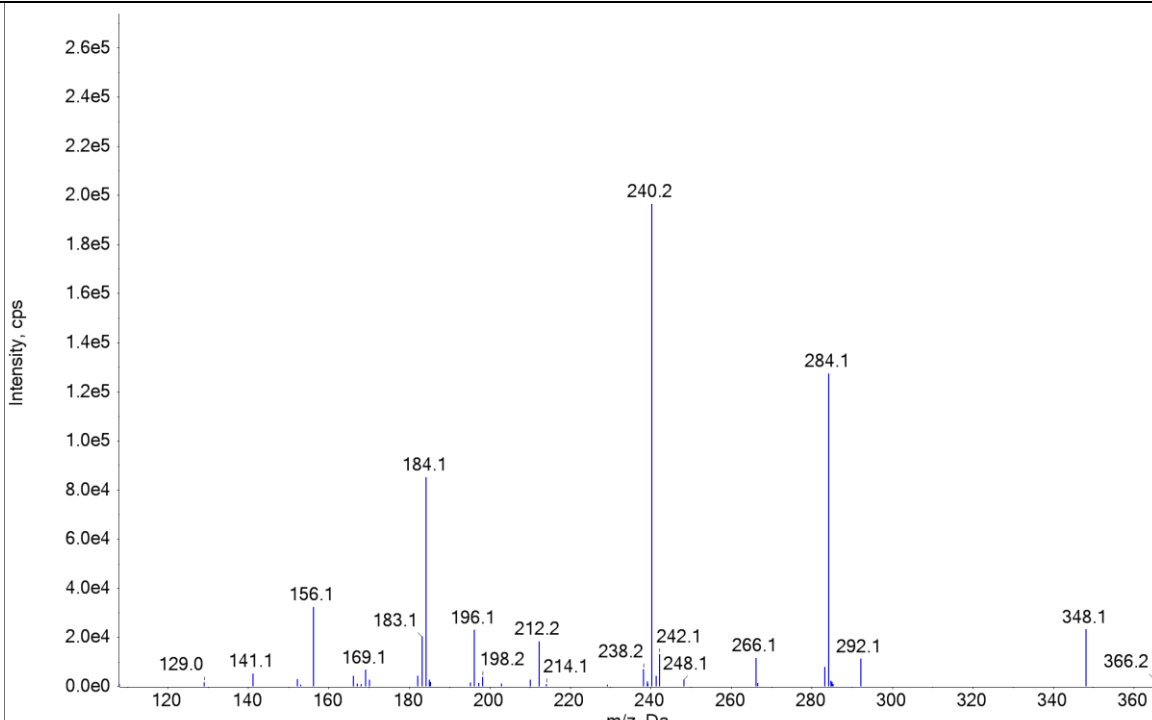
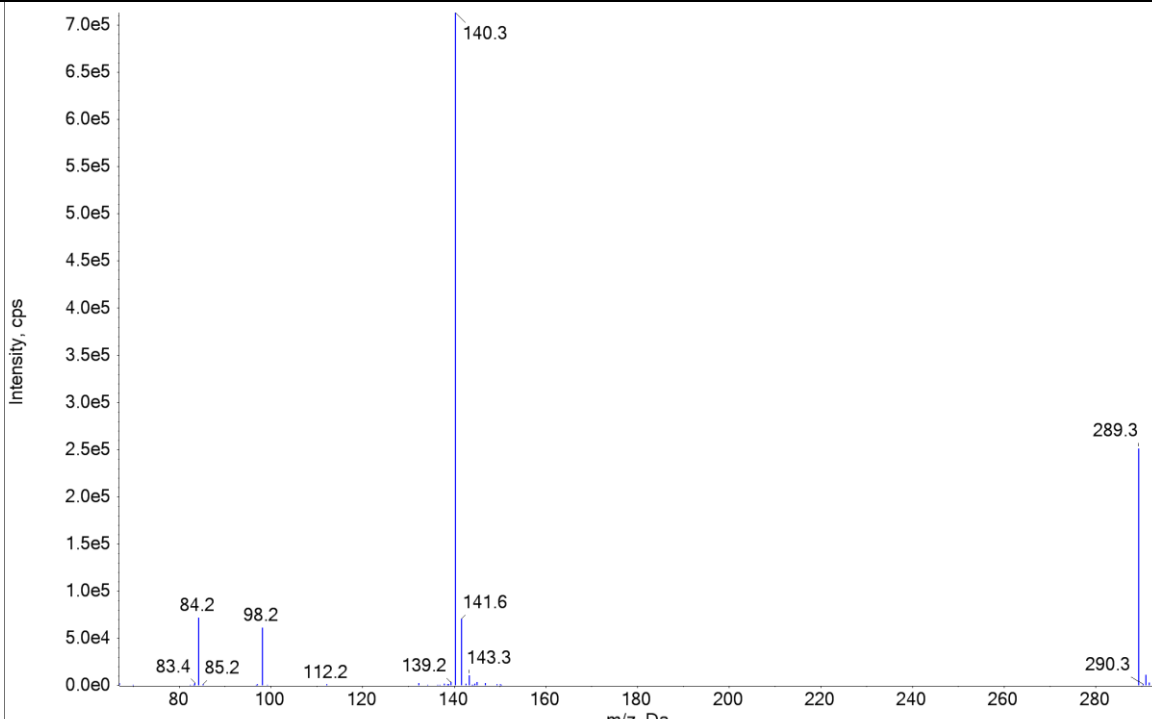
43	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Benzocaine	5.21	166.1	138.1
44	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Benzoylecgonine	4.51	290.1	168.2

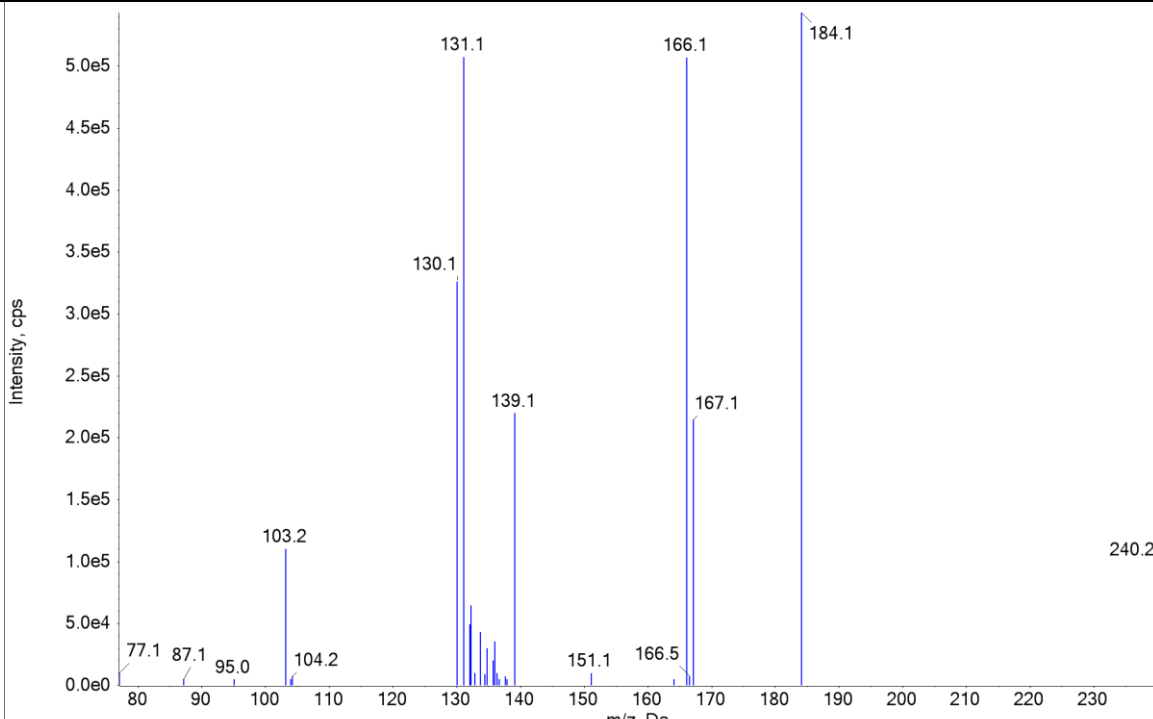
45	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Benzylamine	6.11	310.2	86
46	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Benzylamine N oxide	6.14	326.0	102

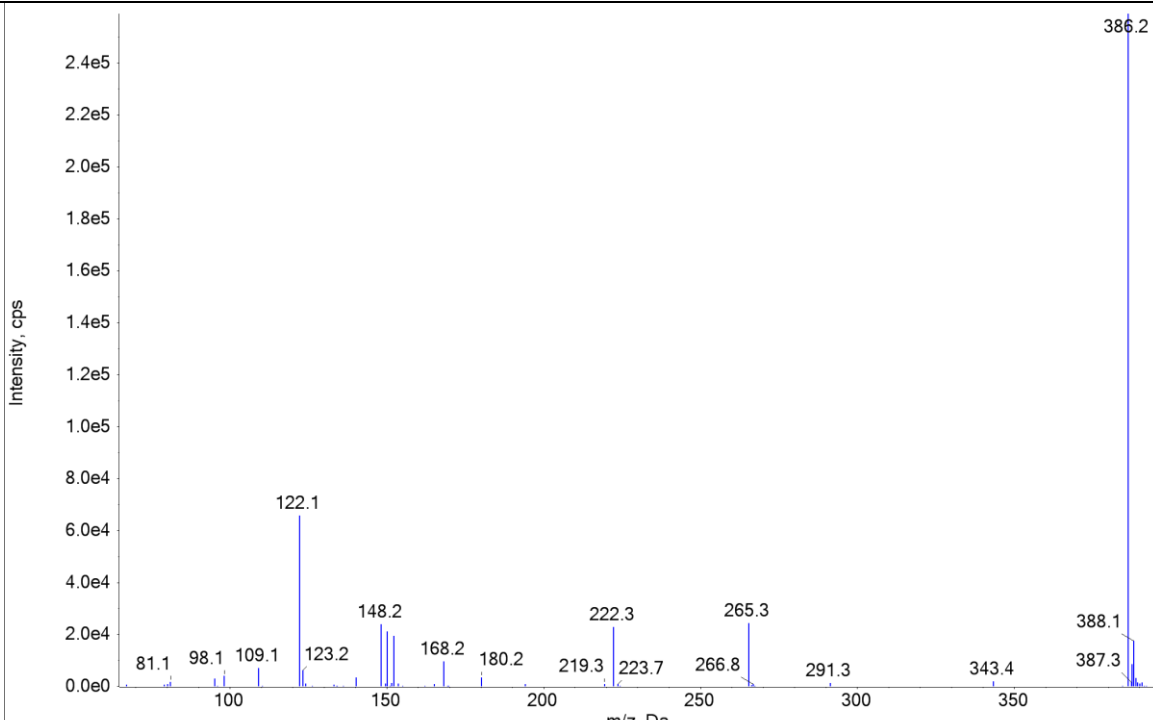
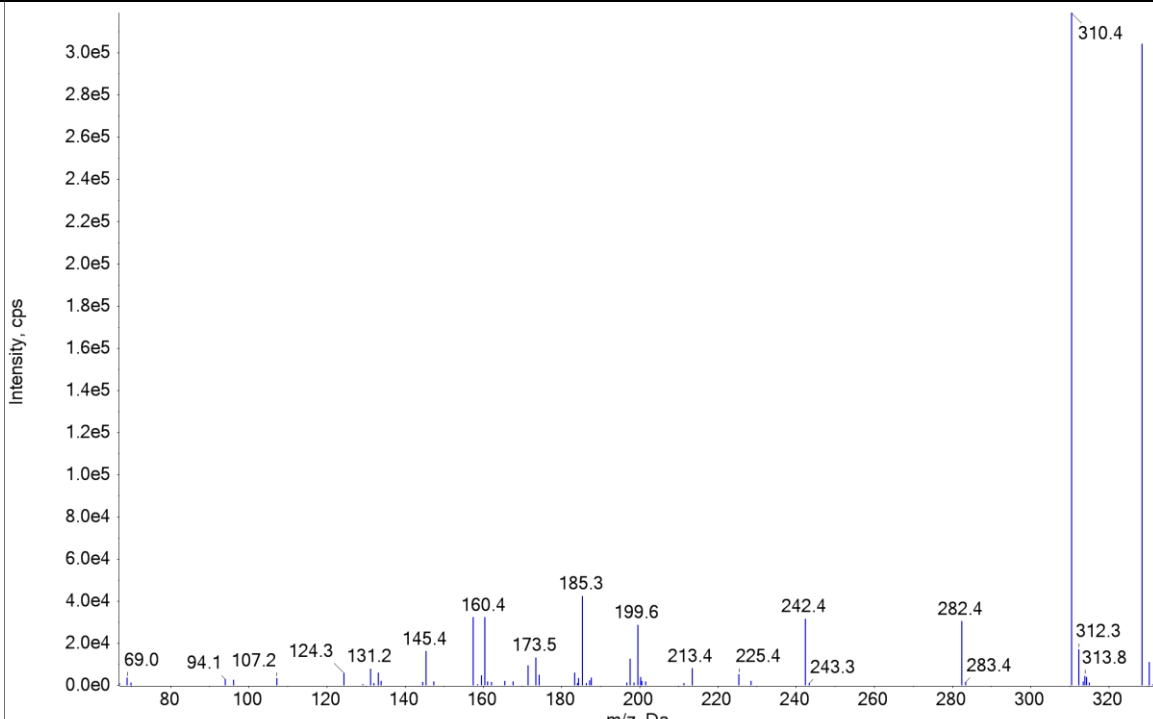
47	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Berberine	6.25	336.1	292.1
48	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Bezafibrate	6.43	362.1	139.1

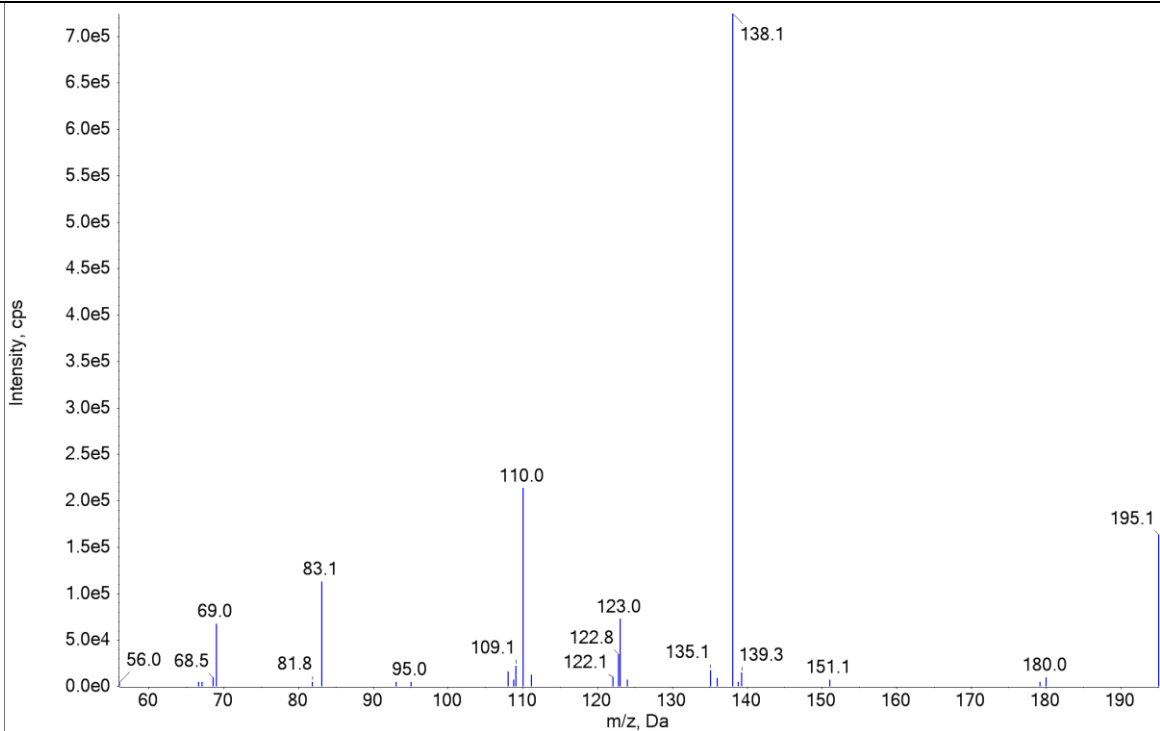
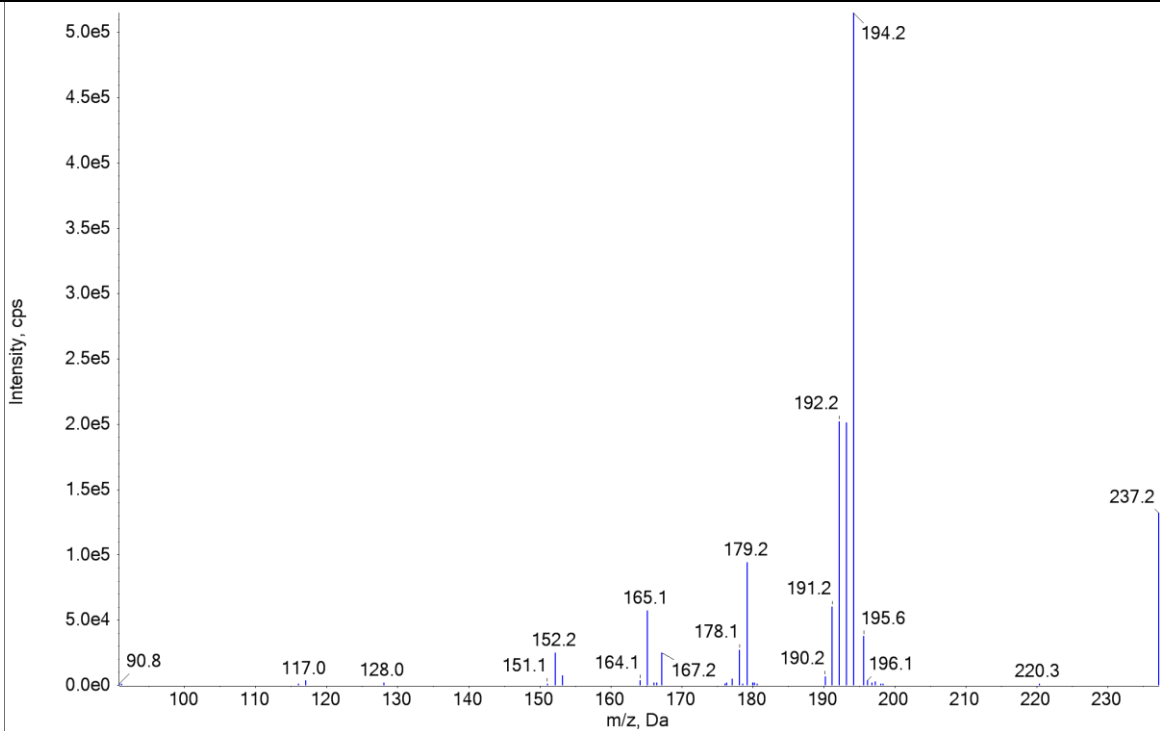
49	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Bisoprolol	8.83	326.0	116
50	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Bromazepam	6.59	316.1	182.2

51	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Brompheniramine	6.44	319.1	274.1
52	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Bufexamac	7	224.1	107.1

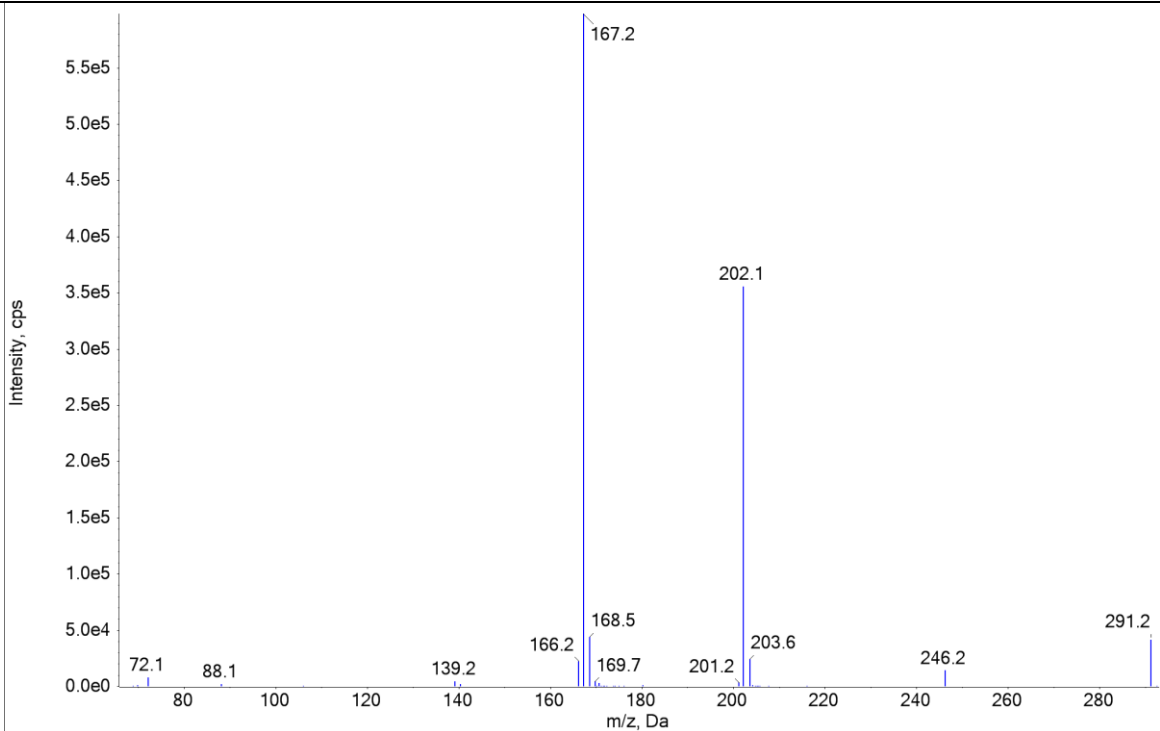
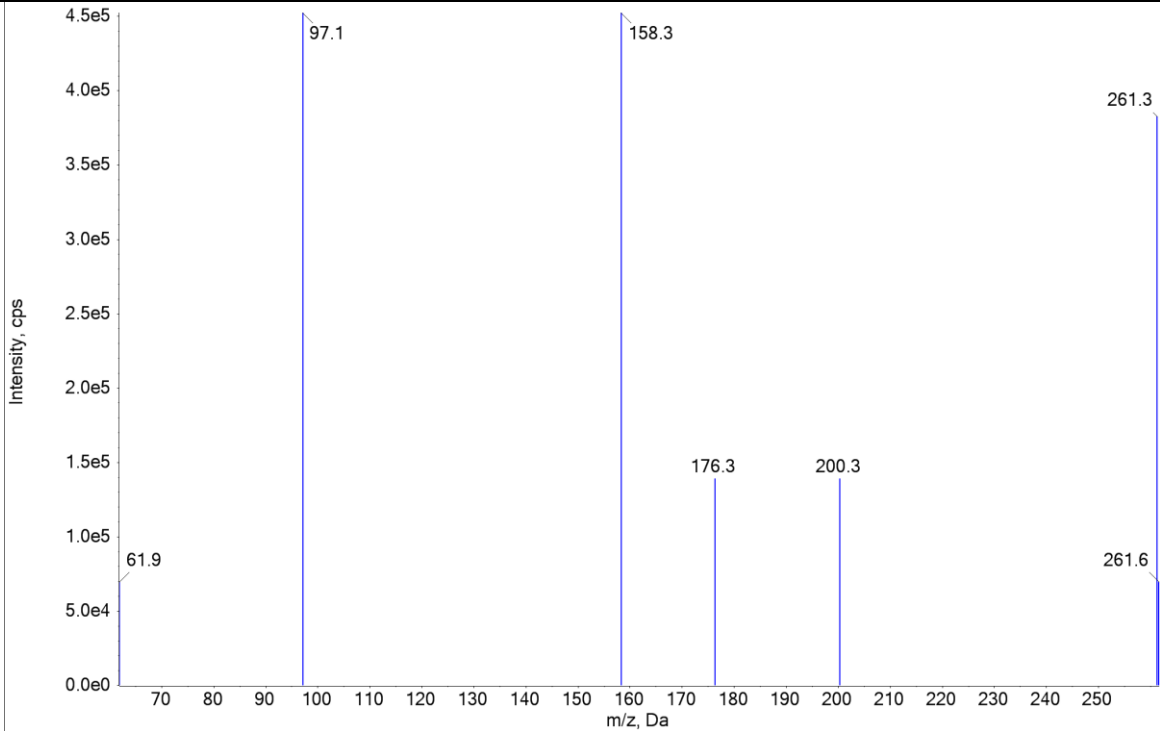
53	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Bumetanide	6.51	365.1	240.2
54	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Bupivacaine	7.33	289.2	140.2

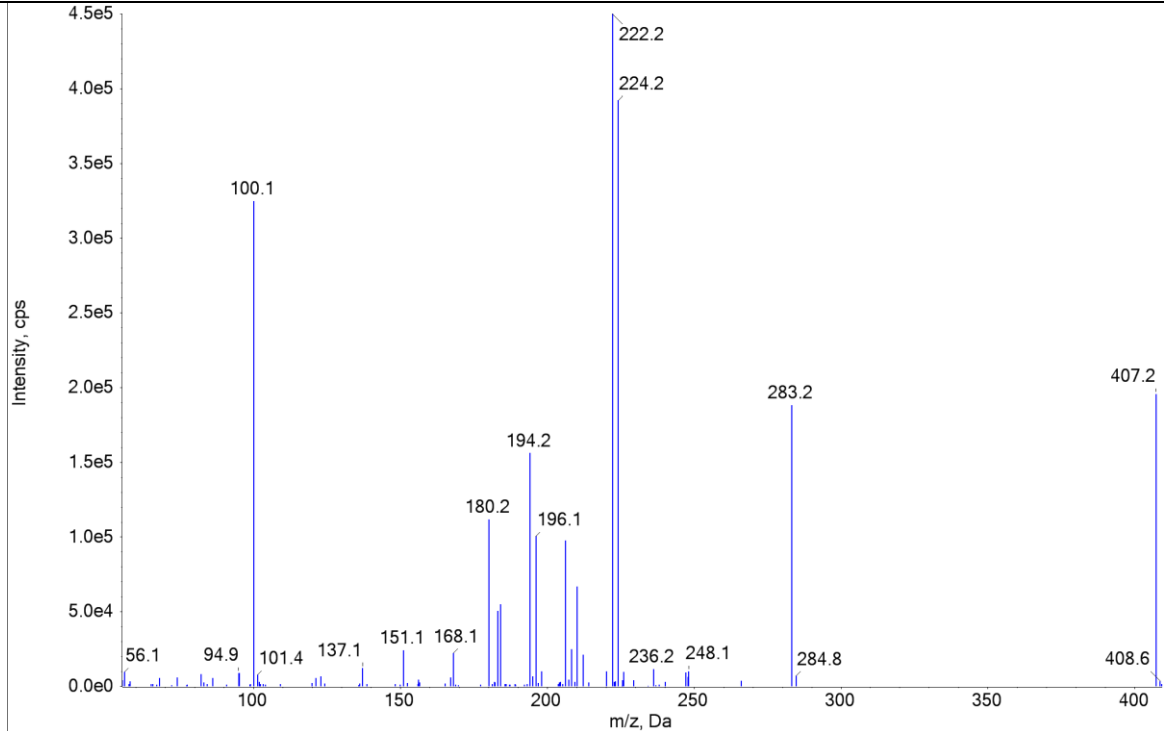
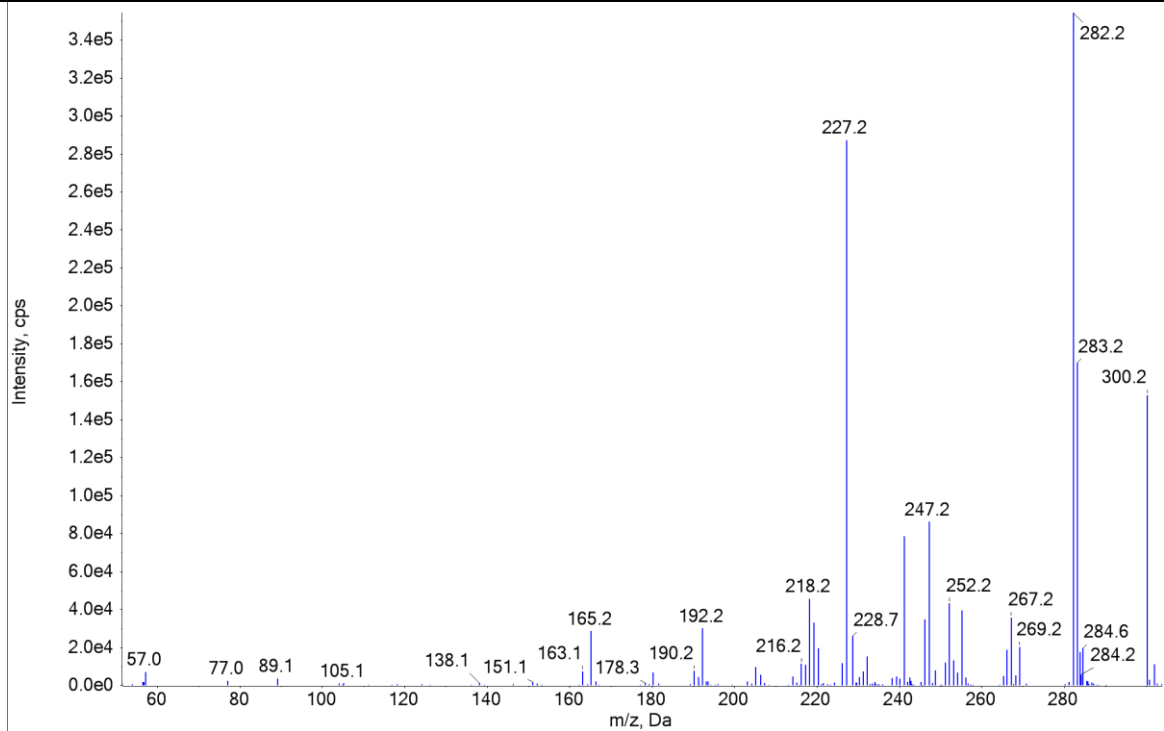
55	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Buprenorphine	8.5	468.3	396.3
56	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Bupropion	6.44	240.2	184.2

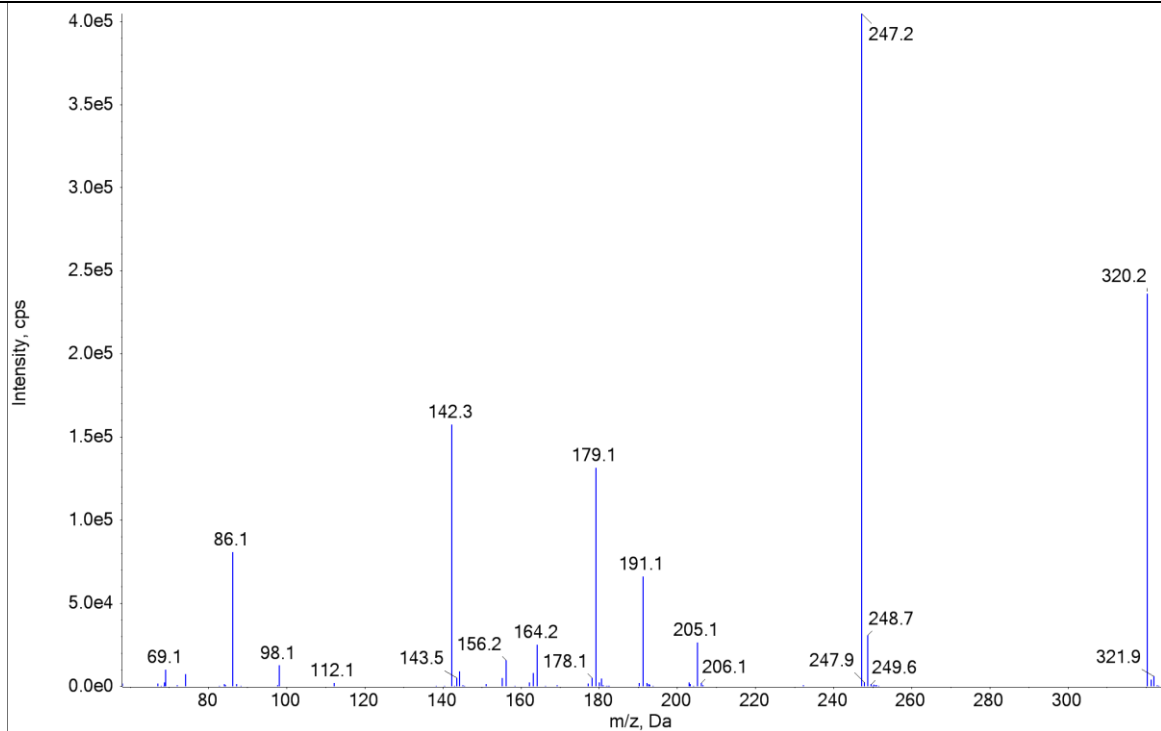
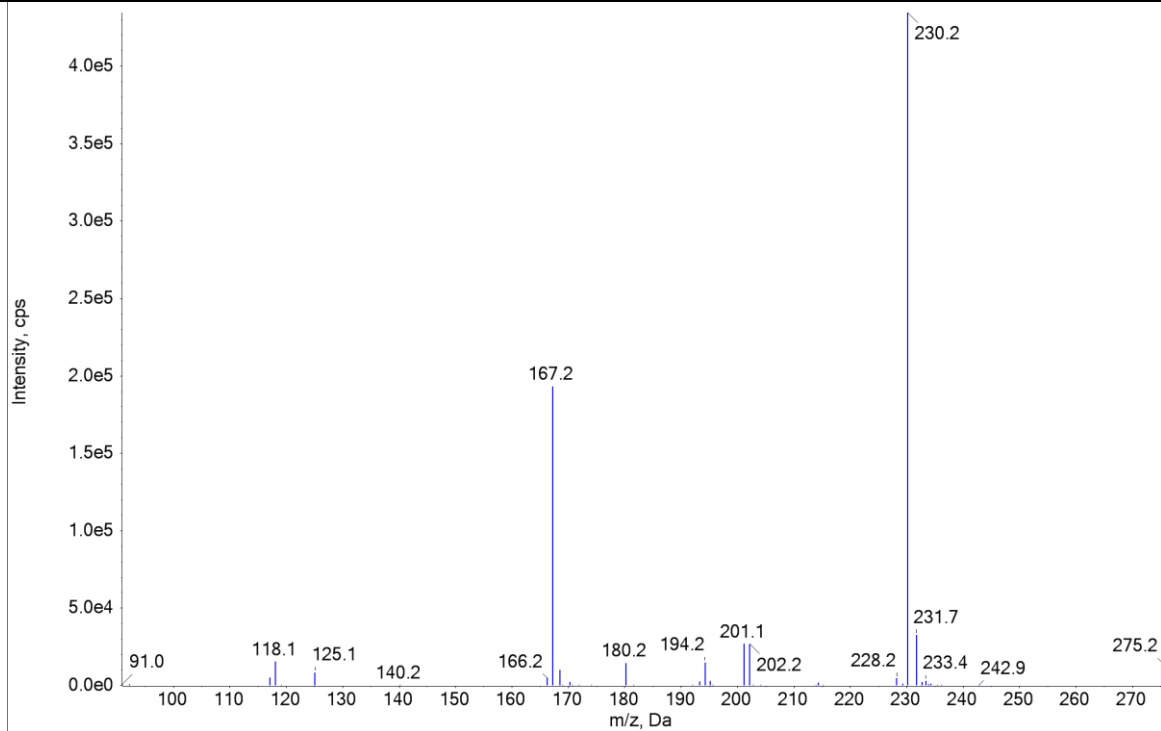
57	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Buspirone	7.12	386.3	122.1
58	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Butorphanol	5.91	328.3	157.2

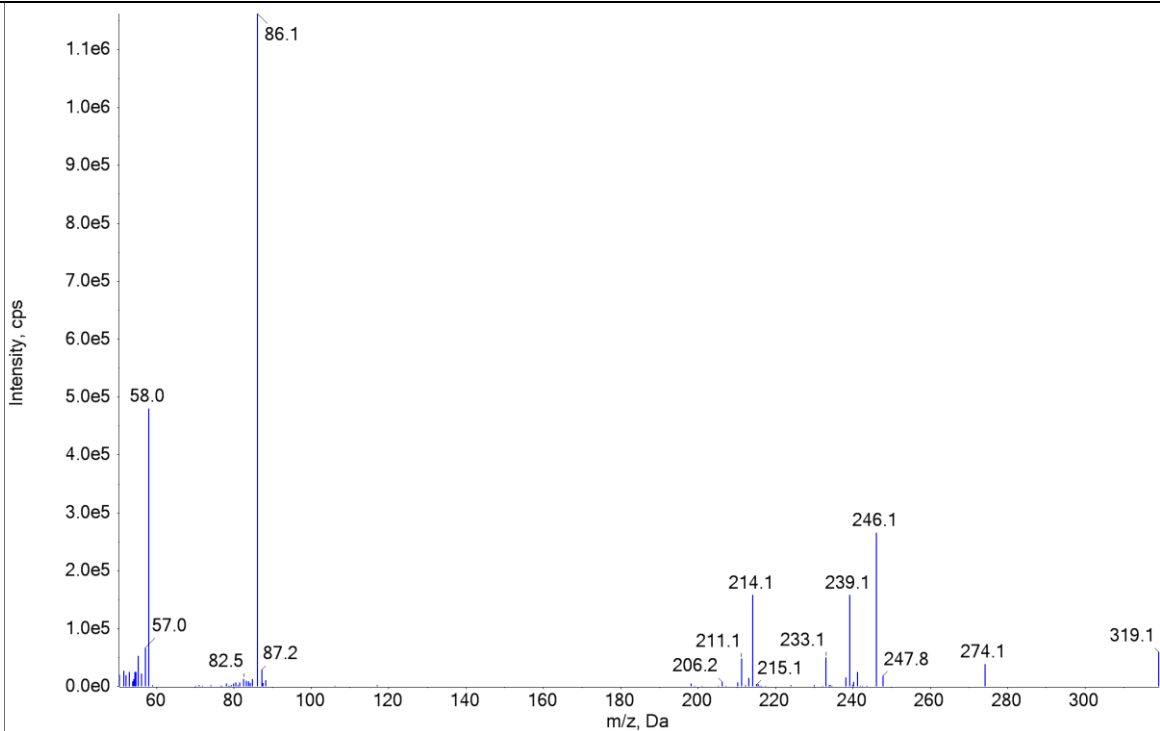
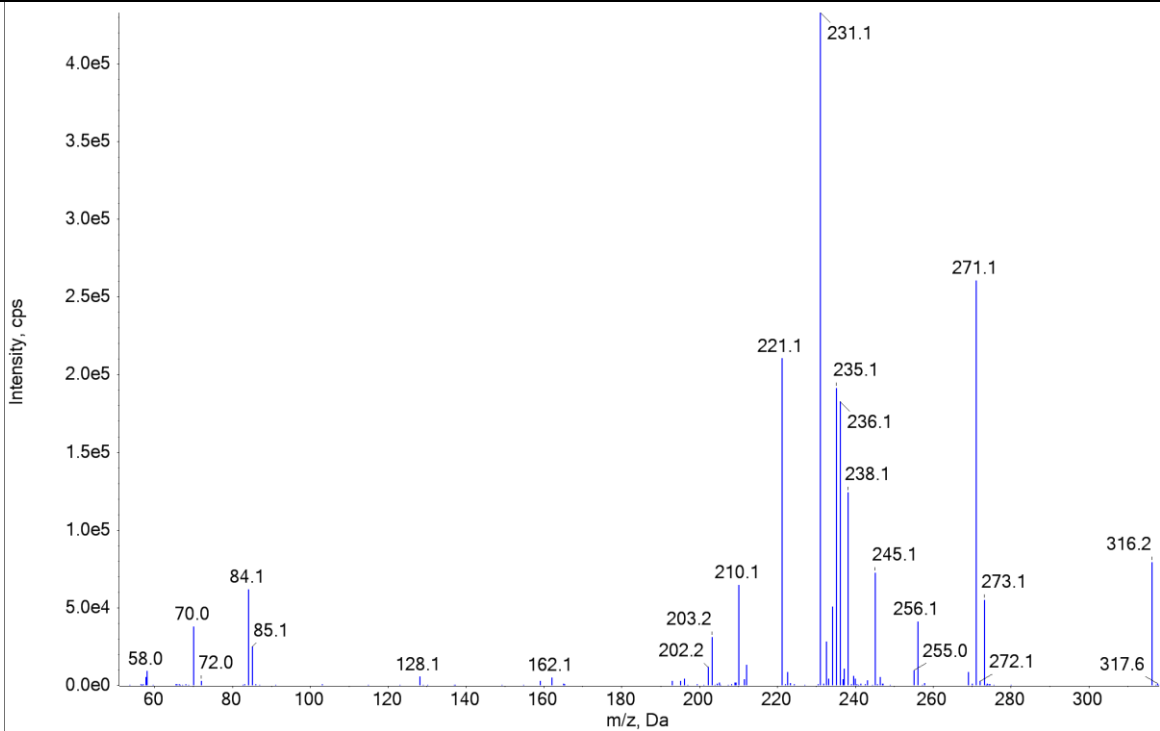
59	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Caffeine	4.23	195.1	138.1
60	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Carbamazepine	6	237.1	194.2

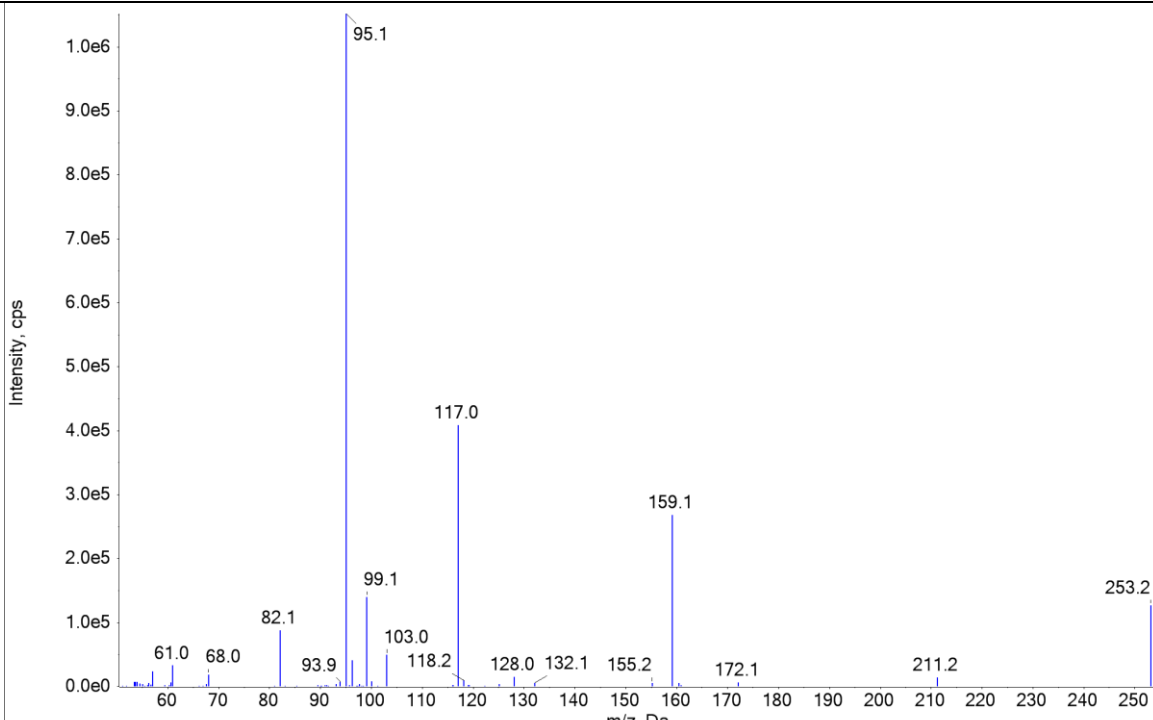
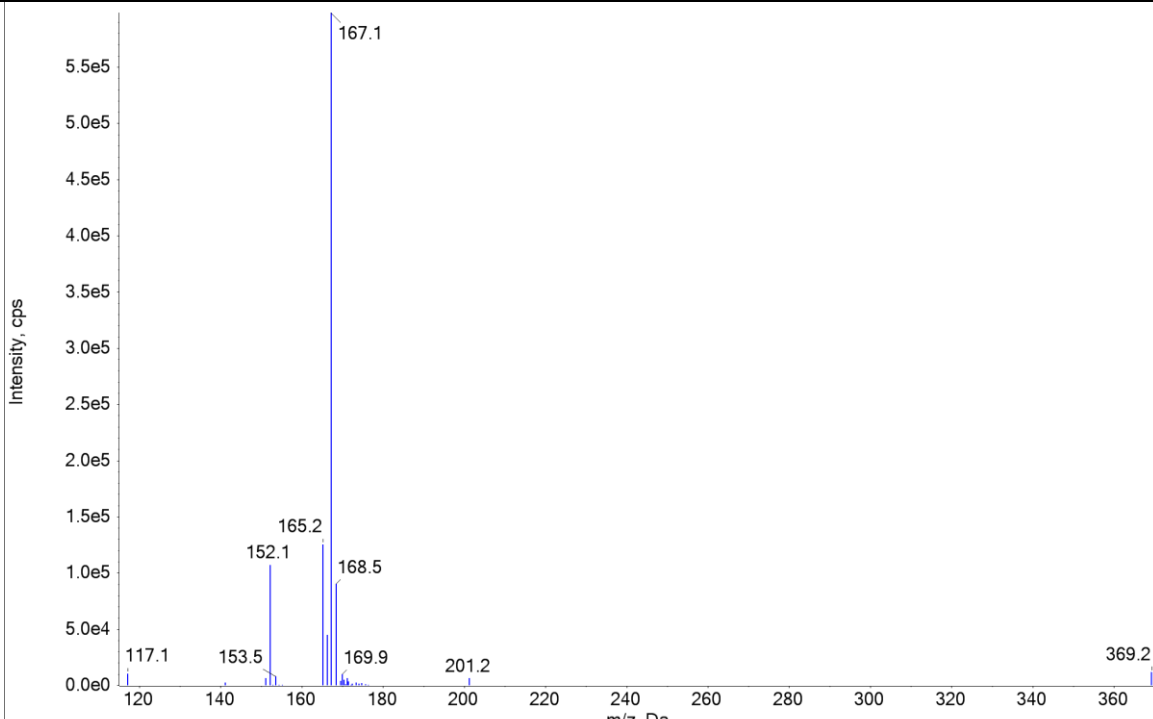
61	Масс спектр			
	Mass spectrum showing Intensity (cps) versus m/z (Da). The base peak is at m/z 180.2. Other labeled peaks include 152.1, 166.2, 167.1, 168.5, 178.1, 179.2, 181.7, 184.3, 192.4, 208.2, 211.7, 236.3, and 253.9.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Carbamazepine -10,11-epoxide	4.41	253.1	180.2
62	Масс спектр			
	Mass spectrum showing Intensity (cps) versus m/z (Da). The base peak is at m/z 160.2. Other labeled peaks include 65.0, 80.1, 90.1, 92.1, 105.1, 106.1, 117.2, 132.1, 133.2, 135.1, 161.3, 167.1, and 192.2.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Carbendazim	5.4	192.1	160.1

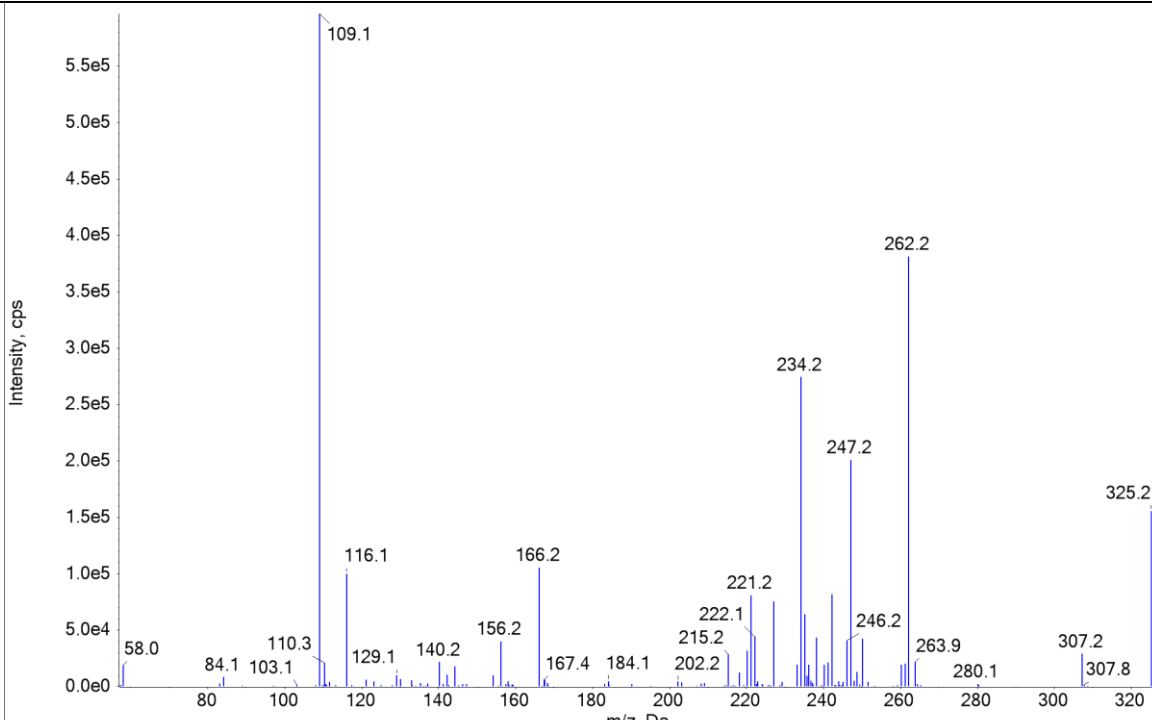
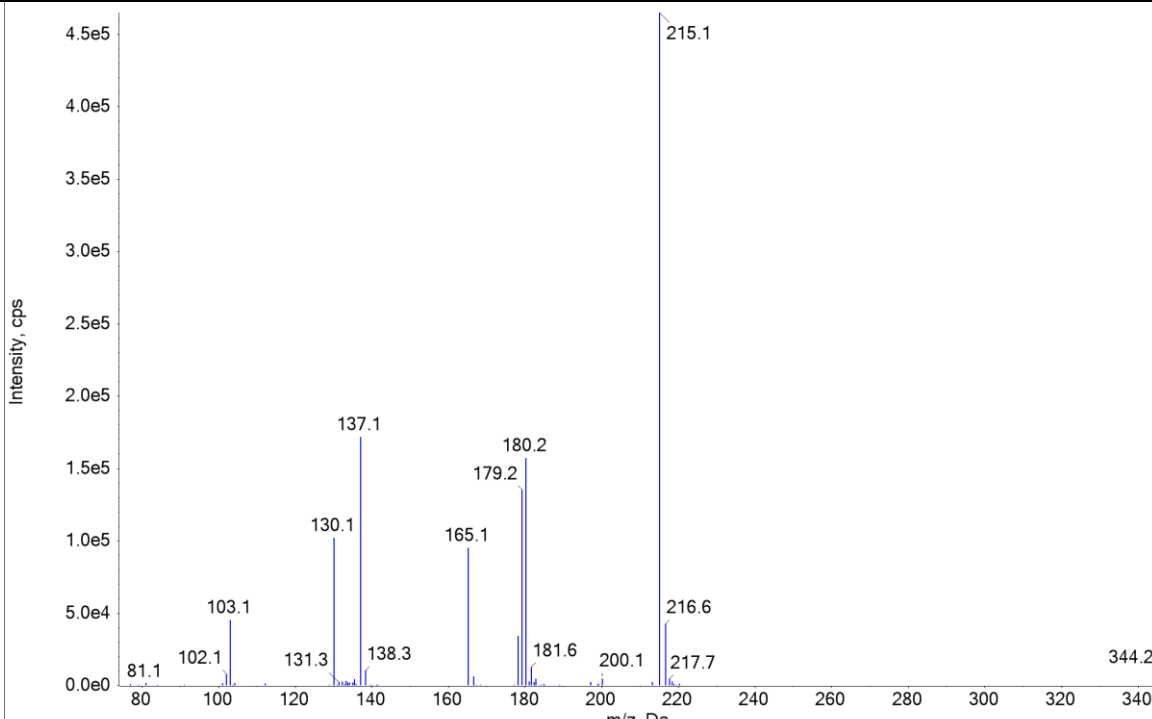
63	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Carbinoxamine. The x-axis represents m/z (Da) from 70 to 290, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 5.5e5. The base peak is at m/z 167.2. Other labeled peaks include 72.1, 88.1, 139.2, 166.2, 168.5, 169.7, 201.2, 202.1, 203.6, 246.2, and 291.2.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Carbinoxamine	6.21	291.1	167.2
64	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Carisoprodol. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 260, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 4.5e5. The base peak is at m/z 261.3. Other labeled peaks include 61.9, 97.1, 158.3, 176.3, 200.3, and 261.6.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Carisoprodol	7.21	261.2	97.1

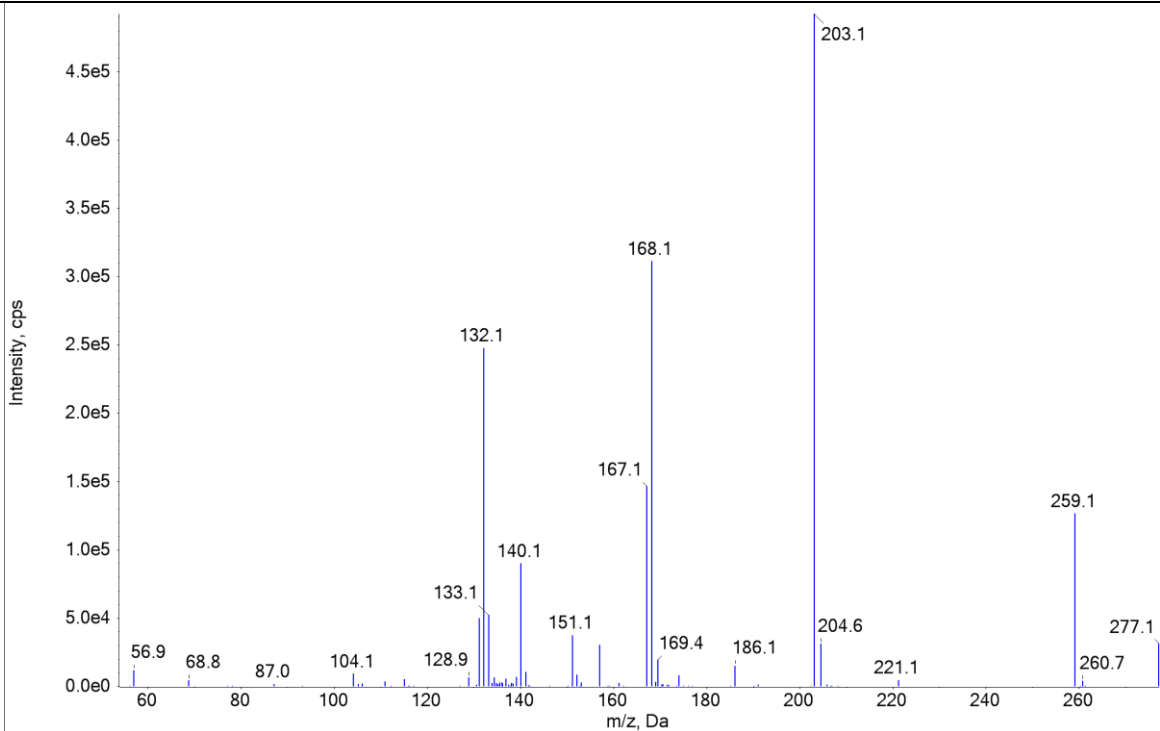
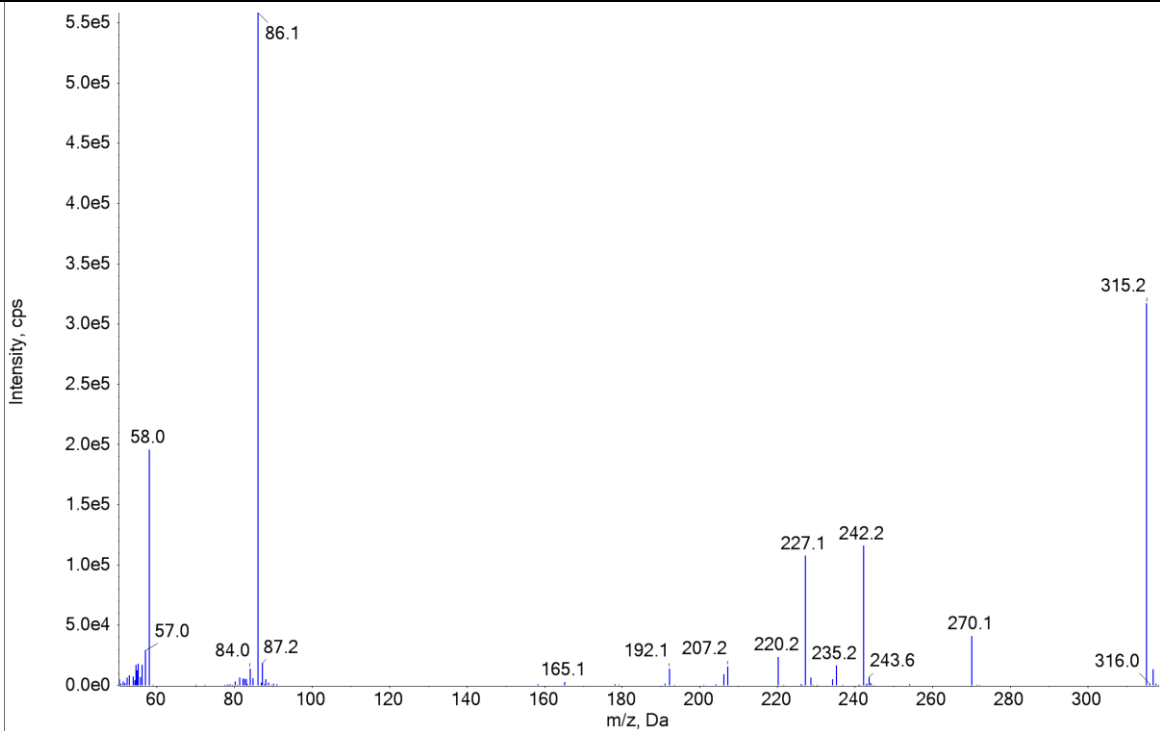
65	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Carvedilol. The x-axis represents m/z (Da) from 50 to 450, and the y-axis represents intensity in counts per second (cps) from 0.0e0 to 4.5e5. The base peak is at m/z 222.2. Other labeled peaks include 56.1, 94.9, 101.4, 137.1, 151.1, 168.1, 180.2, 196.1, 236.2, 248.1, 284.8, and 408.6.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Carvedilol	8.6	407.2	224.3
66	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Chlordiazepoxide. The x-axis represents m/z (Da) from 50 to 350, and the y-axis represents intensity in counts per second (cps) from 0.0e0 to 3.4e5. The base peak is at m/z 282.2. Other labeled peaks include 57.0, 77.0, 89.1, 105.1, 138.1, 151.1, 163.1, 178.3, 190.2, 192.2, 216.2, 218.2, 228.7, 247.2, 252.2, 267.2, 269.2, 284.2, 284.6, 283.2, and 300.2.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Chlordiazepoxide	5.4	300.1	282.2

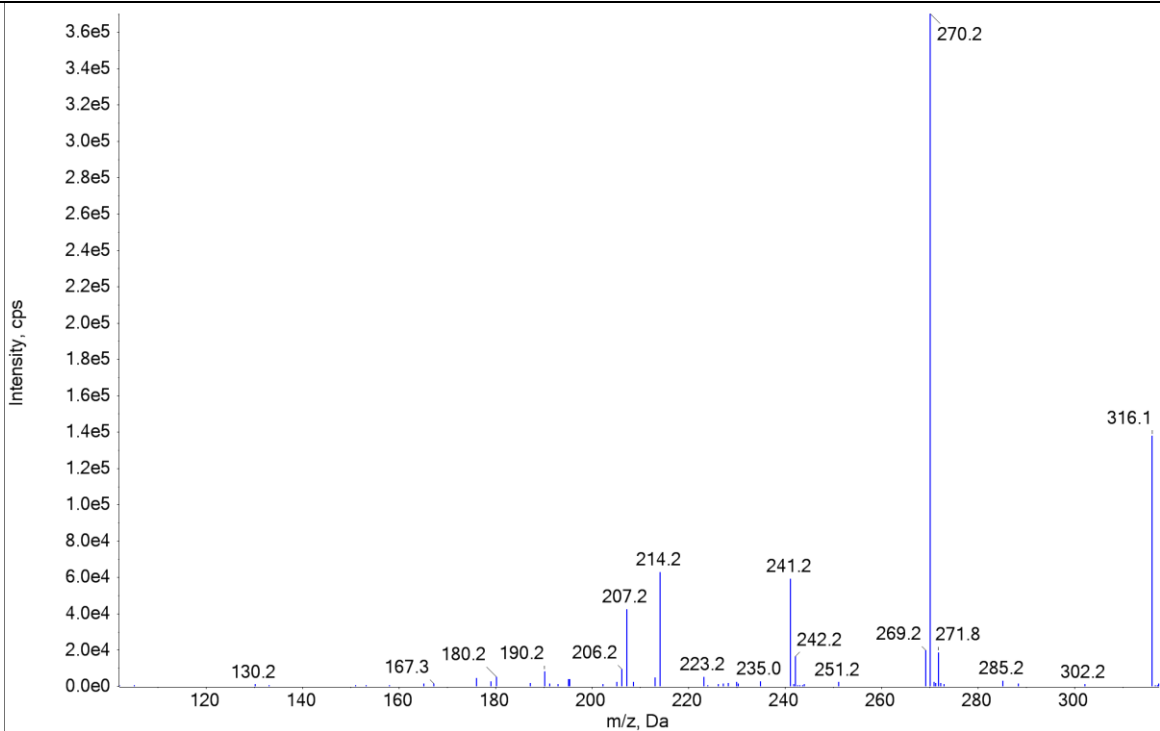
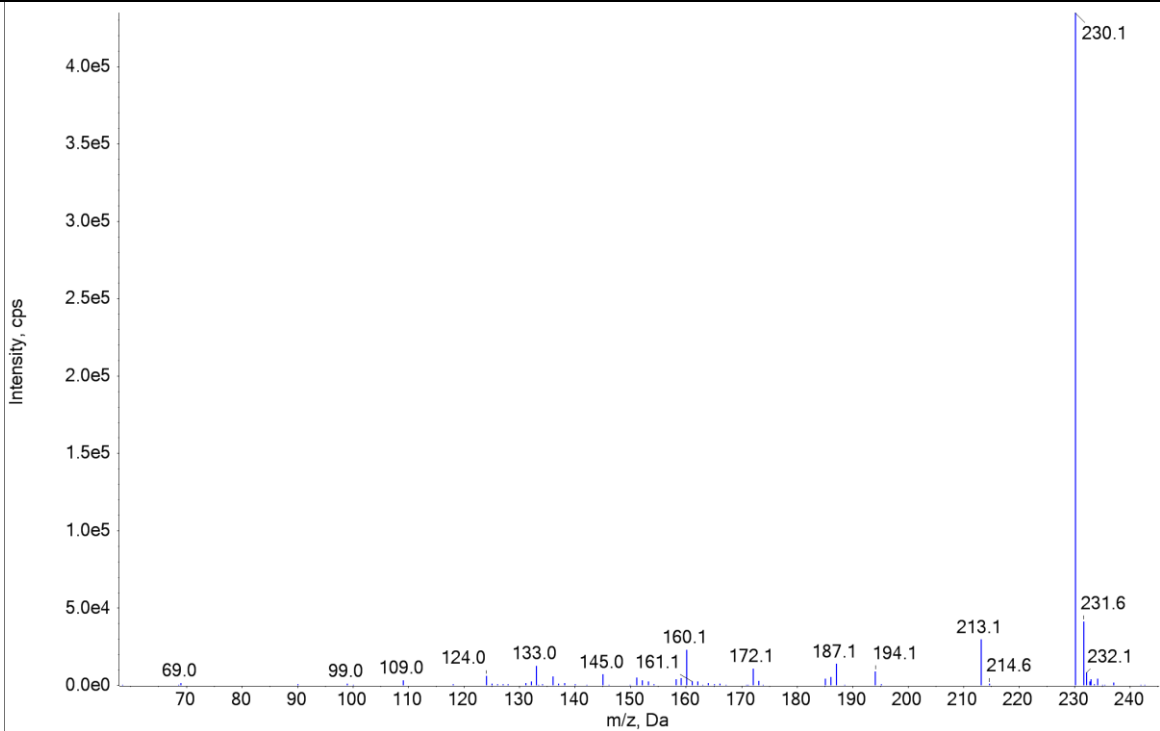
67	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Chloroquine. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 320, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 4.0e5. The base peak is at m/z 247.2. Other labeled peaks include: 69.1, 86.1, 98.1, 112.1, 142.3, 143.5, 156.2, 164.2, 178.1, 179.1, 191.1, 205.1, 206.1, 247.9, 248.7, 249.6, 320.2, and 321.9.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Chloroquine	5.86	320.2	247.2
68	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Chlorpheniramine. The x-axis represents m/z (Da) from 90 to 280, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 4.0e5. The base peak is at m/z 230.2. Other labeled peaks include: 91.0, 118.1, 125.1, 140.2, 166.2, 167.2, 180.2, 194.2, 201.1, 202.2, 228.2, 231.7, 233.4, 242.9, 275.2, and 275.2.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Chlorpheniramine	6.25	275.1	230.2

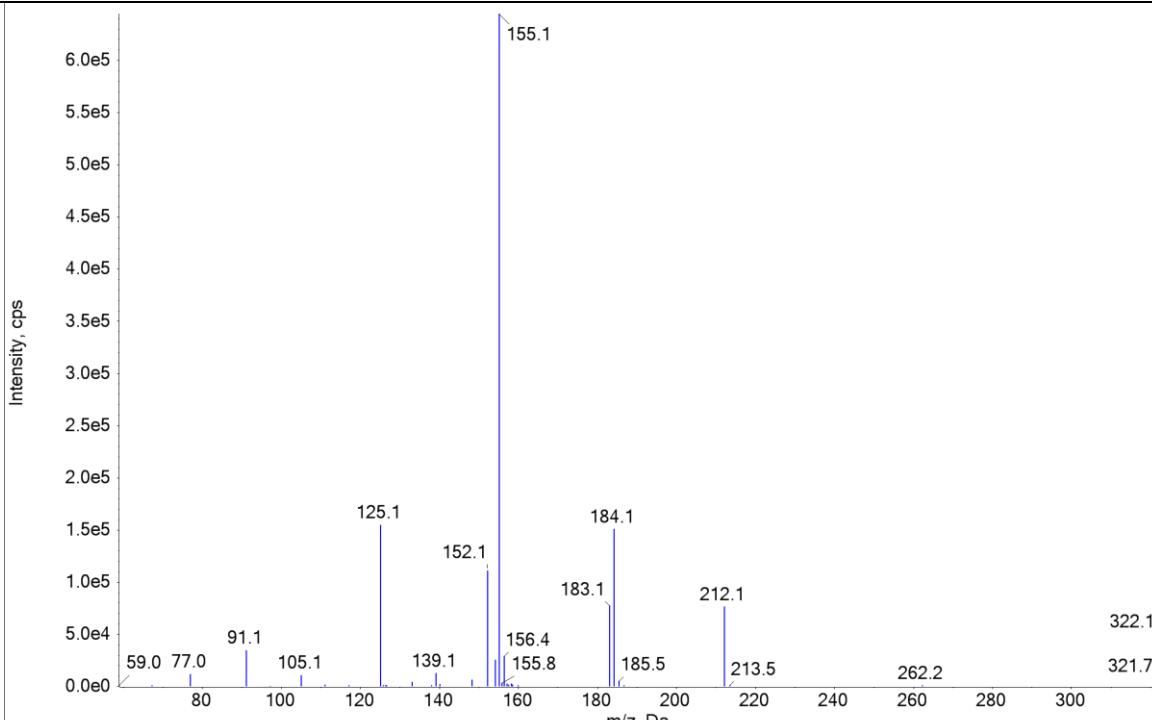
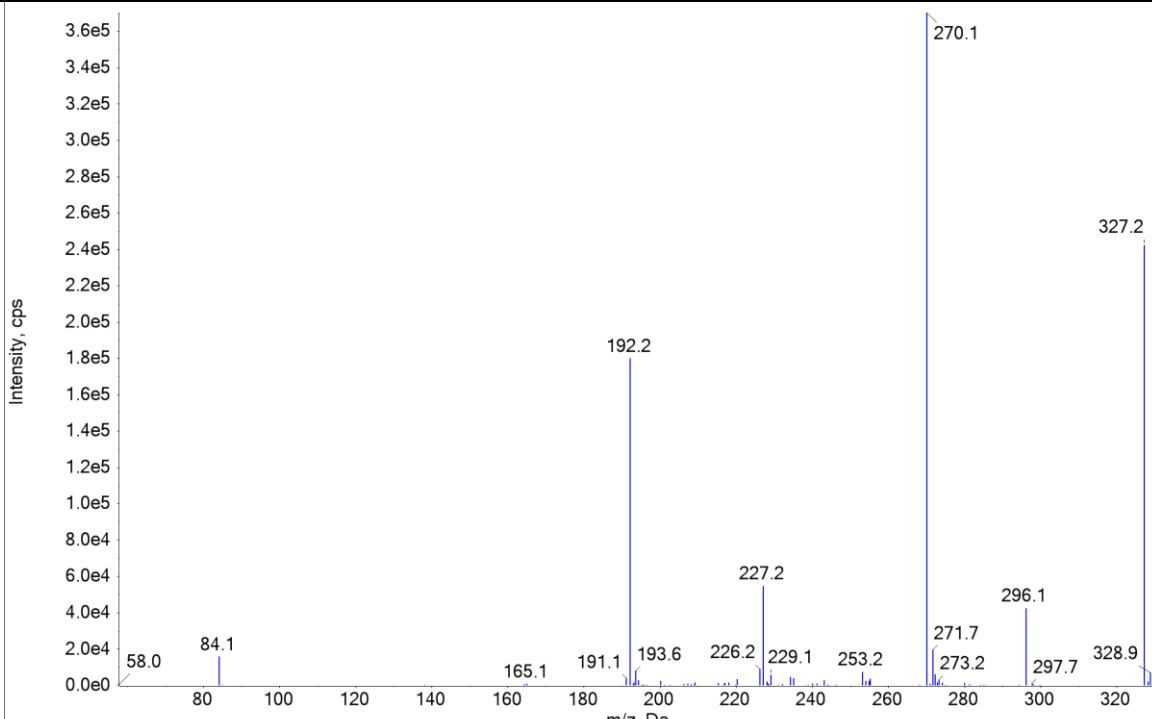
69	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Chlorpromazine. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 300, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 1.1e6. The base peak is at m/z 86.1. Other labeled peaks include m/z 58.0, 57.0, 82.5, 87.2, 206.2, 211.1, 214.1, 215.1, 233.1, 239.1, 246.1, 247.8, 274.1, and 319.1.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Chlorpromazine	7.65	319.1	214.1
70	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Chlorprothixene. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 300, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 4.0e5. The base peak is at m/z 231.1. Other labeled peaks include m/z 58.0, 70.0, 72.0, 84.1, 85.1, 128.1, 162.1, 202.2, 203.2, 210.1, 221.1, 235.1, 236.1, 238.1, 245.1, 256.1, 255.0, 271.1, 273.1, 272.1, 316.2, and 317.6.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Chlorprothixene	8.1	316.1	271.1

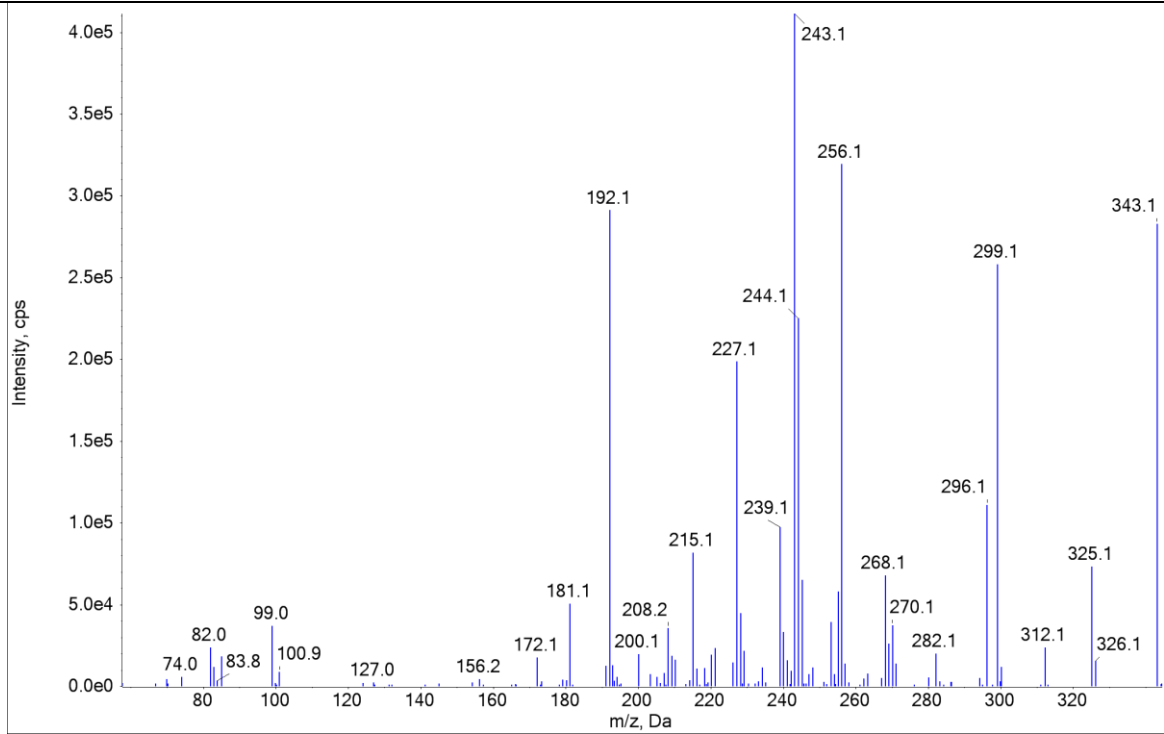
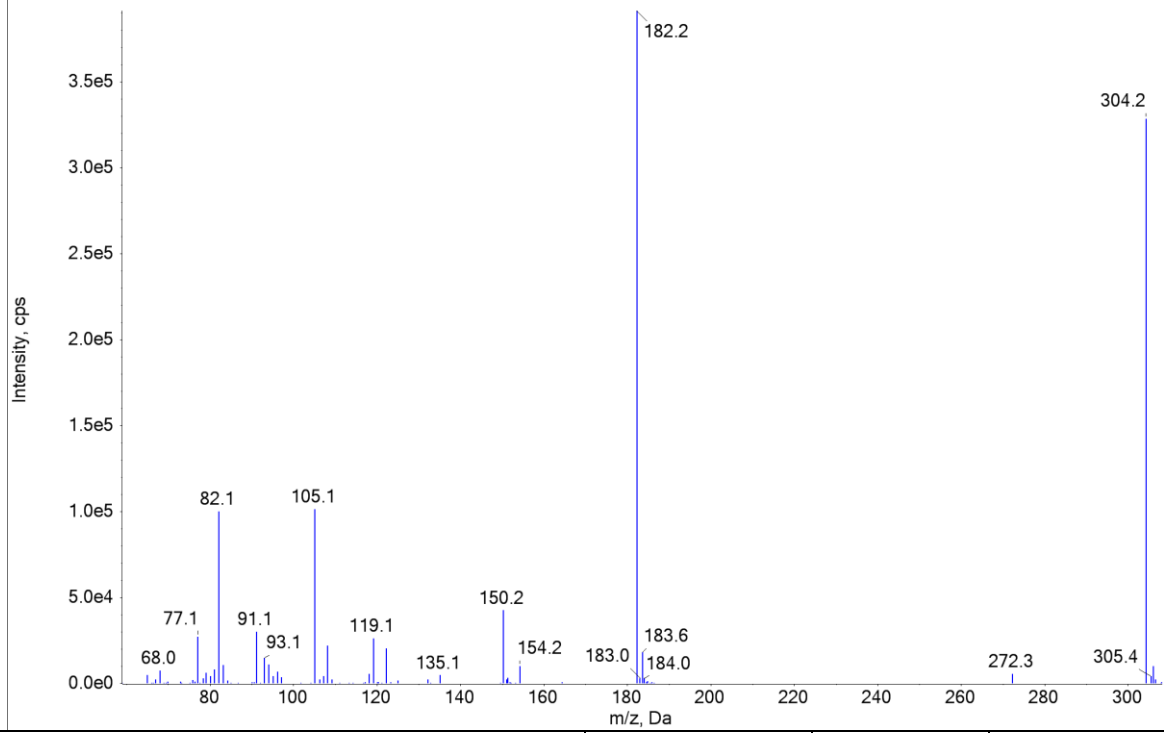
71	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Cimetidine	3.71	253.1	95.1
72	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Cinnarizine	10.2	369.2	167.1

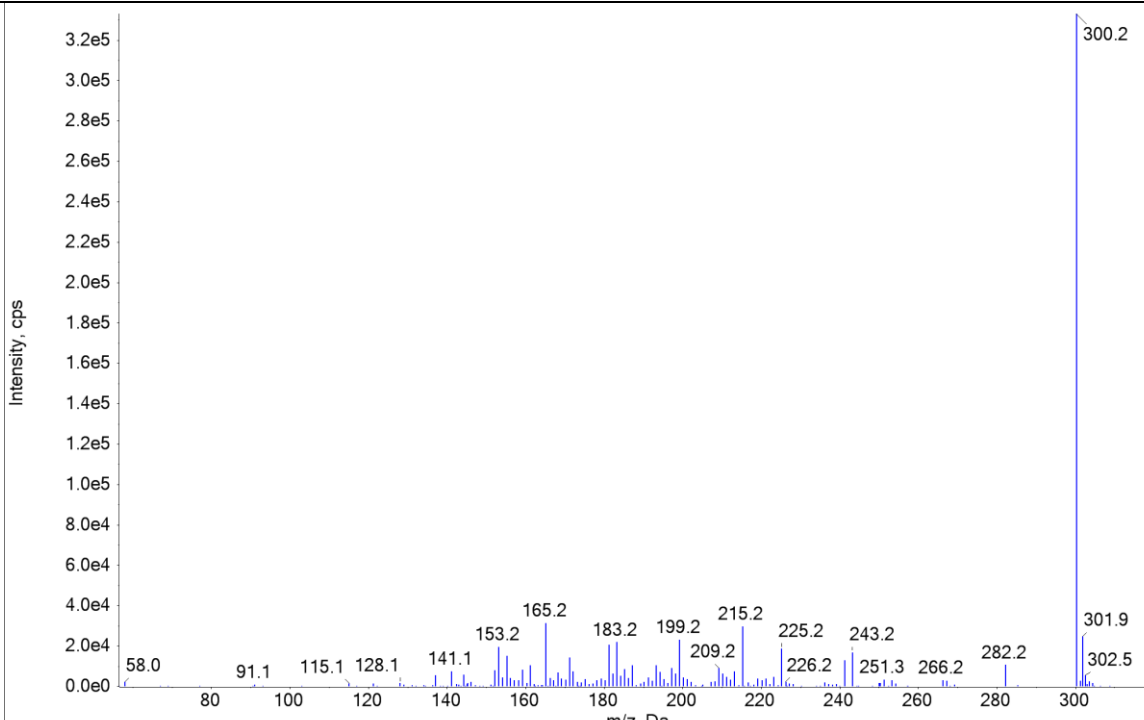
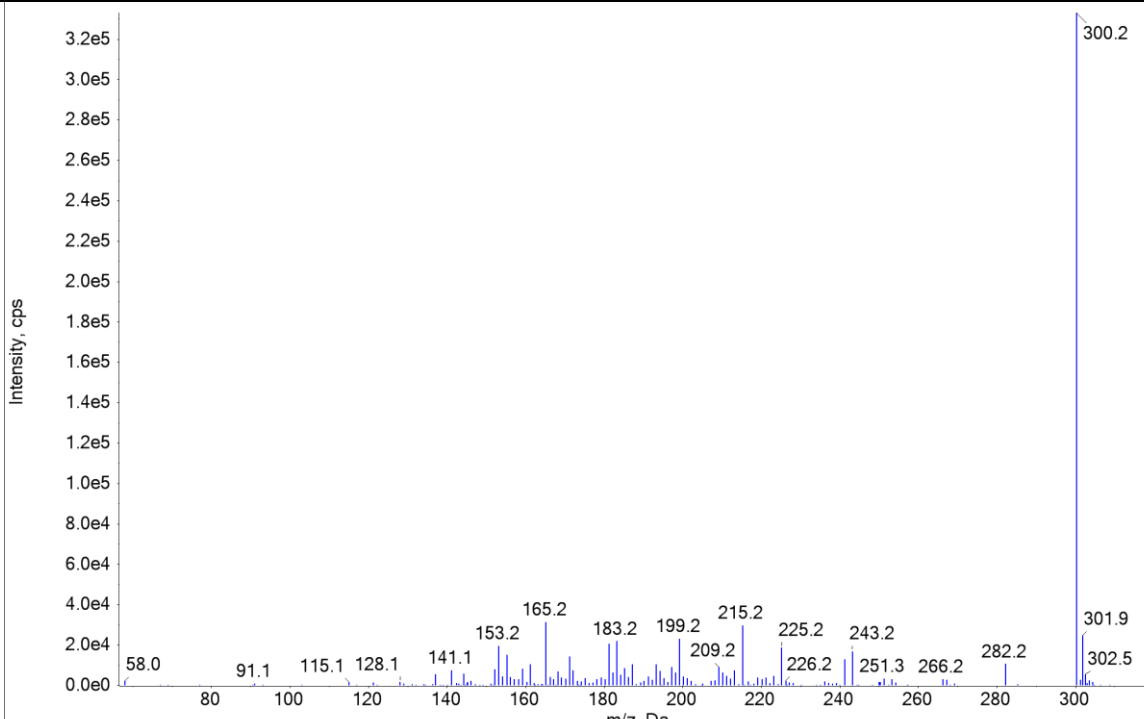
73	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Citalopram	6.69	325.2	109.1
74	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Clemastine	10.9	344.2	215.1

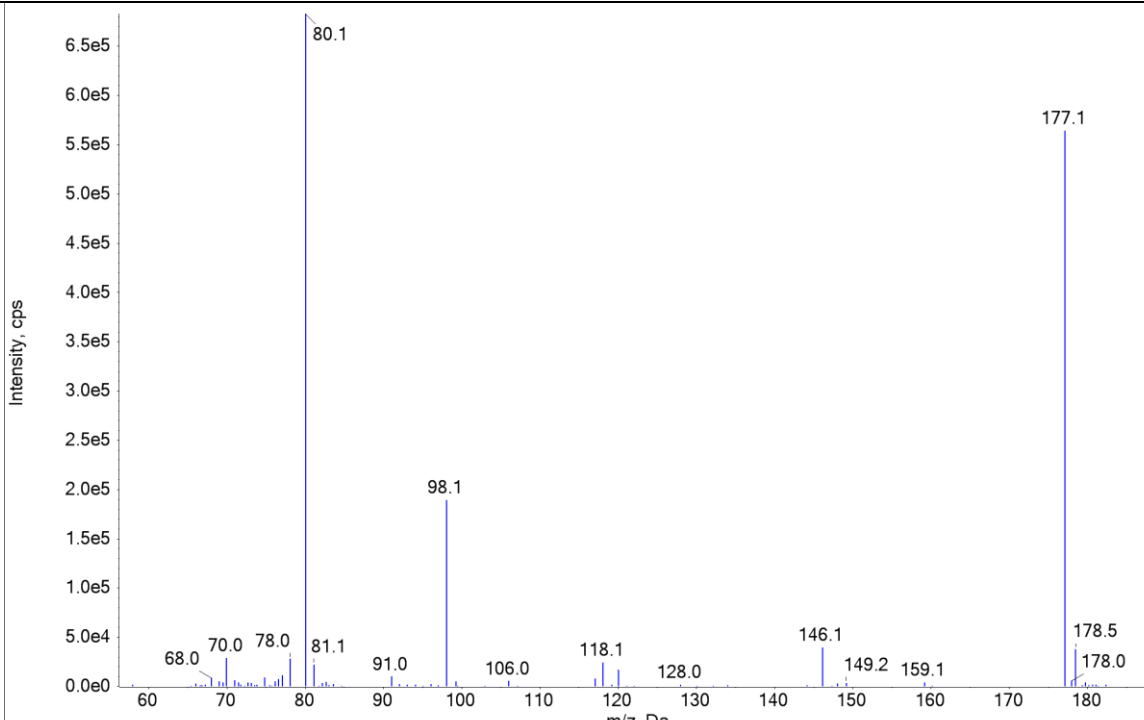
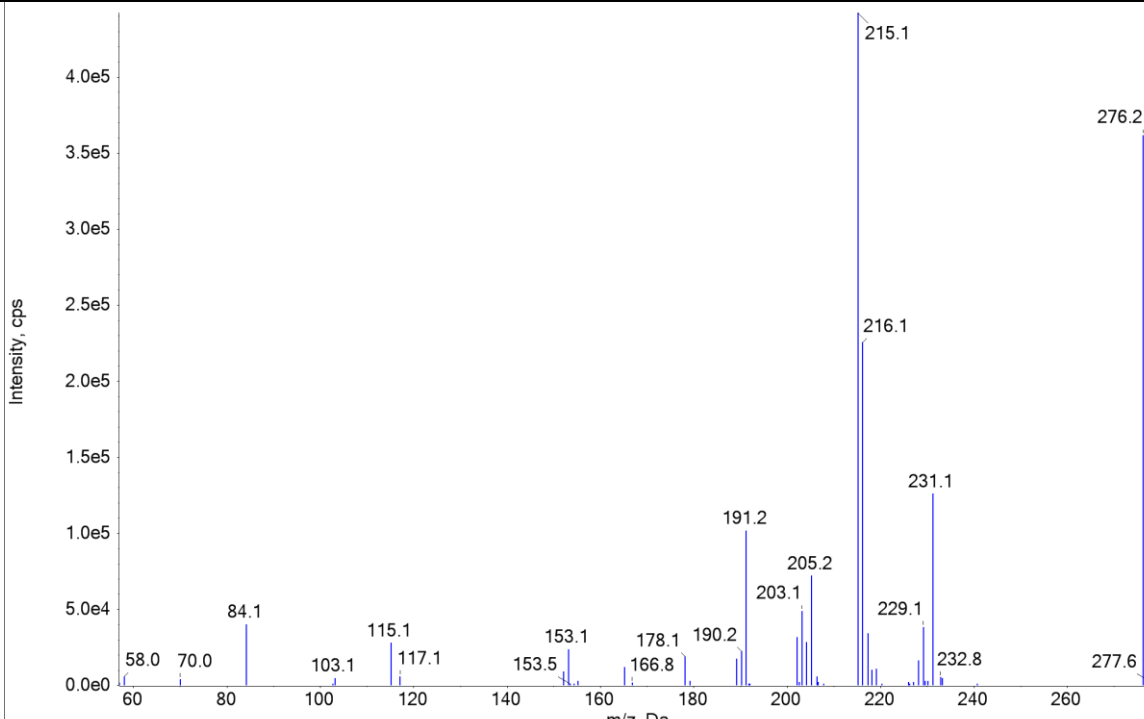
75	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Clenbuterol	5.28	277.1	203.1
76	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Clomipramine	7.89	315.2	86.1

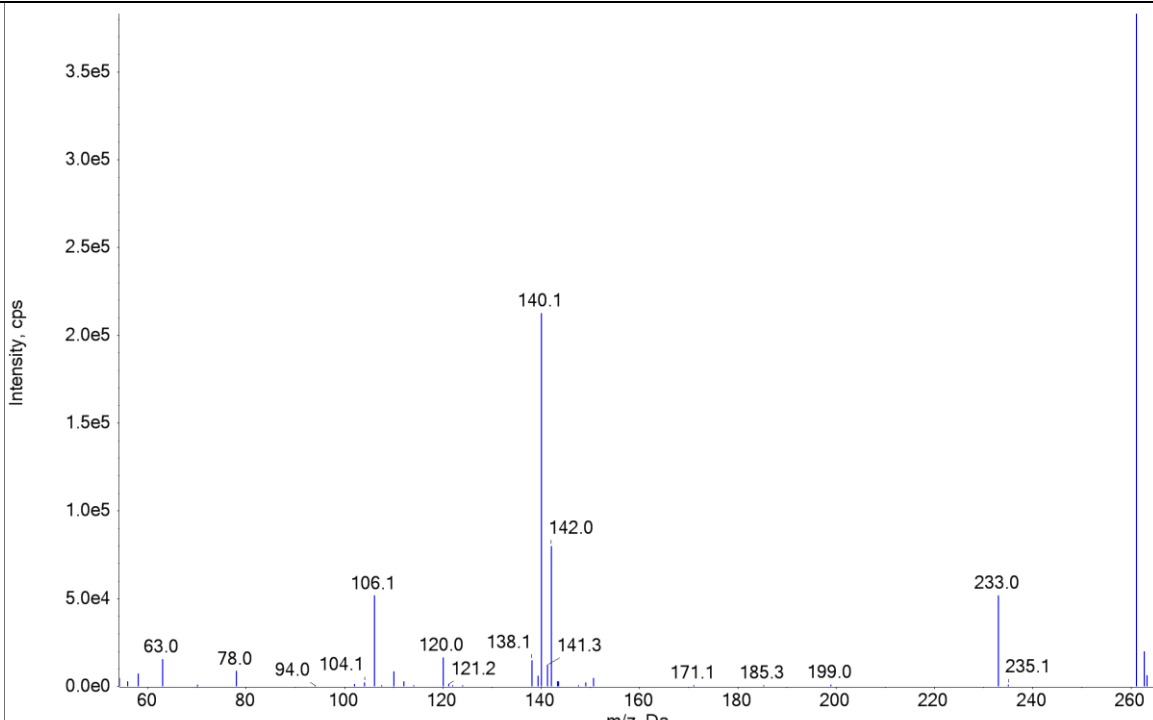
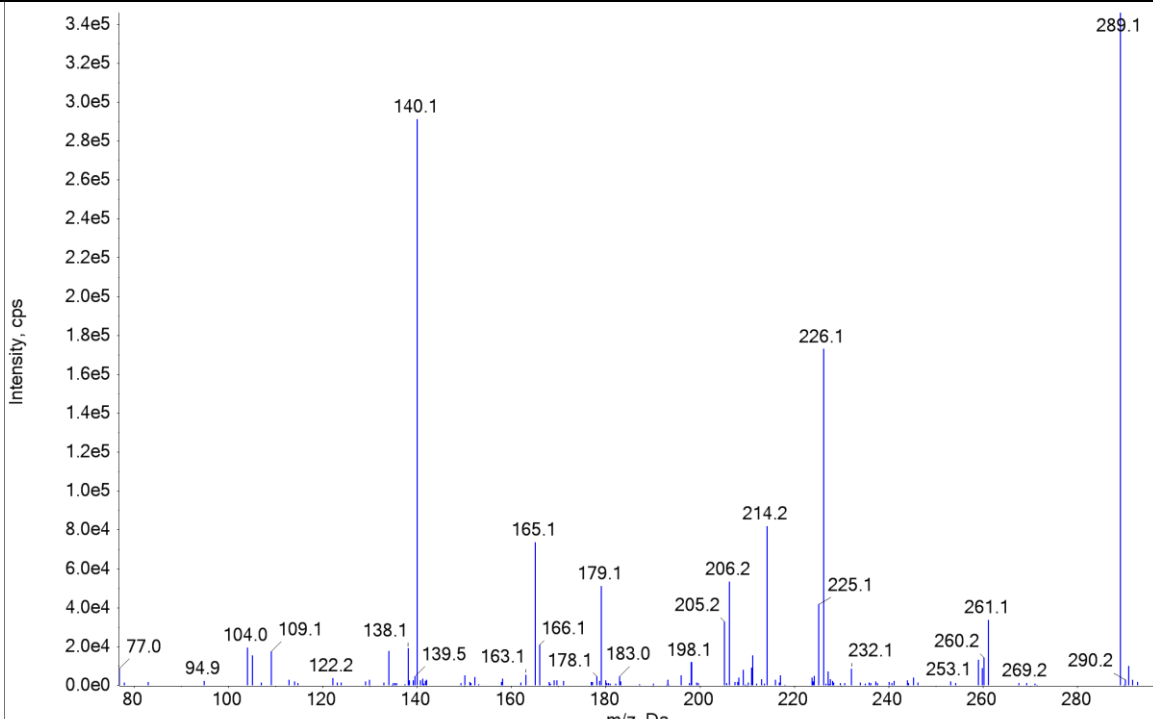
77	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Clonazepam	7.16	316.0	270.1
78	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Clonidine	3.74	230.0	213.1

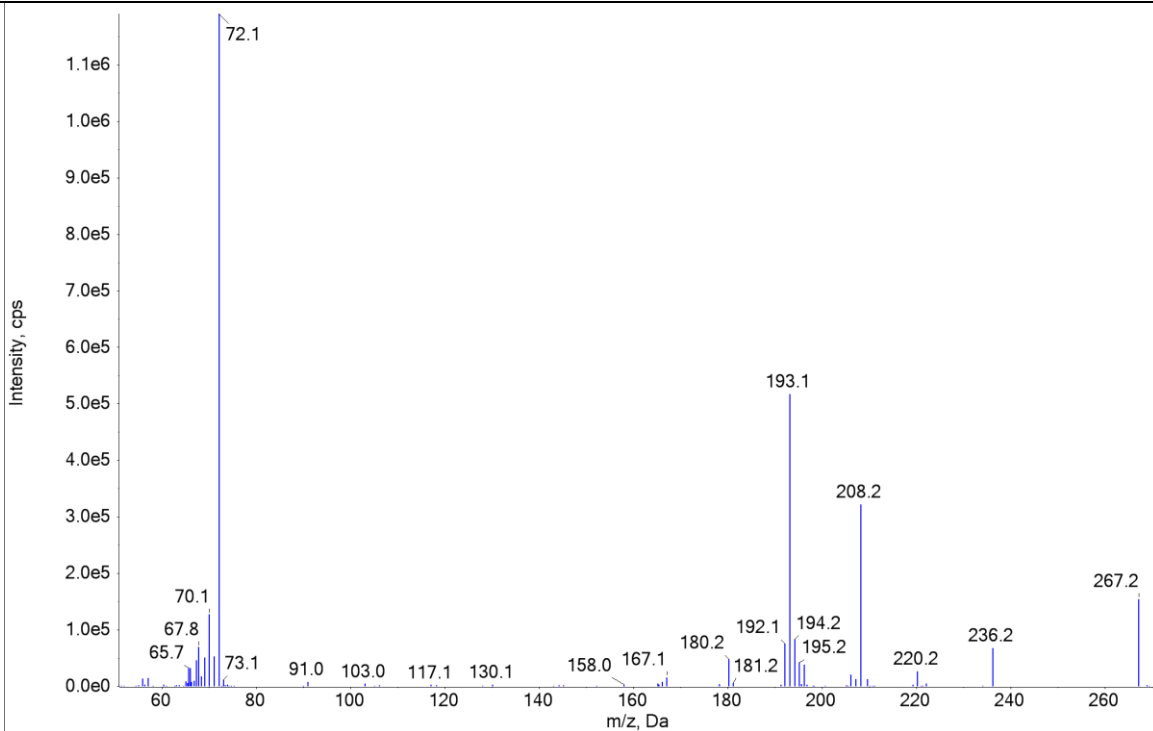
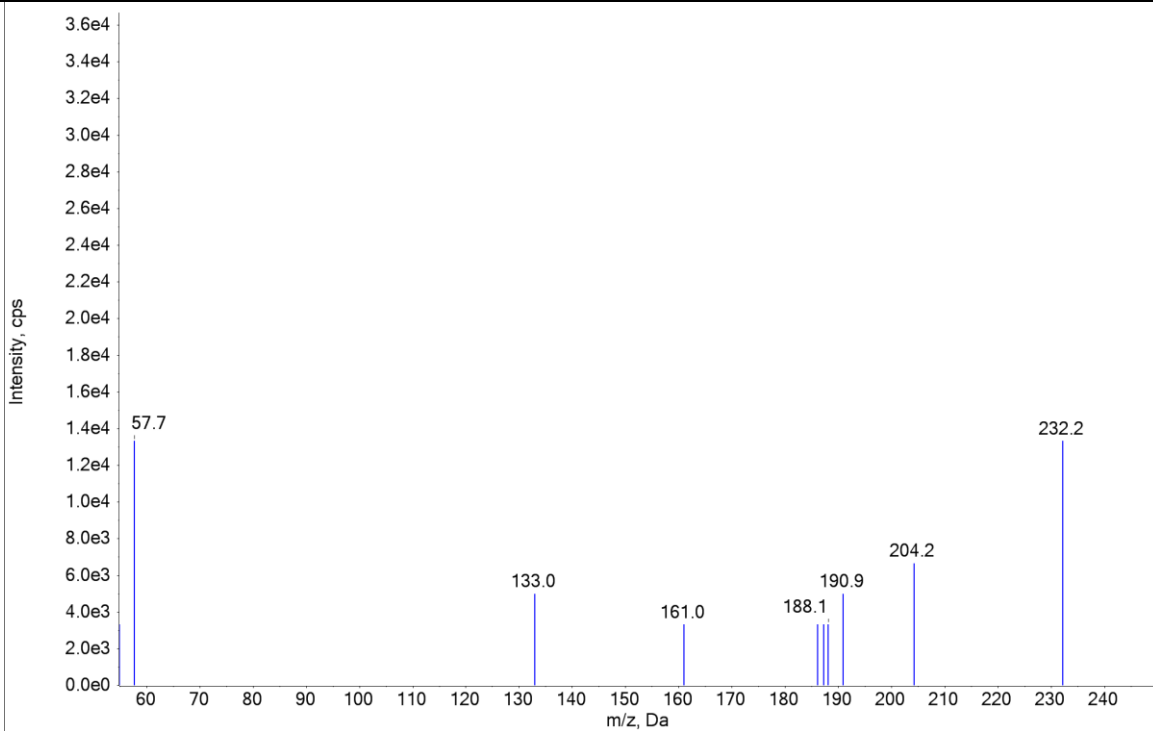
79	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Clopidogrel. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 320, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 6.0e5. The base peak is at m/z 155.1. Other labeled peaks include 59.0, 77.0, 91.1, 105.1, 125.1, 139.1, 152.1, 155.4, 155.8, 183.1, 184.1, 185.5, 212.1, 213.5, 262.2, 321.7, and 322.1.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Clopidogrel	7.6	322.1	155.1
80	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Clozapine. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 340, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 3.6e5. The base peak is at m/z 270.1. Other labeled peaks include 58.0, 84.1, 165.1, 191.1, 192.2, 193.6, 226.2, 227.2, 229.1, 253.2, 271.7, 273.2, 296.1, 297.7, 327.2, 328.9, and 329.9.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Clozapine	7.6	327.2	270.2

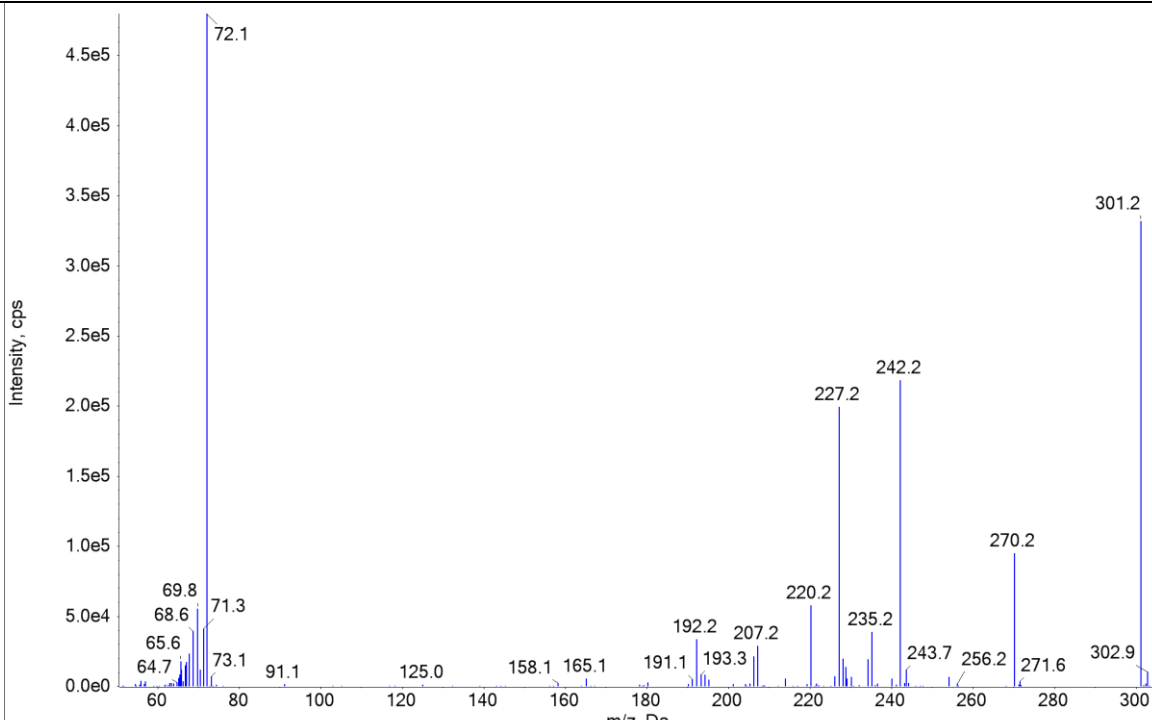
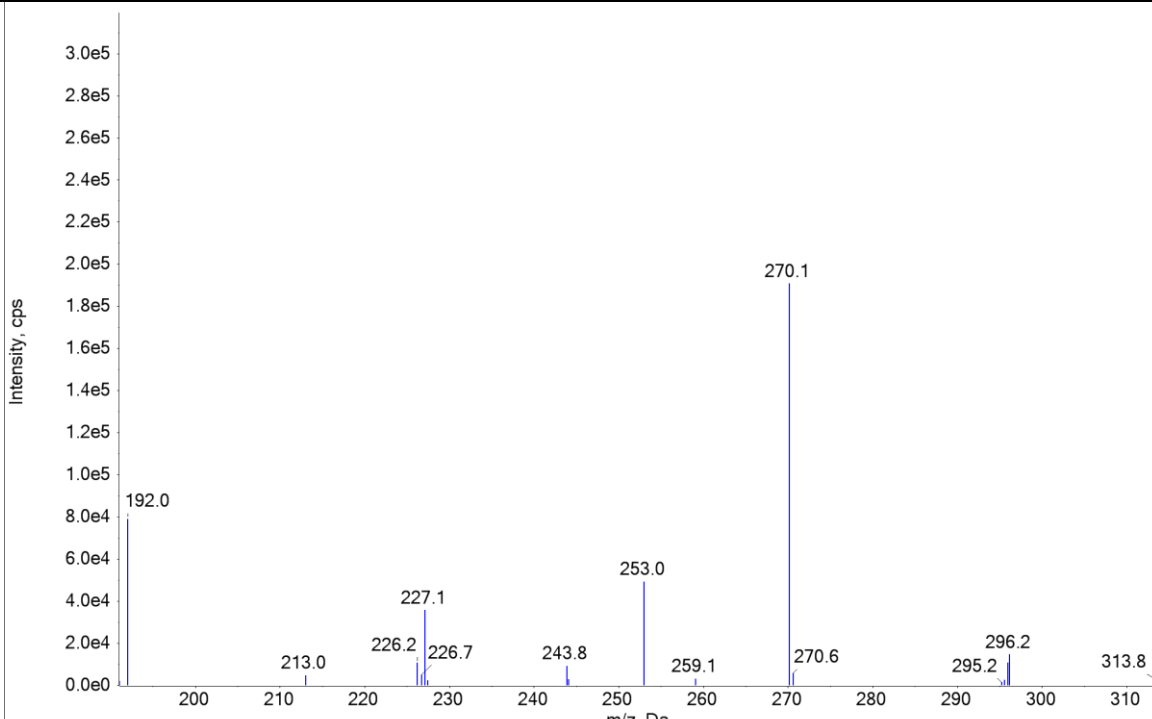
81	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Clozapine N-oxide	6.75	343.0	192
82	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Cocaine	5.52	304.2	182.2

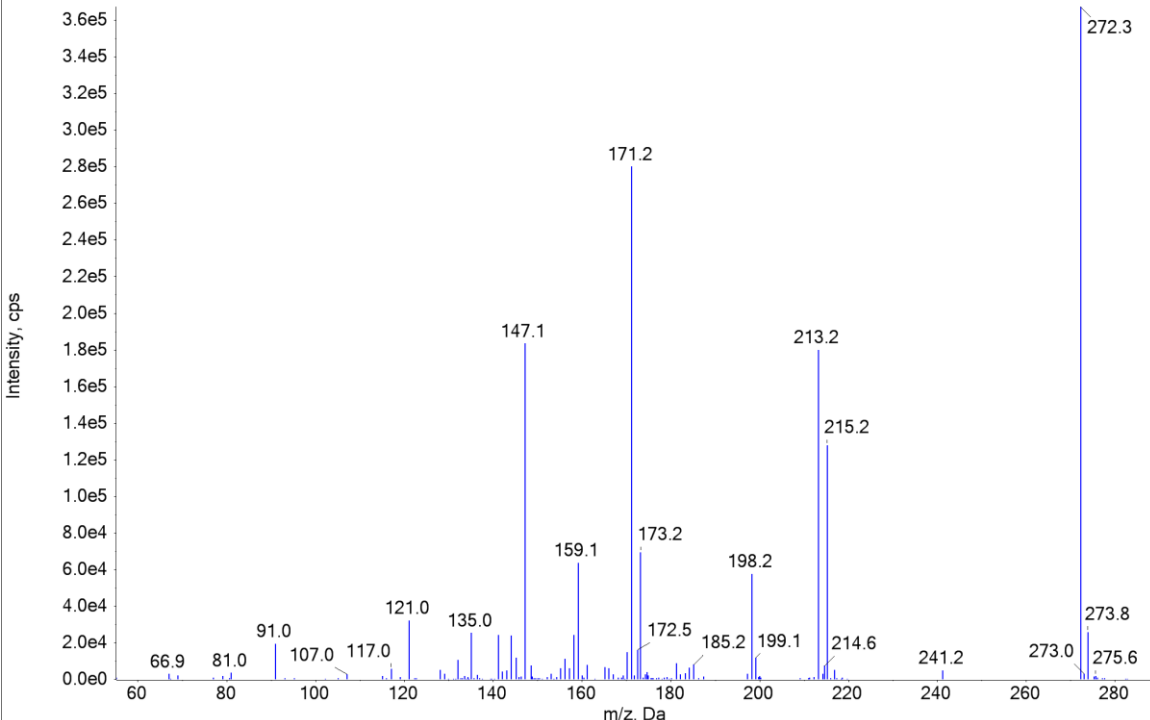
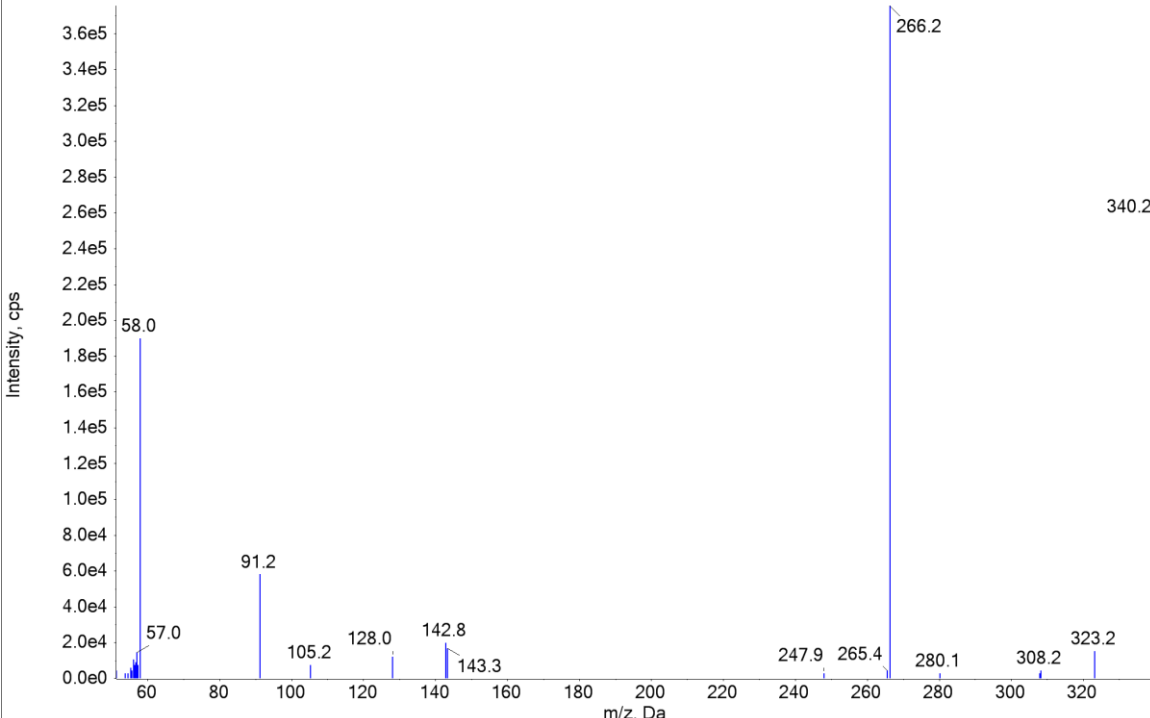
83	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Codeine	4.61	300.2	165.2
84	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Codeine glucuronide	3.94	476.0	300

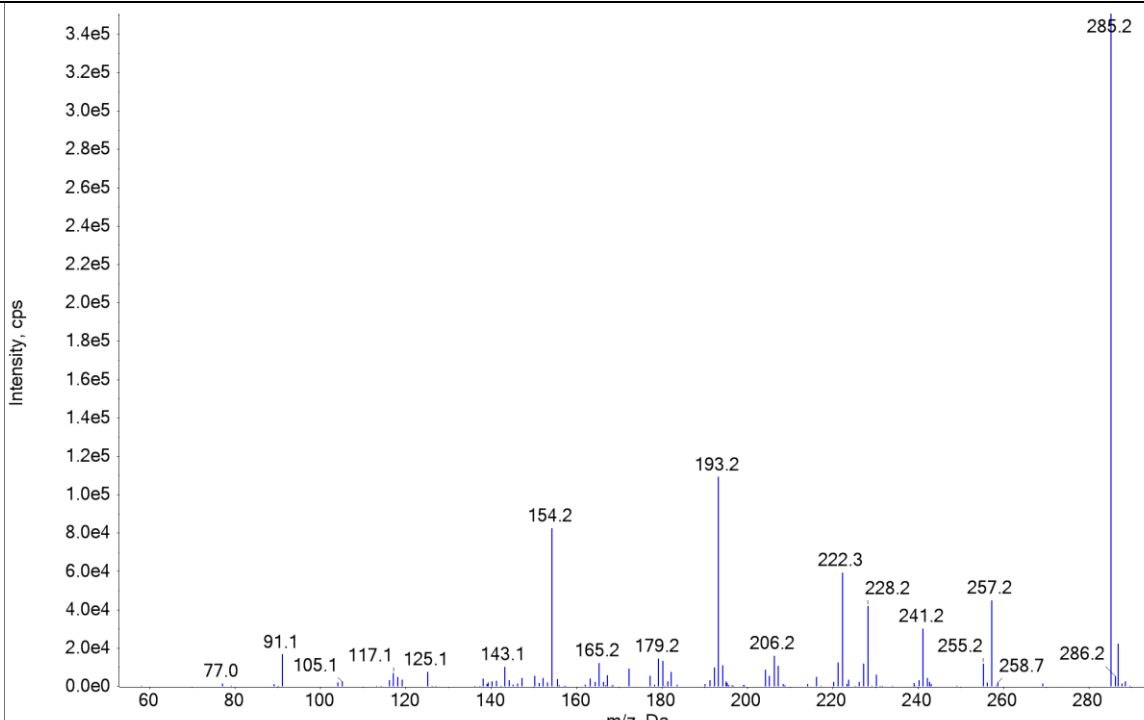
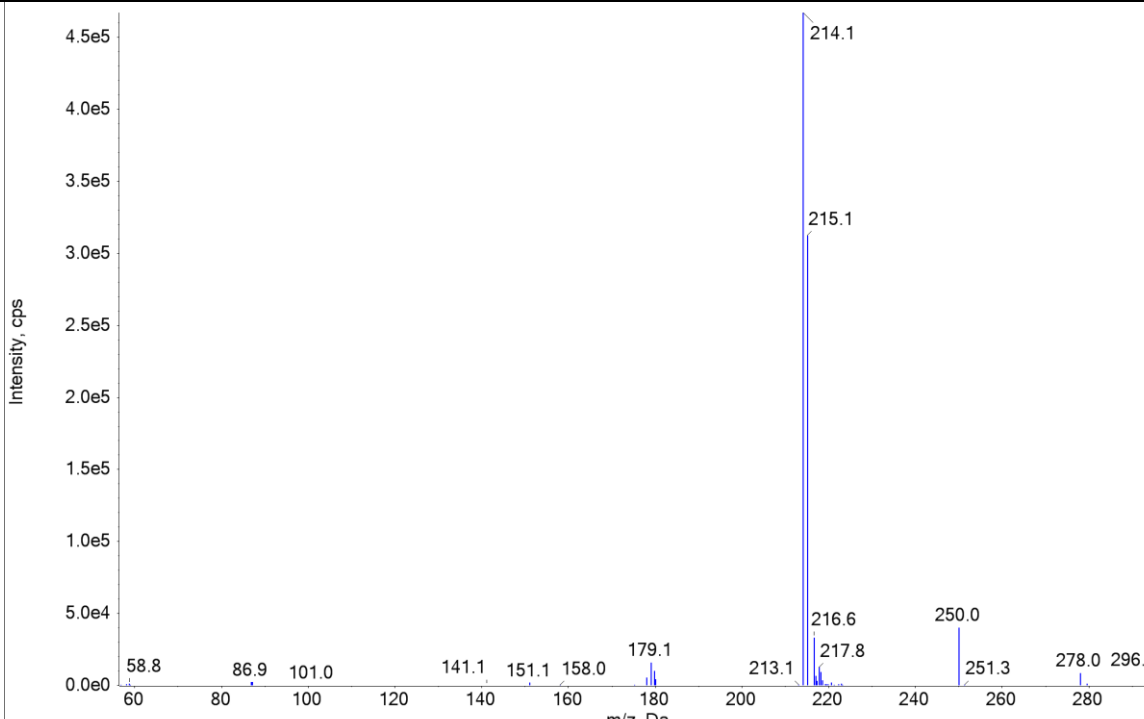
85	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Cotinine	3.74	177.1	98.1
86	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Cyclobenzaprine	6.27	276.2	215.1

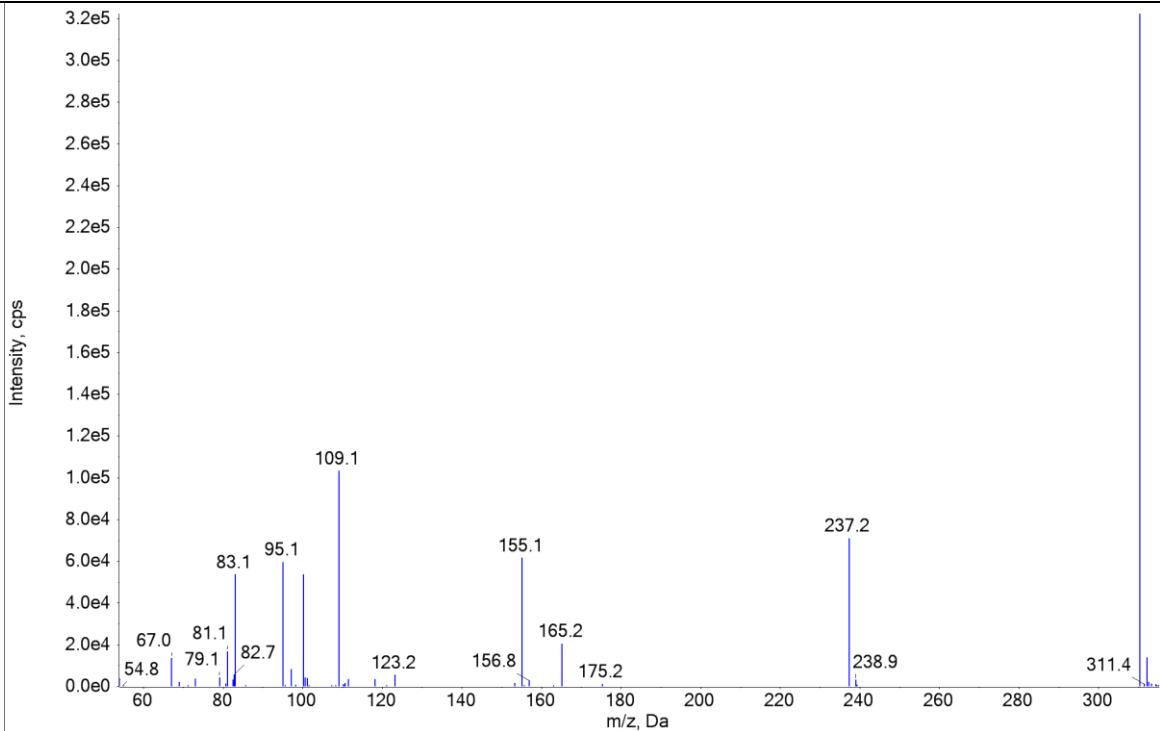
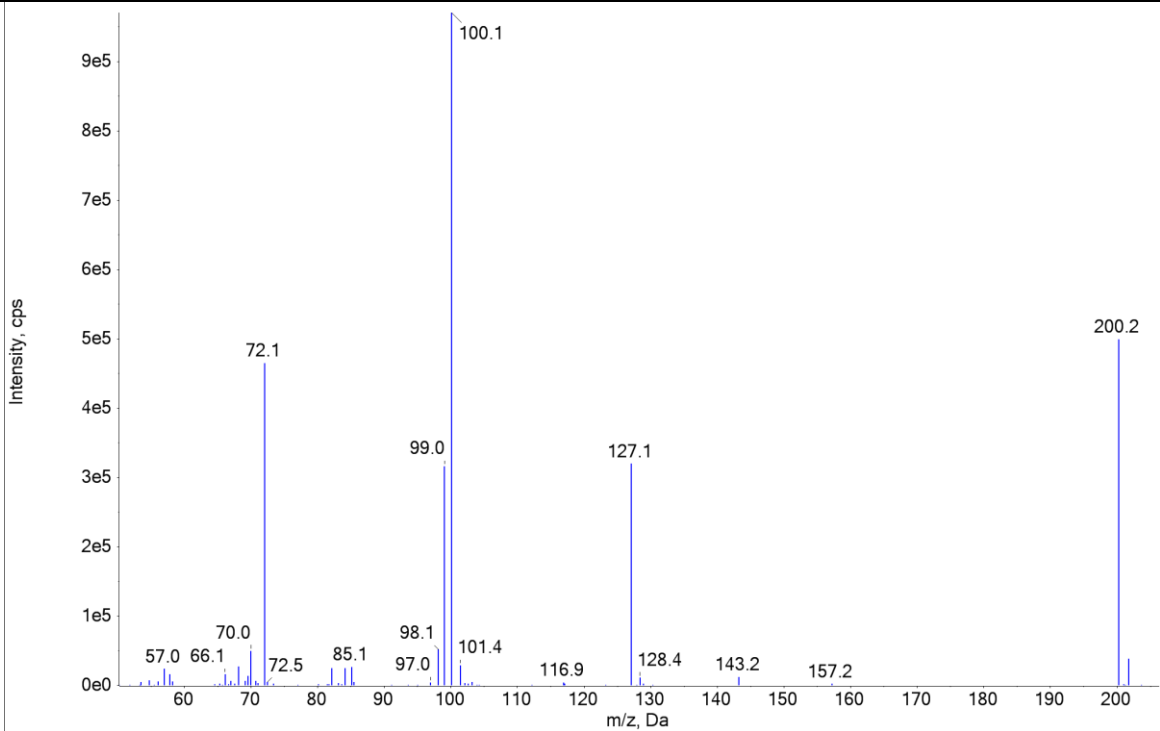
87	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Cyclophosphamide	5.94	261.0	140.1
88	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Desalkylflurazepam	7.5	289.1	140.1

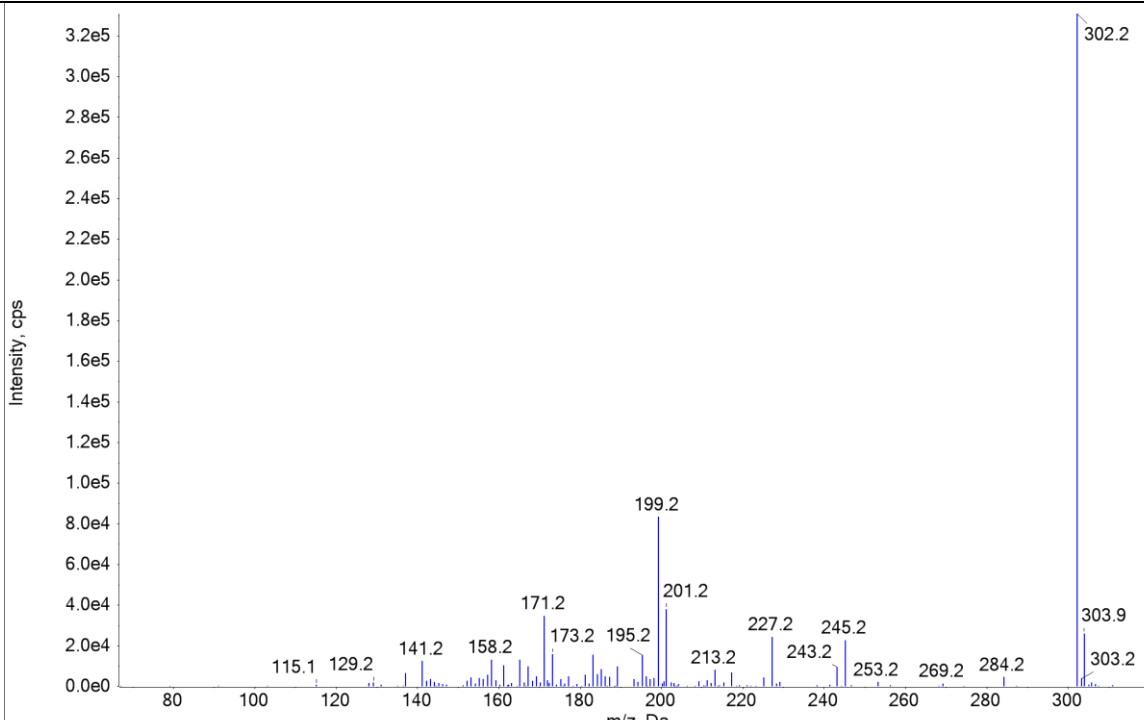
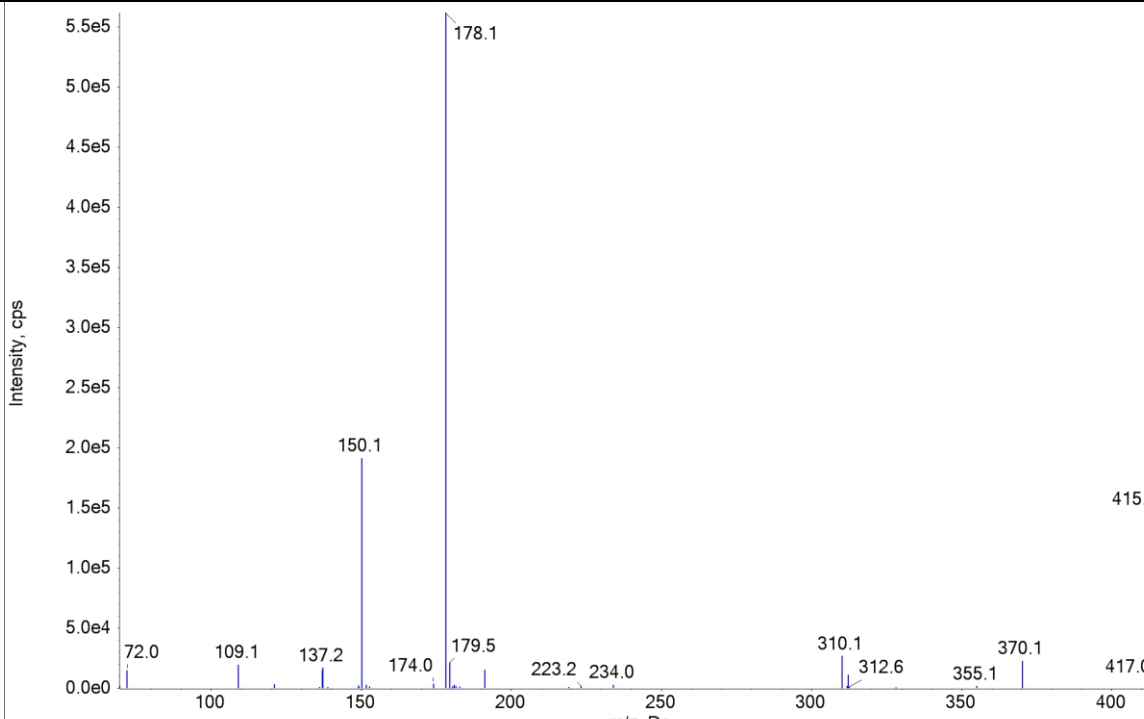
89	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Desipramine. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 260, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 1.1e6. The base peak is at m/z 72.1. Other labeled peaks include 65.7, 67.8, 70.1, 73.1, 91.0, 103.0, 117.1, 130.1, 158.0, 167.1, 180.2, 181.2, 192.1, 194.2, 195.2, 208.2, 220.2, 236.2, and 267.2.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Desipramine	7.24	267.2	72.1
90	Масс спектр			
	 Mass spectrum of DesmethyI tramadol. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 240, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 3.6e4. The base peak is at m/z 250.2. Other labeled peaks include 57.7, 133.0, 161.0, 188.1, 190.9, 204.2, and 232.2.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	DesmethyI tramadol	3.73	250.2	58

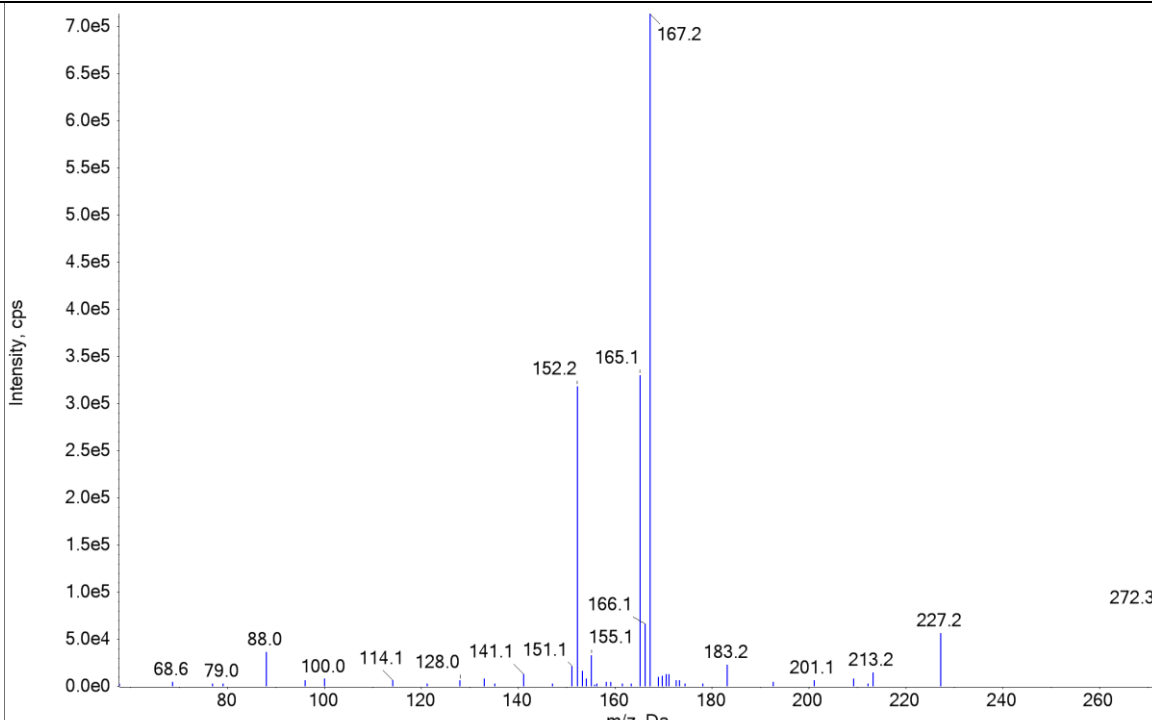
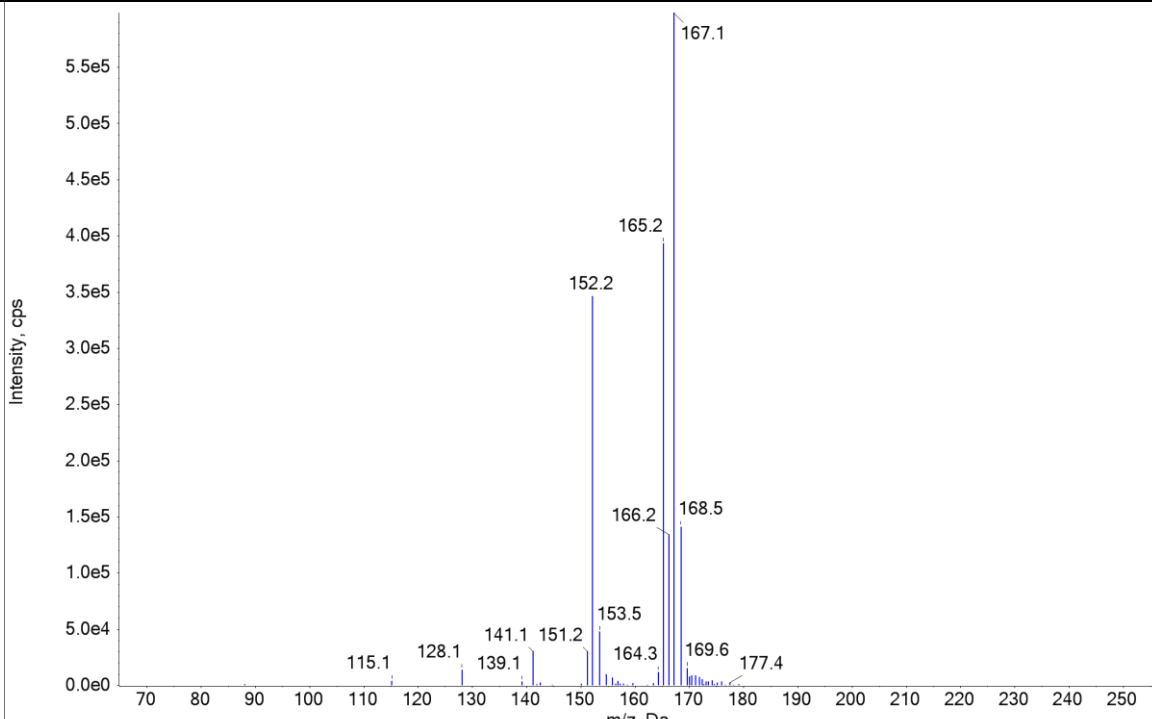
91	Масс спектр			
	 Mass spectrum of DesmethyI clomipramine. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 300, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 4.5e5. The base peak is at m/z 72.1. Other labeled peaks include 64.7, 65.6, 68.6, 69.8, 71.3, 73.1, 91.1, 125.0, 158.1, 165.1, 191.1, 192.2, 193.3, 207.2, 220.2, 227.2, 235.2, 242.2, 243.7, 256.2, 270.2, 271.6, 301.2, and 302.9.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	DesmethyI clomipramine	7.86	301.1	72.1
92	Масс спектр			
	 Mass spectrum of DesmethyI clozapine. The x-axis represents m/z (Da) from 200 to 310, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 3.0e5. The base peak is at m/z 313.8. Other labeled peaks include 192.0, 213.0, 226.2, 227.1, 226.7, 243.8, 253.0, 259.1, 270.1, 270.6, 295.2, 296.2, and 313.8.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	DesmethyI clozapine	6.36	313.0	192

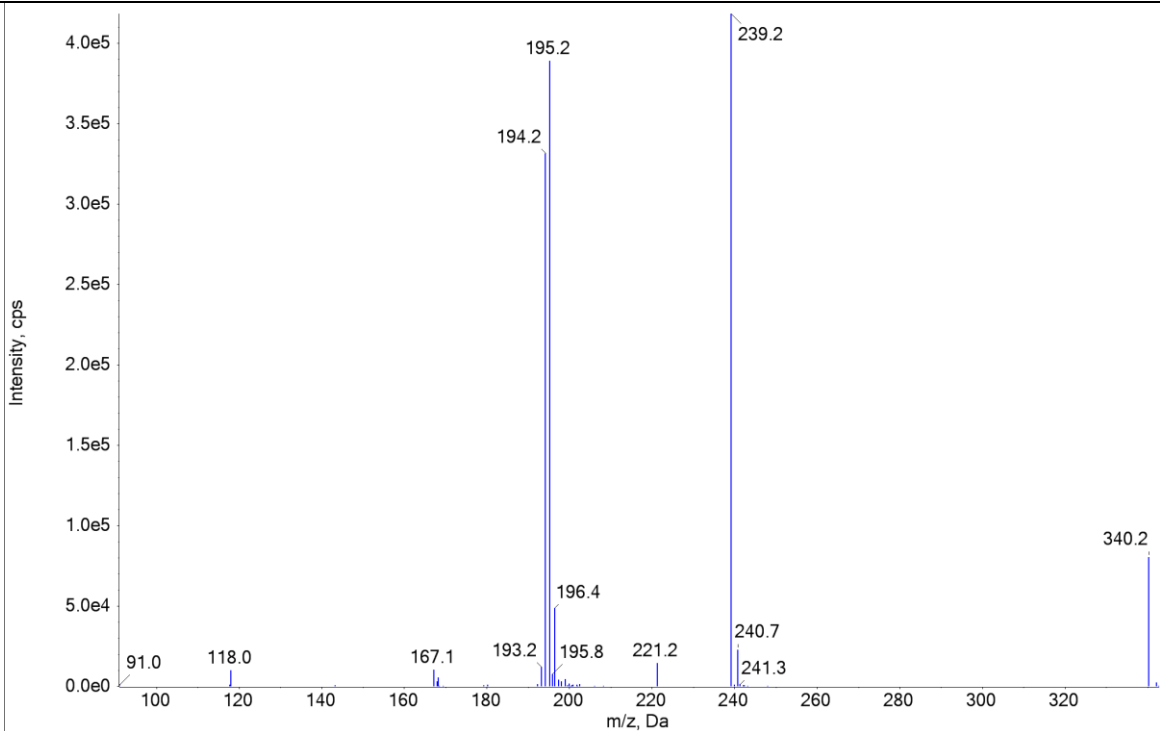
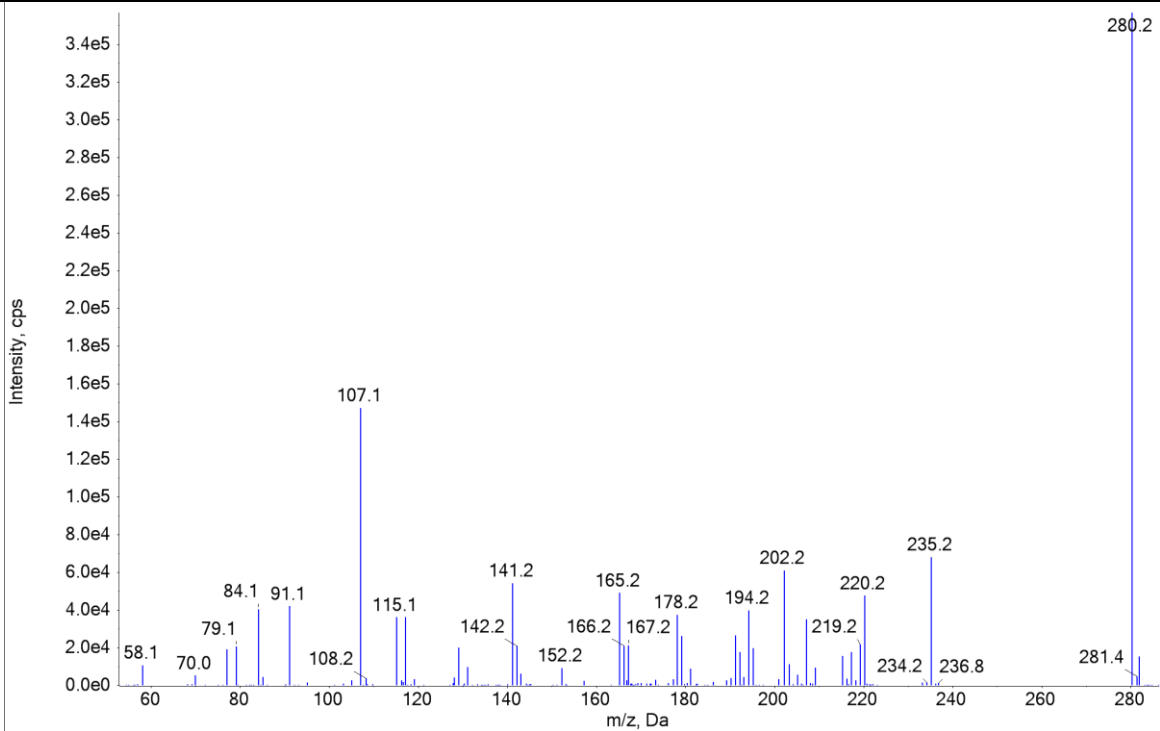
93	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Dextromethorphan	6.54	272.2	171.2
94	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Dextropropoxyphene	7.51	340.2	266.2

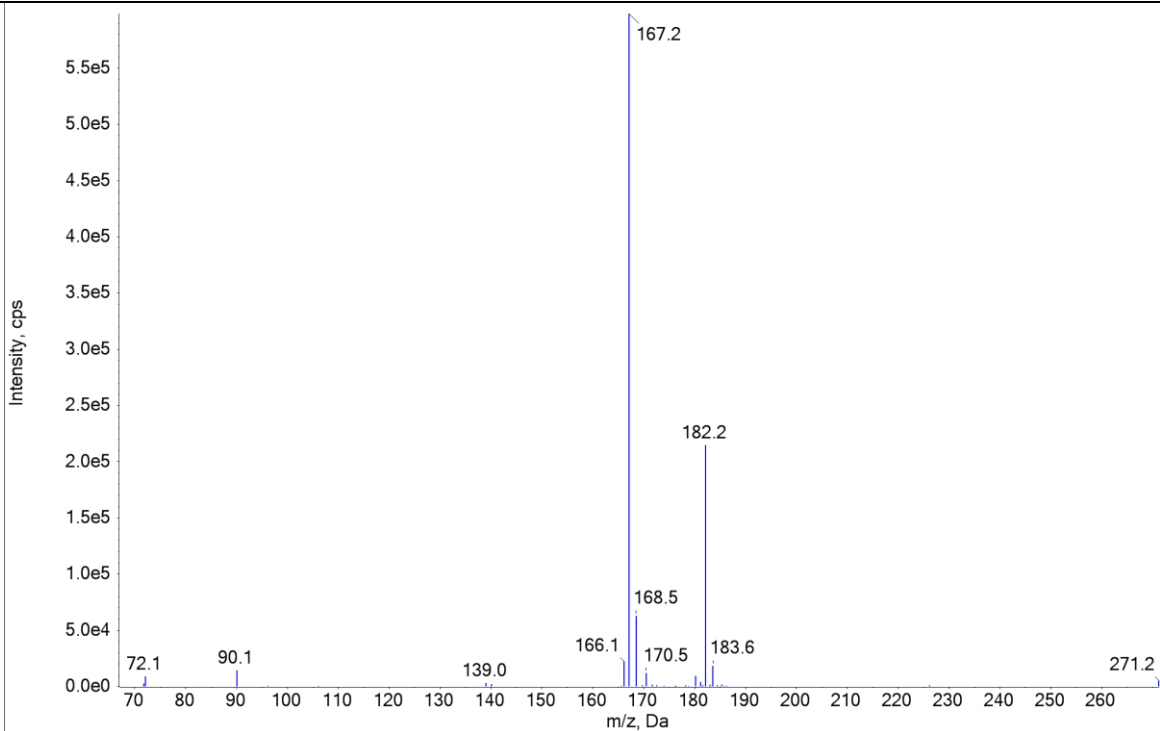
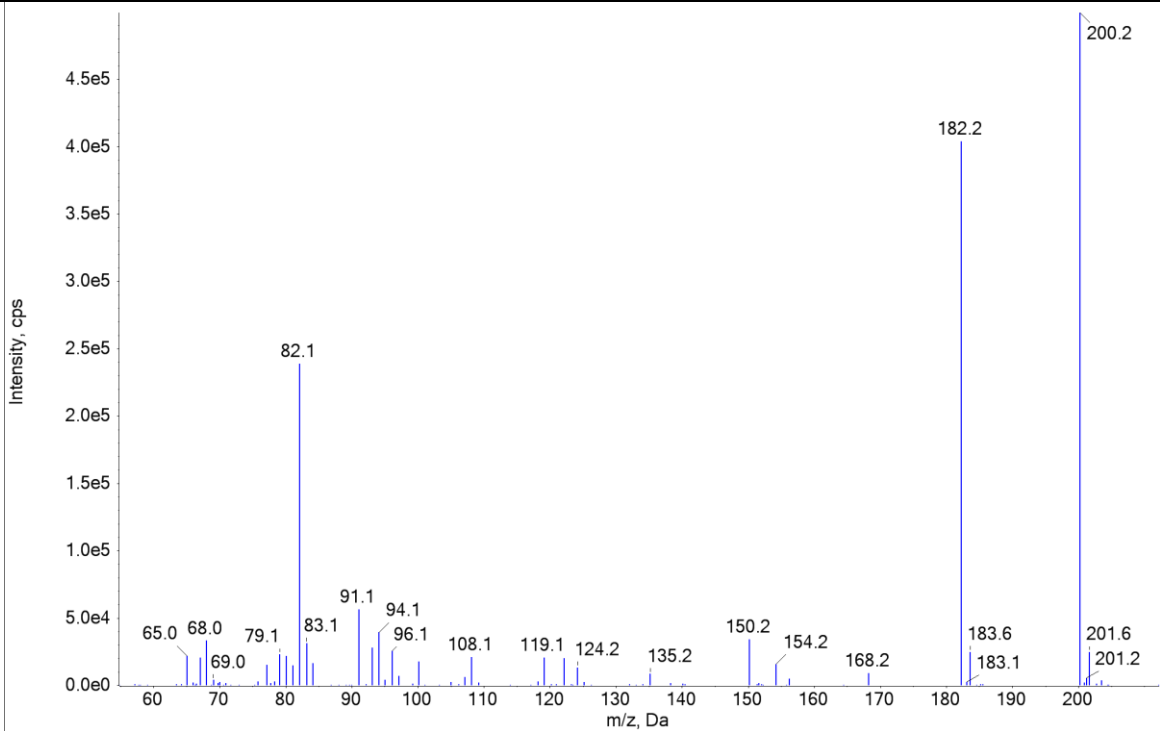
95	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Diazepam	8.28	285.1	193.2
96	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Diclofenac	7.29	296.0	214.1

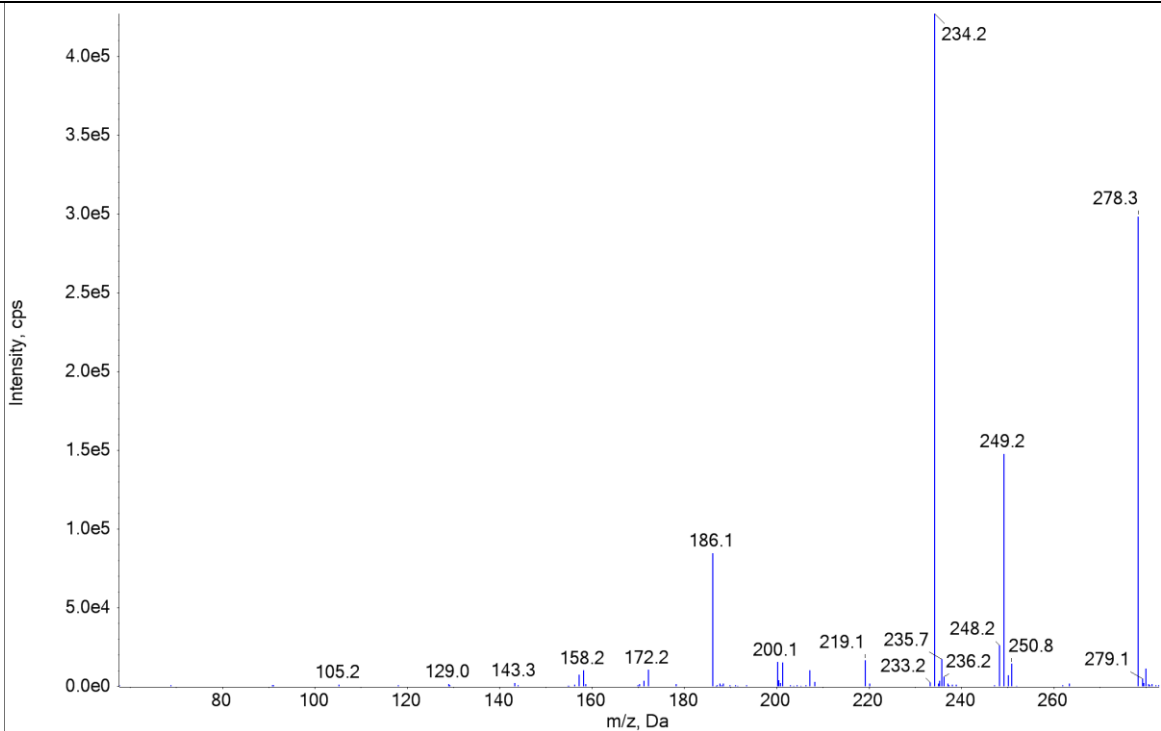
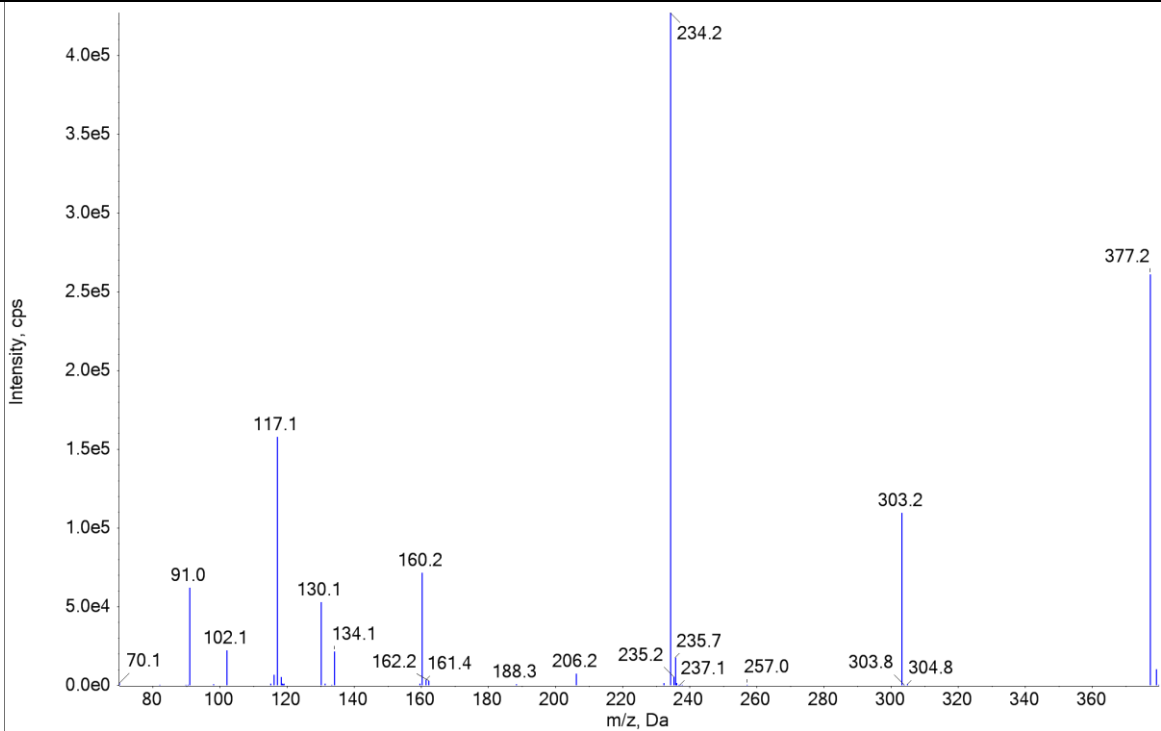
97	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Dicycloverine	9.51	310.3	109.1
98	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Diethylcarbamazine	4.16	200.2	100.1

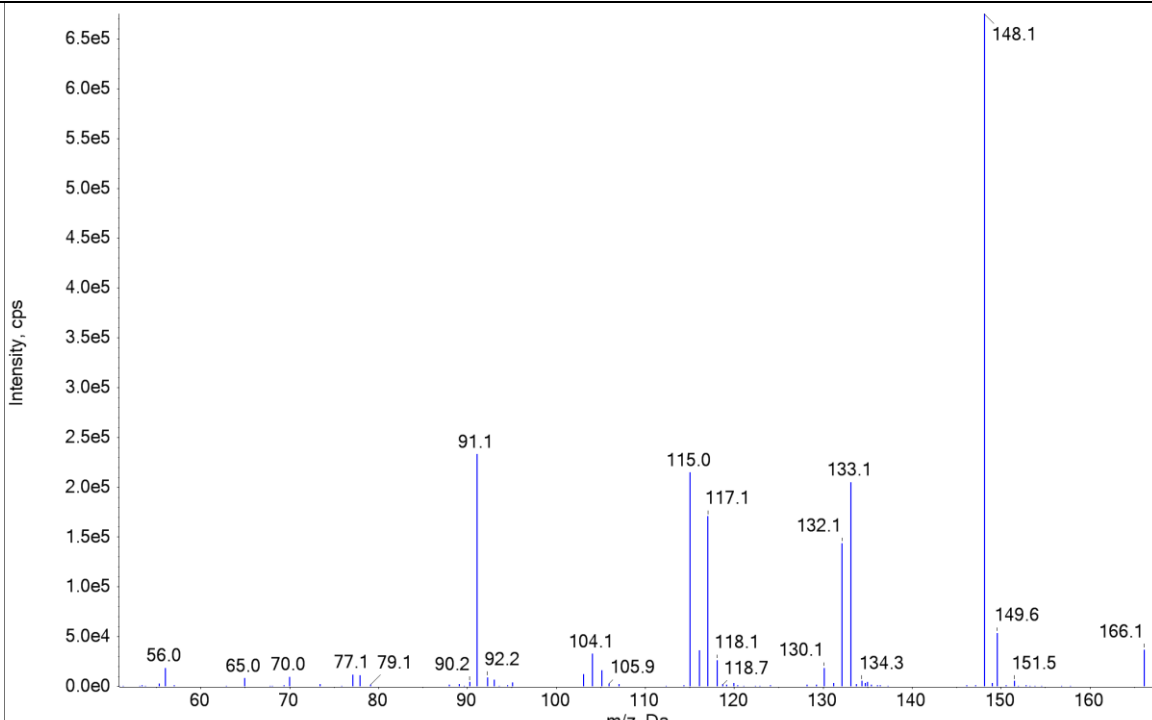
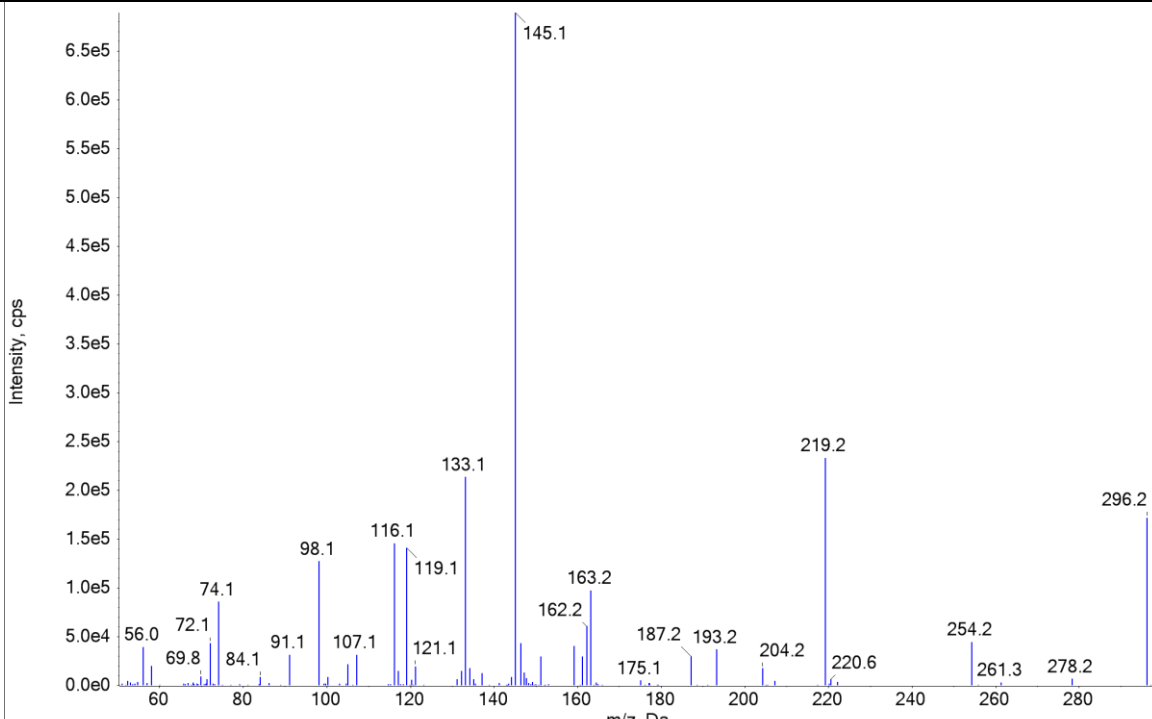
99	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Dihydrocodeine	4	302.2	199.2
100	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Diltiazem	7.39	415.2	178.2

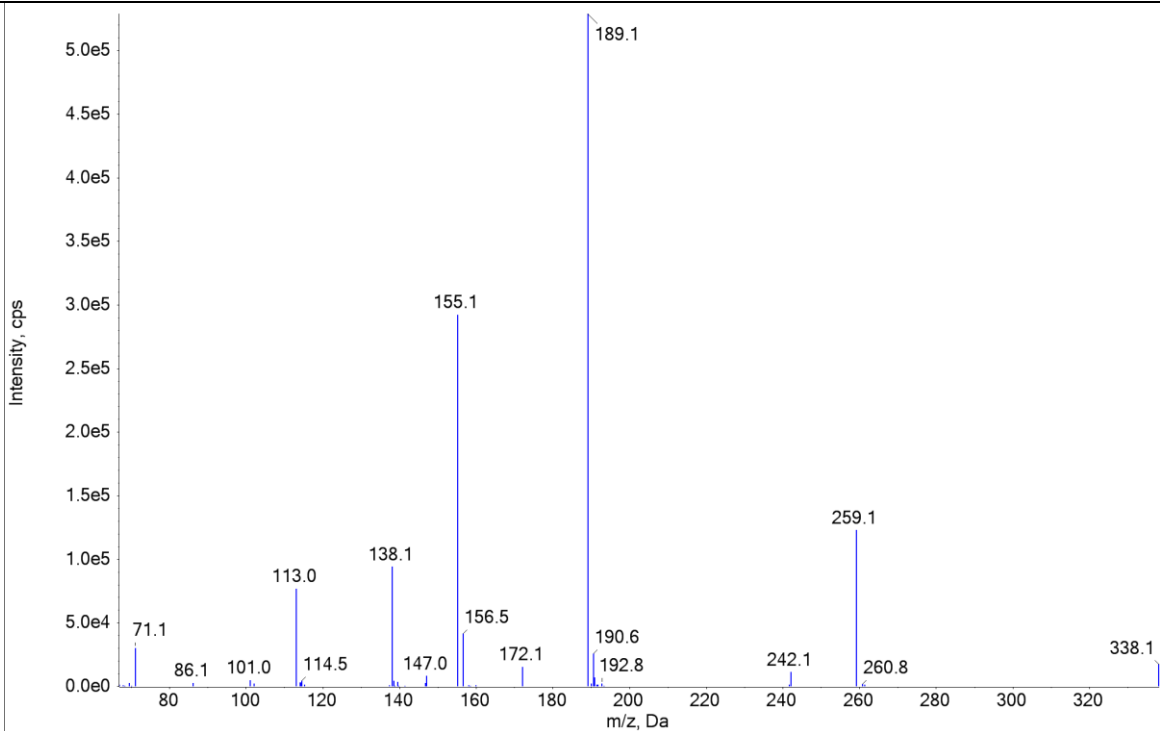
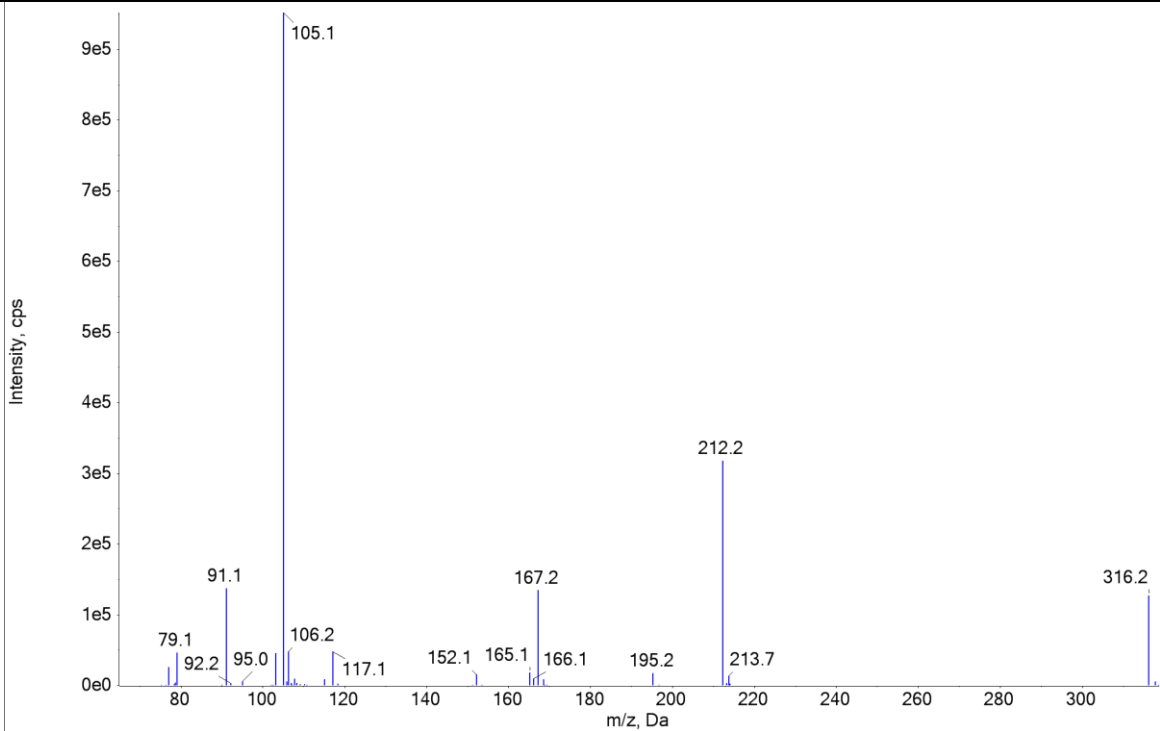
101	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Diphenhydramin N-oxyde. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 280, and the y-axis represents intensity in counts per second (cps) from 0.0e0 to 7.0e5. The base peak is at m/z 167.2. Other labeled peaks include 68.6, 79.0, 88.0, 100.0, 114.1, 128.0, 141.1, 151.1, 152.2, 155.1, 166.1, 183.2, 201.1, 213.2, 227.2, and 272.3.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Diphenhydramin N-oxyde	7.1	272.2	167.1
102	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Diphenhydramine. The x-axis represents m/z (Da) from 70 to 260, and the y-axis represents intensity in counts per second (cps) from 0.0e0 to 5.5e5. The base peak is at m/z 167.1. Other labeled peaks include 115.1, 128.1, 139.1, 141.1, 151.2, 152.2, 153.5, 164.3, 166.2, 168.5, 169.6, and 177.4.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Diphenhydramine	6.59	256.2	167.1

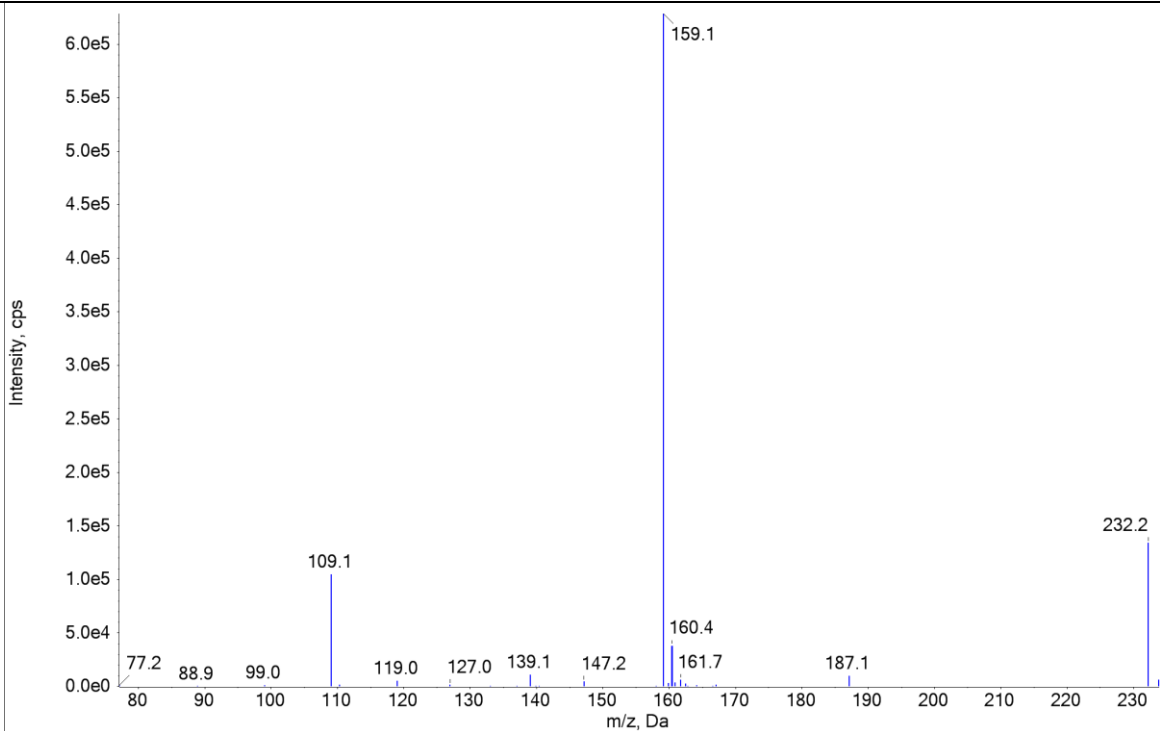
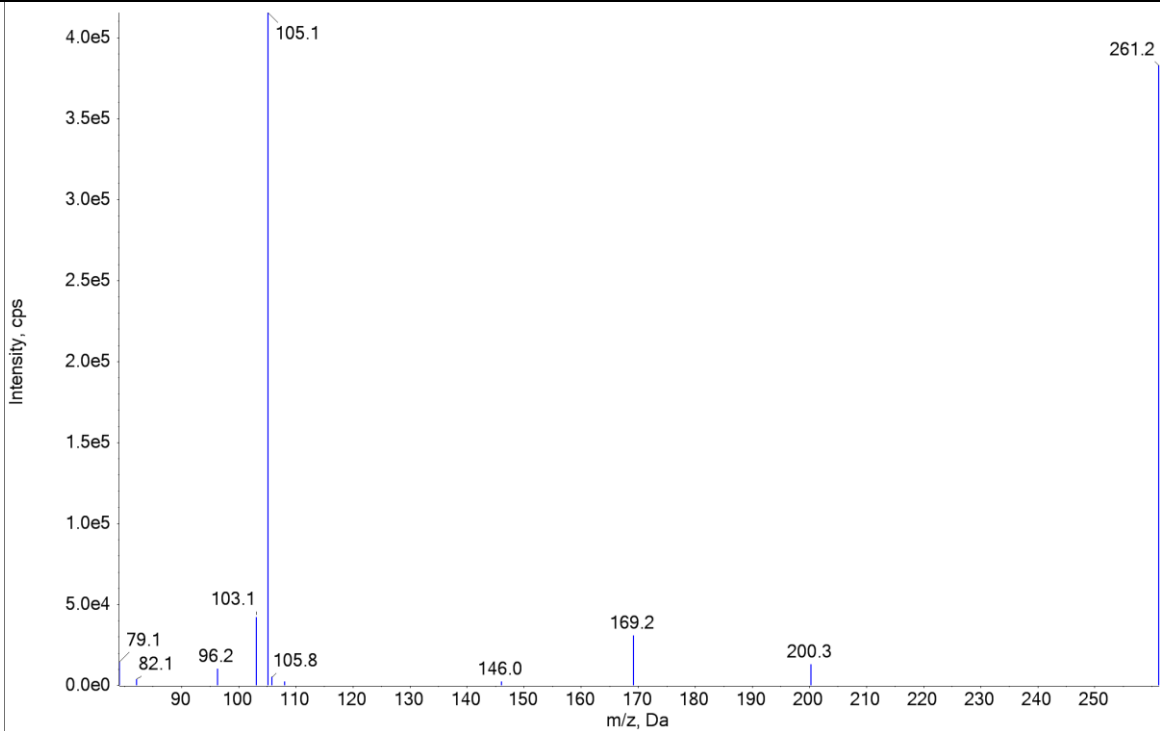
103	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Disopyramide	5.48	340.2	239.2
104	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Doxepin	7.07	280.2	107.1

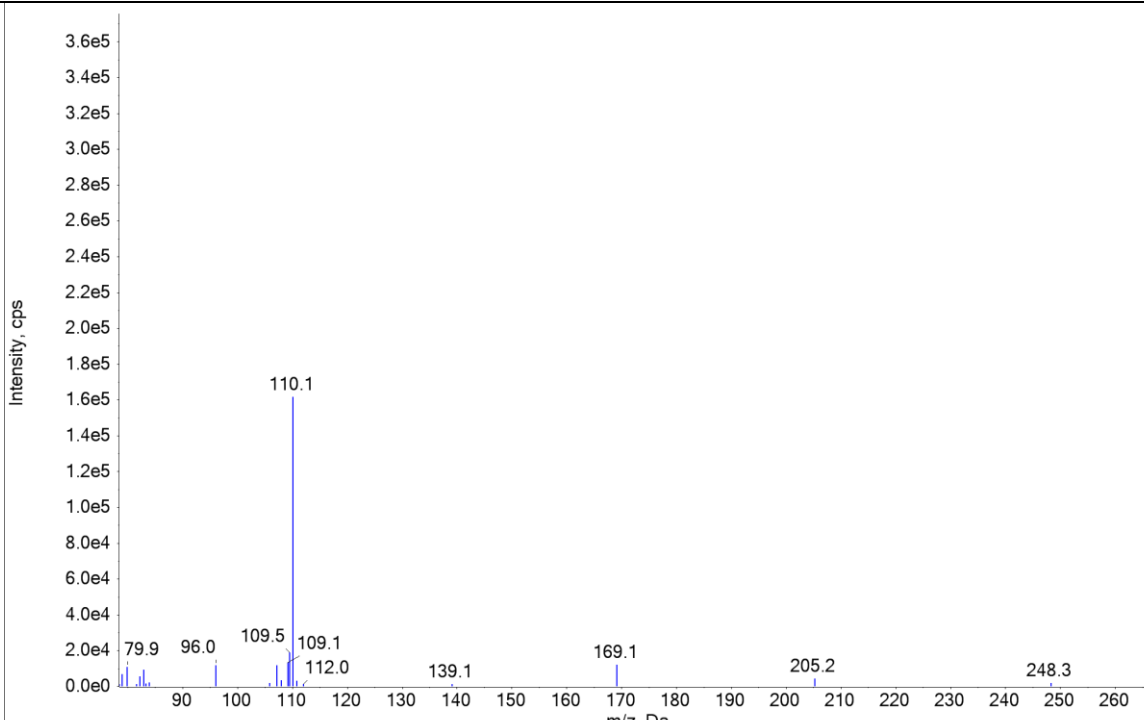
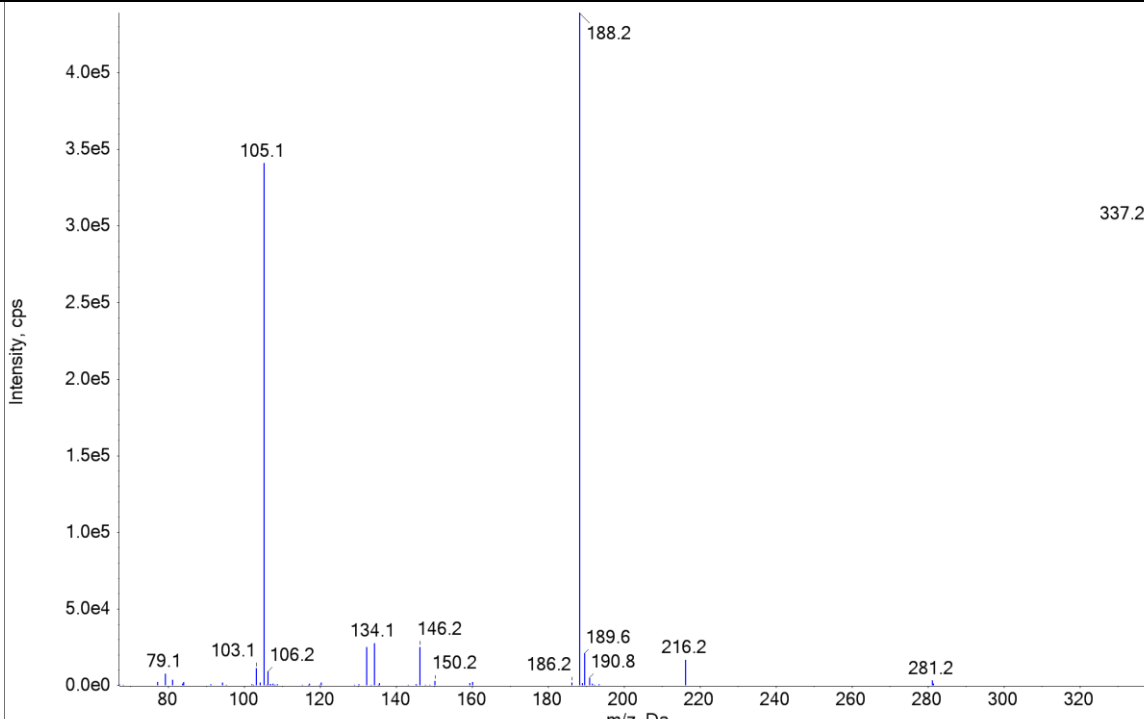
105	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Doxylamine. The x-axis represents m/z (Da) from 70 to 260, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 5.5e5. The base peak is at m/z 167.2. Other labeled peaks include 72.1, 90.1, 139.0, 166.1, 168.5, 170.5, 182.2, 183.6, and 271.2.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Doxylamine	5.58	271.2	167.2
106	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Ecgoninemethylester. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 200, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 4.5e5. The base peak is at m/z 200.2. Other labeled peaks include 65.0, 68.0, 69.0, 79.1, 82.1, 83.1, 91.1, 94.1, 96.1, 108.1, 119.1, 124.2, 135.2, 150.2, 154.2, 168.2, 182.2, 183.1, 183.6, 201.2, and 201.6.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Ecgoninemethylester	1	200.1	182.2

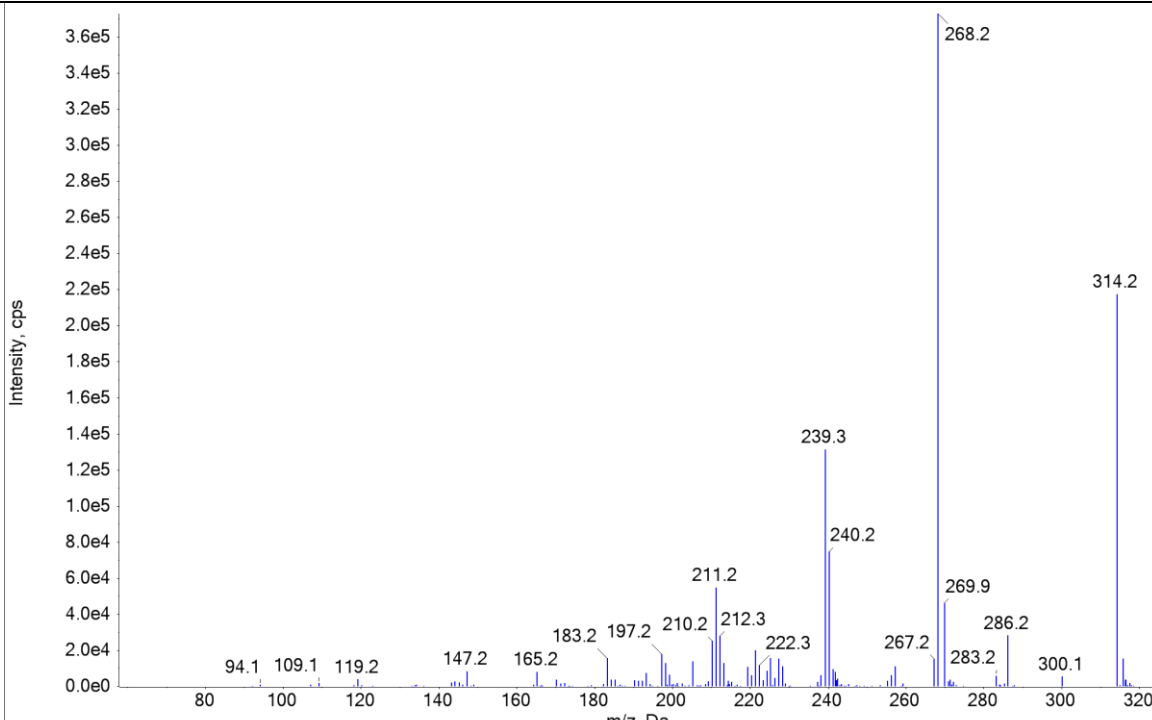
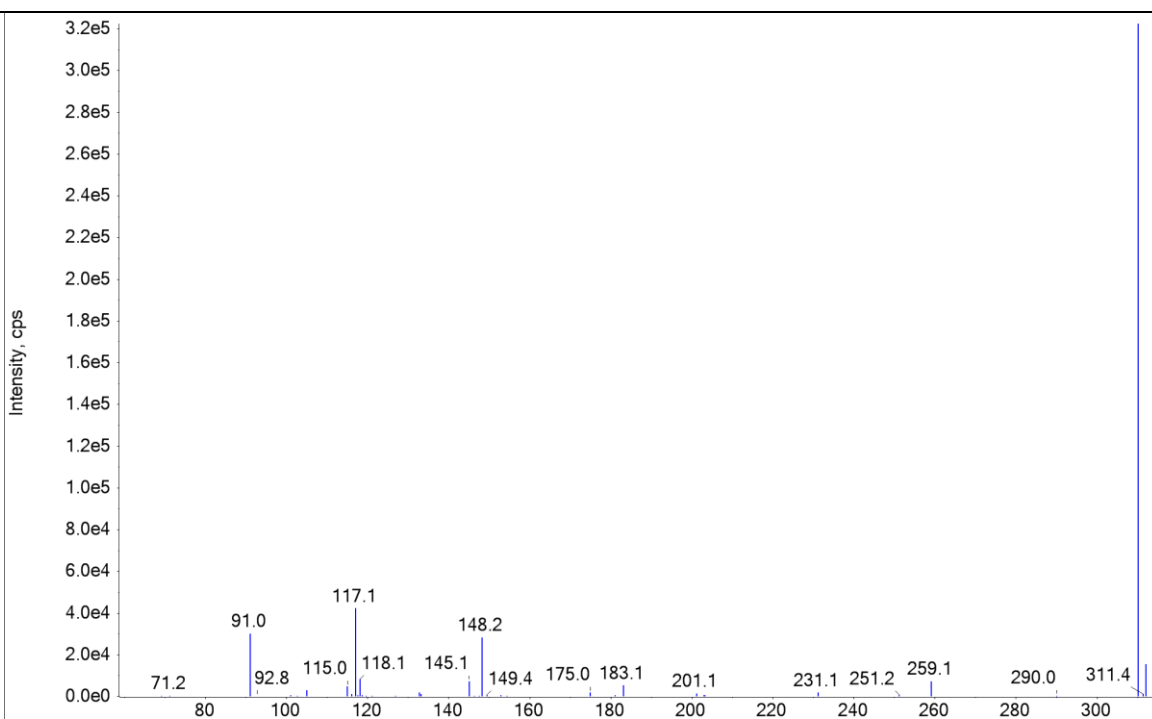
107	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	EDDP	6.71	278.2	234.2
108	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Enalapril	6.7	377.2	234.2

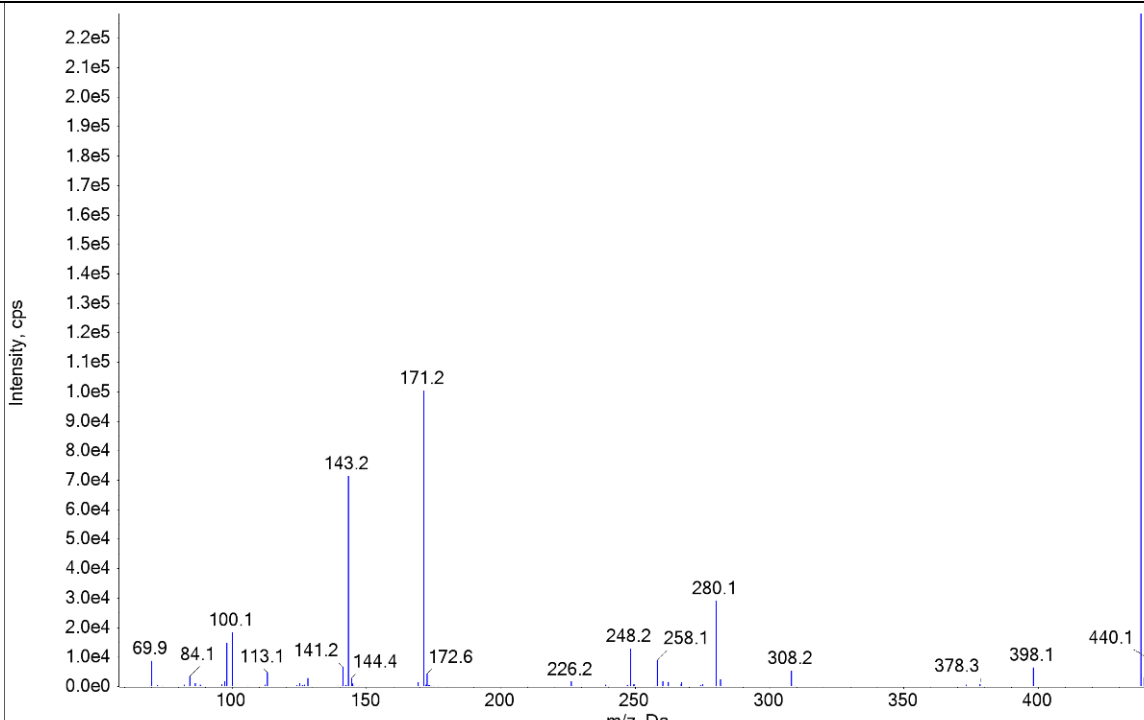
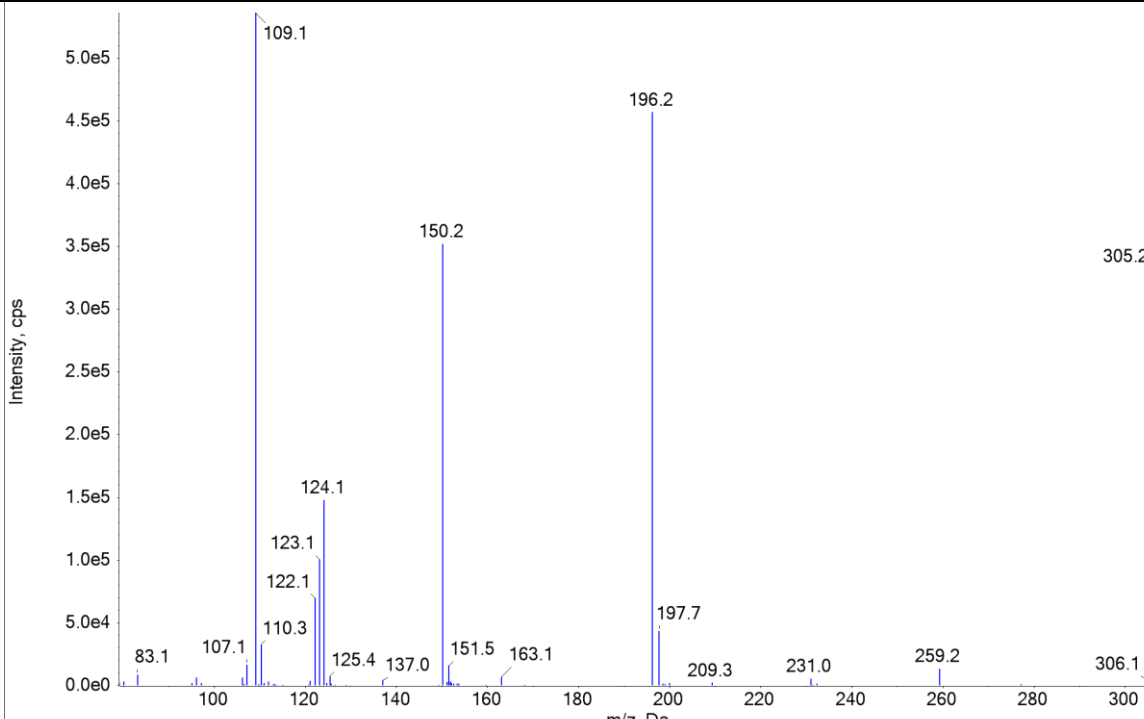
109	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Ephedrine	3.43	166.1	115.1
110	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Esmolol	5.6	296.2	145.1

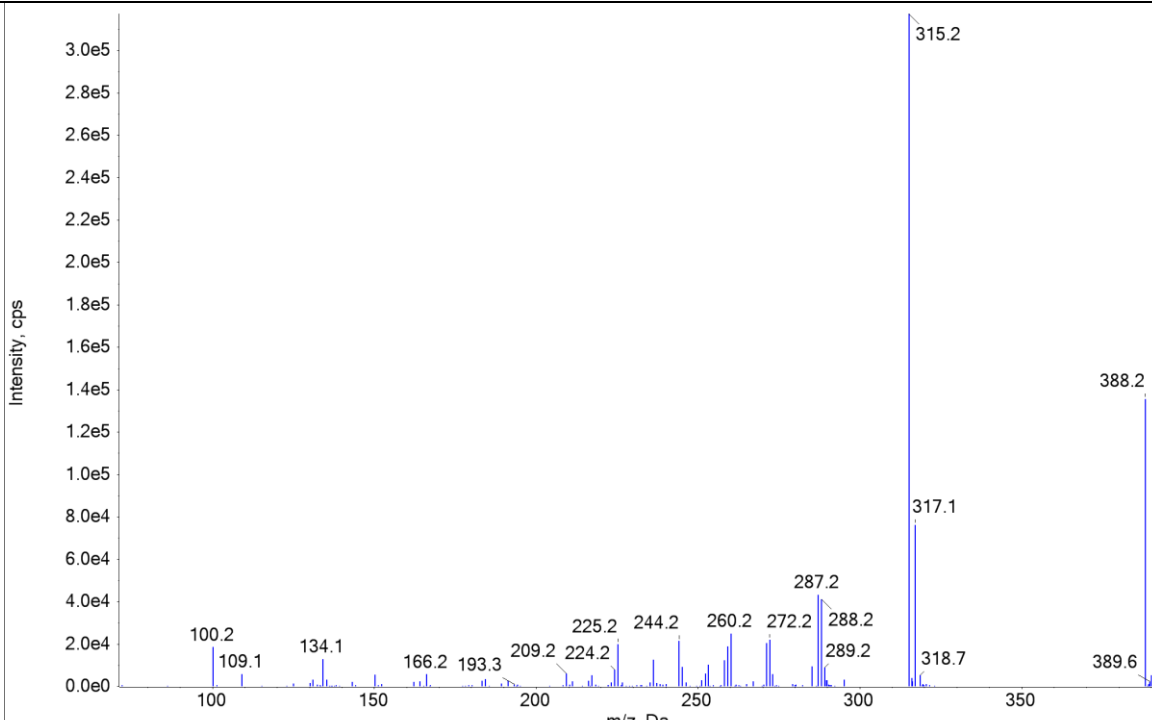
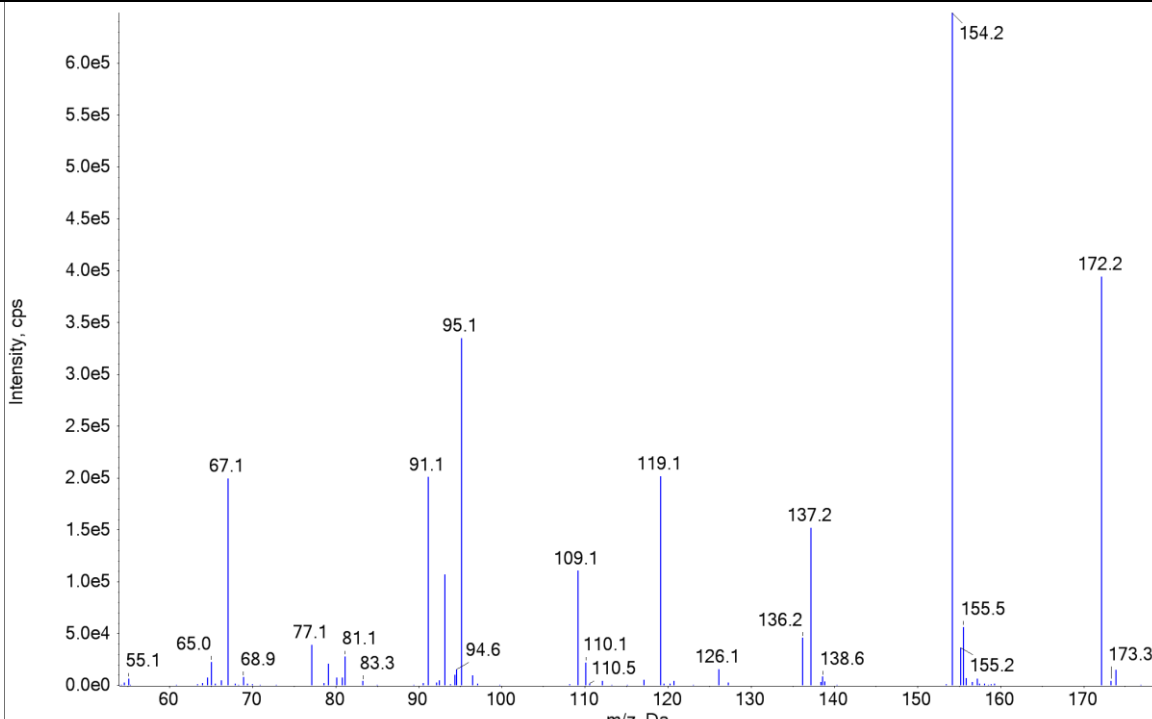
111	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Famotidine	3.67	338.1	189.1
112	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Fendiline	8.01	316.2	105.1

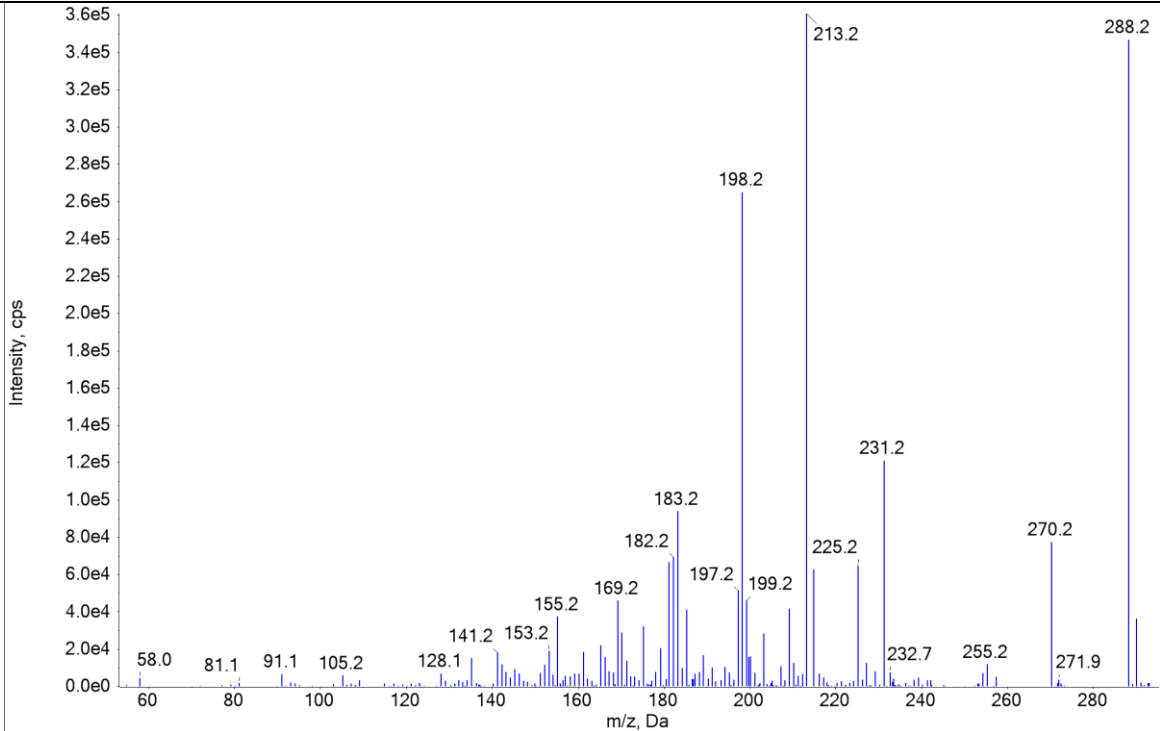
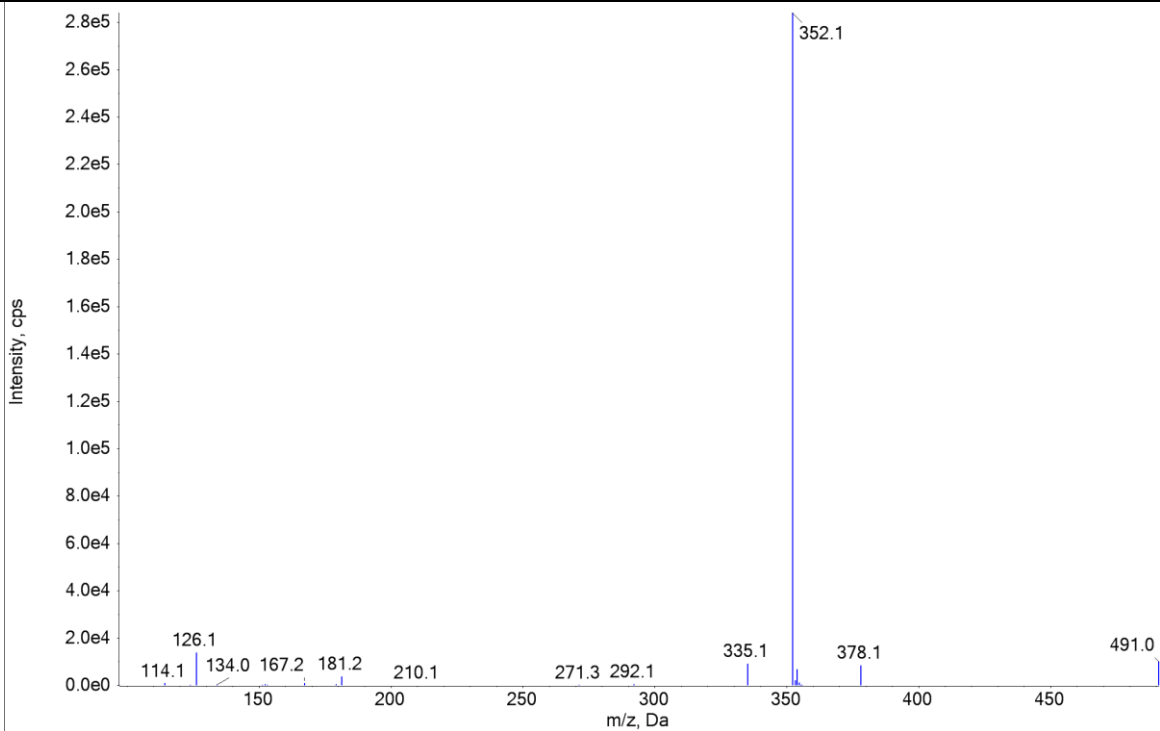
113	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Fenfluramine	6.08	232.1	159.1
114	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Fenspiride	5.26	261.1	105.1

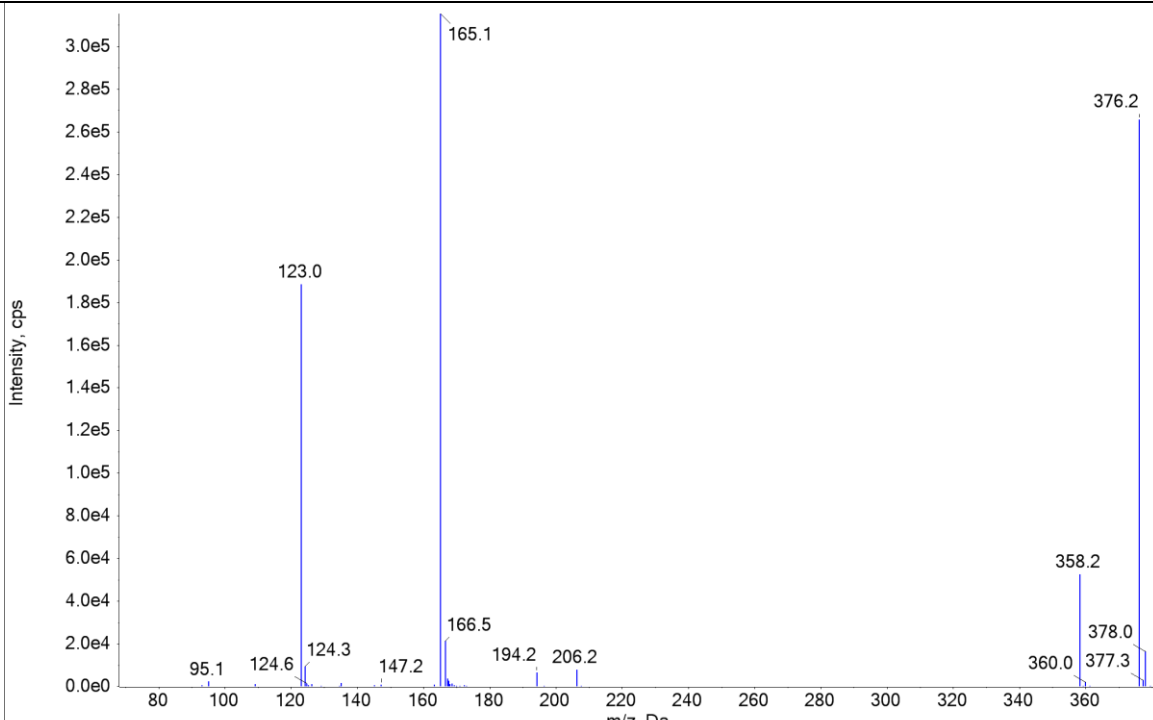
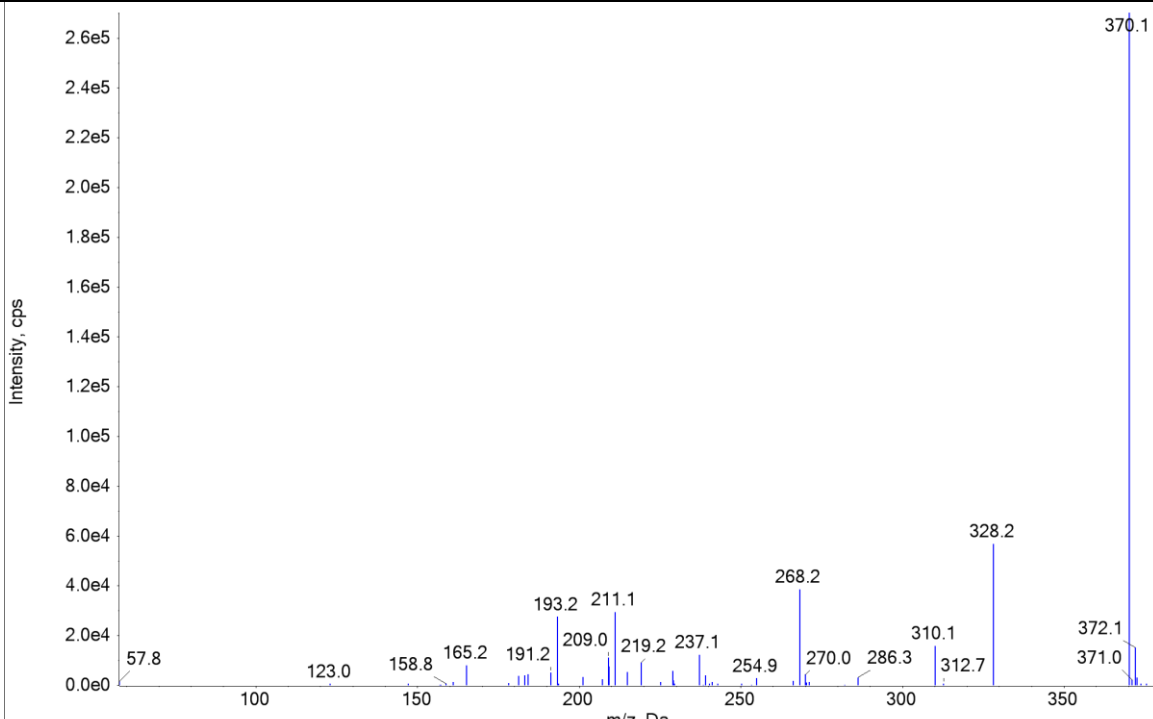
115	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Fenspiride-D5	5.26	266.1	110.1
116	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Fentanyl	7.04	337.2	105.1

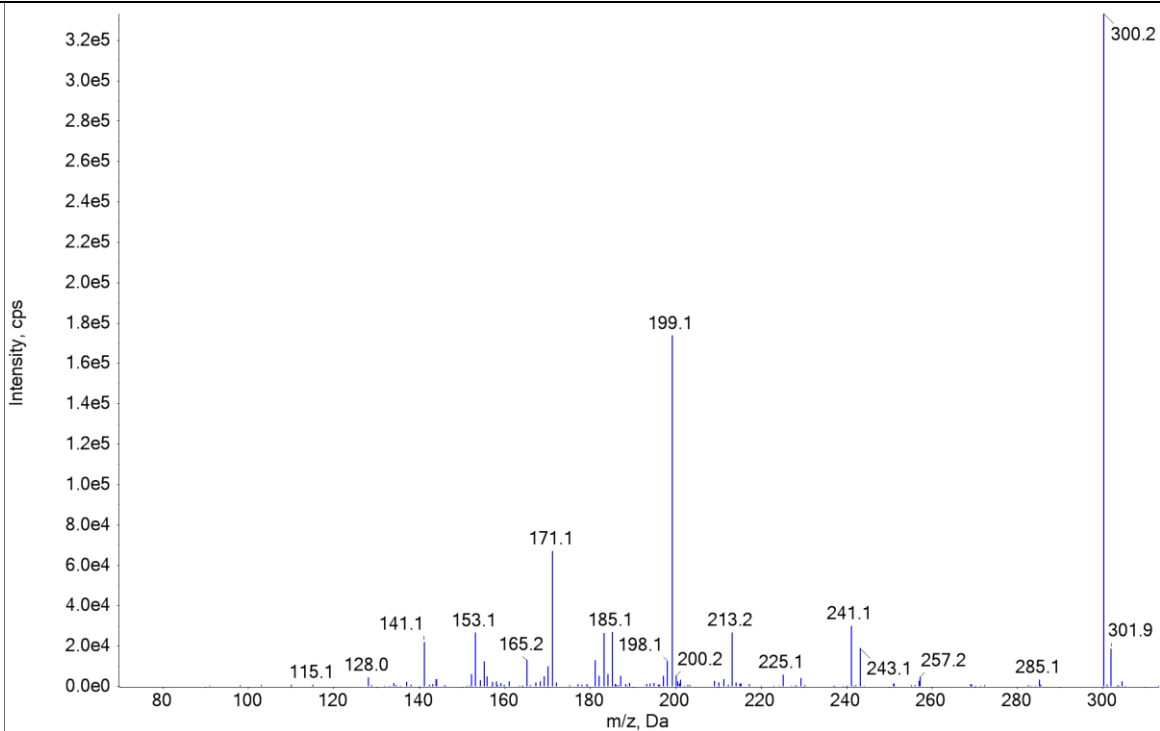
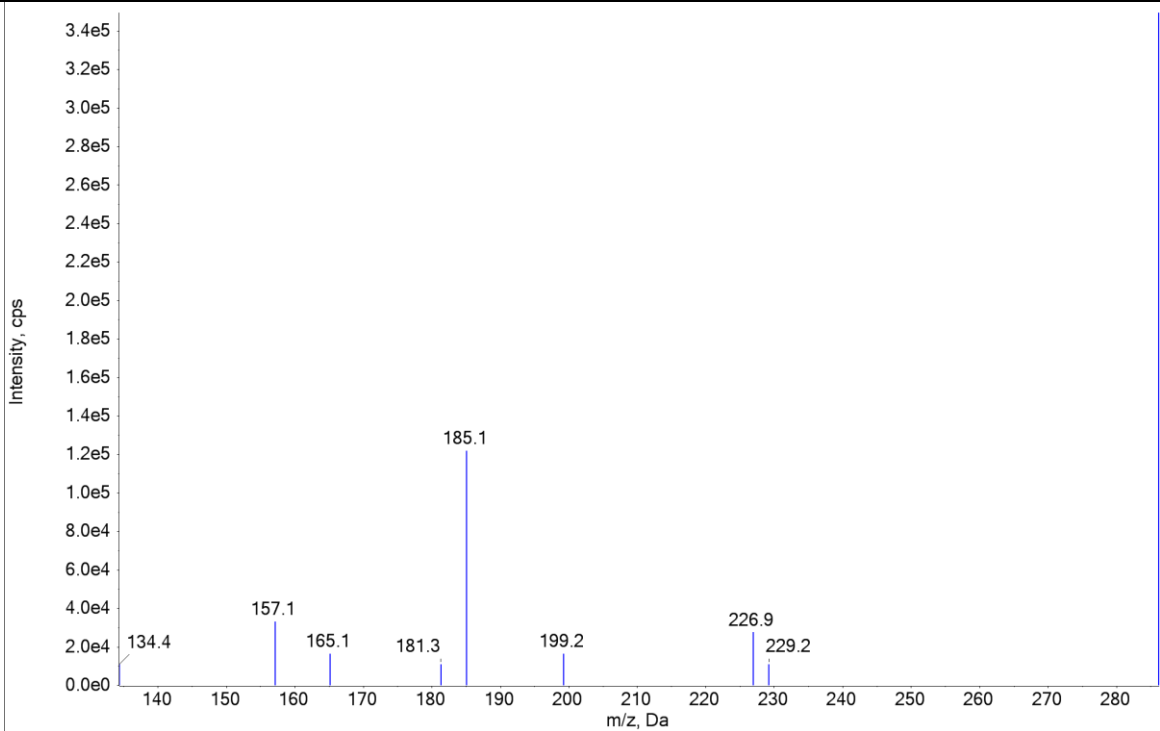
117	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Flunitrazepam	7.29	314.1	268.1
118	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Fluoxetine	7.57	310.1	148.2

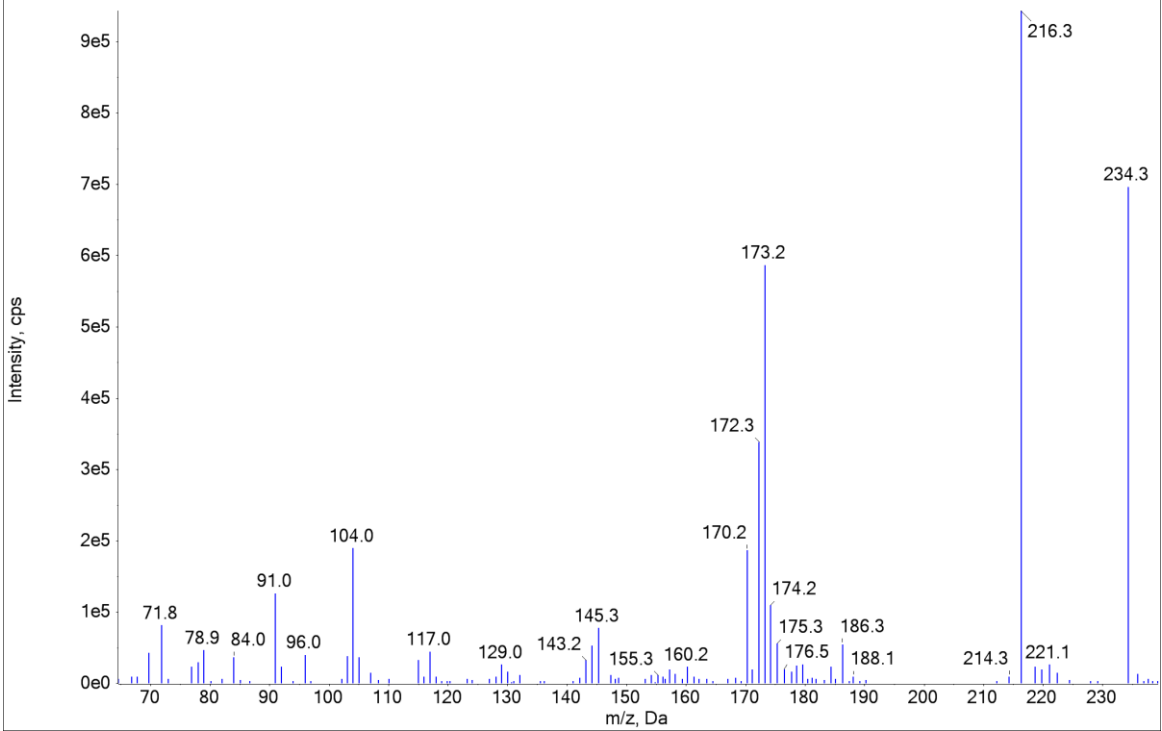
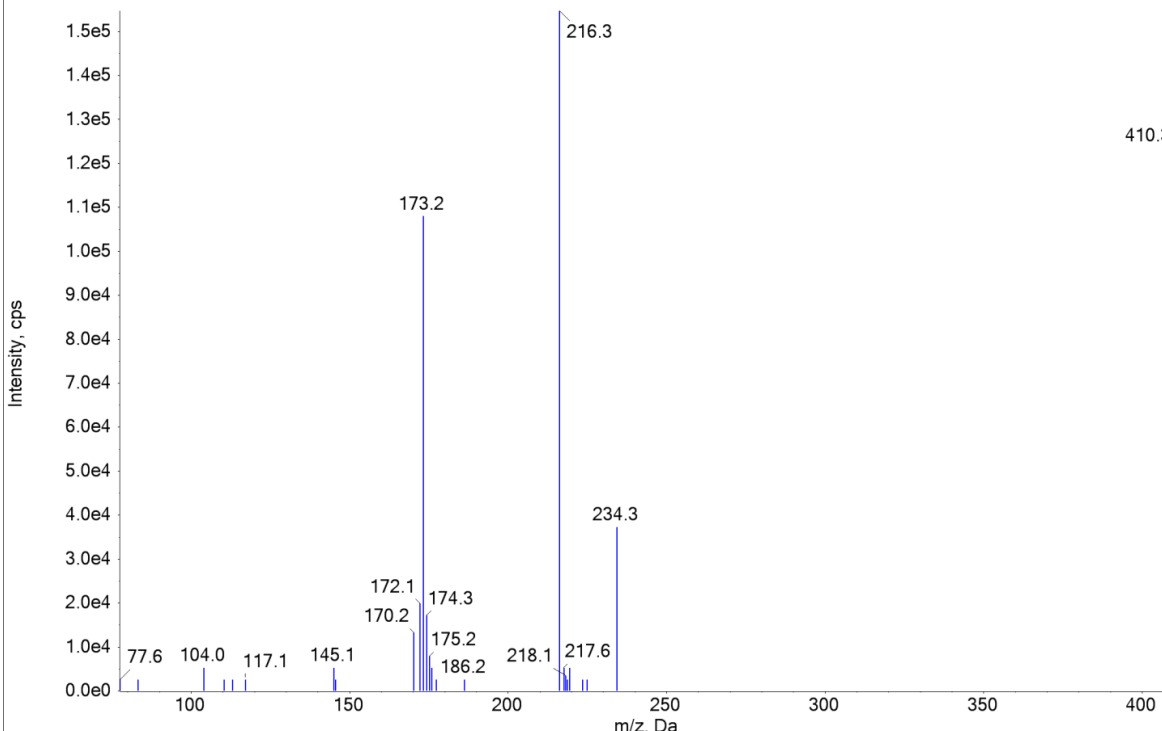
119	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Fluphenazine. The x-axis represents m/z (Da) from 0 to 450, and the y-axis represents intensity in counts per second (cps) from 0.0e0 to 2.2e5. The base peak is at m/z 438.2. Other labeled peaks include 69.9, 84.1, 100.1, 113.1, 141.2, 144.4, 172.6, 226.2, 248.2, 258.1, 308.2, 378.3, 398.1, and 440.1.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Fluphenazine	8.7	438.2	171.2
120	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Flupirtine. The x-axis represents m/z (Da) from 0 to 320, and the y-axis represents intensity in counts per second (cps) from 0.0e0 to 5.0e5. The base peak is at m/z 109.1. Other labeled peaks include 83.1, 107.1, 110.3, 122.1, 123.1, 124.1, 125.4, 137.0, 151.5, 163.1, 196.2, 197.7, 209.3, 231.0, 259.2, 305.2, and 306.1.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Flupirtine	6.33	305.2	196.2

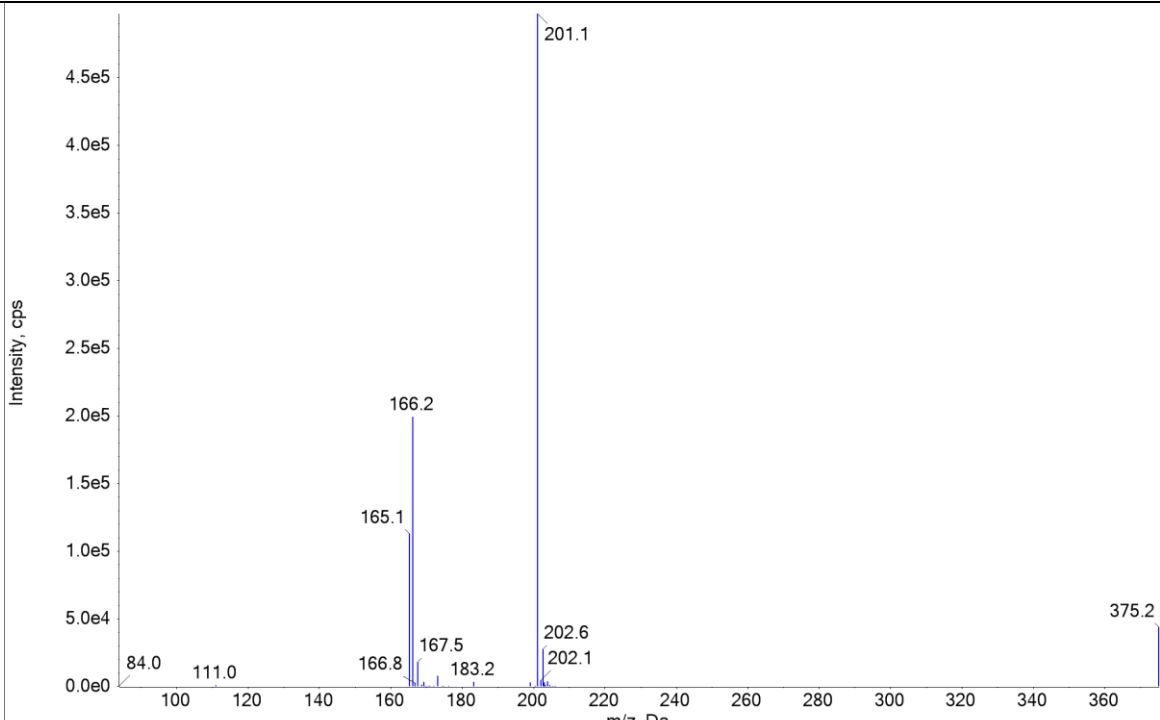
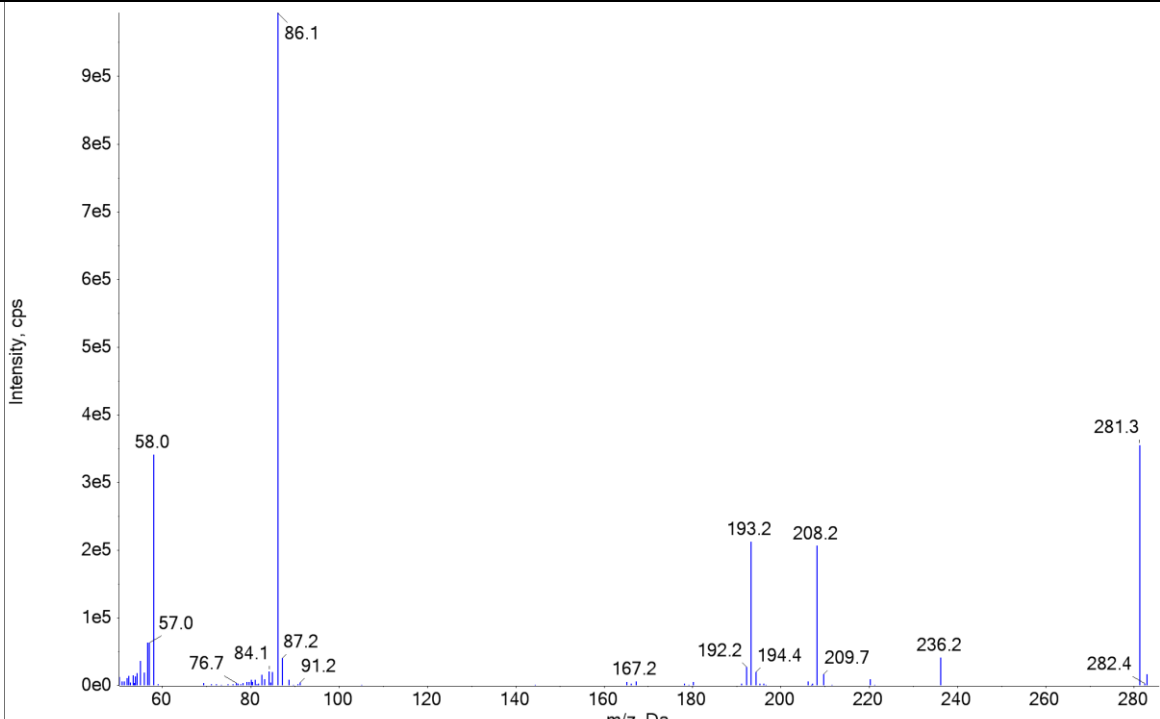
121	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Flurazepam	7.05	388.1	315.1
122	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Gabapentin	2.17	172.1	137

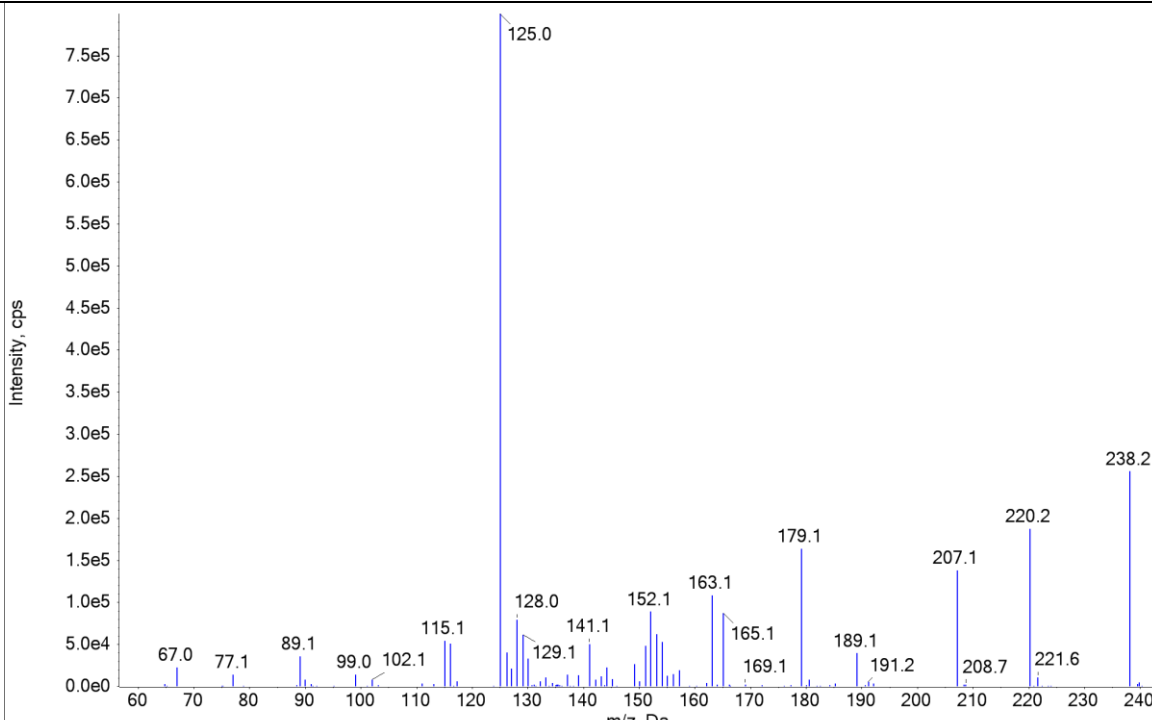
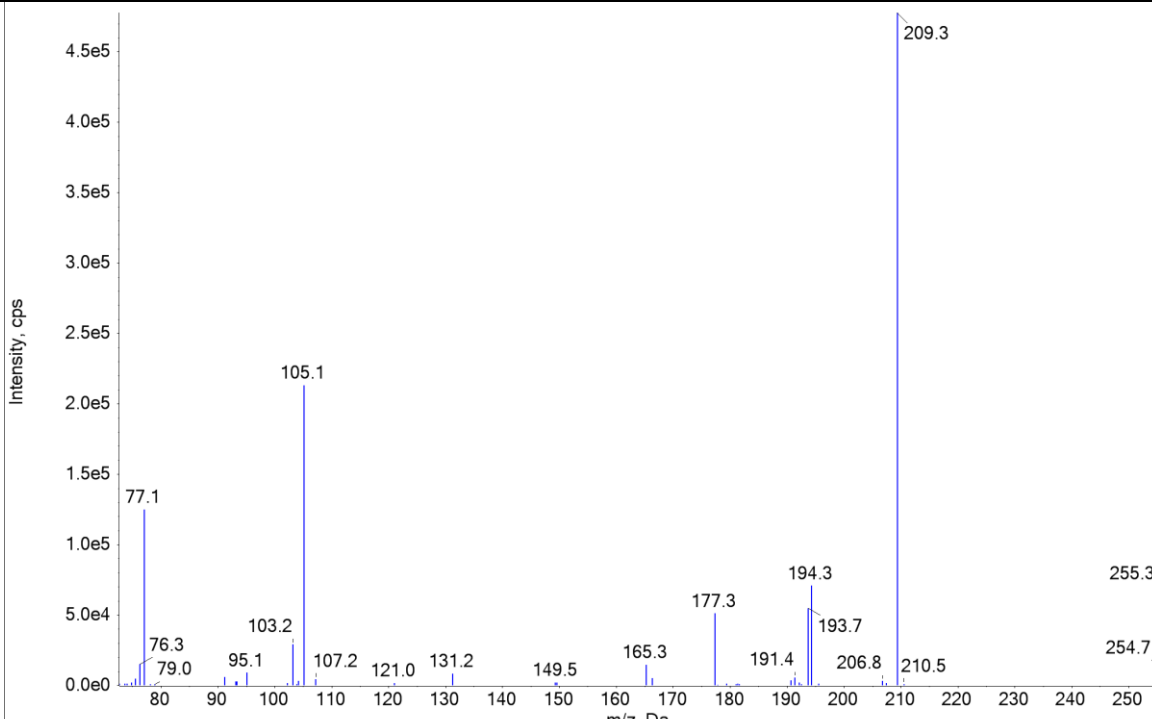
123	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Galantamine	4.82	288.2	213.2
124	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Glimepiride	8.56	491.2	352.1

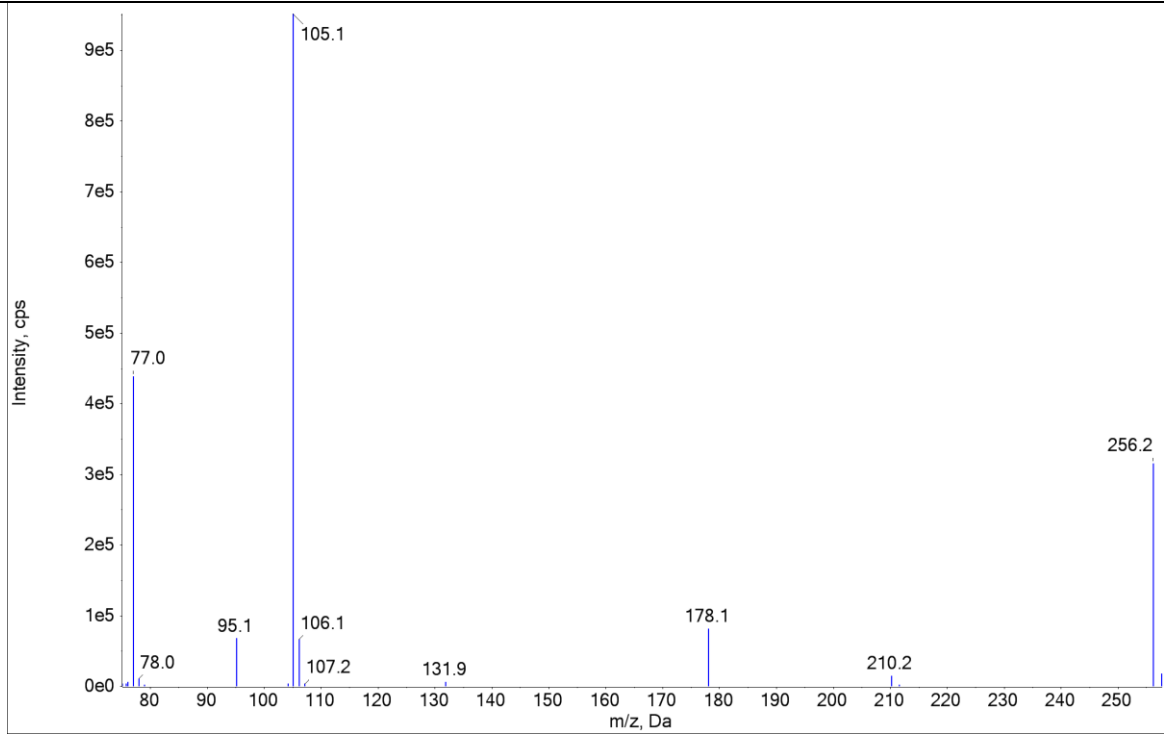
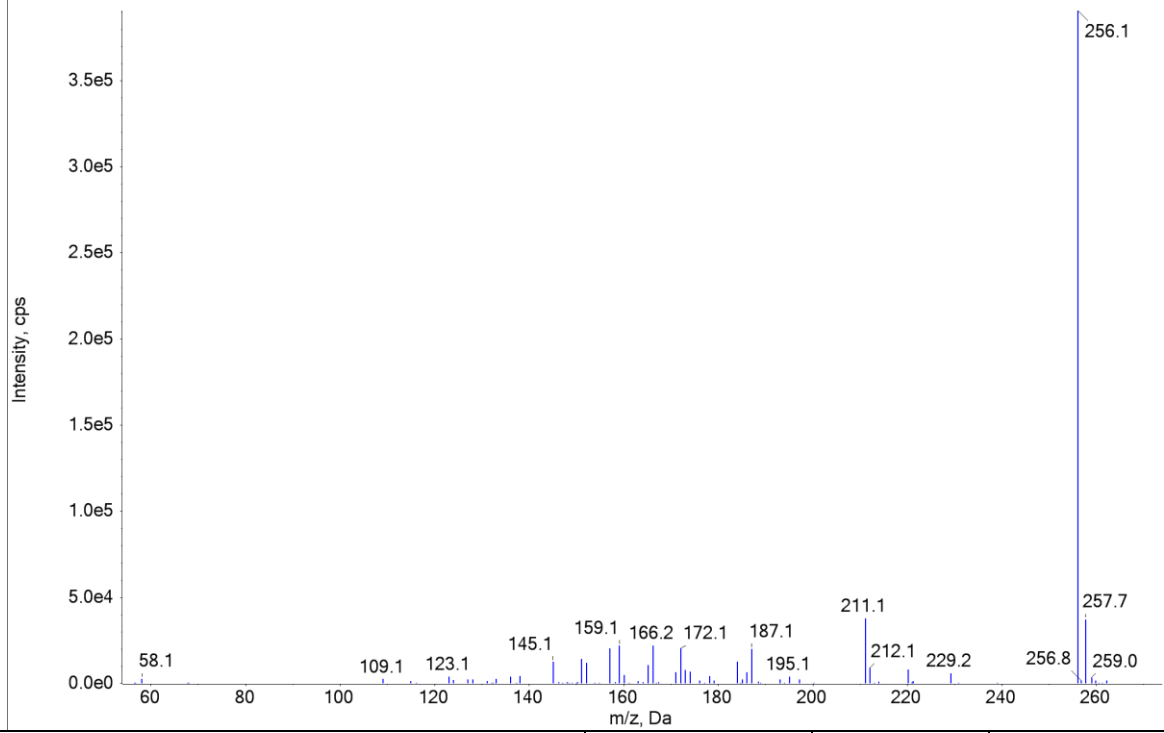
125	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Haloperidol. The x-axis represents m/z (Da) from 80 to 360, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 3.0e5. The base peak is at m/z 165.1. Other labeled peaks include m/z 95.1, 123.0, 124.3, 147.2, 166.5, 194.2, 206.2, 358.2, 360.0, 376.2, 377.3, and 378.0.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Haloperidol	7.22	376.1	123.1
126	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Heroin. The x-axis represents m/z (Da) from 100 to 350, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 2.6e5. The base peak is at m/z 370.1. Other labeled peaks include m/z 57.8, 123.0, 158.8, 165.2, 191.2, 193.2, 209.0, 211.1, 219.2, 237.1, 254.9, 268.2, 270.0, 286.3, 310.1, 312.7, 328.2, 371.0, 372.1, and 370.1.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Heroin	5.7	370.2	165

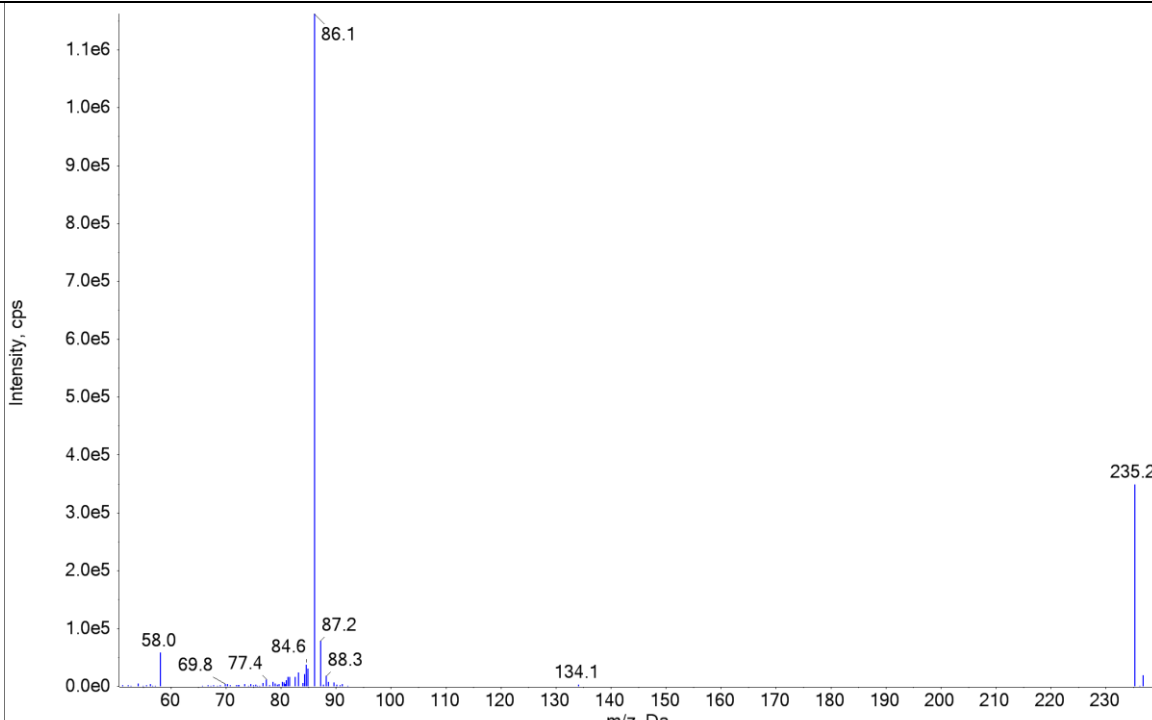
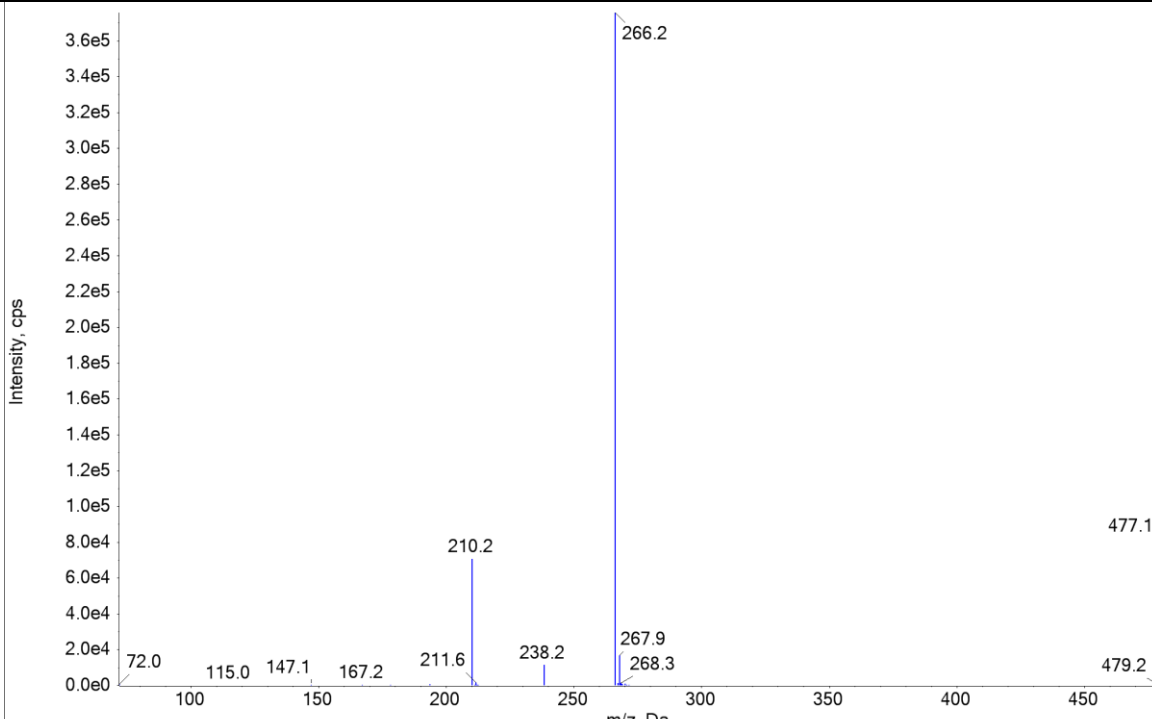
127	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Hydrocodone	4.52	300.2	199.1
128	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Hydromorphone	3.39	286.1	185.1

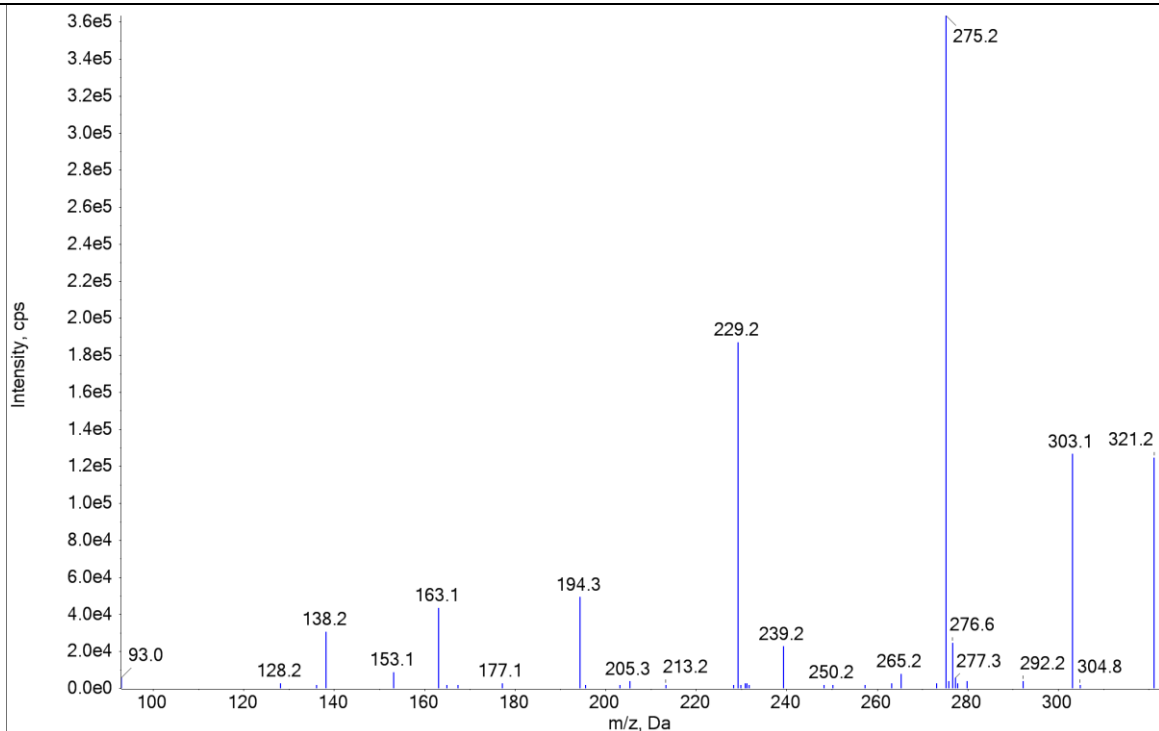
129	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Hydrox-alpha-PVP	5.69	234.2	216.1
130	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Hydroxy-alpha-PVP glucuronide	4.68	410.1	216

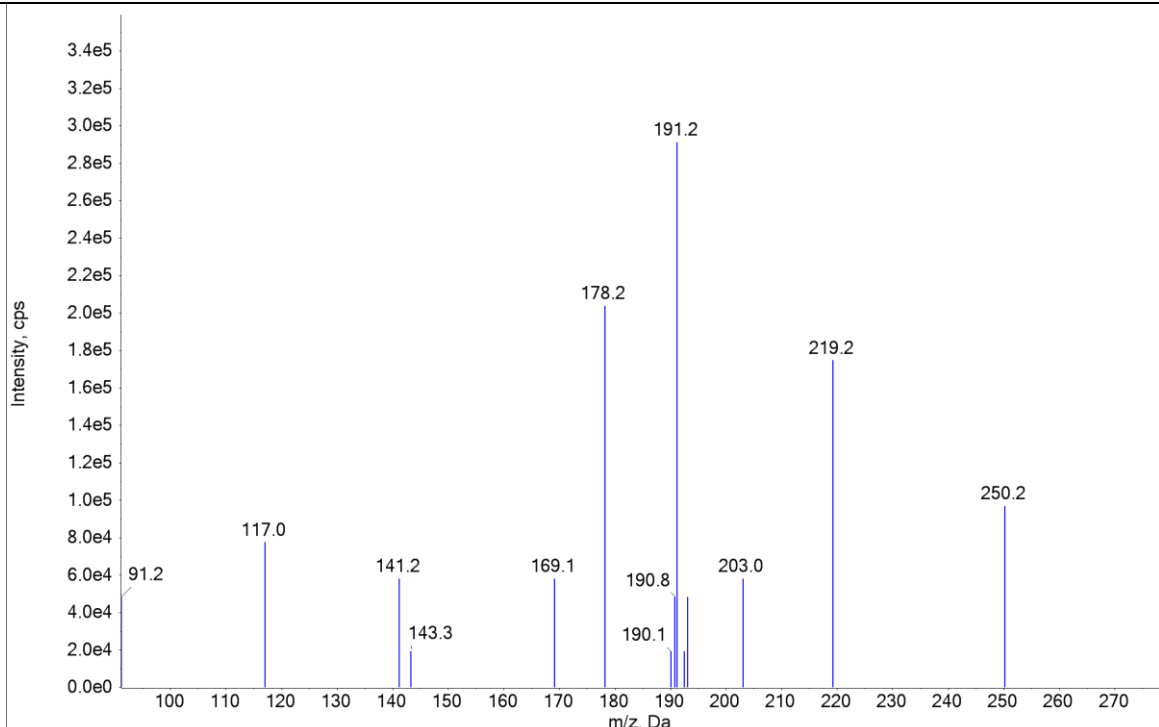
131	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Hydroxyzine	8.71	375.2	201.1
132	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Imipramine	7.34	281.2	86.1

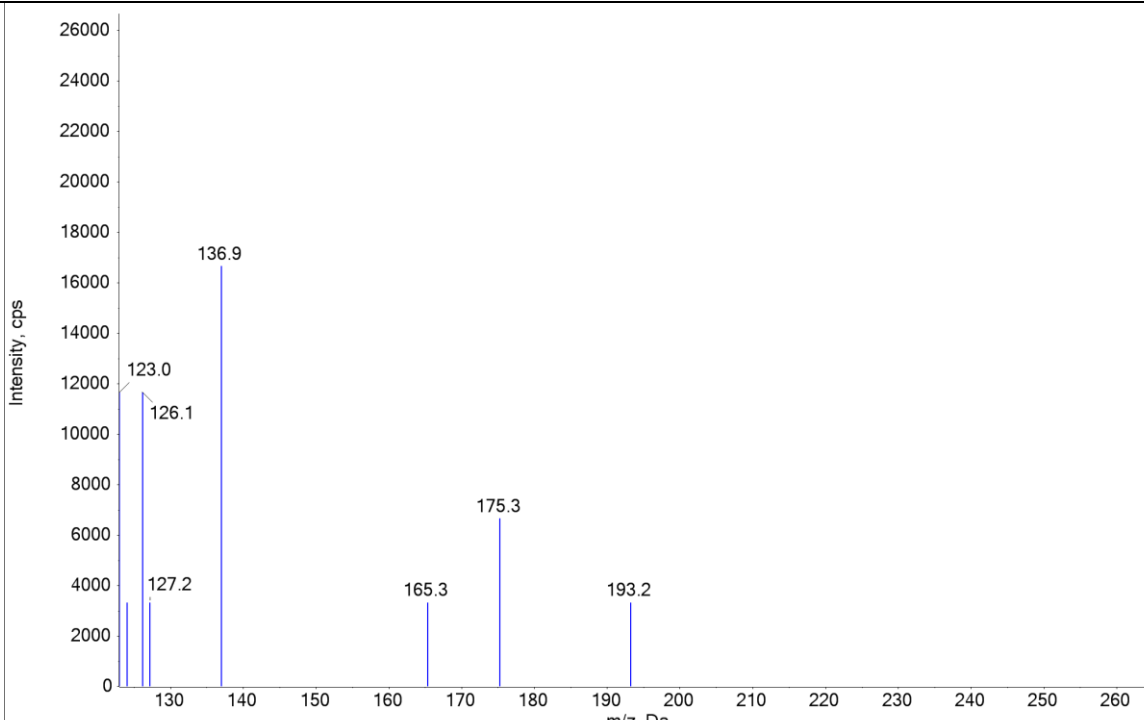
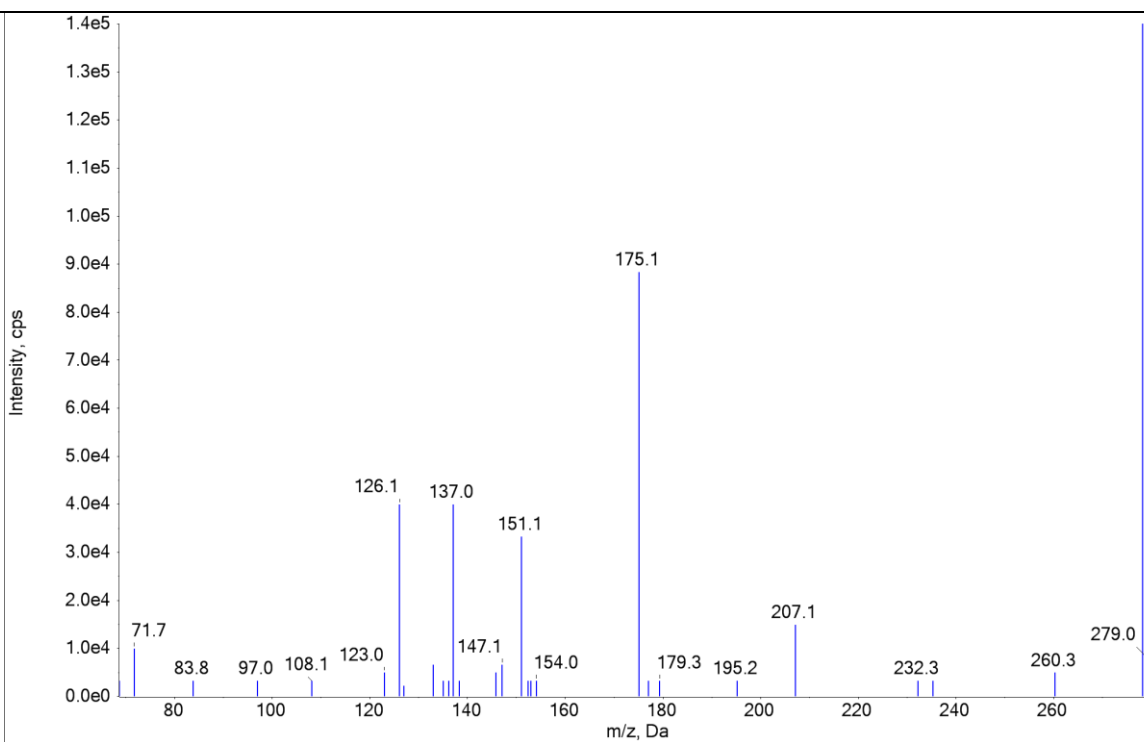
133	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Ketamine. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 240, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 7.5e5. The base peak is at m/z 125.0. Other labeled peaks include 67.0, 77.1, 89.1, 99.0, 102.1, 115.1, 128.0, 129.1, 141.1, 152.1, 163.1, 165.1, 169.1, 179.1, 189.1, 191.2, 207.1, 208.7, 220.2, 221.6, and 238.2.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Ketamine	6.32	238.1	125
134	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Ketoprofen. The x-axis represents m/z (Da) from 80 to 250, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 4.5e5. The base peak is at m/z 209.3. Other labeled peaks include 76.3, 77.1, 79.0, 95.1, 103.2, 105.1, 107.2, 121.0, 131.2, 149.5, 165.3, 177.3, 191.4, 193.7, 194.3, 206.8, 210.5, 254.7, and 255.3.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Ketoprofen	6.15	255.1	105

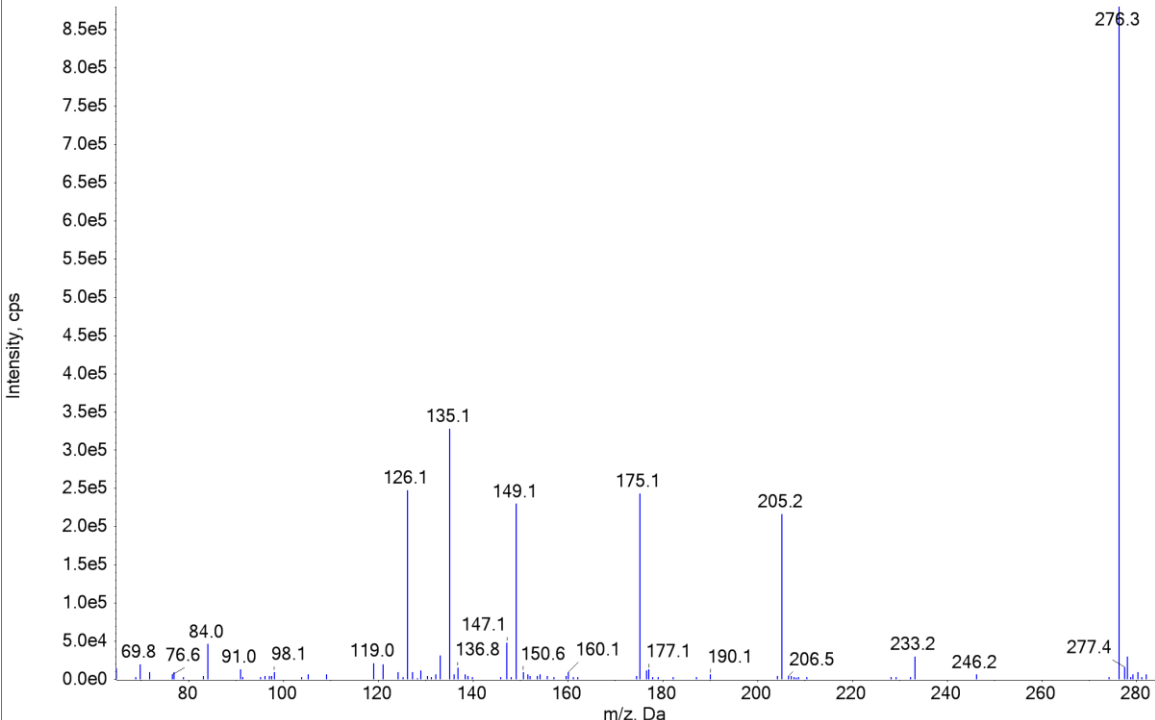
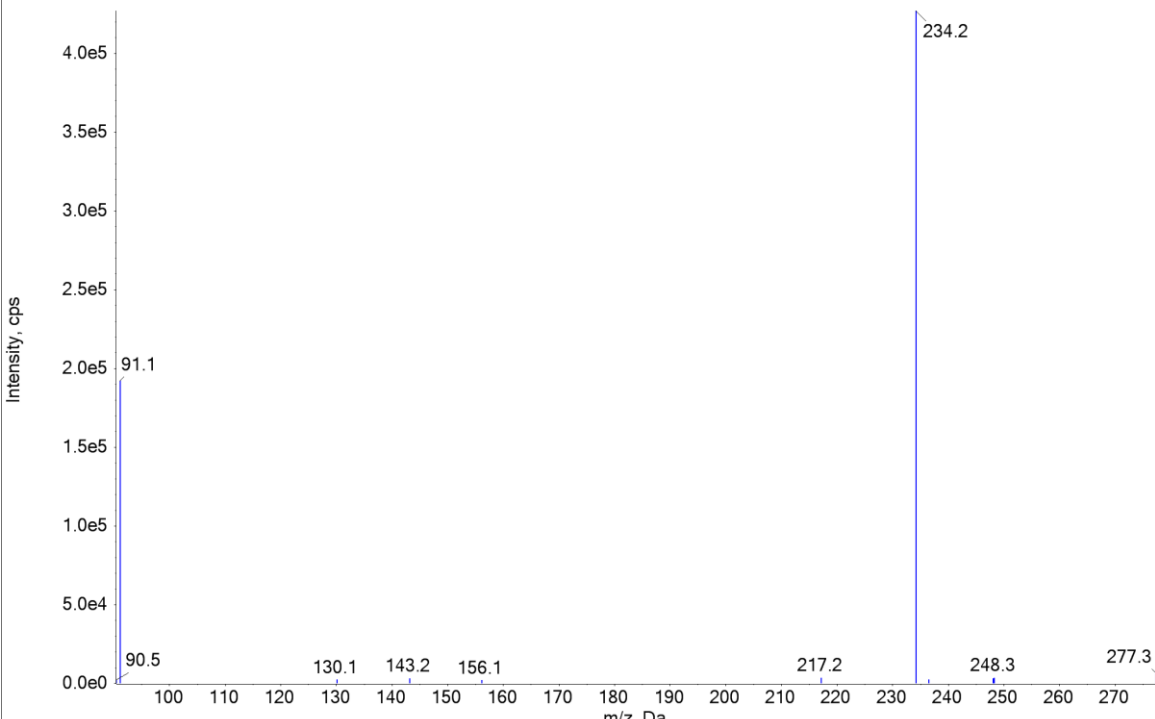
135	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Ketorolac	5.35	256.1	105.1
136	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Lamotrigine	5.31	256.0	211.1

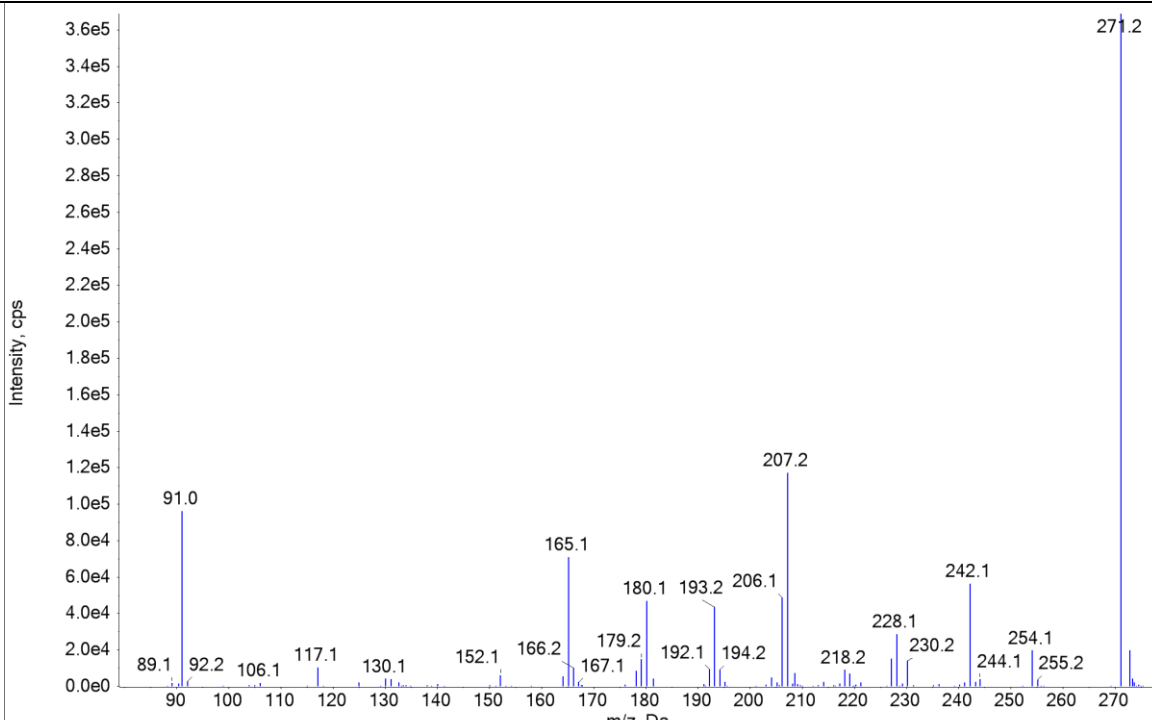
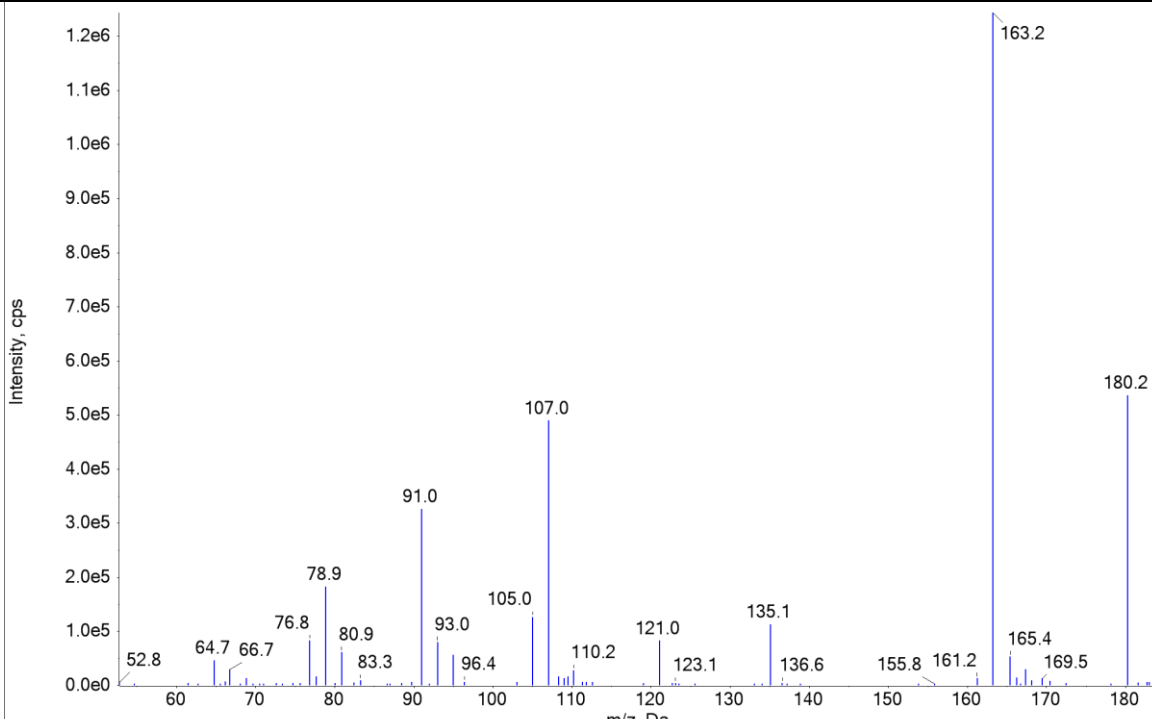
137	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Lidocaine. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 230, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 1.1e6. The base peak is at m/z 86.1. Other labeled peaks include m/z 58.0, 69.8, 77.4, 84.6, 87.2, 88.3, 134.1, and 235.2.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Lidocaine	6.3	235.2	86.1
138	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Loperamide. The x-axis represents m/z (Da) from 100 to 450, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 3.6e5. The base peak is at m/z 266.2. Other labeled peaks include m/z 72.0, 115.0, 147.1, 167.2, 210.2, 211.6, 238.2, 267.9, 268.3, 477.1, and 479.2.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Loperamide	8.03	477.2	266.2

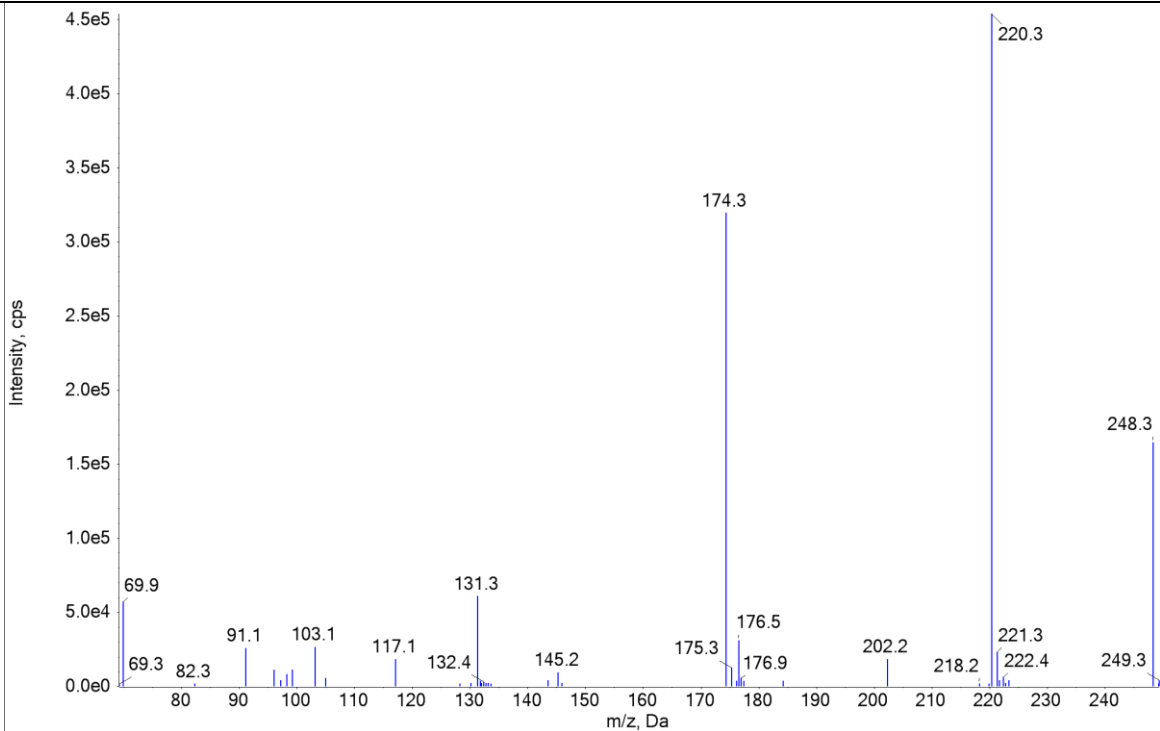
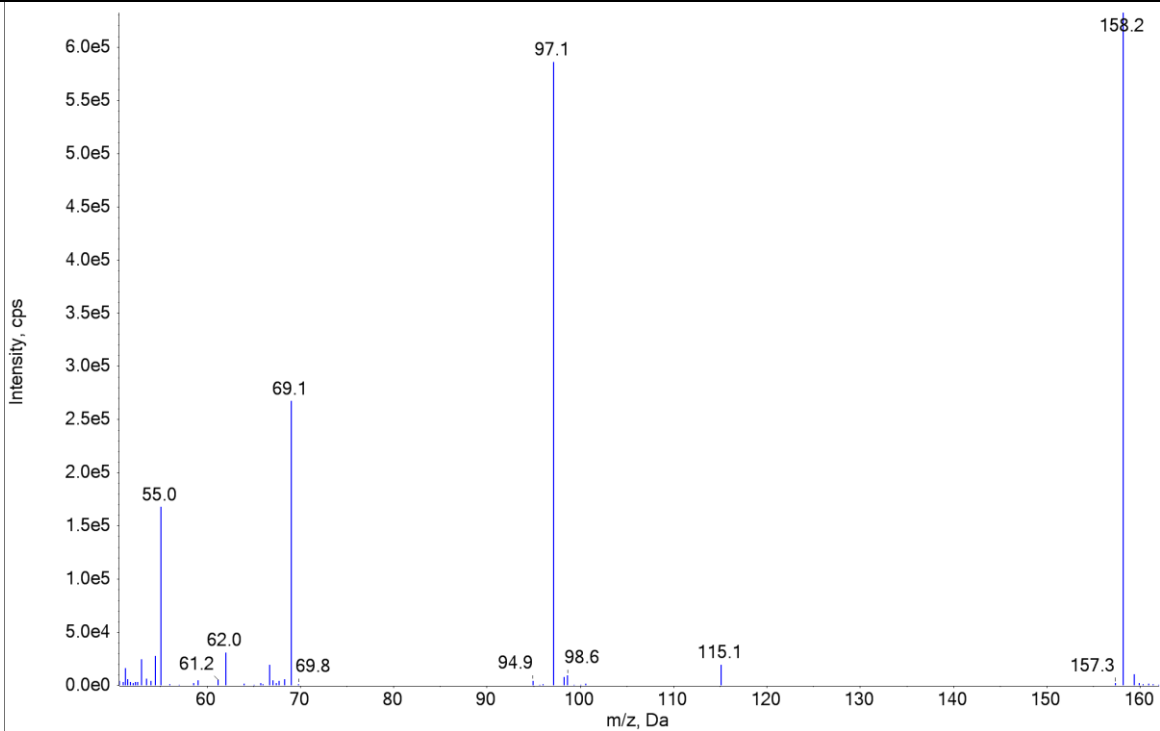
139	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Lorazepam	7.31	321.0	275.1

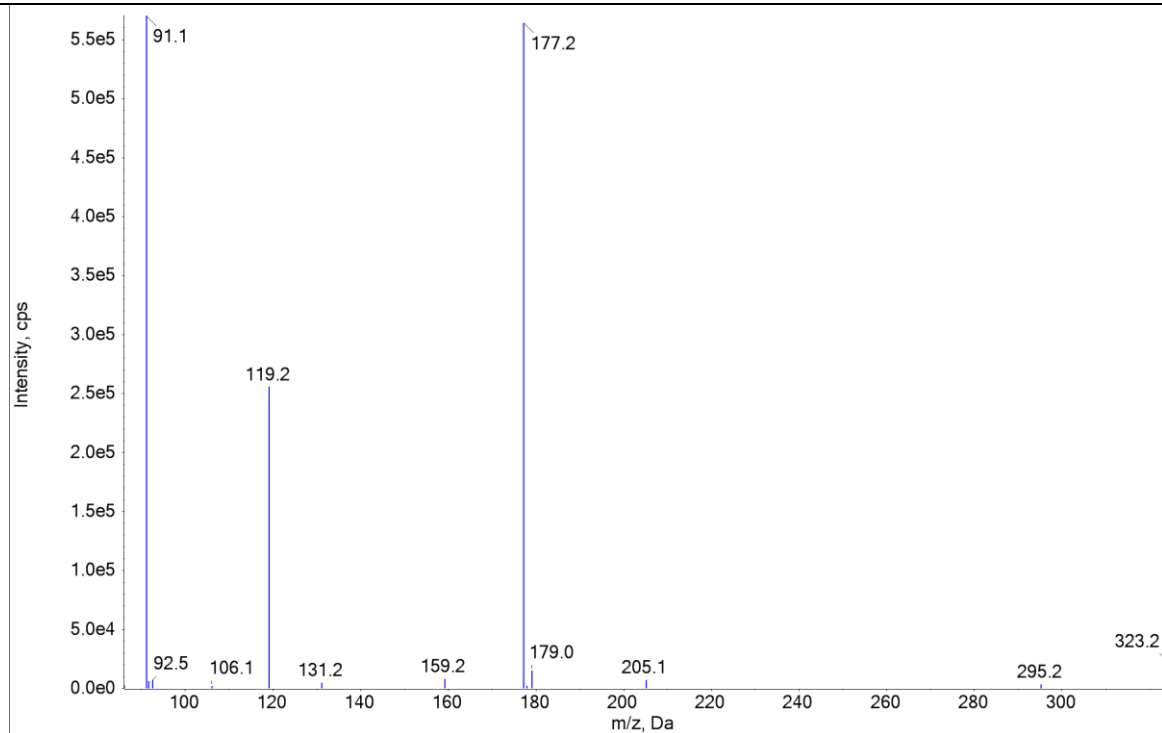
140	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Maprotiline	7.35	278.2	250.2

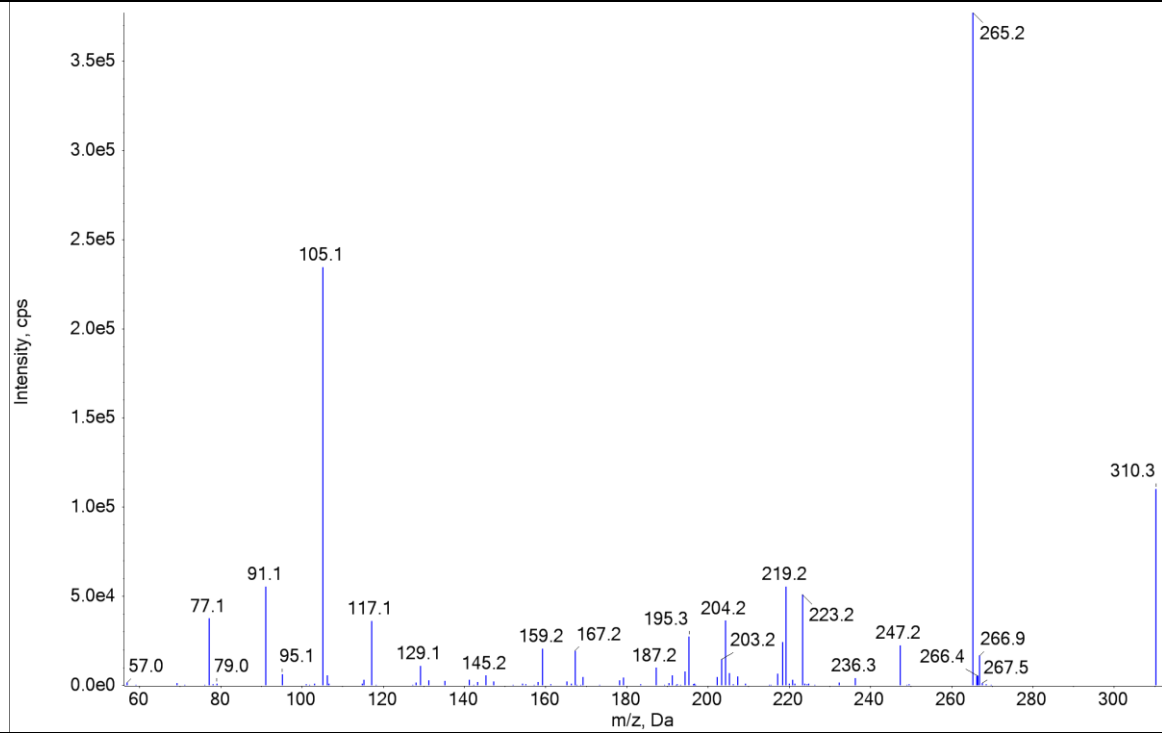
141	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	MDPV- metabolite (demethylenyl-)	3.54	264.2	126.2
142	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	MDPV- metabolite (demethylenylmethyl-)	3.76	278.2	126.2

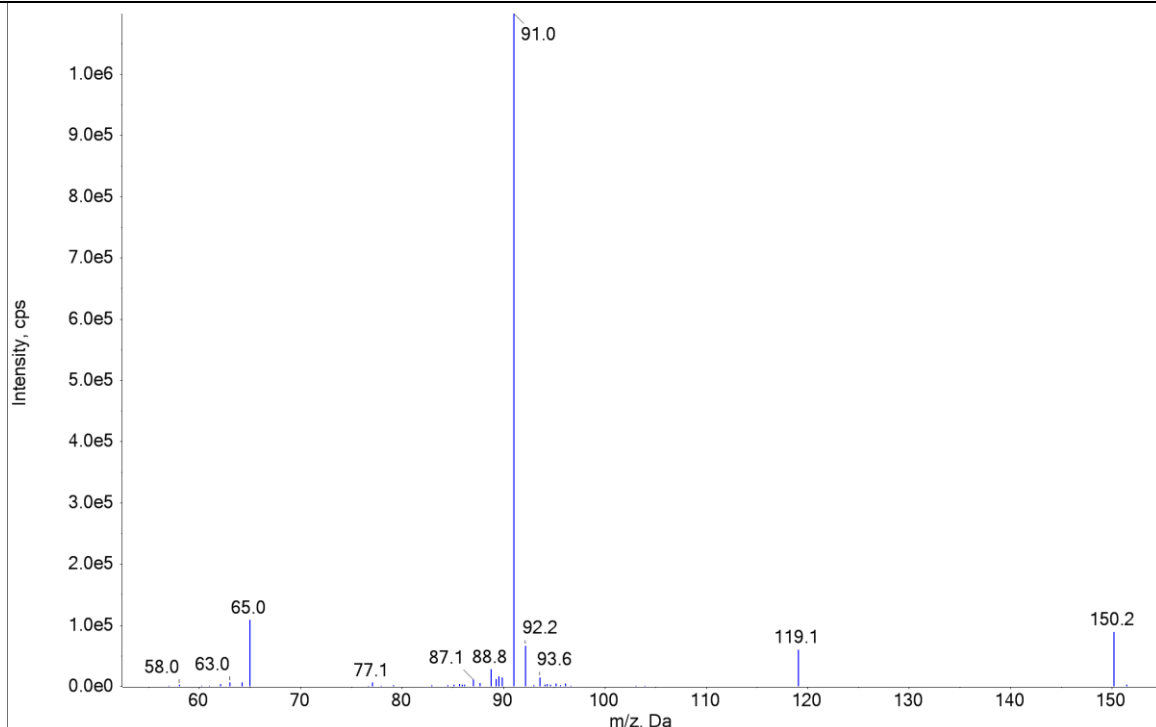
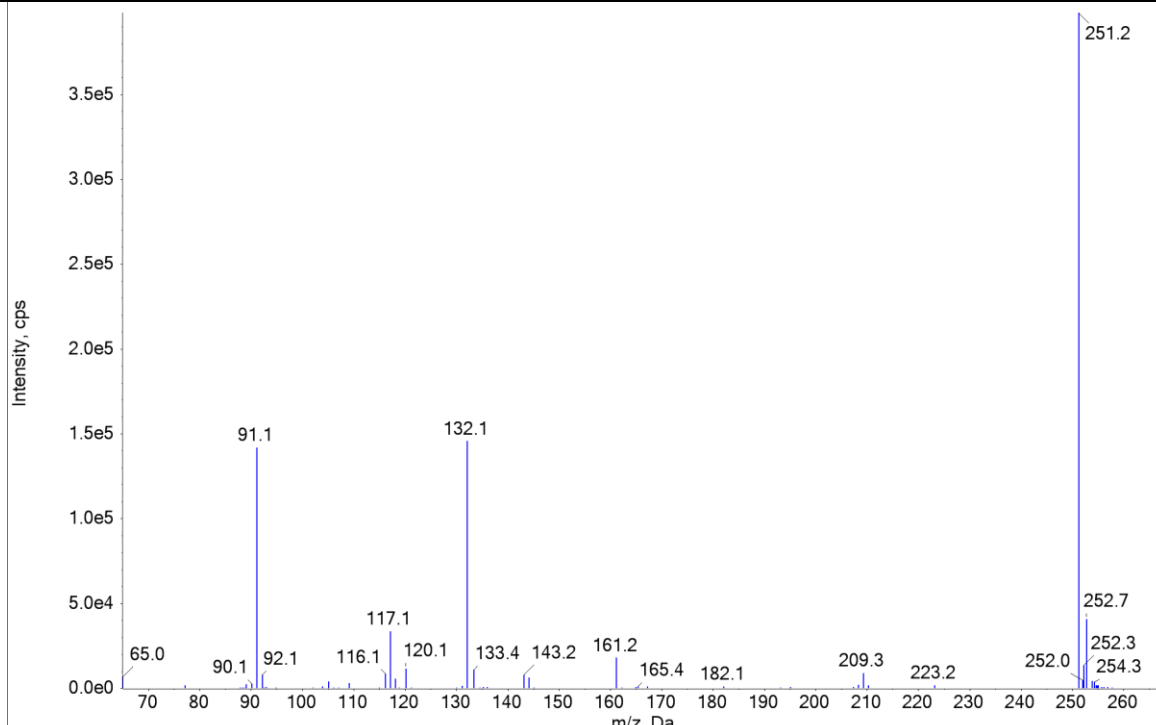
143	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	MDPV-nativ	5.95	276.2	126.2
144	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Mebhydrolin (Diazoline)	7.15	277.1	234.2

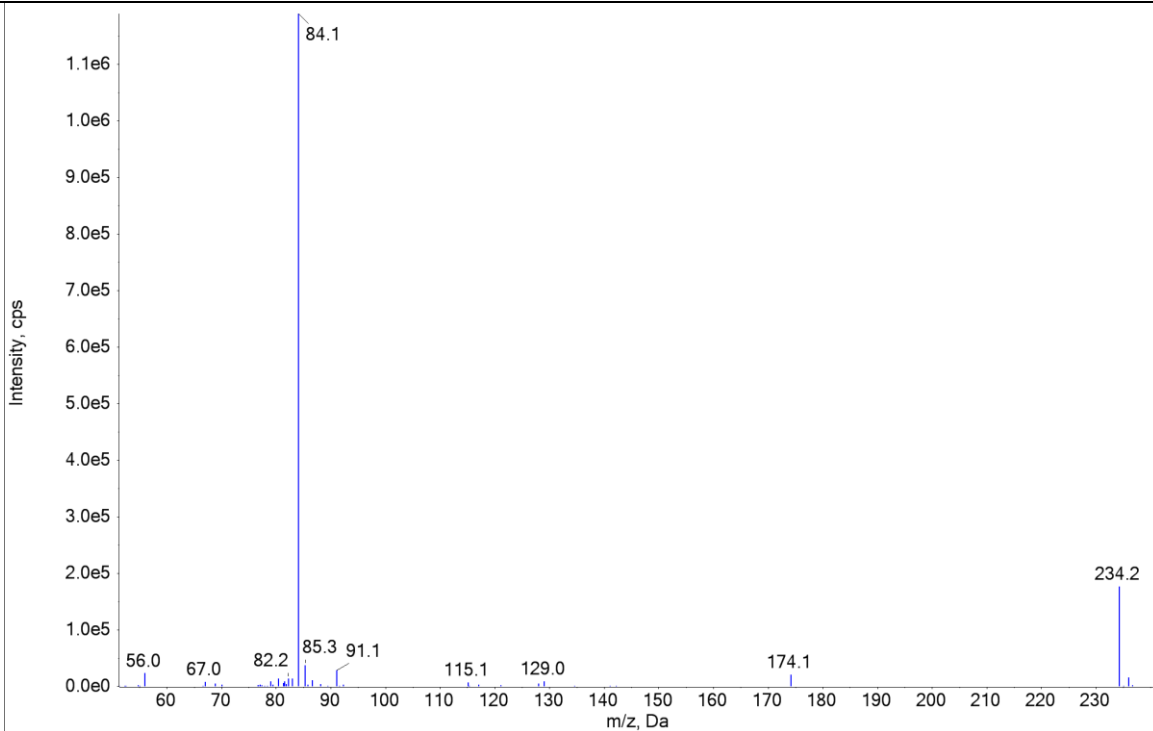
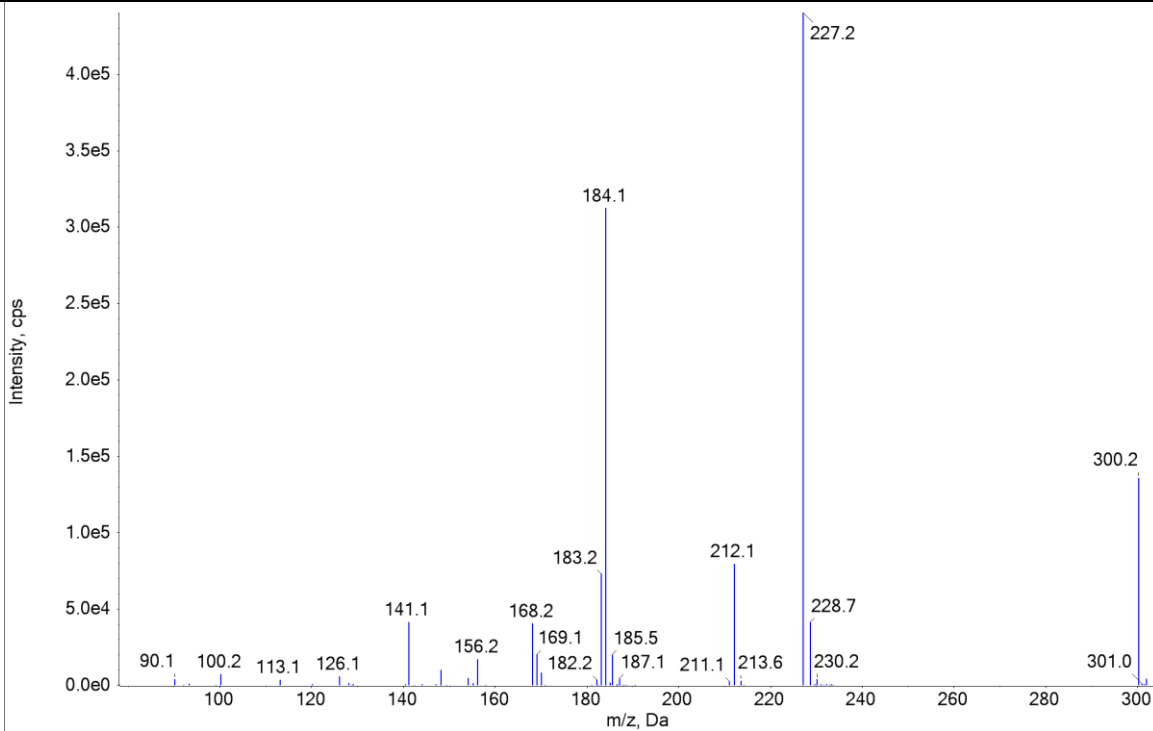
145	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Medazepam	8.42	271.1	91
146	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Memantine	5.56	180.2	163.2

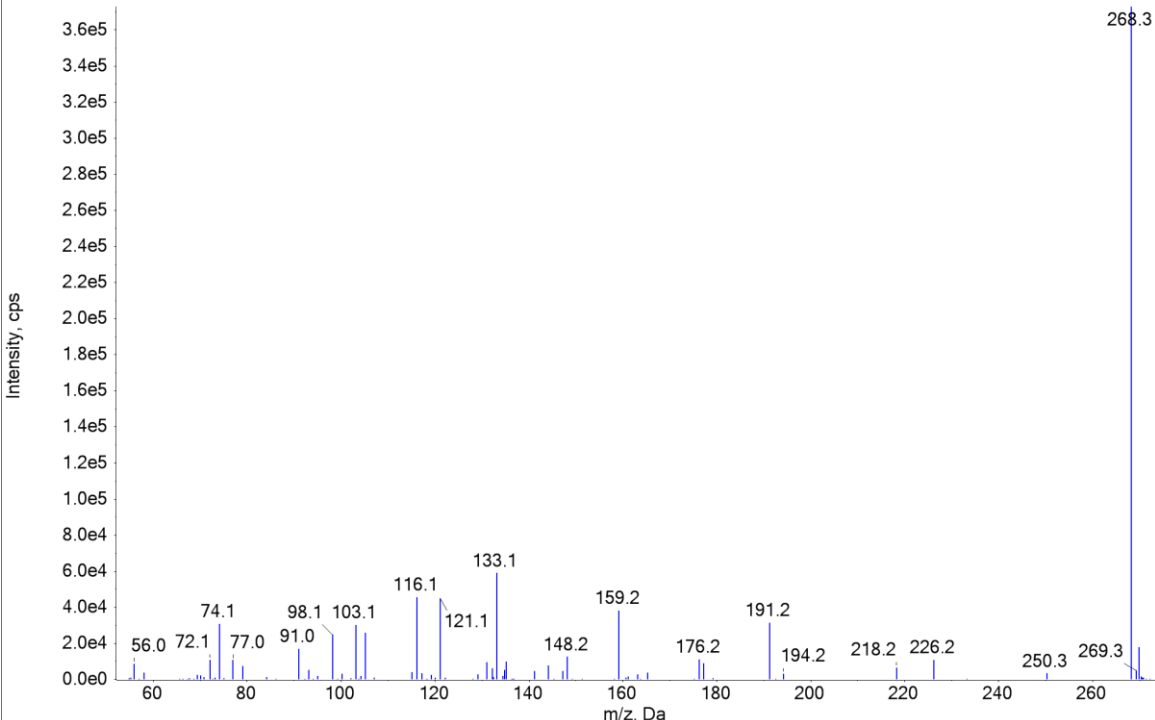
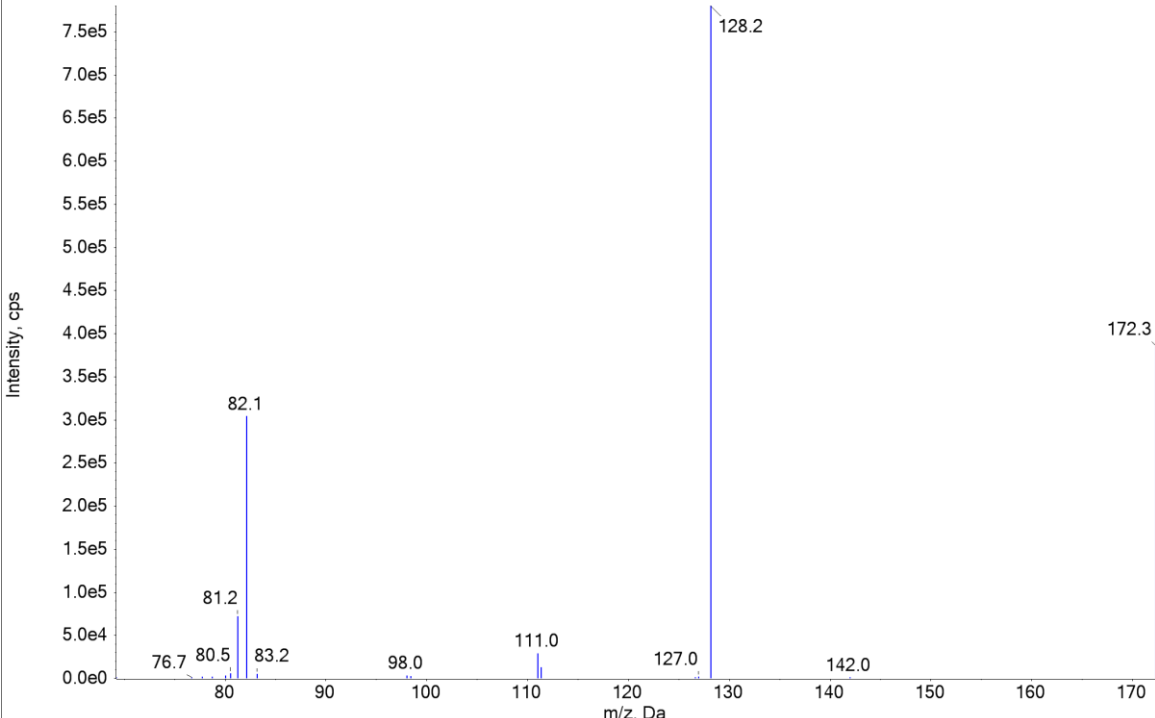
147	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Meperidine	5.32	543.2	367.1
148	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Meprobamate	5.68	219.1	158.2

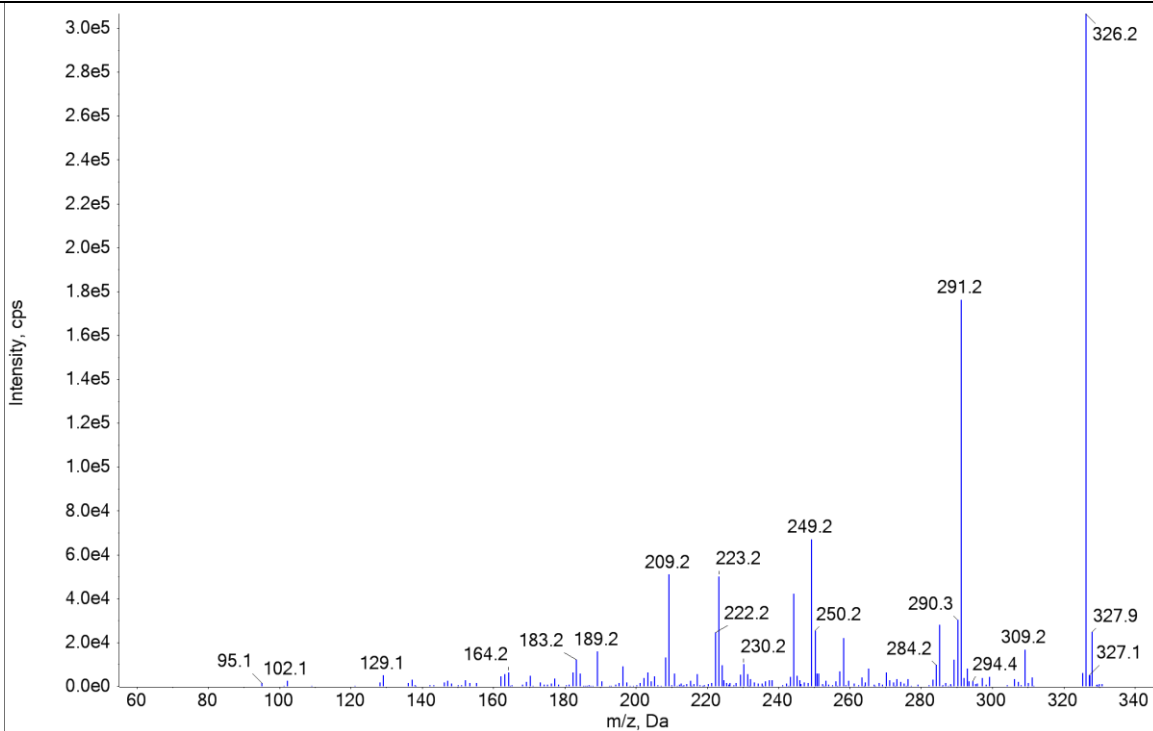
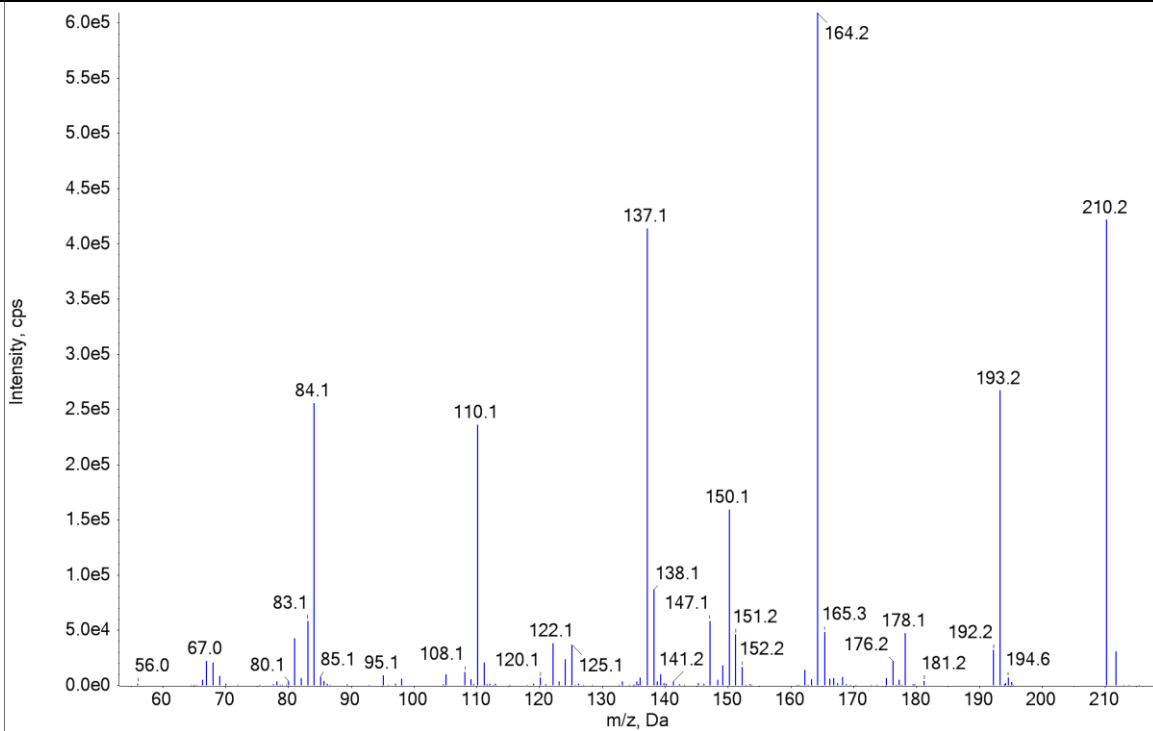
149	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Mesocarb	7.01	323.2	91.1

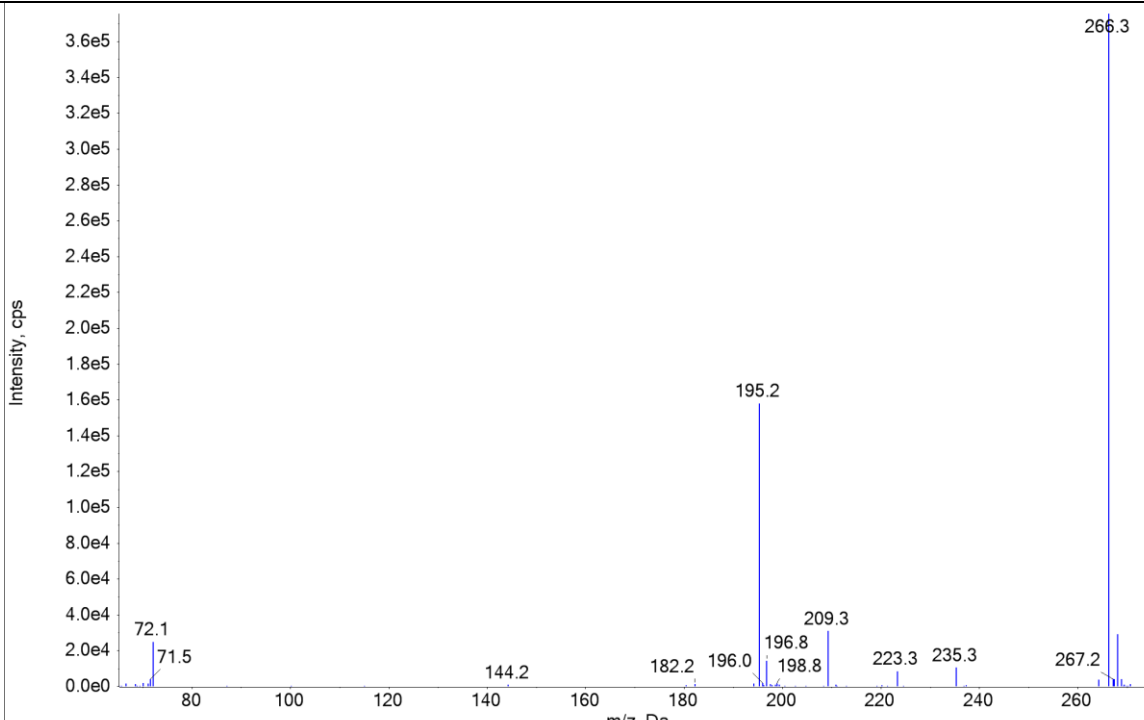
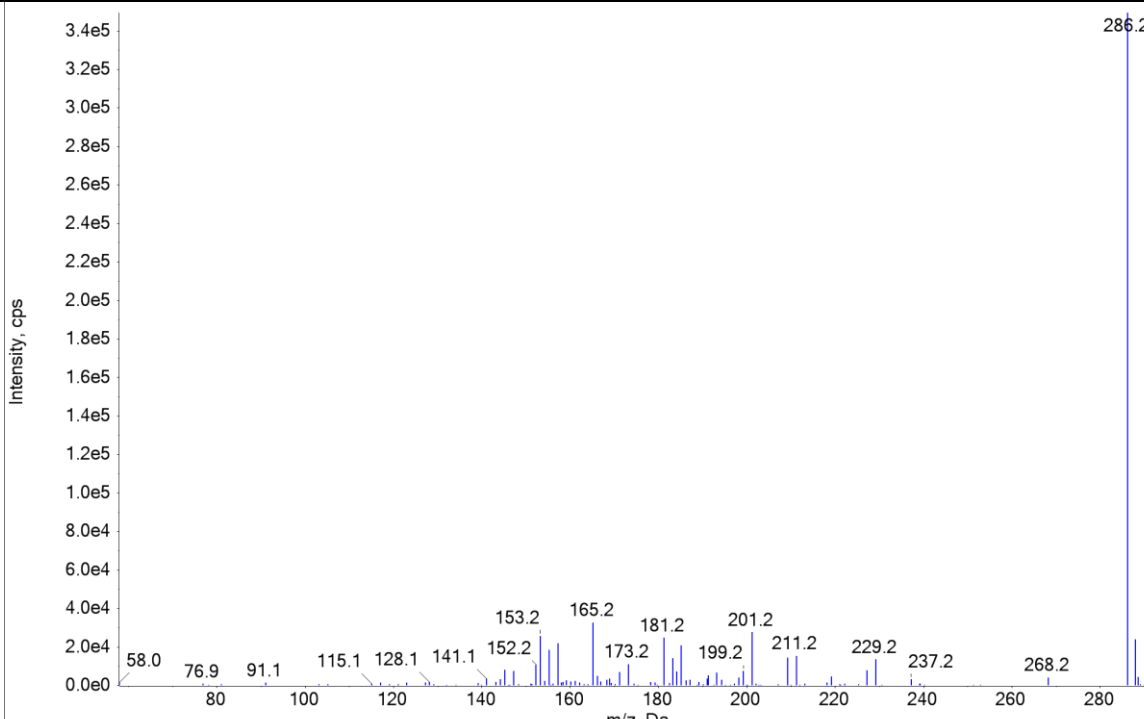
150	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Methadone	7.44	310.2	265.2

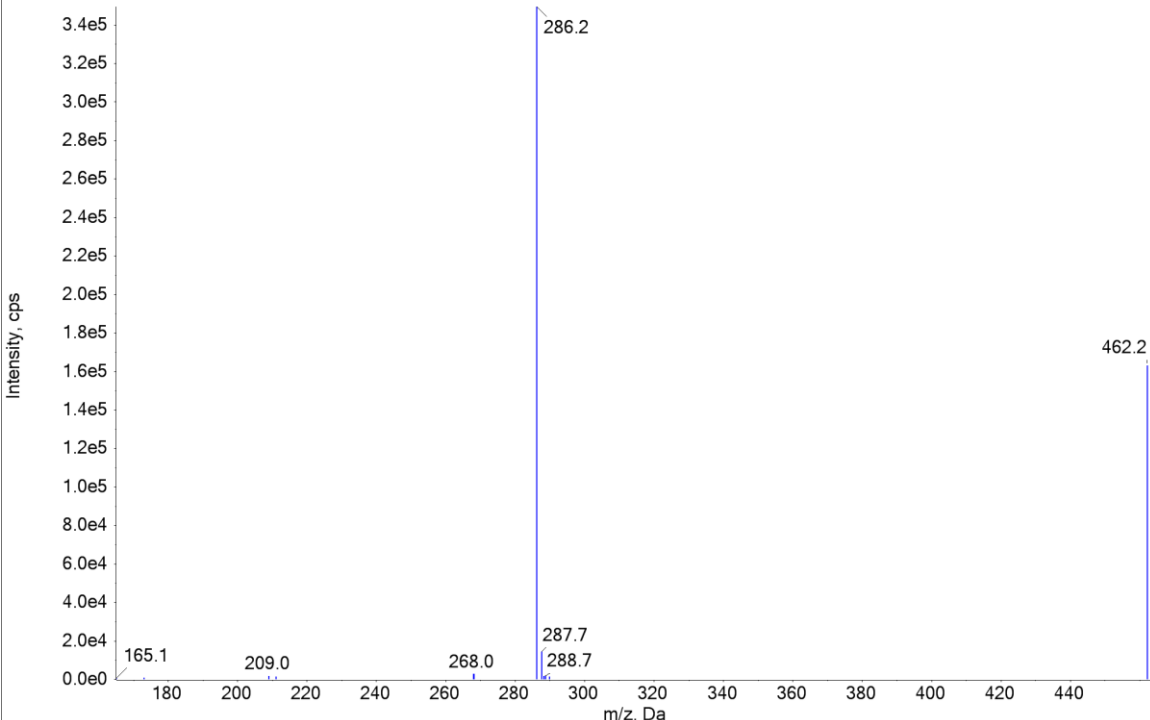
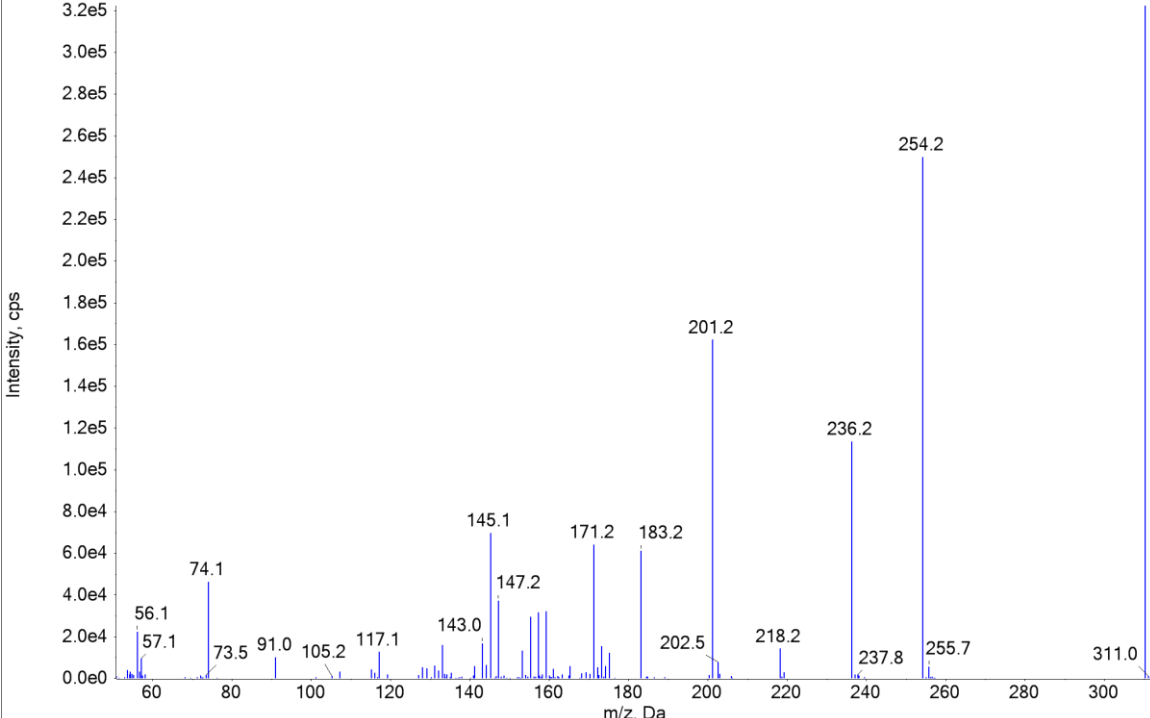
151	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Methamphetamine	4.1	150.1	91
152	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Methaqualon	6.3	251.1	91.1

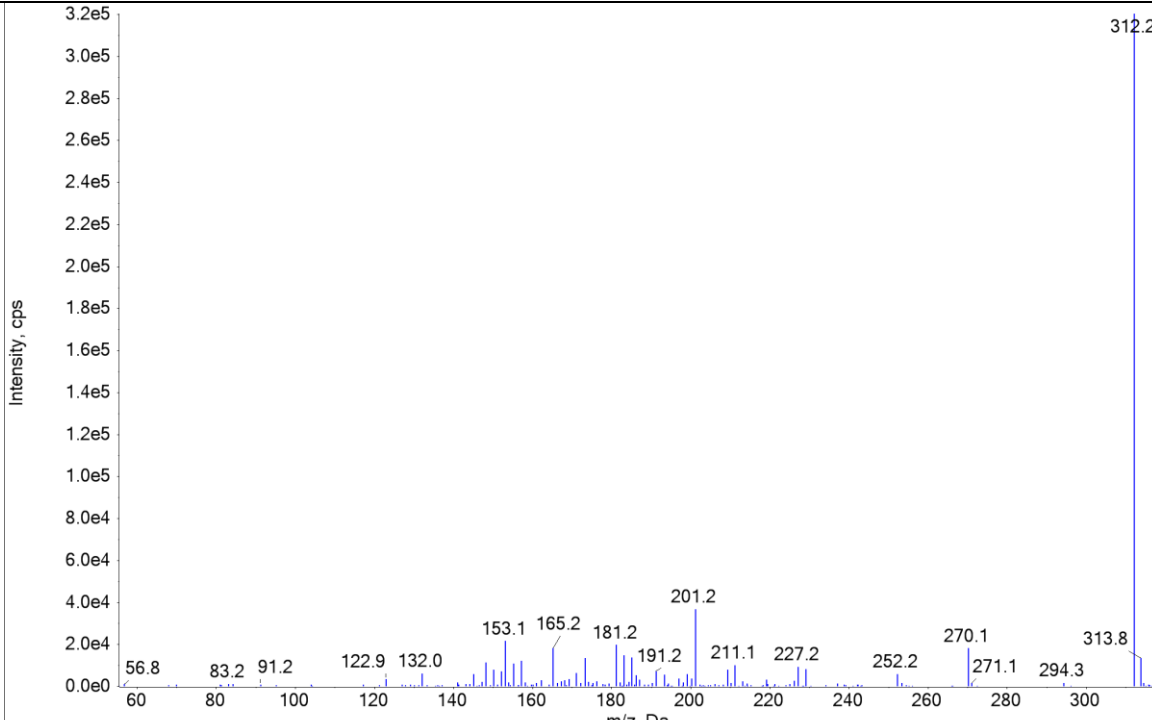
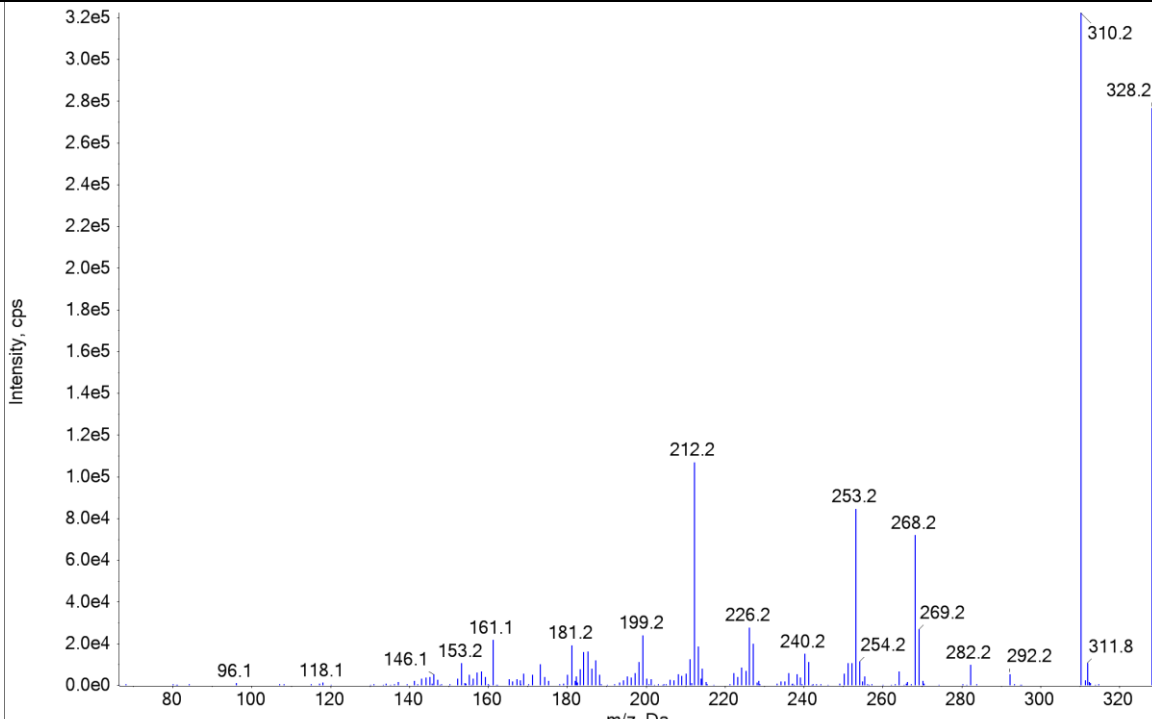
153	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Methylphenidate	5.3	234.1	84.1
154	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Metoclopramide	5.56	300.2	227.1

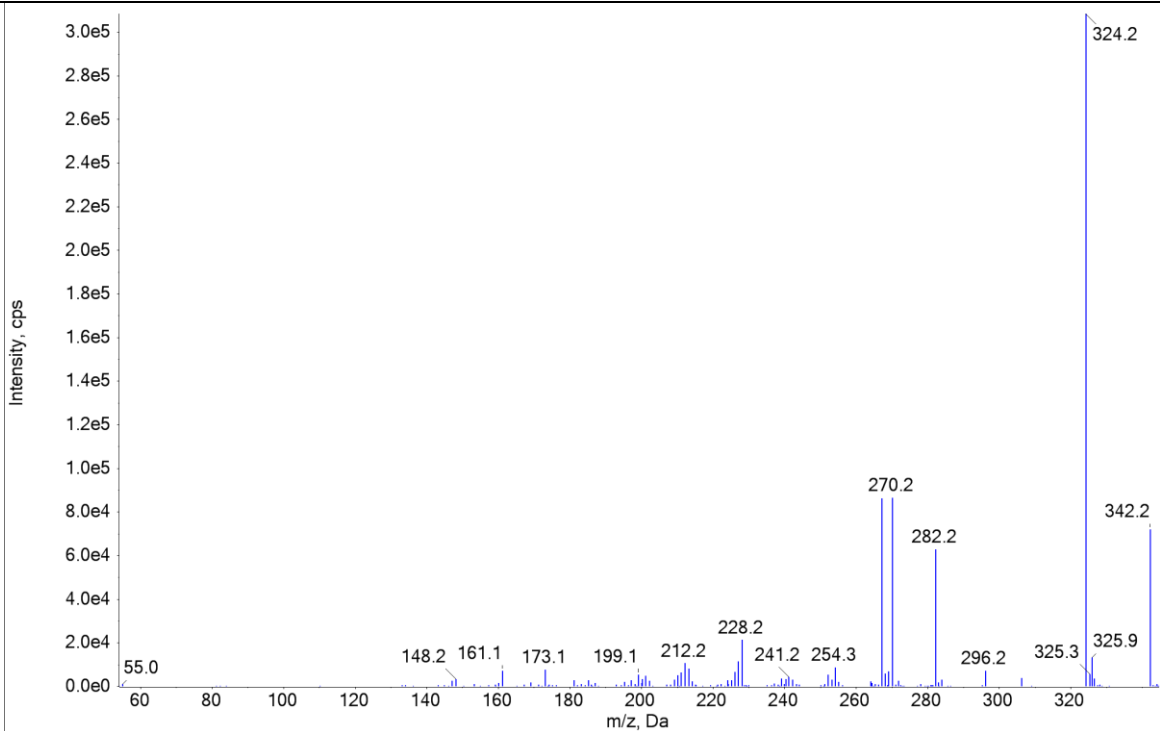
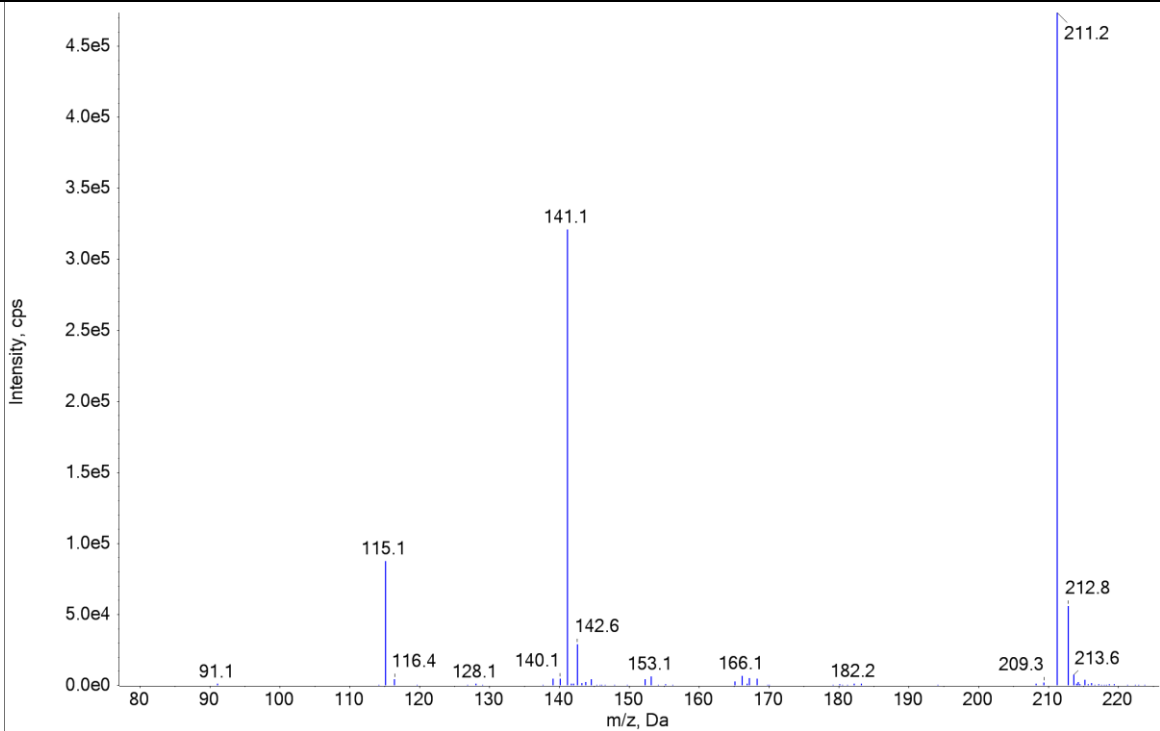
155	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Metoprolol	5.17	268.2	133.1
156	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Metronidazole	8.31	172.072	128

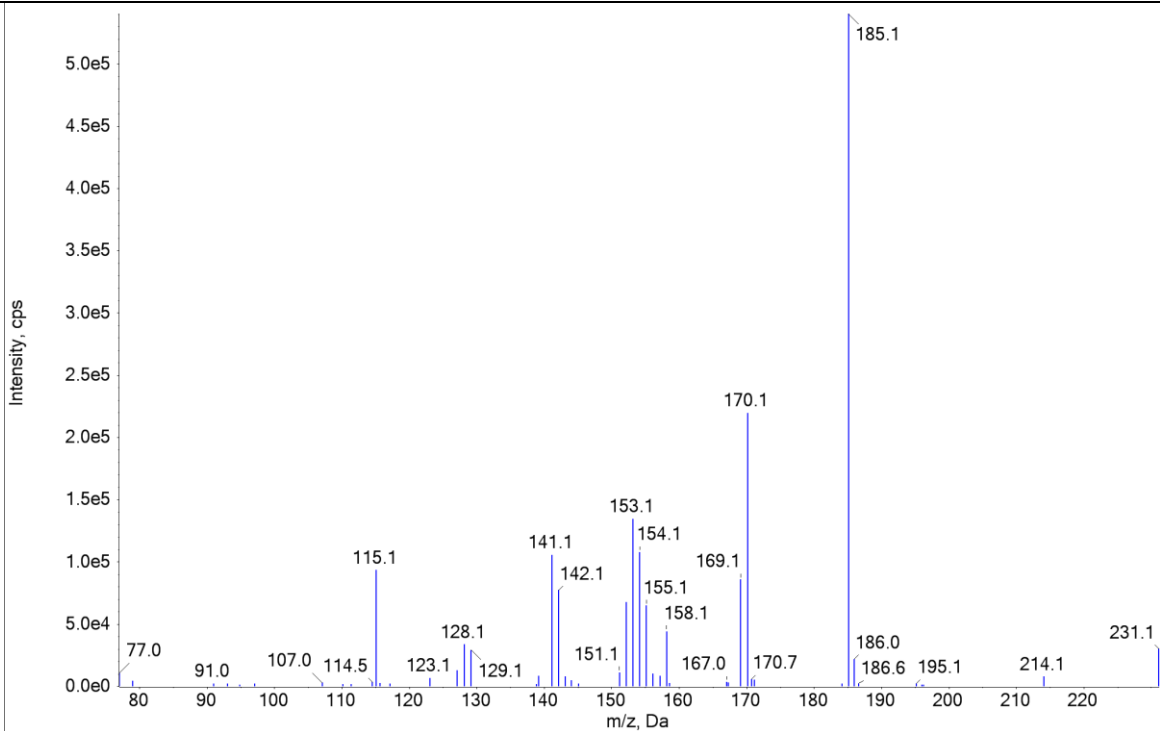
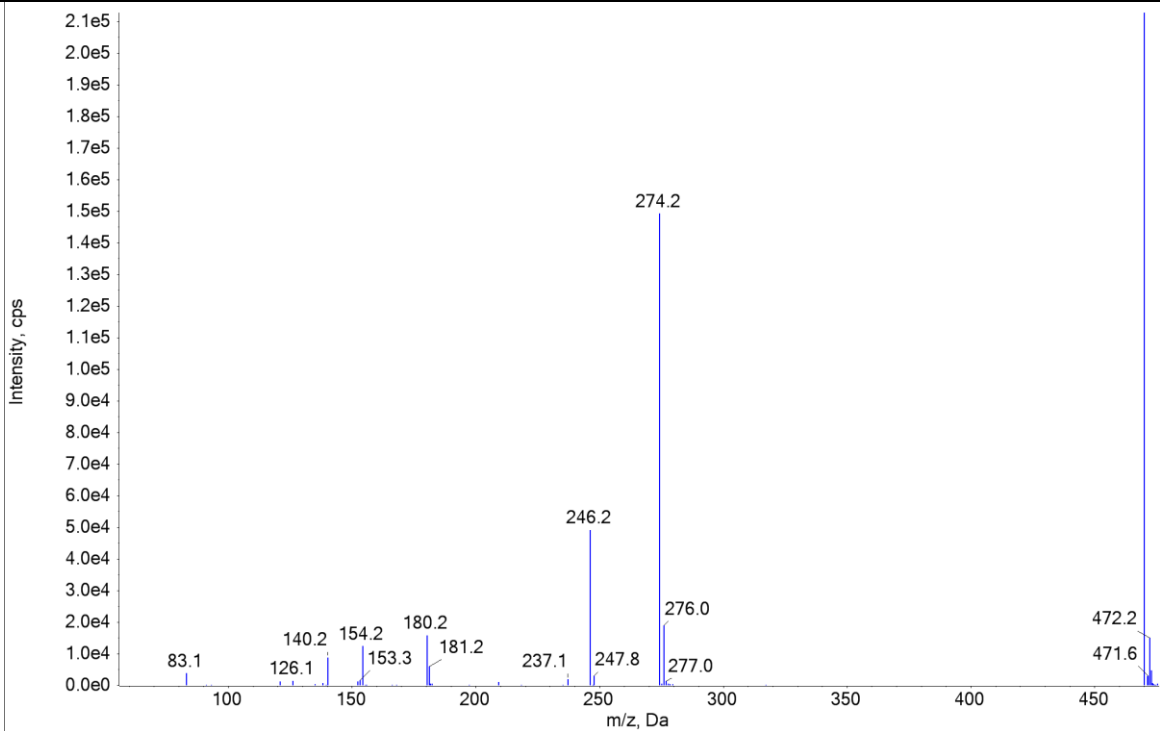
157	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Midazolam	7.5	326.1	291.3
158	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Minoxidil	4.89	210.1	164.2

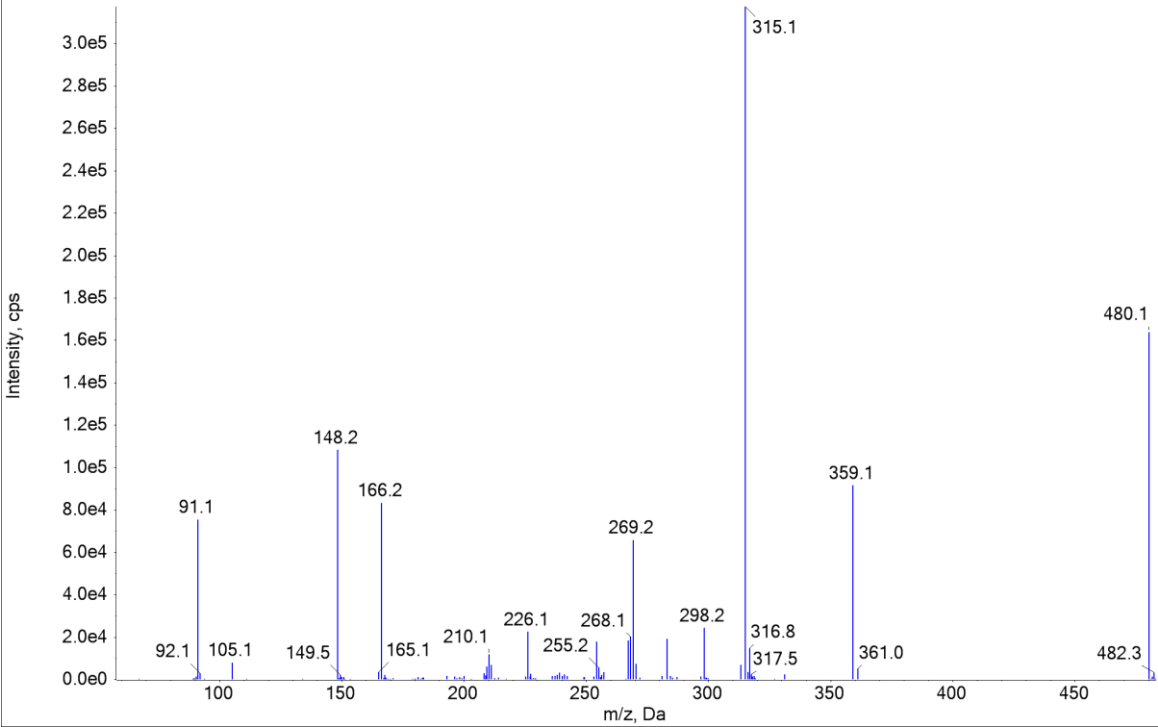
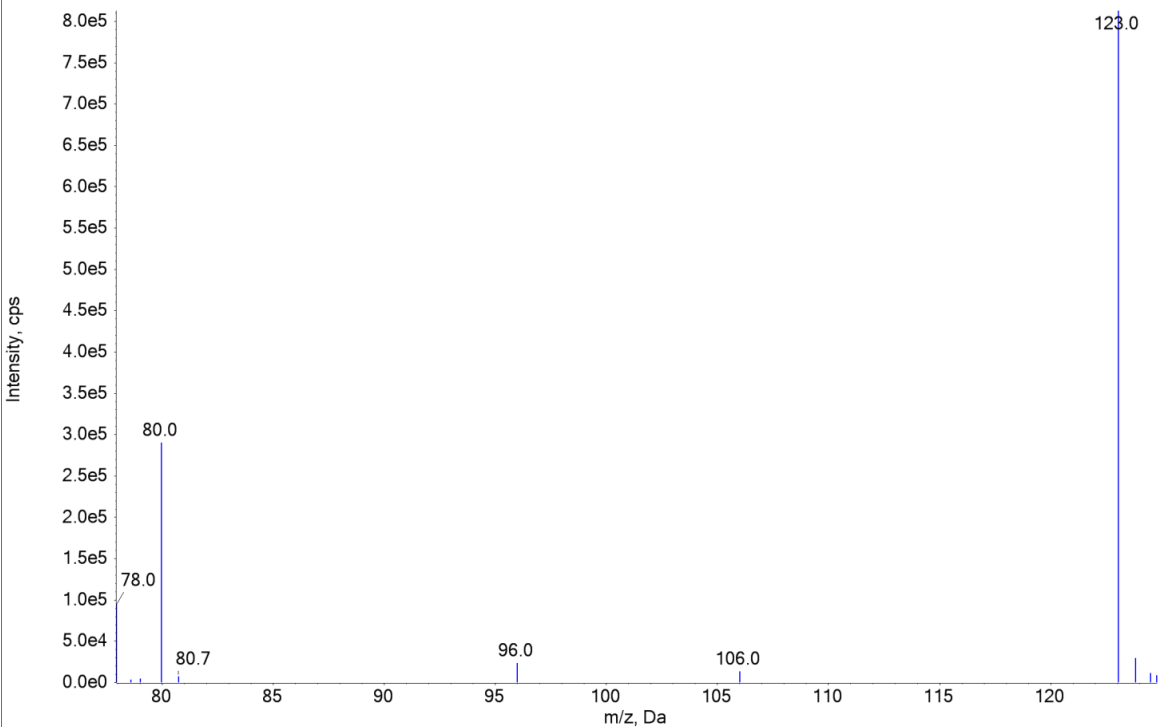
159	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Mirtazapine. The x-axis represents m/z (Da) from 80 to 260, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 3.6e5. The base peak is at m/z 266.3. Other labeled peaks include 72.1, 71.5, 144.2, 182.2, 196.0, 195.2, 196.8, 198.8, 209.3, 223.3, 235.3, and 267.2.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Mirtazapine	6.78	266.2	195.2
160	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Morphine. The x-axis represents m/z (Da) from 80 to 280, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 3.4e5. The base peak is at m/z 286.2. Other labeled peaks include 58.0, 76.9, 91.1, 115.1, 128.1, 141.1, 152.2, 153.2, 165.2, 173.2, 181.2, 199.2, 201.2, 211.2, 229.2, 237.2, 268.2, and 286.2.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Morphine	3.72	286.1	152.2

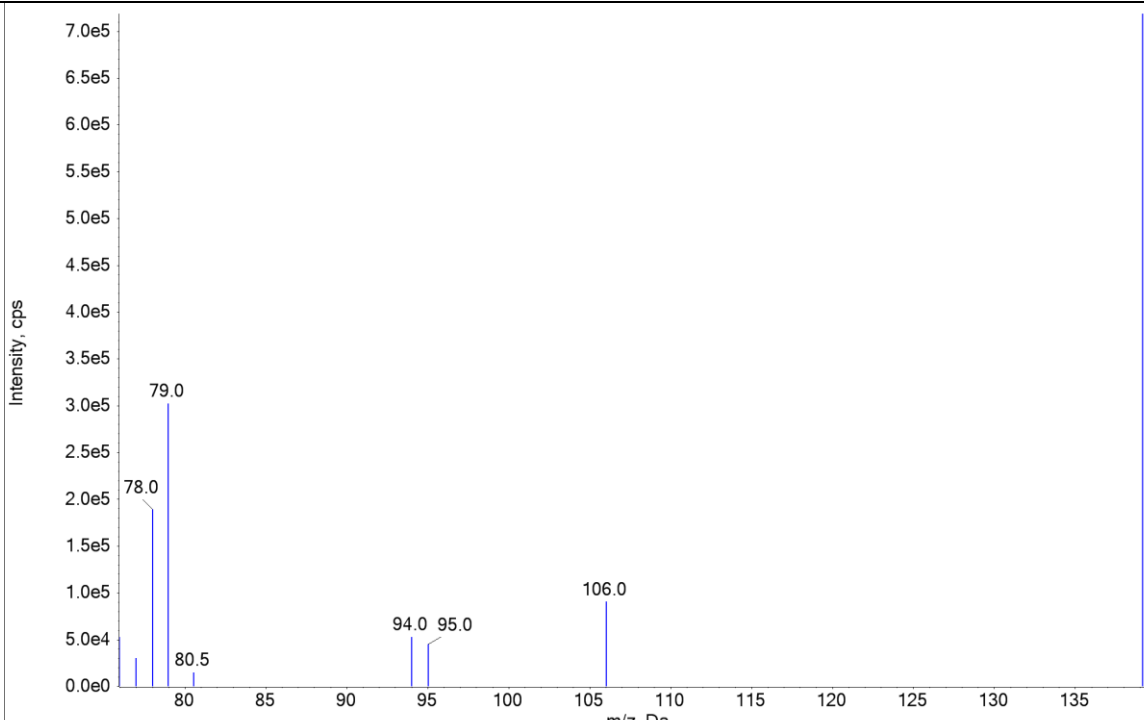
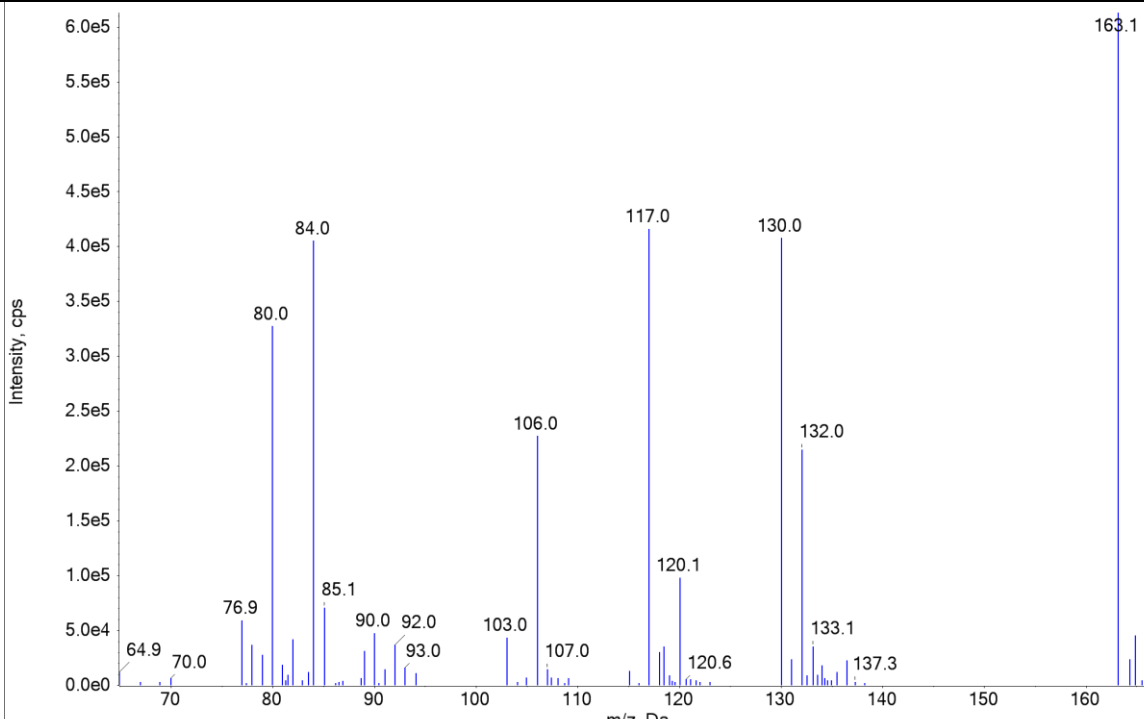
161	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Morphine-3-β-D-glucuronide. The x-axis represents m/z (Da) from 180 to 440, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 3.4e5. The base peak is at m/z 286.2. Other labeled peaks include 165.1, 209.0, 268.0, 287.7, 288.7, and 462.2.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Morphine-3-β-D-glucuronide	1.5	462.1	286.1
162	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Nadolol. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 300, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 3.2e5. The base peak is at m/z 310.2. Other labeled peaks include 56.1, 57.1, 73.5, 74.1, 91.0, 105.2, 117.1, 143.0, 145.1, 147.2, 171.2, 183.2, 201.2, 202.5, 218.2, 236.2, 237.8, 254.2, 255.7, and 311.0.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Nadolol	4.48	310.2	254.2

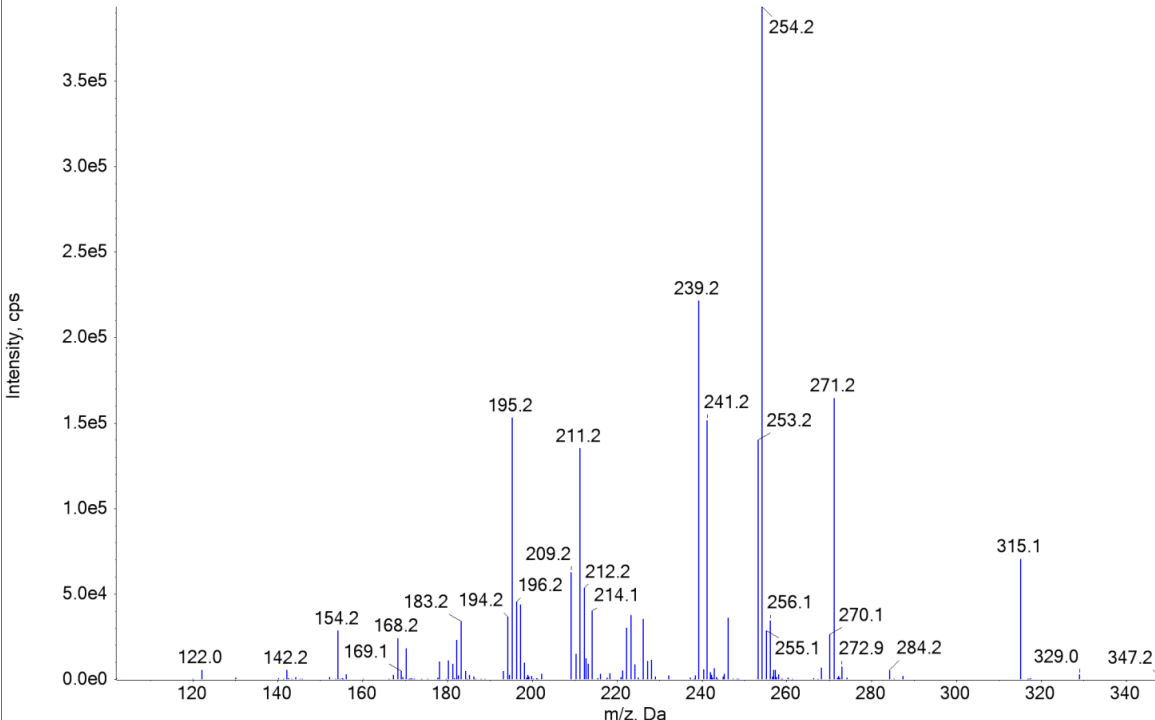
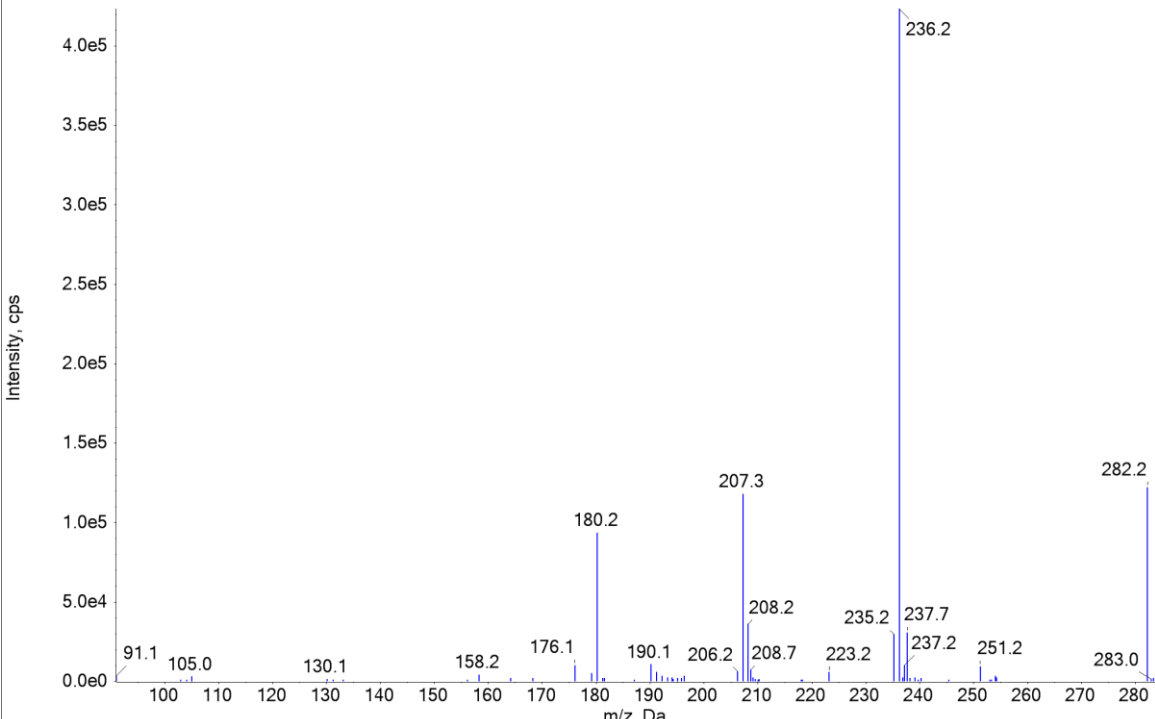
163	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Nalorphine	5.14	312.2	201.2
164	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Naloxone	5.18	328.2	310.2

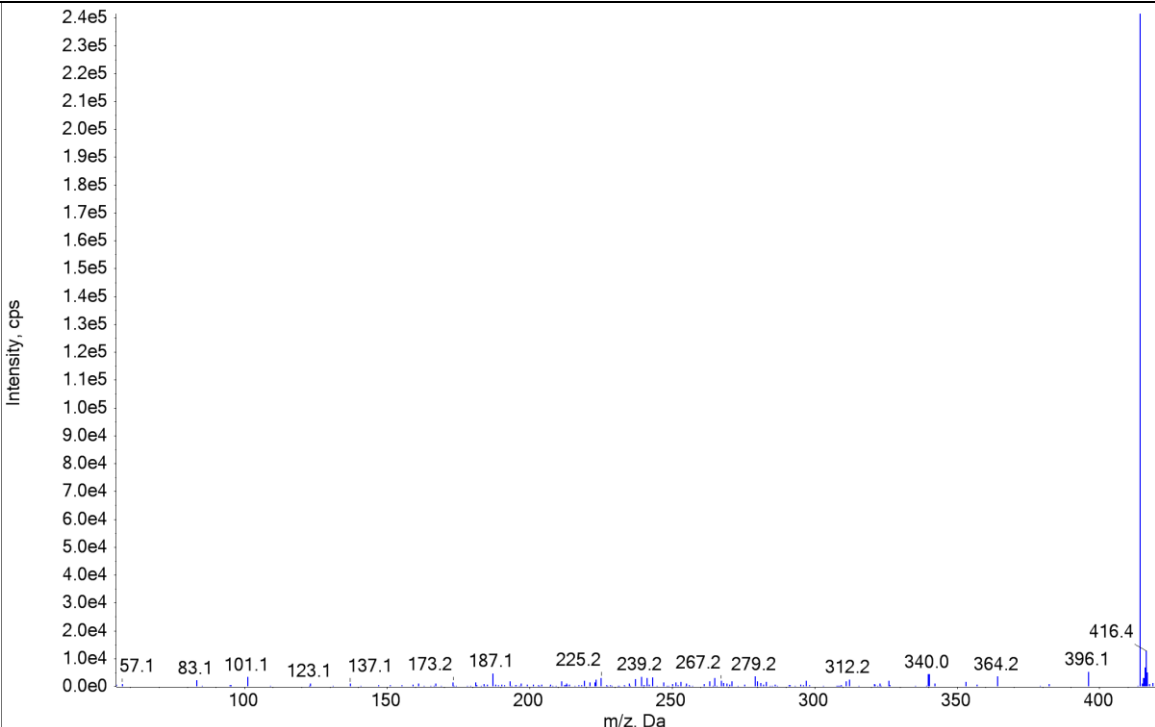
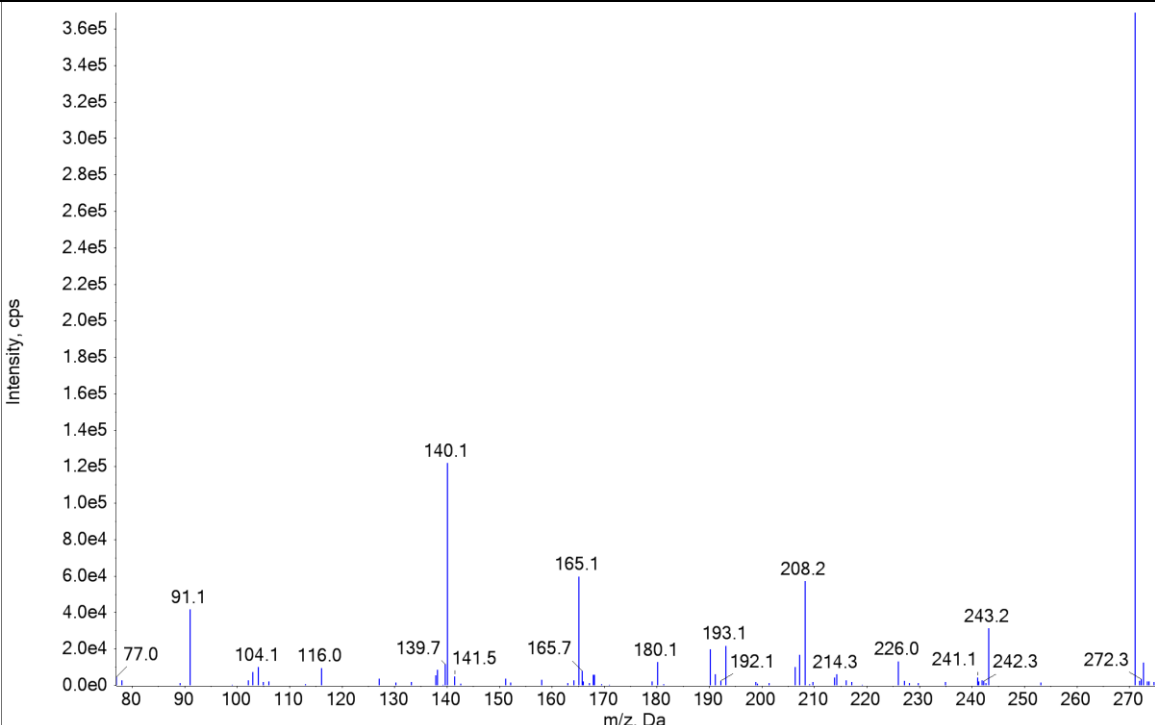
165	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Naltrexone	4.45	342.2	270.2
166	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Naphazoline	4.84	211.1	141.1

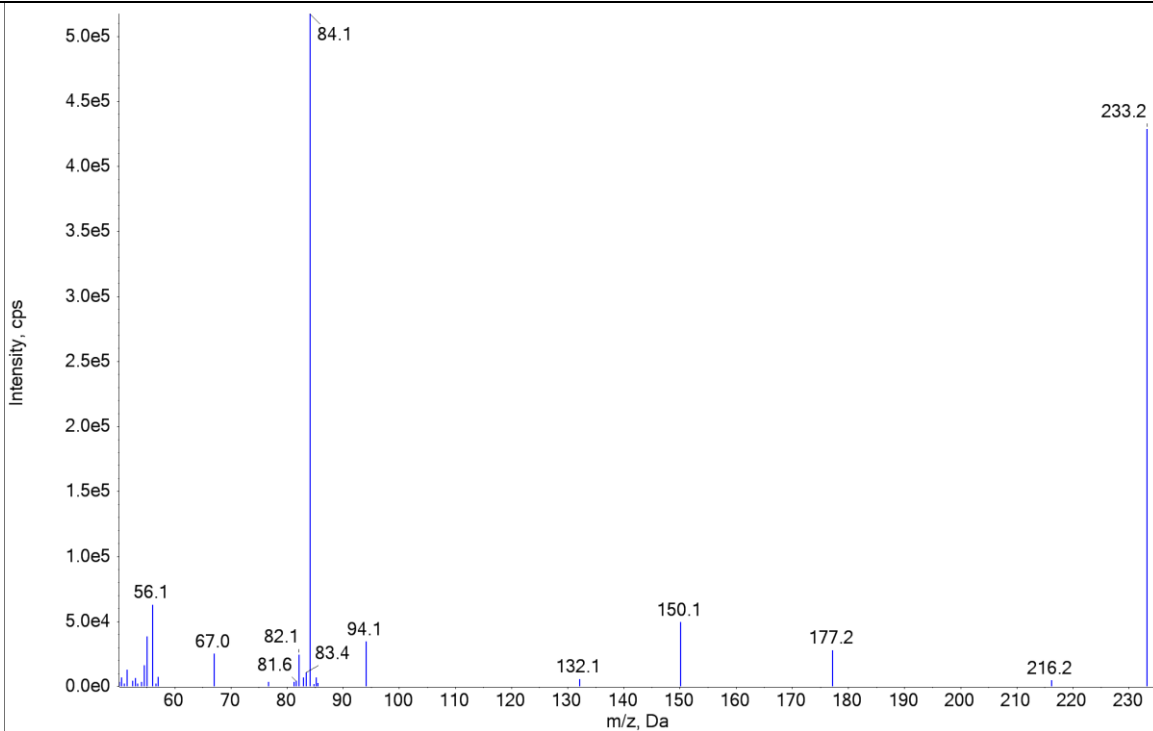
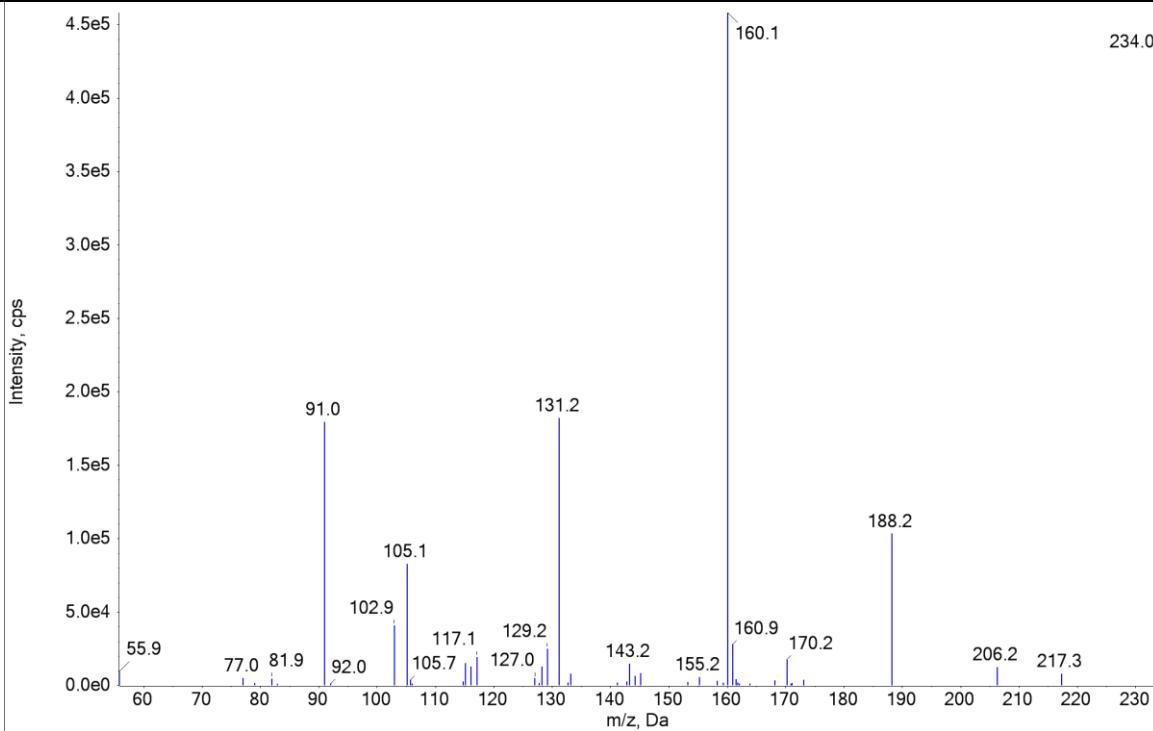
167	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Naproxen. The x-axis represents m/z from 80 to 220, and the y-axis represents intensity in counts per second (cps) from 0.0e0 to 5.0e5. The base peak is at m/z 185.1. Other labeled peaks include 77.0, 91.0, 107.0, 114.5, 115.1, 123.1, 128.1, 129.1, 141.1, 142.1, 151.1, 153.1, 154.1, 155.1, 158.1, 167.0, 169.1, 170.1, 170.7, 185.1, 186.0, 186.6, 195.1, 214.1, and 231.1.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Naproxen	6.25	231.1	185.2
168	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Nefazodone. The x-axis represents m/z from 100 to 450, and the y-axis represents intensity in counts per second (cps) from 0.0e0 to 2.1e5. The base peak is at m/z 470.2. Other labeled peaks include 83.1, 126.1, 140.2, 153.3, 154.2, 180.2, 181.2, 237.1, 246.2, 247.8, 274.2, 276.0, 277.0, 471.6, and 472.2.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Nefazodone	9.22	470.2	274.2

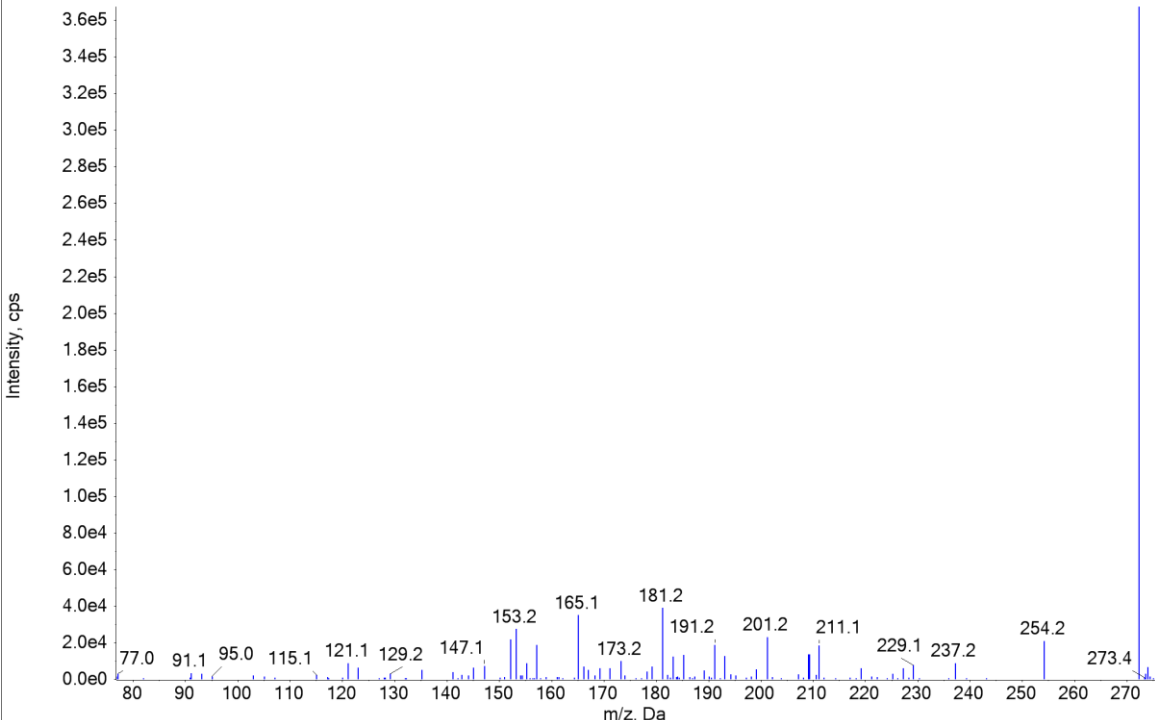
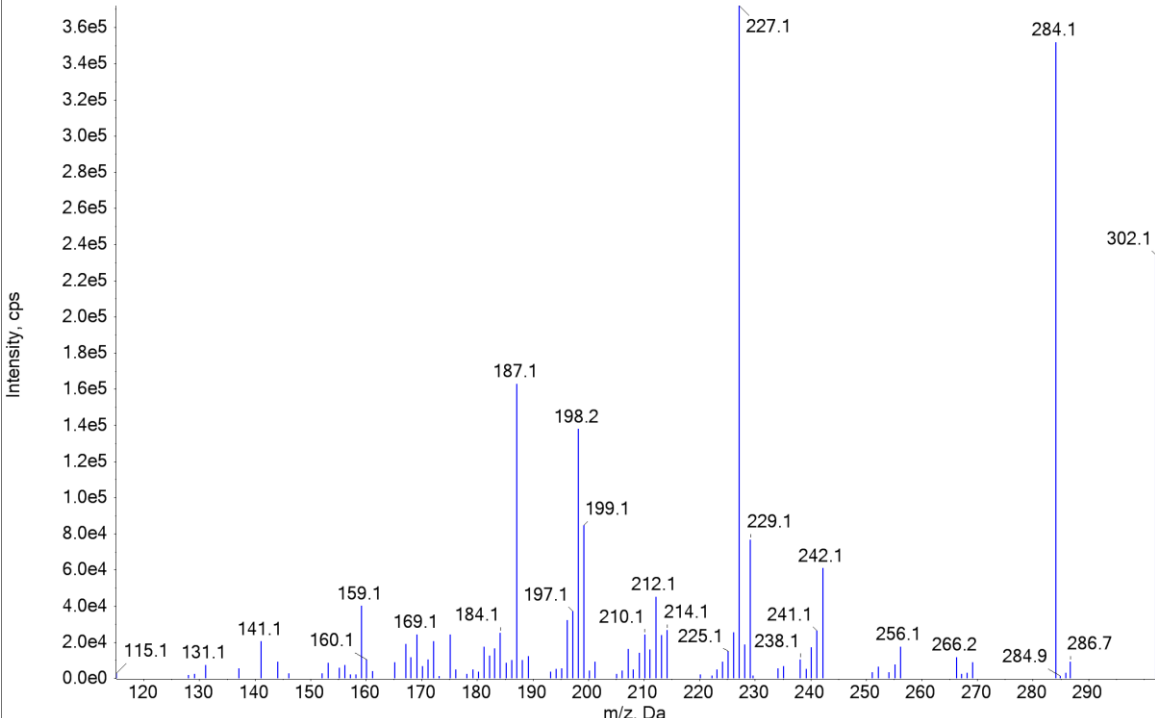
169	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Nicardipine	9.14	480.2	315.1
170	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Nicotinamide	1	123.1	80.1

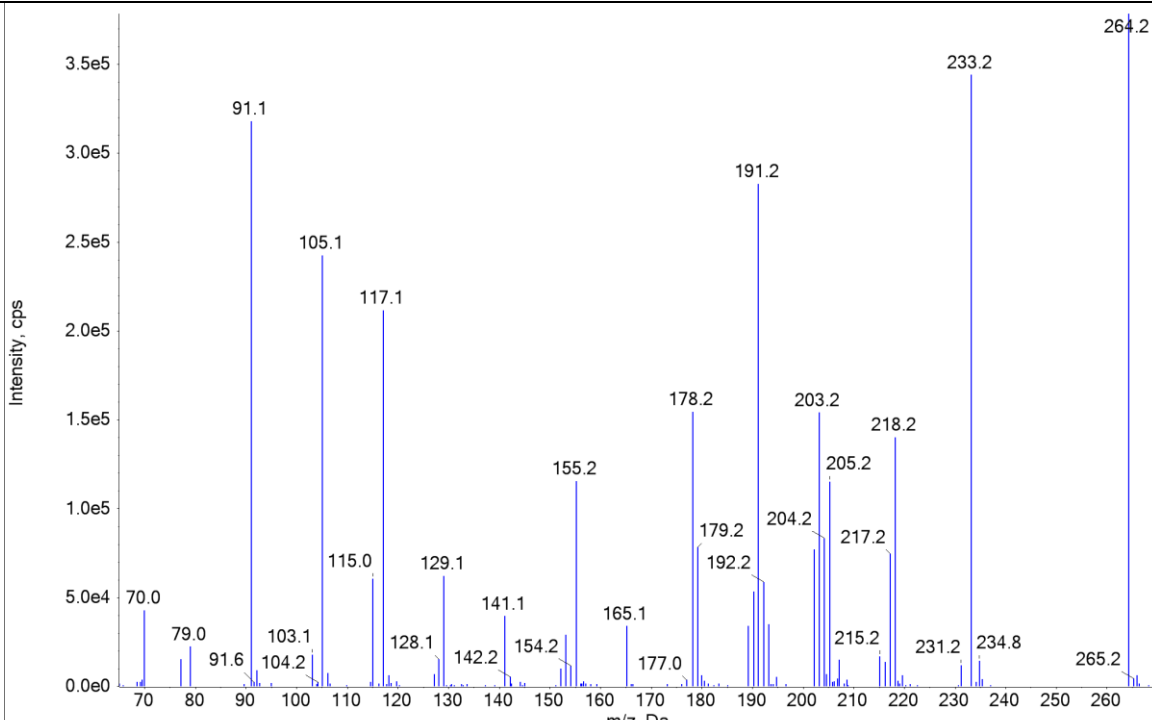
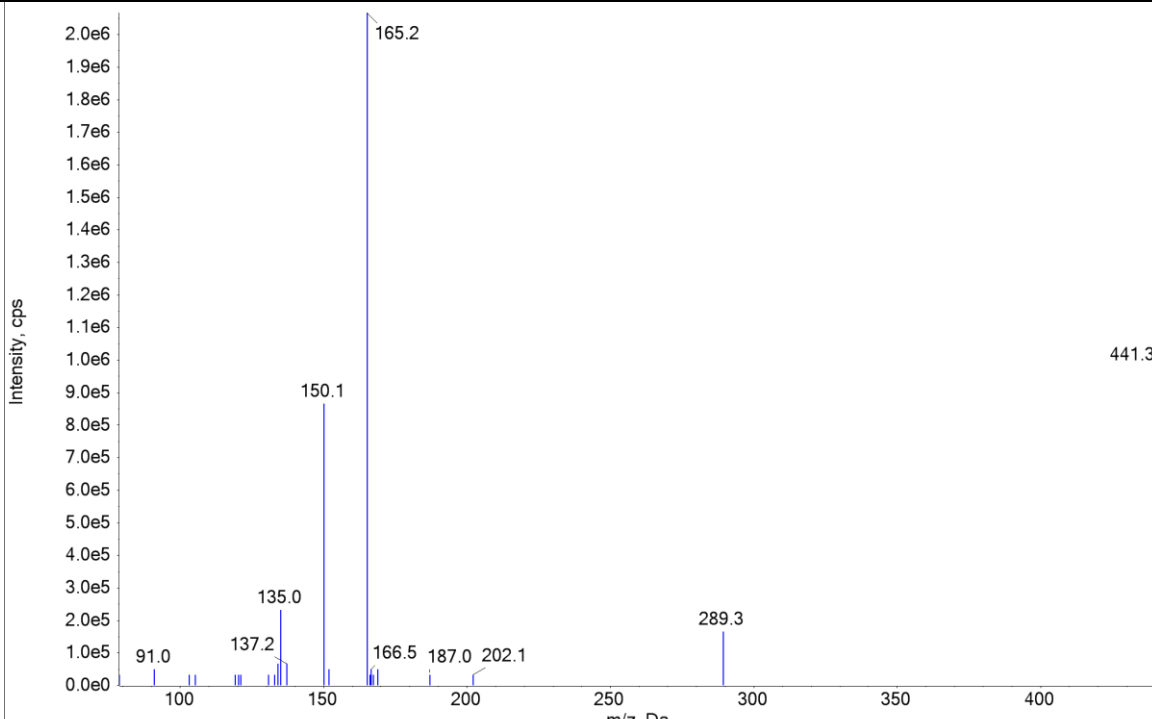
171	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Nicotinamide N-oxide	1	139.1	106
172	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Nicotine	2.25	163.1	130.1

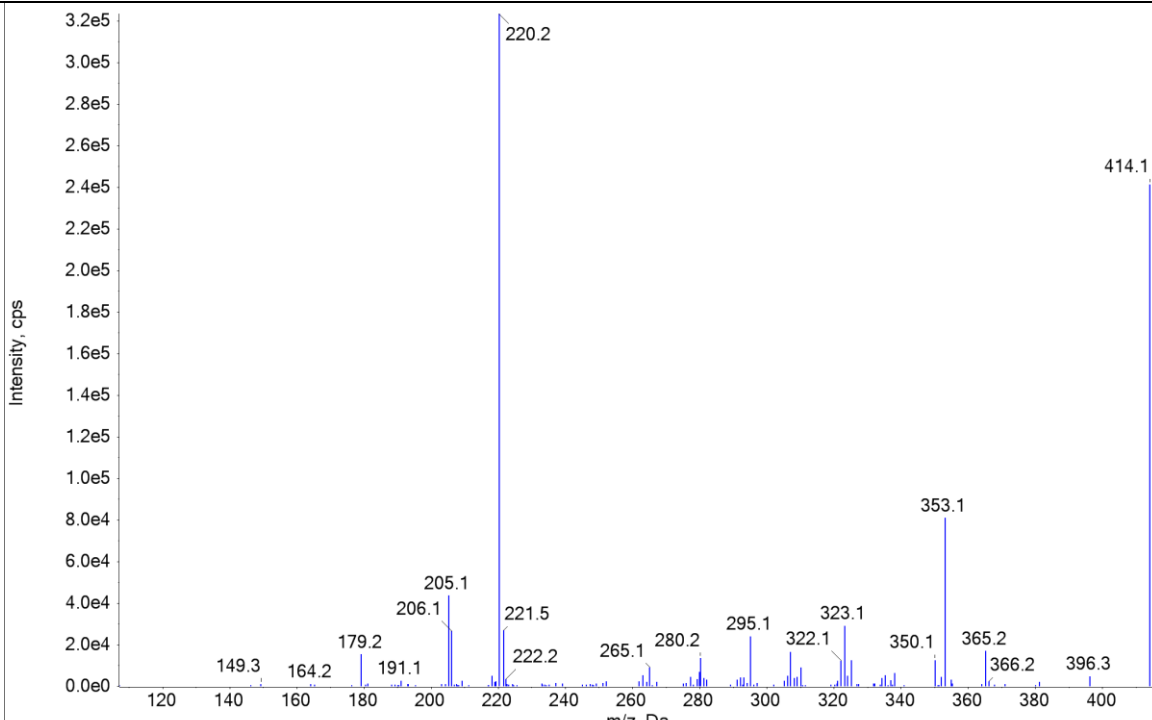
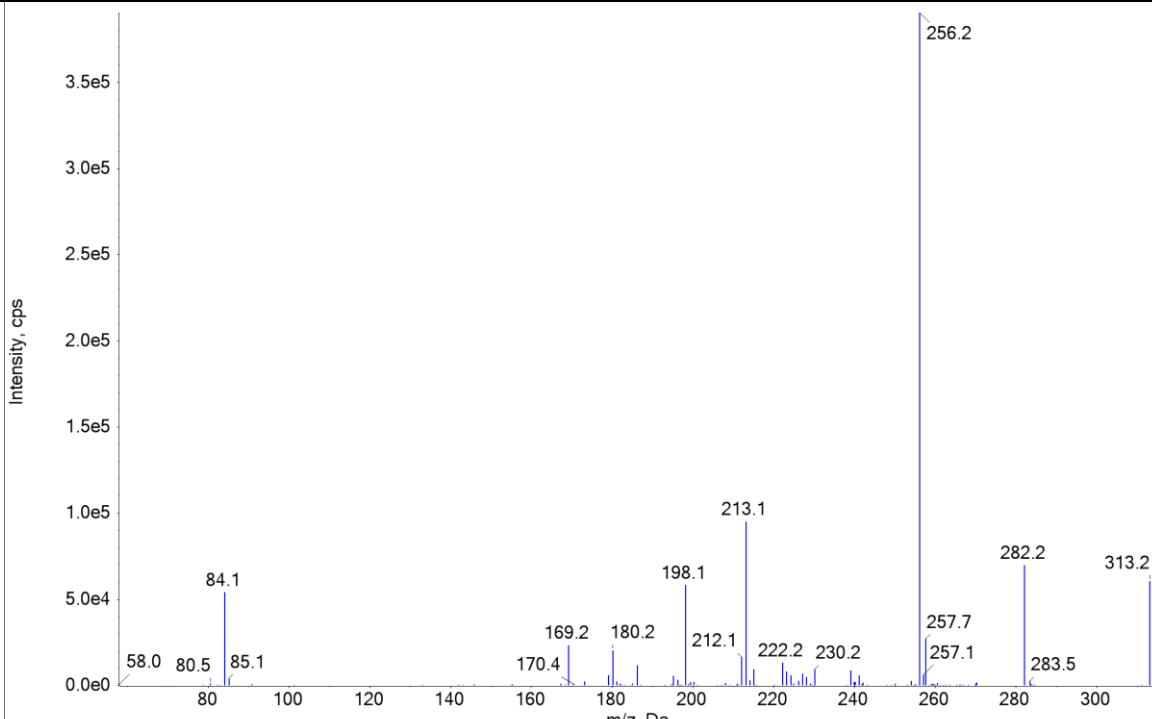
173	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Nifedipine	7.62	347.1	254.2
174	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Nitrazepam	4.53	282.1	236.2

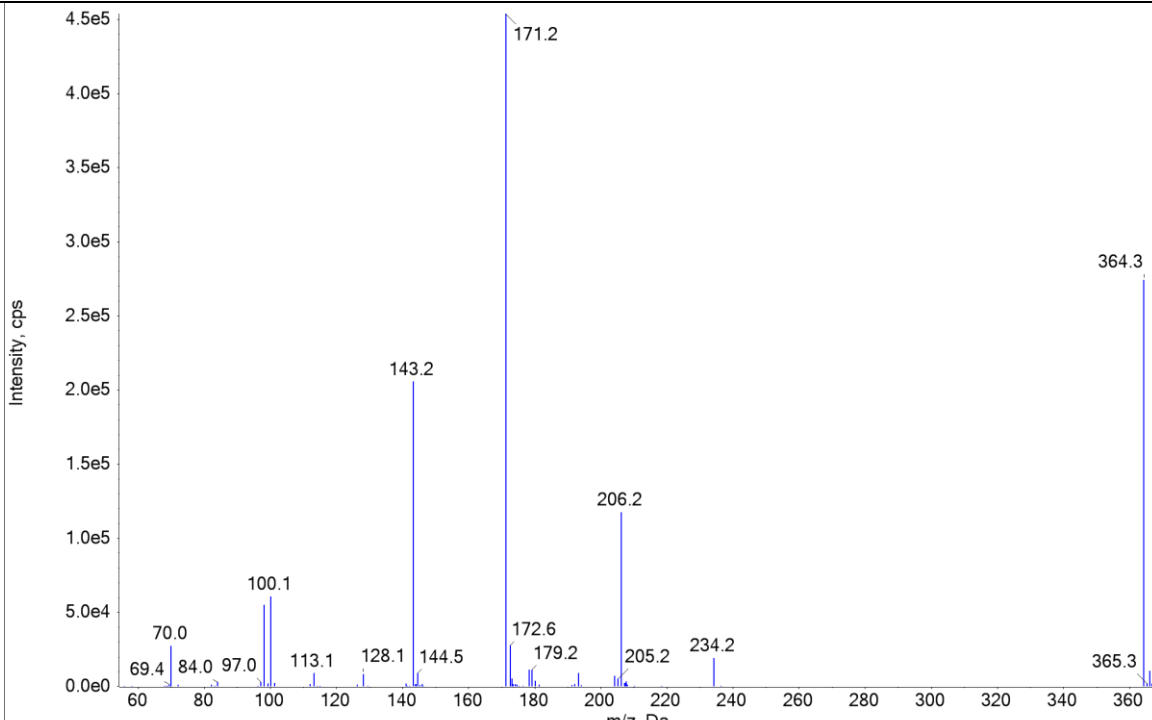
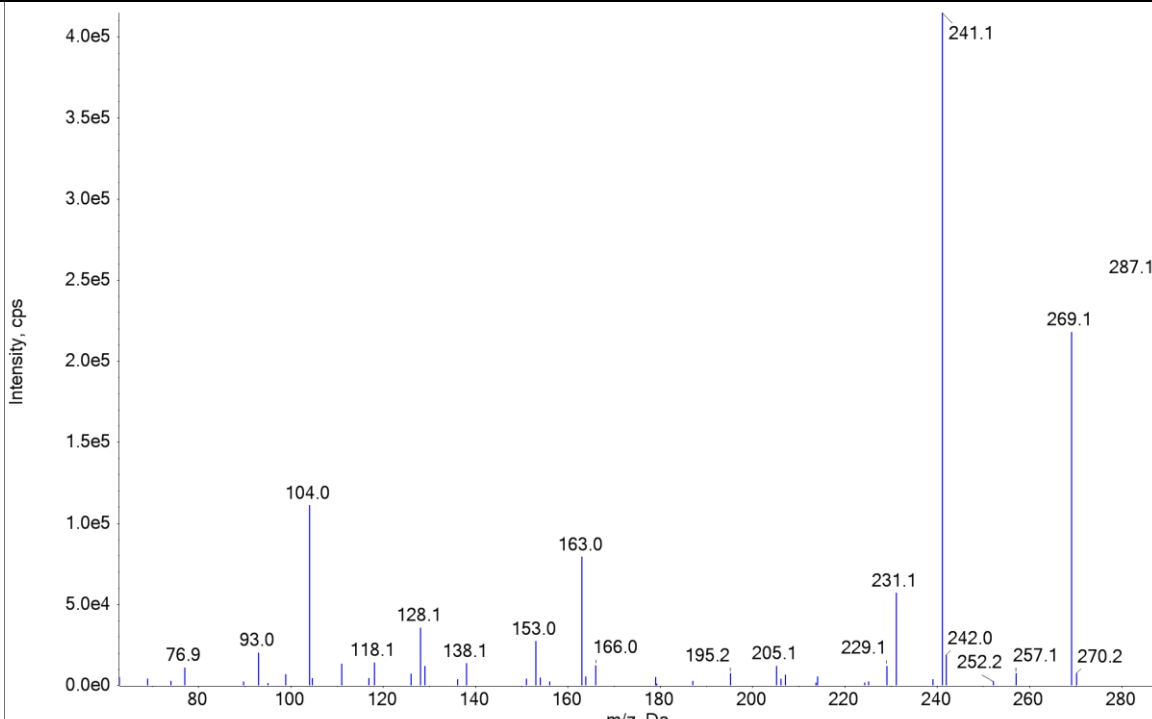
175	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Norbuprenorphine	6.01	414.3	83.1
176	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Nordiazepam	7.74	271.1	140.2

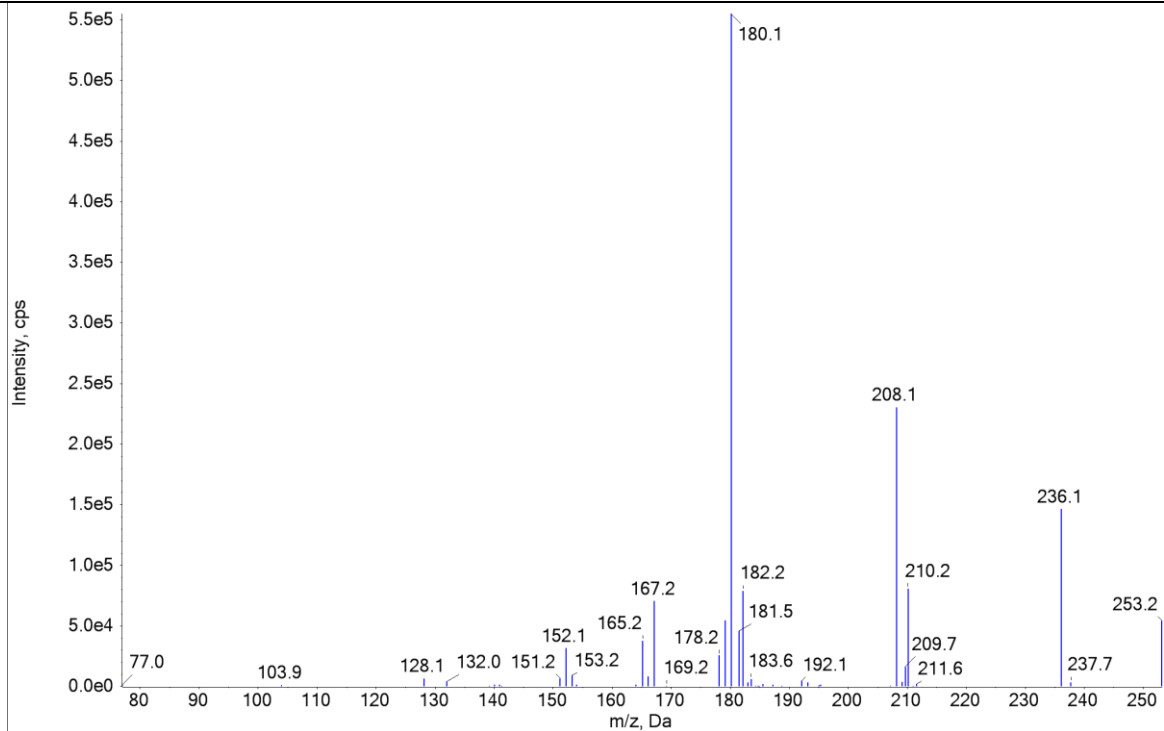
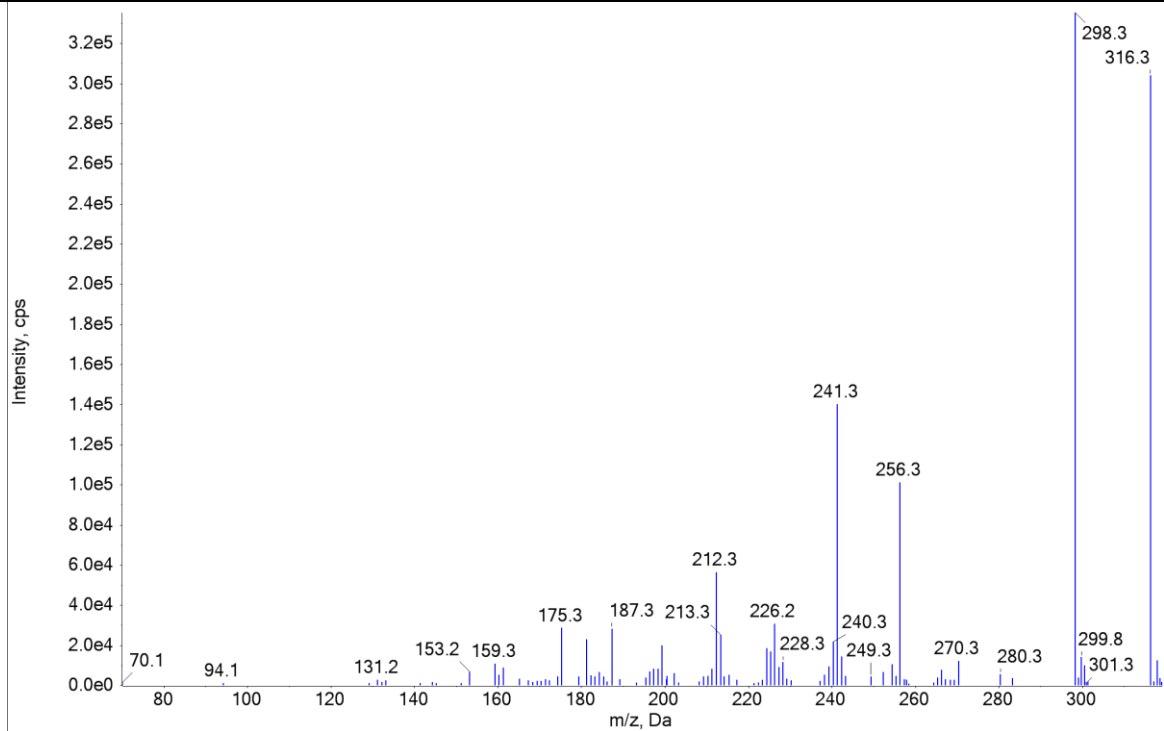
177	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Norfentanyl. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 230, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 5.0e5. The base peak is at m/z 84.1. Other labeled peaks include 56.1, 67.0, 82.1, 83.4, 94.1, 132.1, 150.1, 177.2, and 216.2.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Norfentanyl	4.8	233.2	84.1
178	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Normeperidine. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 230, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 4.5e5. The base peak is at m/z 160.1. Other labeled peaks include 55.9, 77.0, 81.9, 91.0, 92.0, 102.9, 105.1, 105.7, 117.1, 127.0, 129.2, 131.2, 143.2, 155.2, 160.9, 170.2, 188.2, 206.2, and 217.3.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Normeperidine	5.57	234.2	160.2

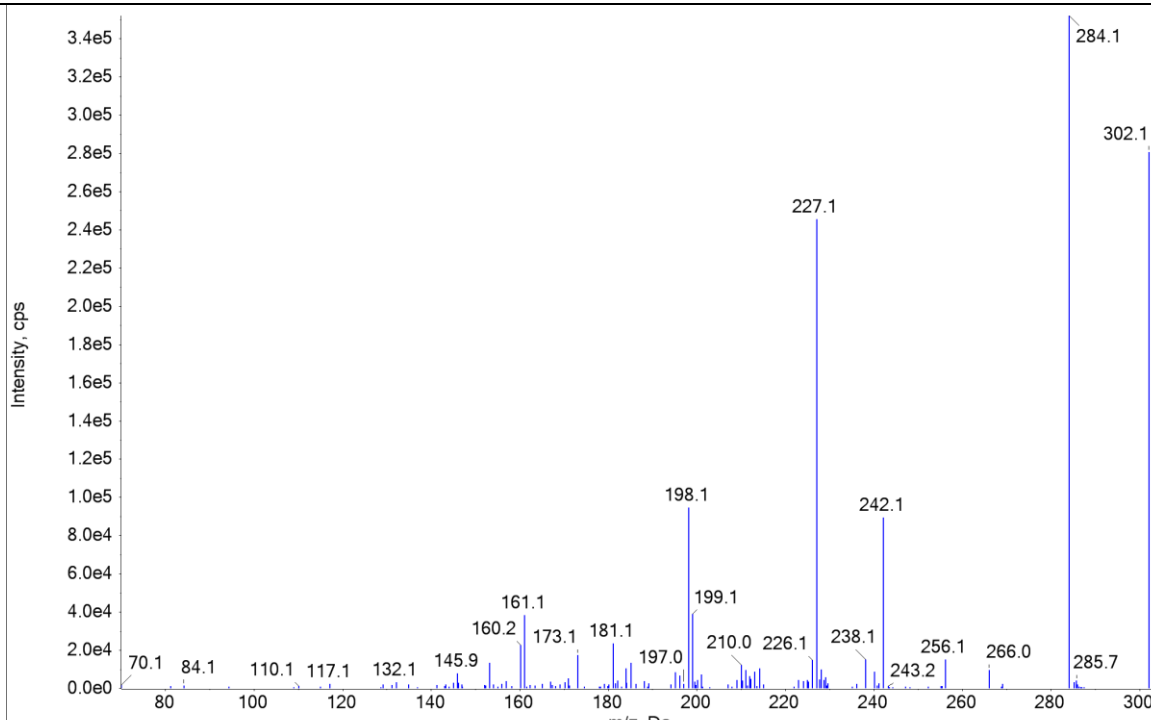
179	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Normorphine	2.17	272.1	165.2
180	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Noroxycodone	3.91	302.2	227.2

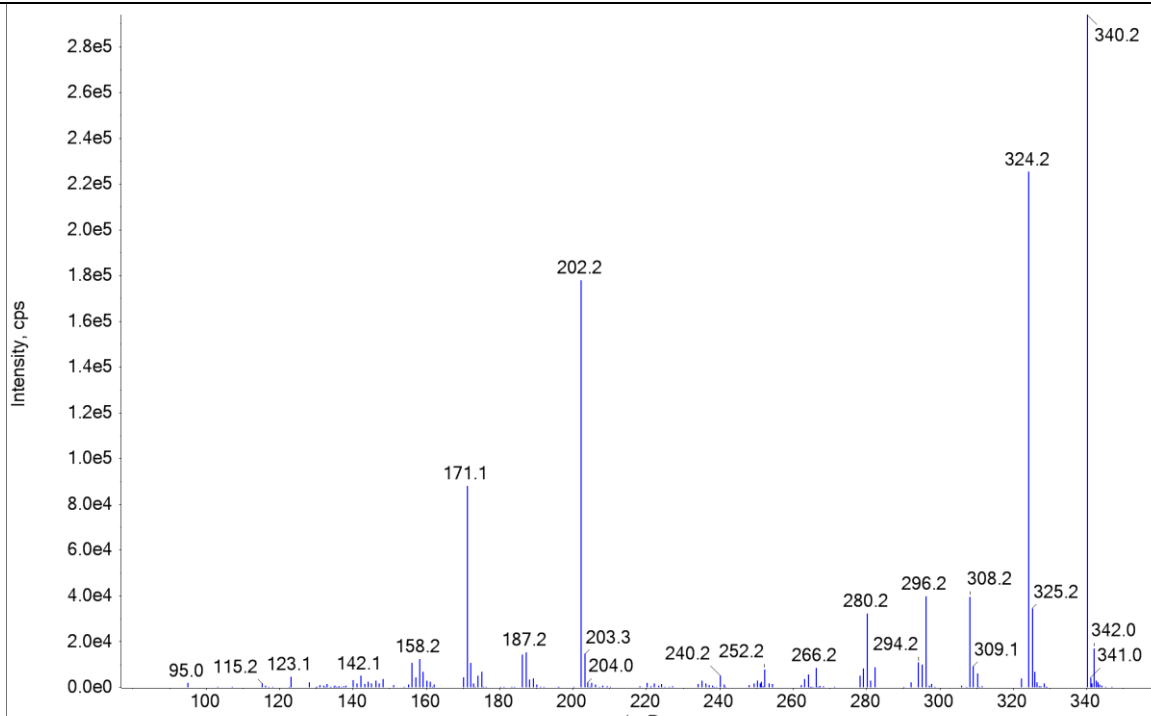
181	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Nortriptyline	7.39	264.2	233.2
182	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Norverapamil	6.62	441.2	165

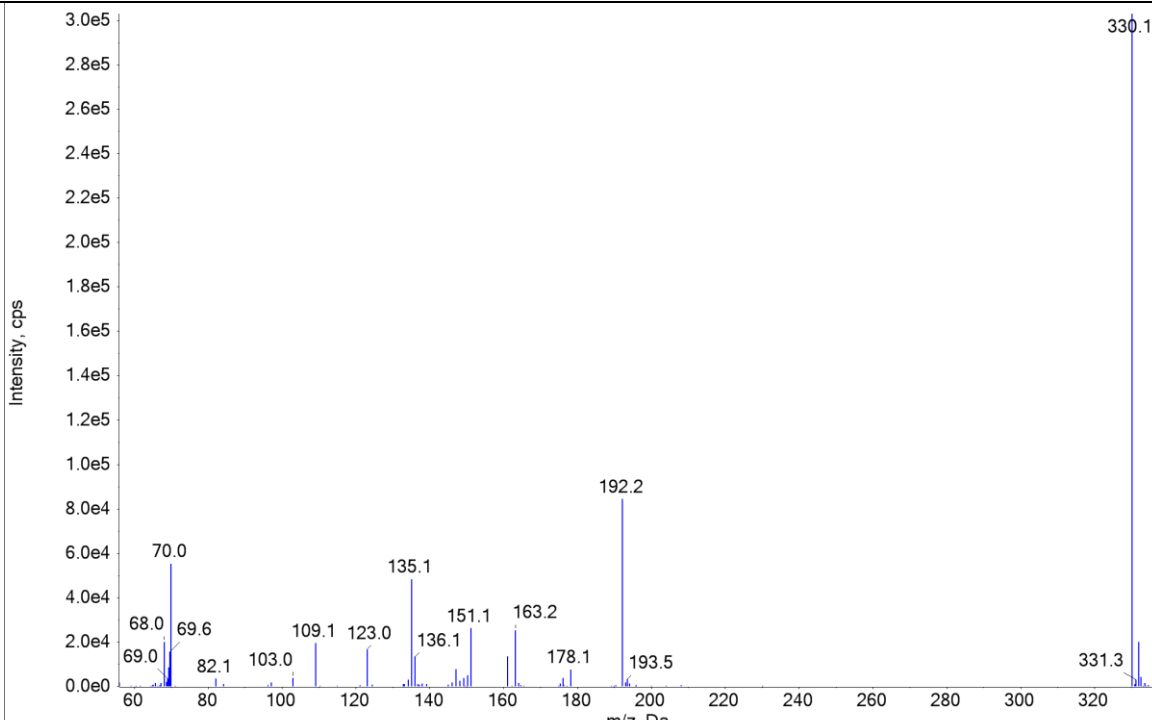
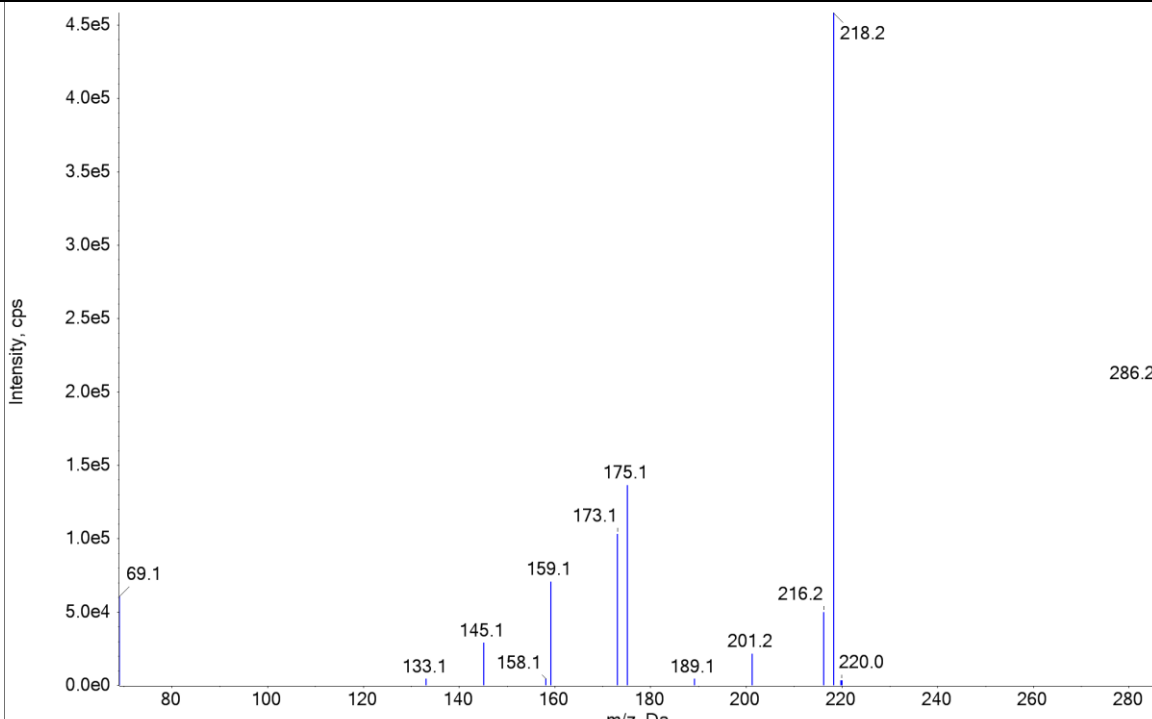
183	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Noscapine	8.63	414.1	220.2
184	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Olanzapine	11.2	313.1	256.2

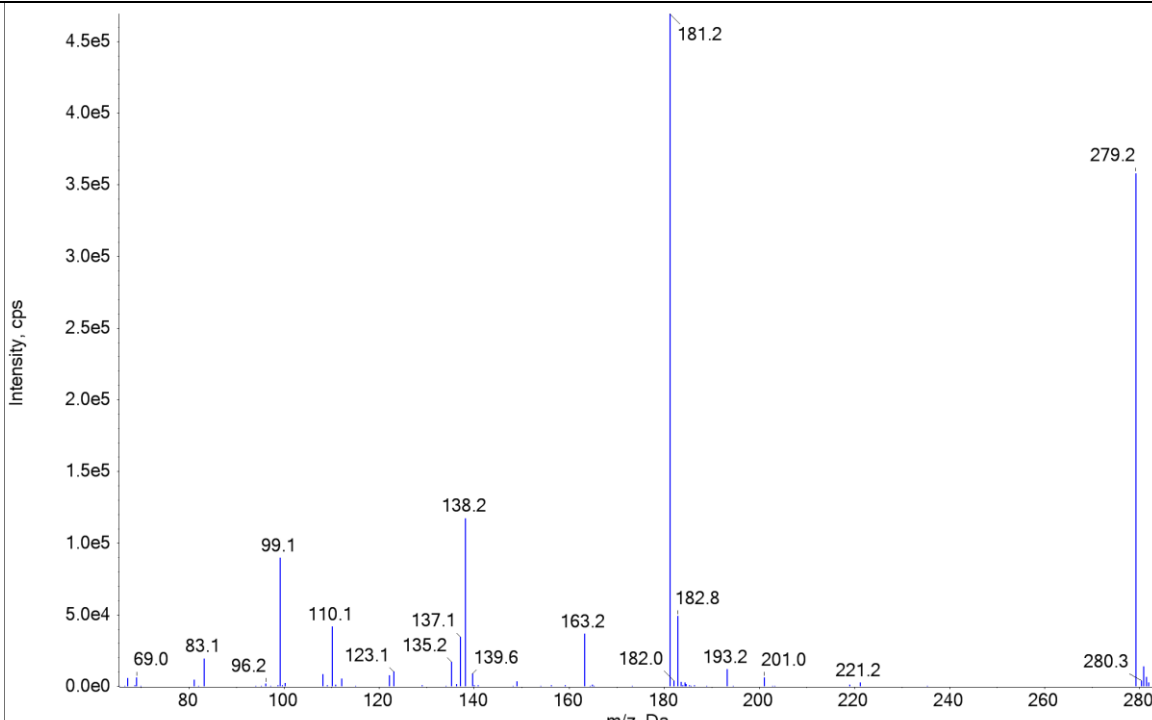
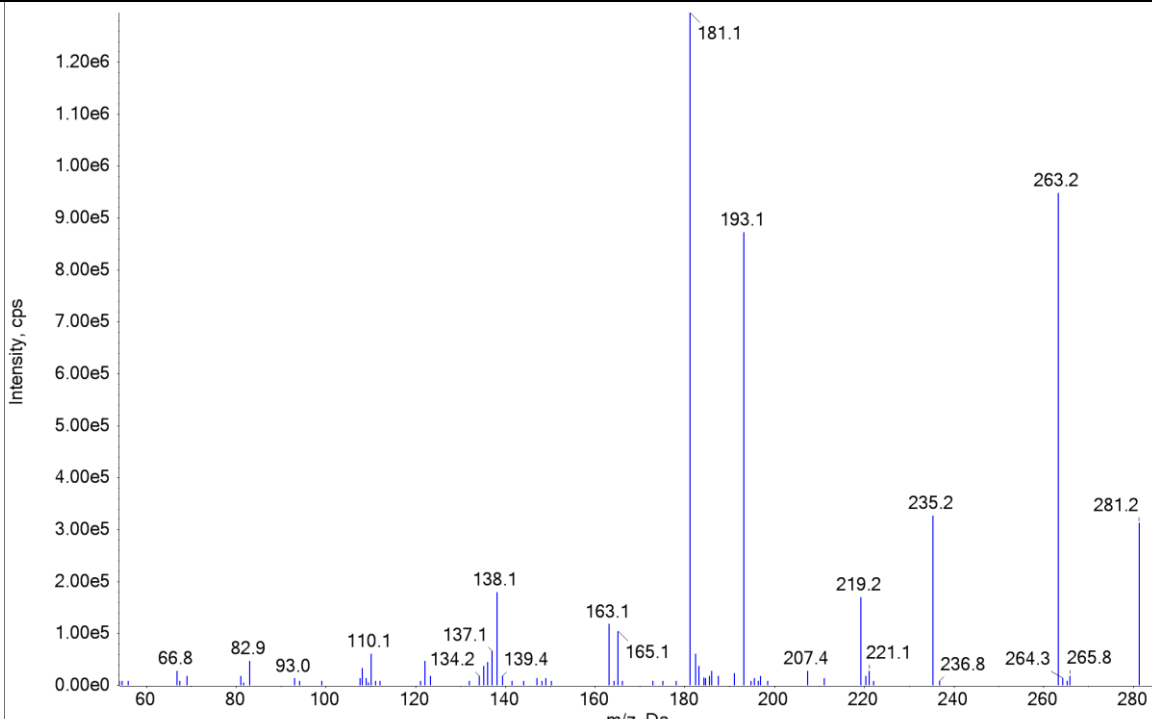
185	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Oripgramol	7.25	364.2	171.2
186	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Oxazepam	7.18	287.1	241.1

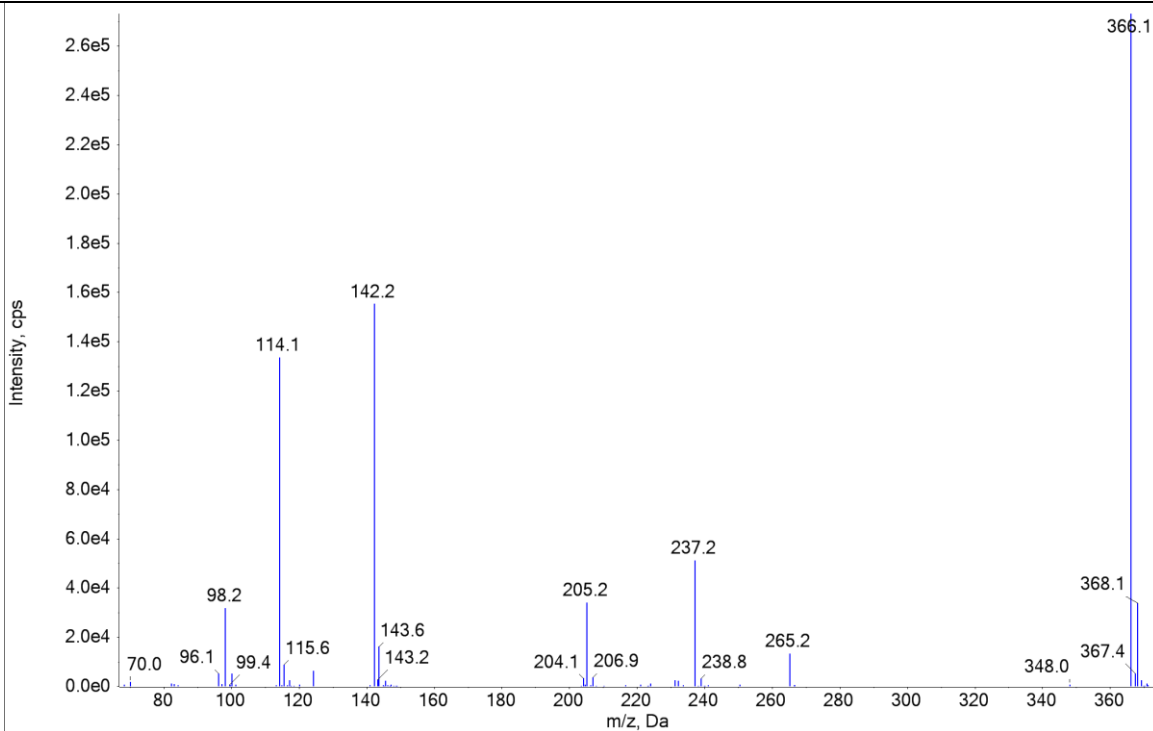
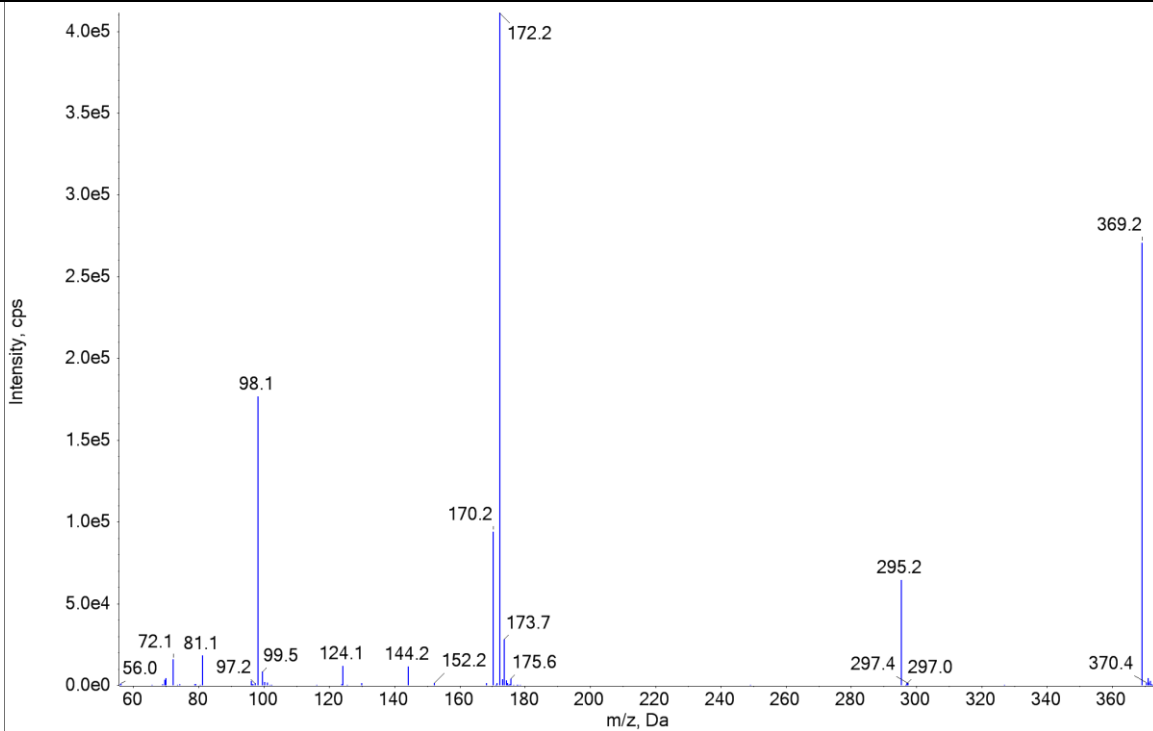
187	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Oxcarbazepine. The x-axis represents m/z (Da) from 80 to 250, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 5.5e5. The base peak is at m/z 180.1. Other labeled peaks include: 77.0, 103.9, 128.1, 132.0, 151.2, 152.1, 153.2, 165.2, 167.2, 169.2, 178.2, 181.5, 182.2, 183.6, 192.1, 208.1, 209.7, 210.2, 211.6, 236.1, 237.7, 253.2.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Oxcarbazepine	5.63	253.2	236.1
188	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Oxycodone. The x-axis represents m/z (Da) from 80 to 300, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 3.2e5. The base peak is at m/z 316.3. Other labeled peaks include: 70.1, 94.1, 131.2, 153.2, 159.3, 175.3, 187.3, 212.3, 213.3, 226.2, 228.3, 240.3, 241.3, 249.3, 256.3, 270.3, 280.3, 298.3, 299.8, 301.3, 316.3.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Oxycodone	4.13	316.2	241.2

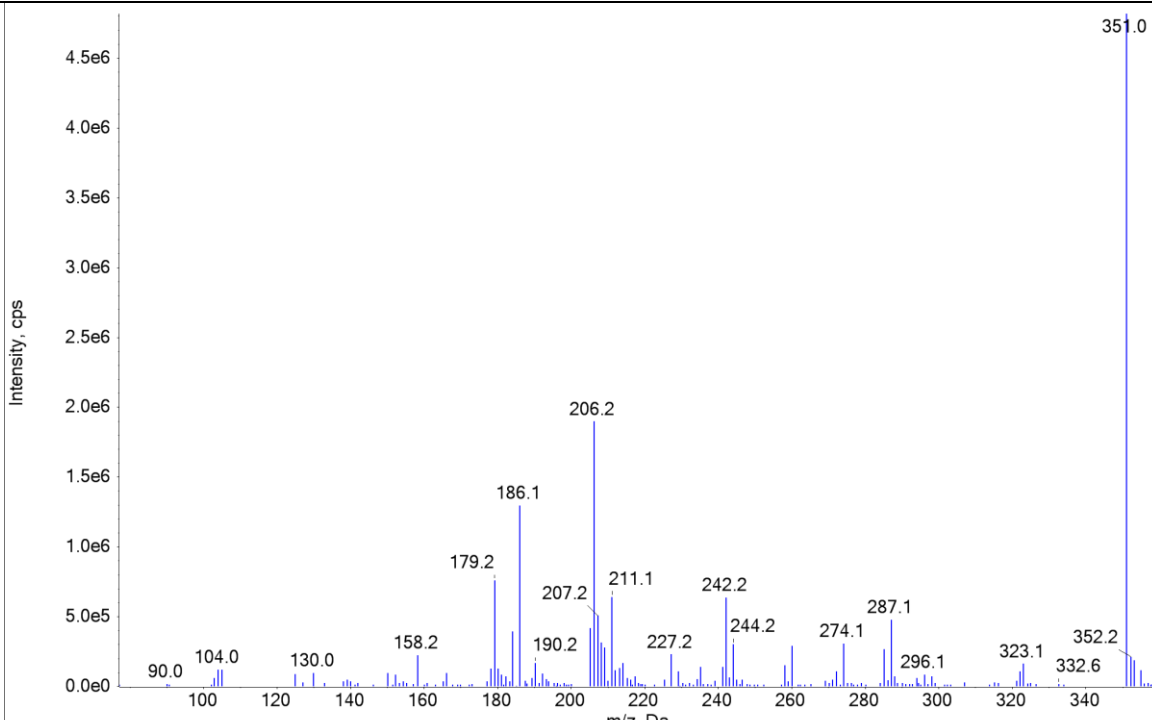
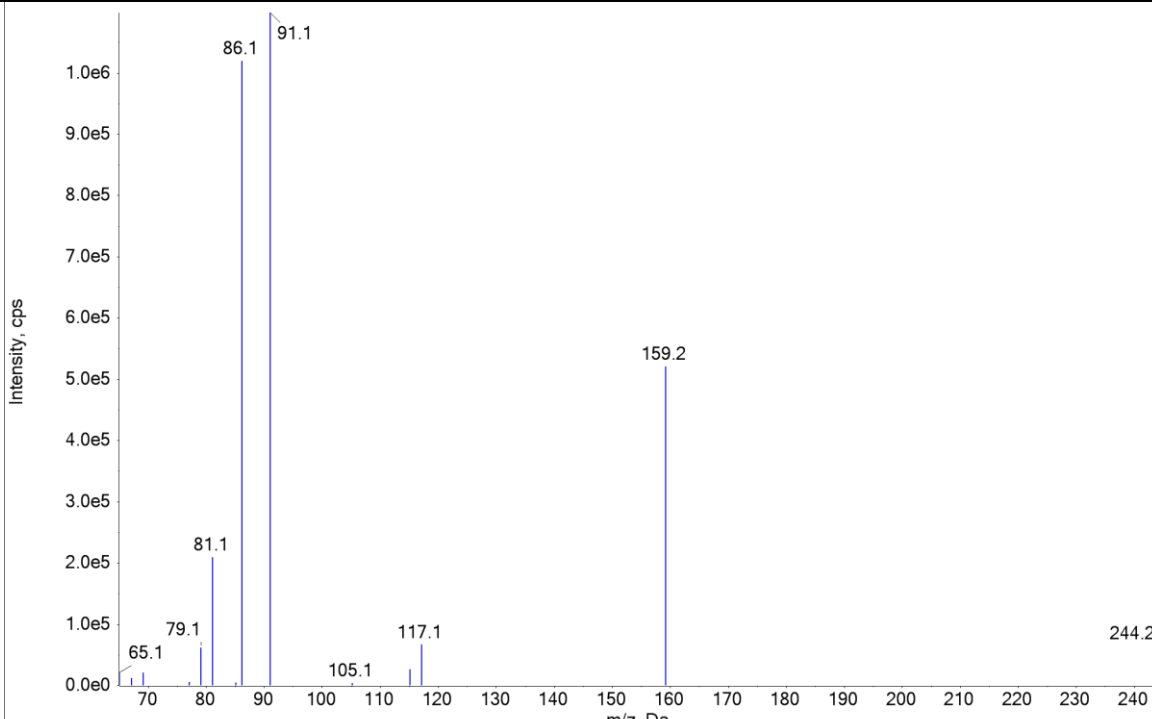
189	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Oxycodone	2.86	302.1	198

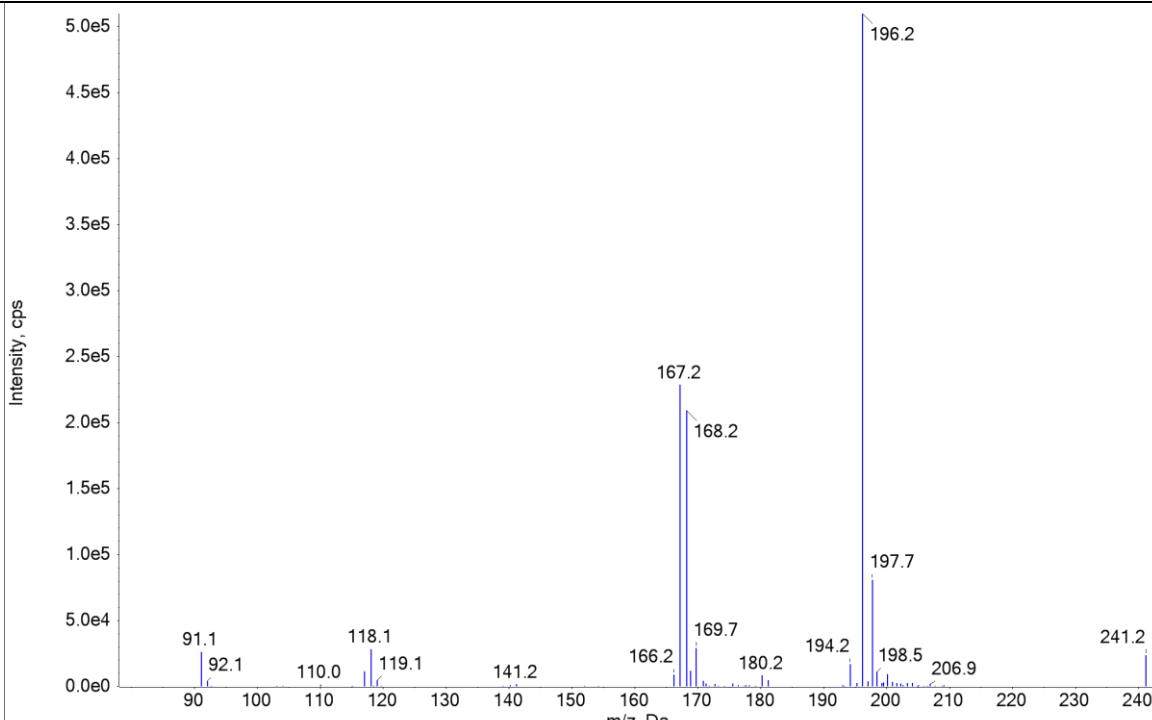
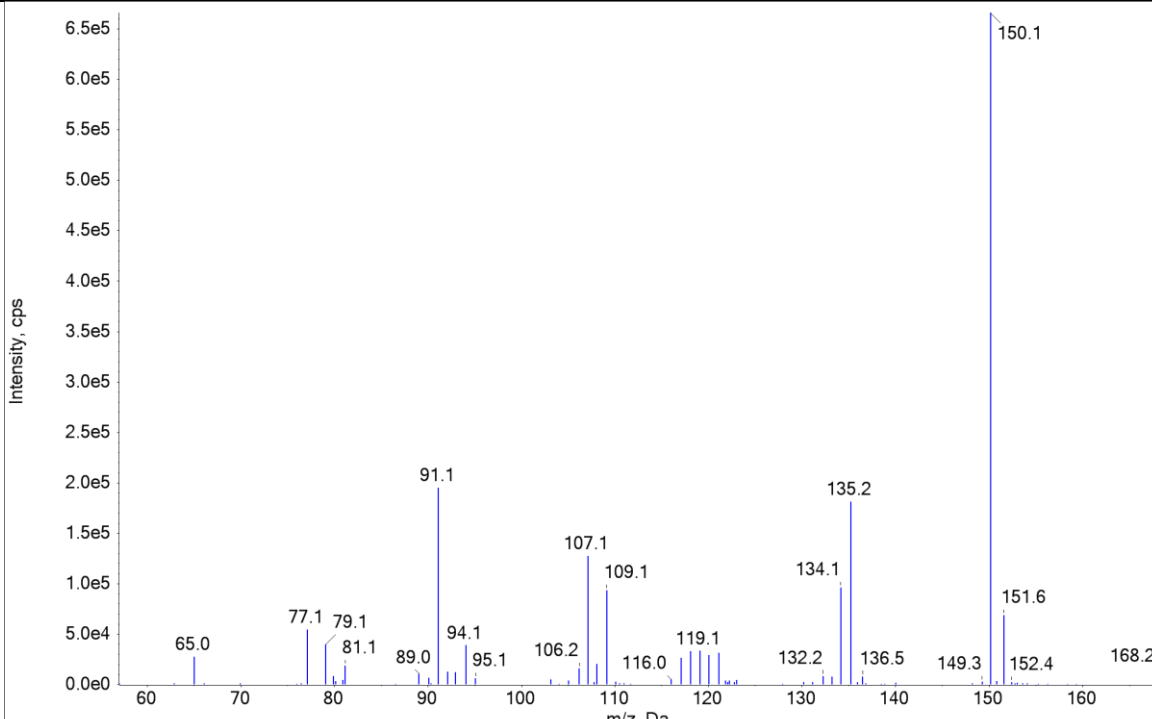
190	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Papaverine	6.86	340.1	202.1

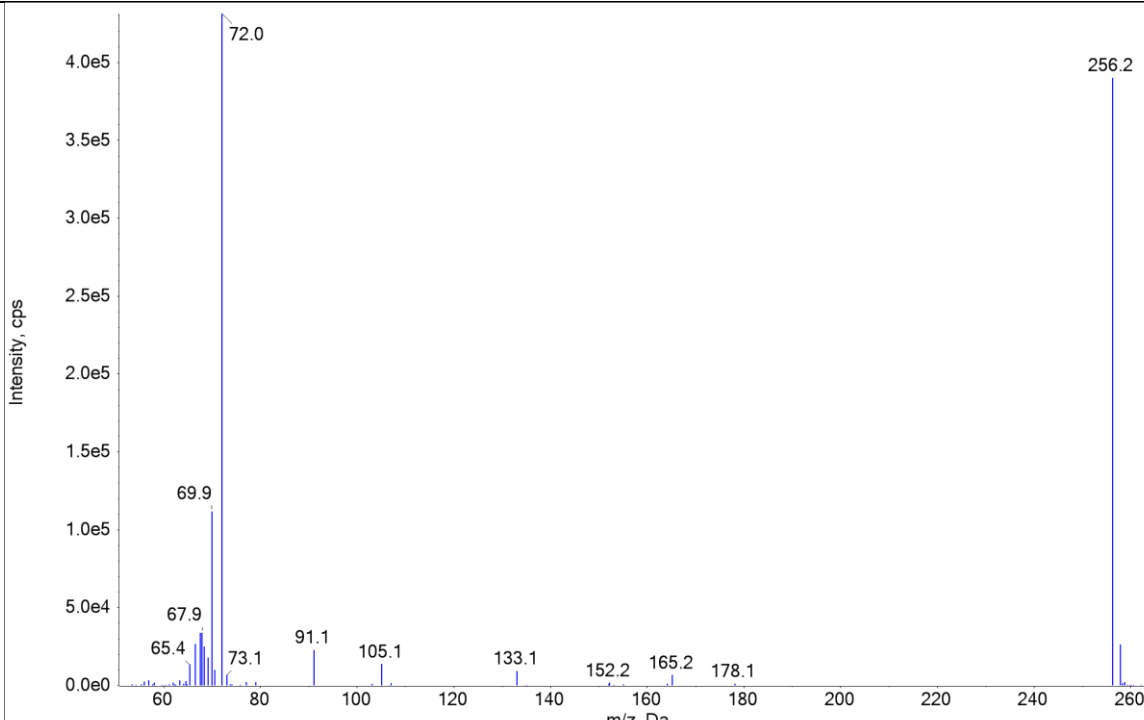
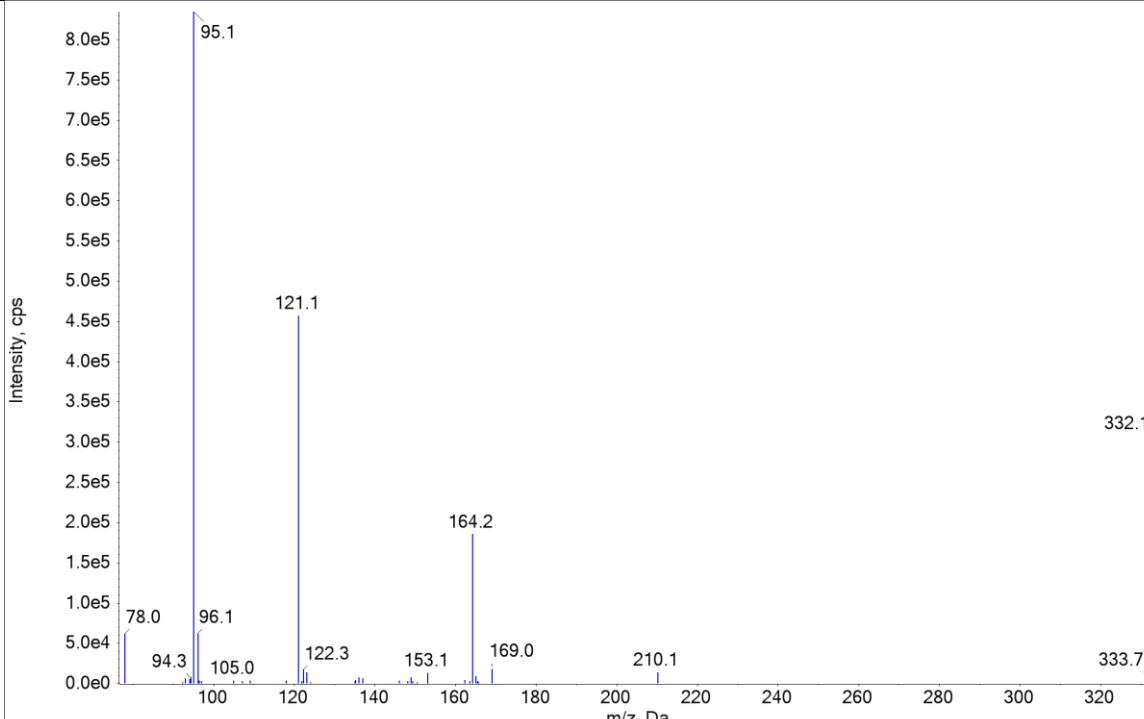
191	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Paroxetine	7.14	330.2	192.2
192	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Pentazocine	5.96	286.2	218.2

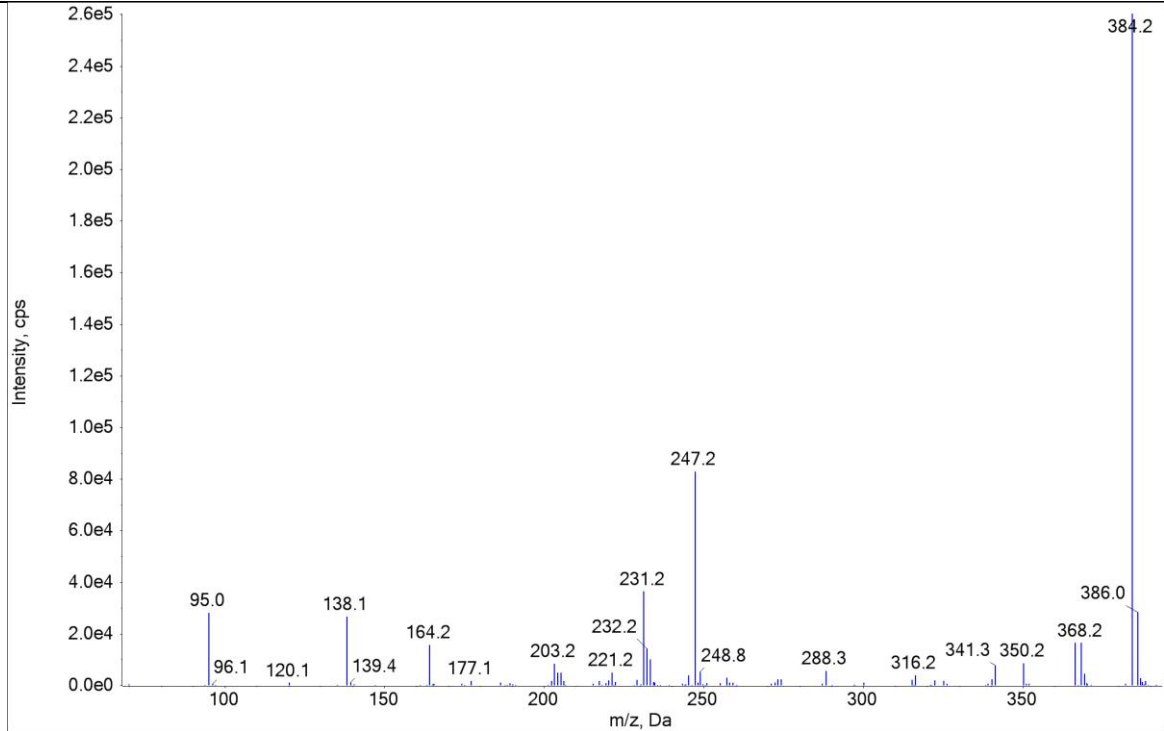
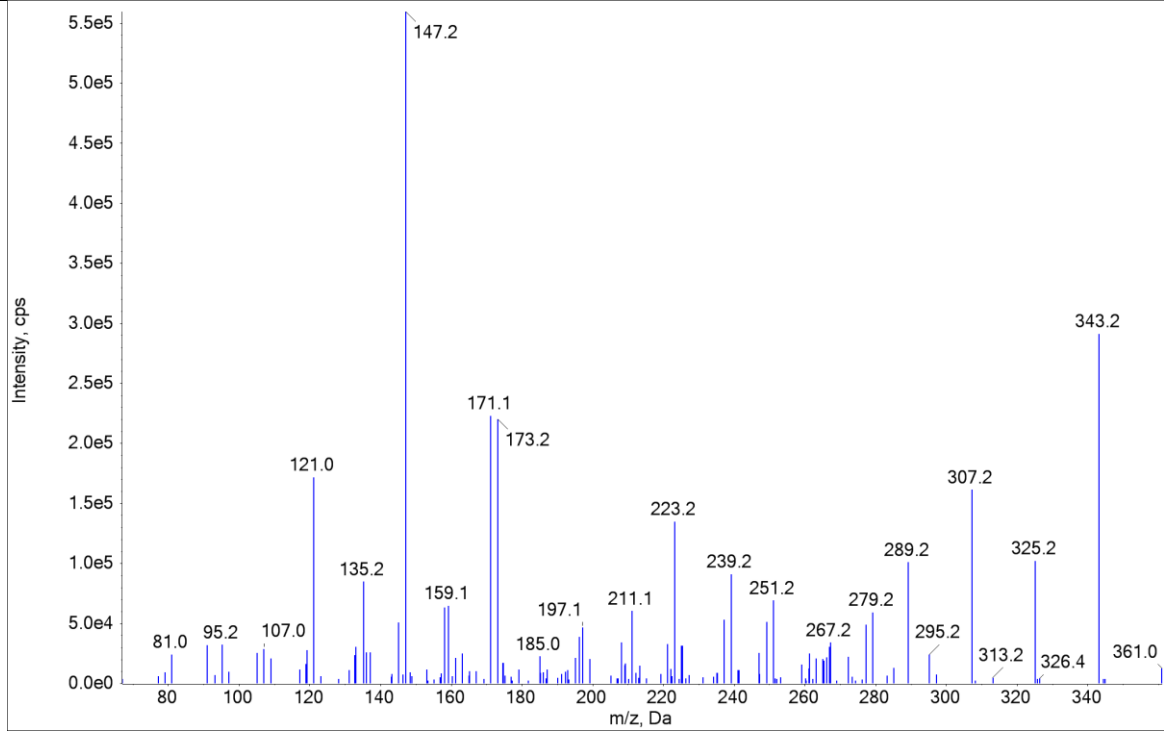
193	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Pentoxifylline	5.2	279.2	181
194	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Pentoxifylline (-OH) metabolite	4.04	281.2	193

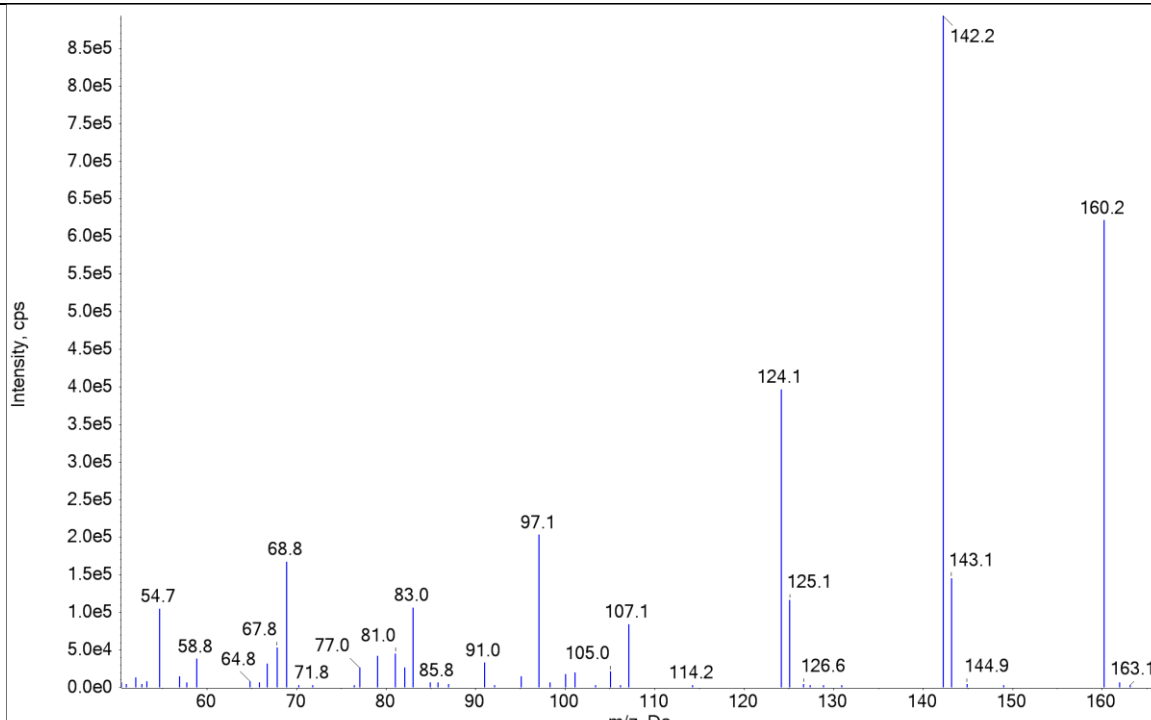
195	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Periciazine. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 380, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 2.6e5. The base peak is at m/z 366.1. Other labeled peaks include: 70.0, 96.1, 98.2, 99.4, 114.1, 115.6, 142.2, 143.2, 143.6, 204.1, 205.2, 206.9, 237.2, 238.8, 265.2, 348.0, 367.4, and 368.1.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Periciazine	7.93	366.2	142.2
196	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Perindopril. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 380, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 4.0e5. The base peak is at m/z 172.2. Other labeled peaks include: 56.0, 72.1, 81.1, 97.2, 98.1, 99.5, 124.1, 144.2, 152.2, 170.2, 173.7, 175.6, 295.2, 297.0, 297.4, 369.2, and 370.4.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Perindopril	7.08	369.2	172.2

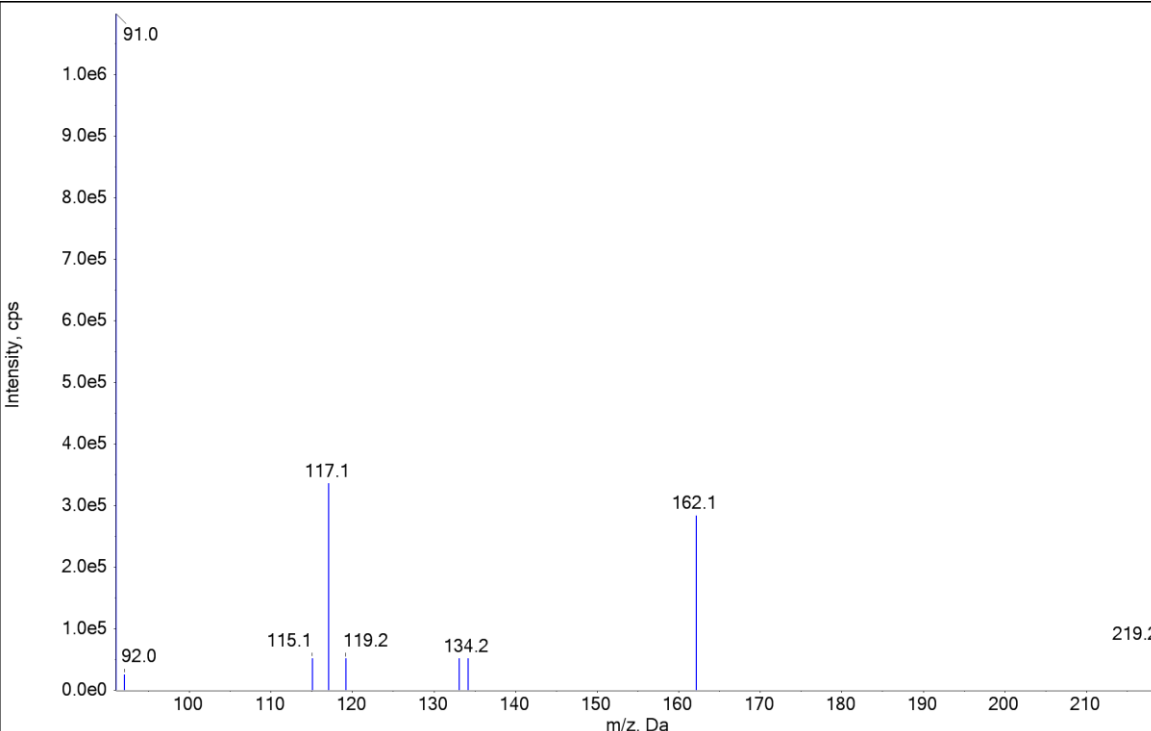
197	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Phenazepam	6.8	351.0	206
198	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Phencyclidine	6.18	244.2	91.1

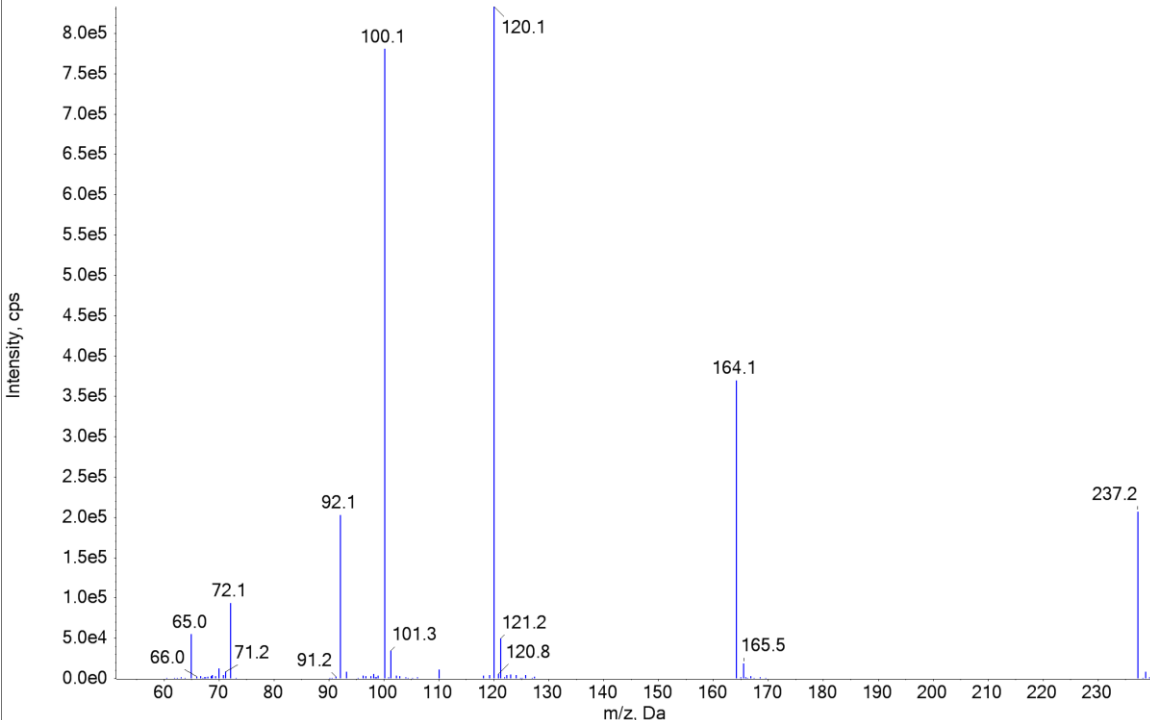
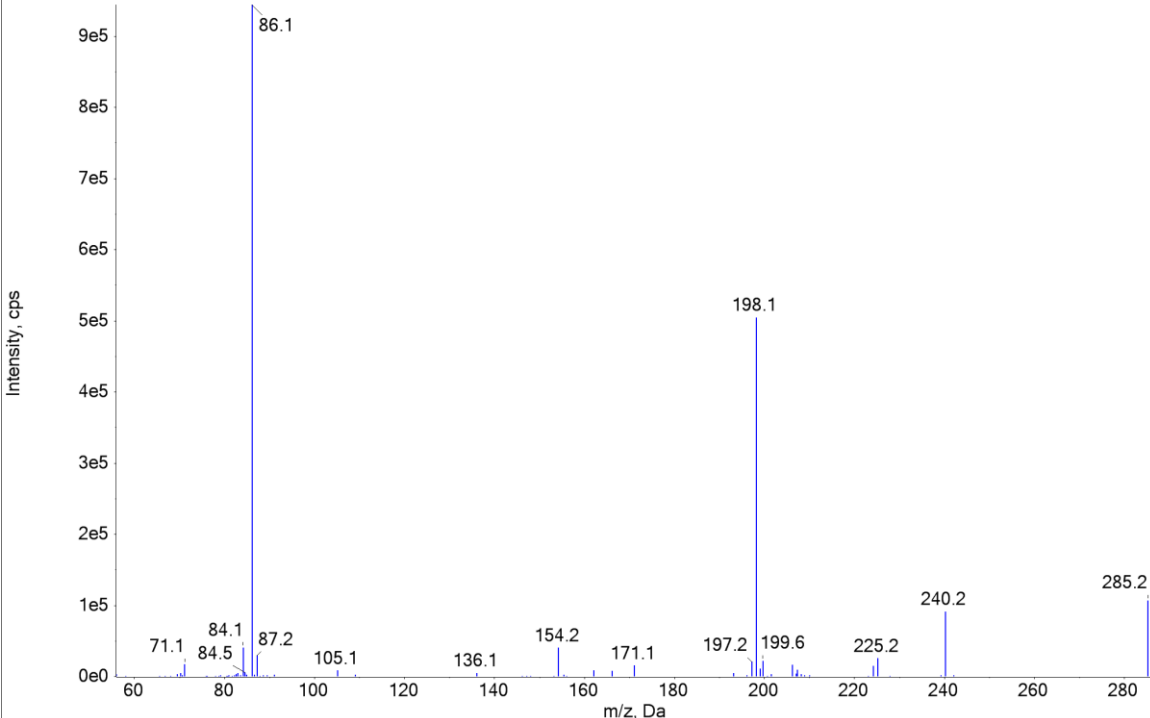
199	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Pheniramine	5.94	241.2	196.2
200	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Phenylephrine	3.4	168.1	150.1

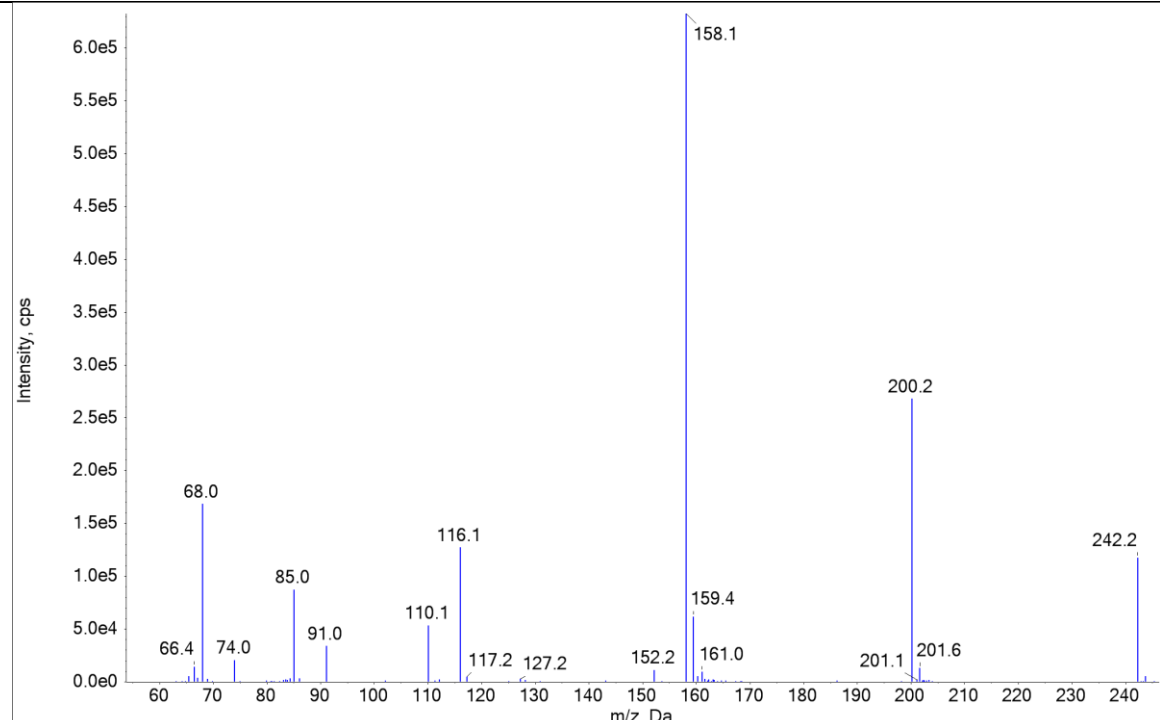
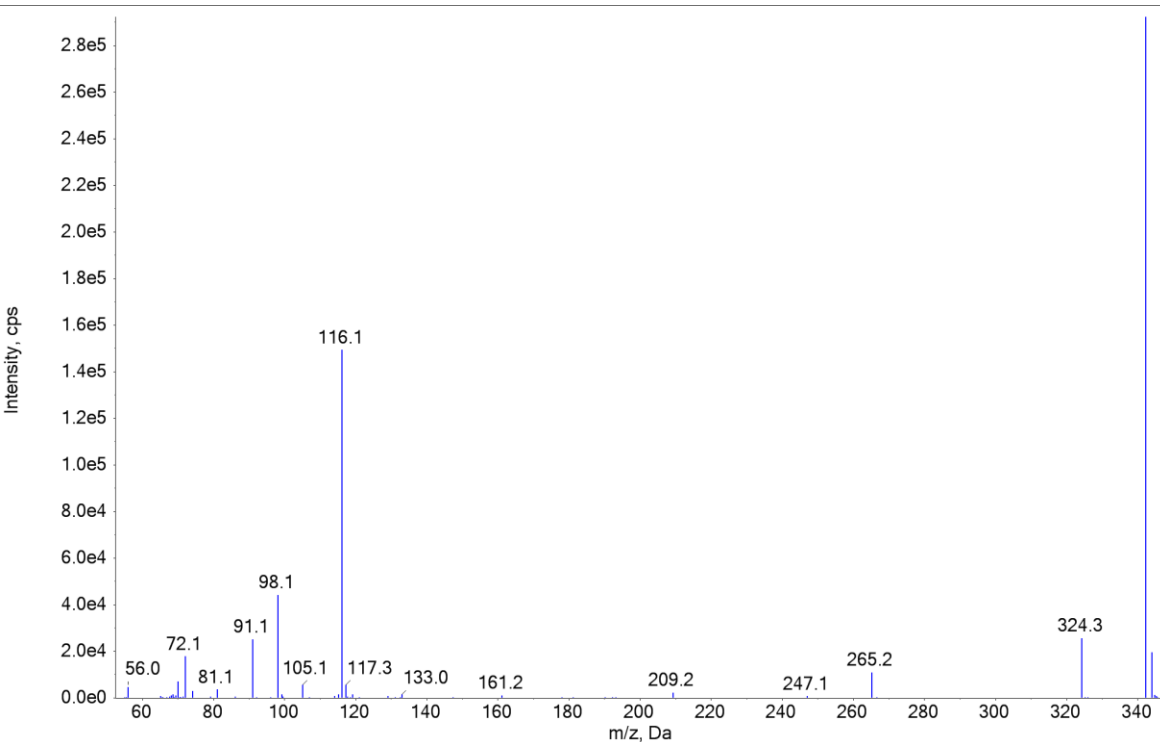
201	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Phenyltoloxamine. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 260, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 4.0e5. The base peak is at m/z 72.0. Other labeled peaks include m/z 65.4, 67.9, 69.9, 73.1, 91.1, 105.1, 133.1, 152.2, 165.2, 178.1, and 256.2.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Phenyltoloxamine	8.72	256.2	72
202	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Piroxicam. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 340, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 8.0e5. The base peak is at m/z 95.1. Other labeled peaks include m/z 78.0, 94.3, 96.1, 105.0, 121.1, 122.3, 153.1, 164.2, 169.0, 210.1, 332.1, 333.7, and 332.1.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Piroxicam	5.72	332.1	95.1

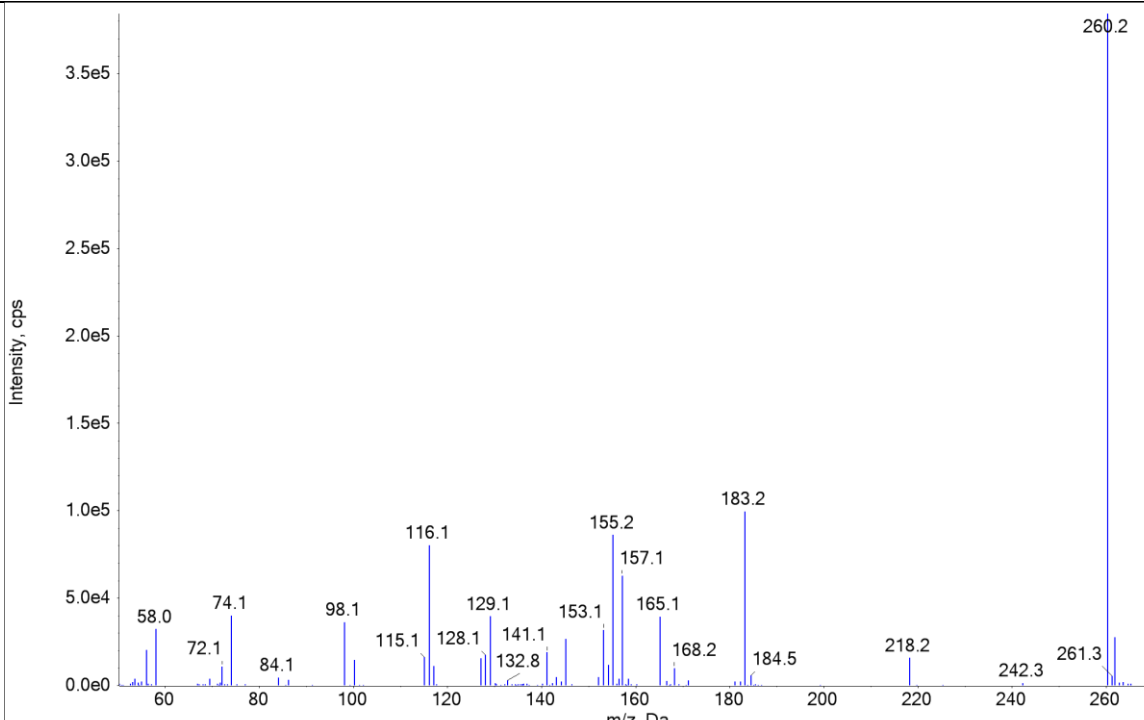
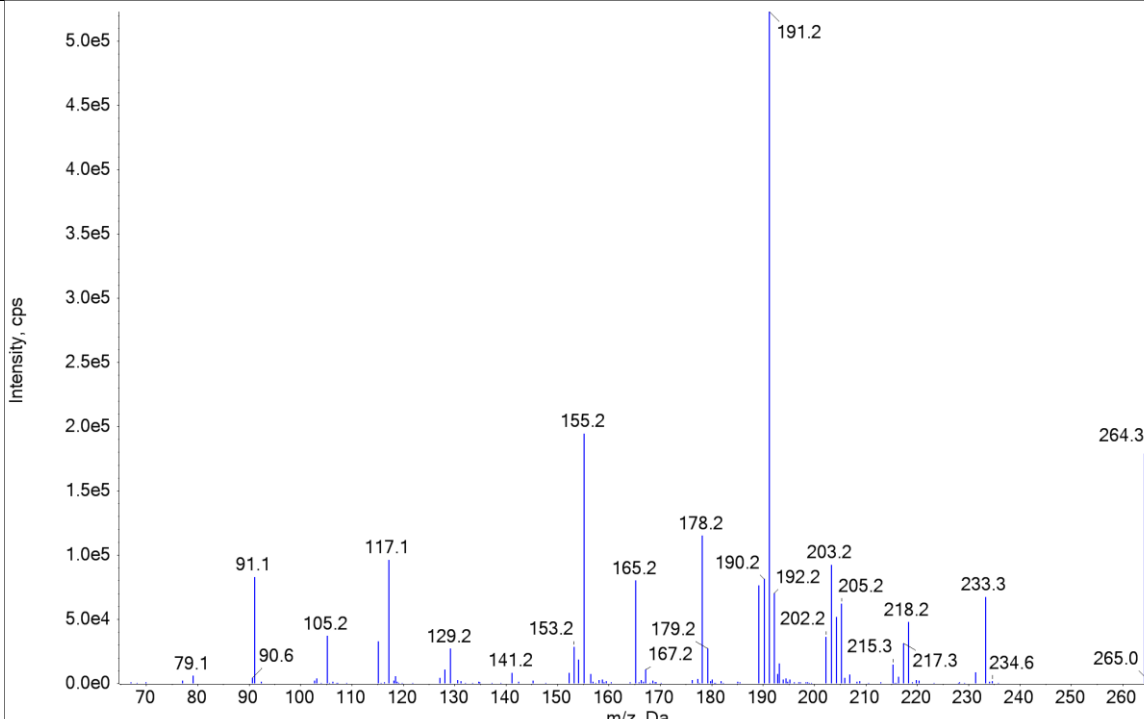
203	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Prazosin	6.04	384.2	247.2
204	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Prednisolone	6.64	361.2	147.1

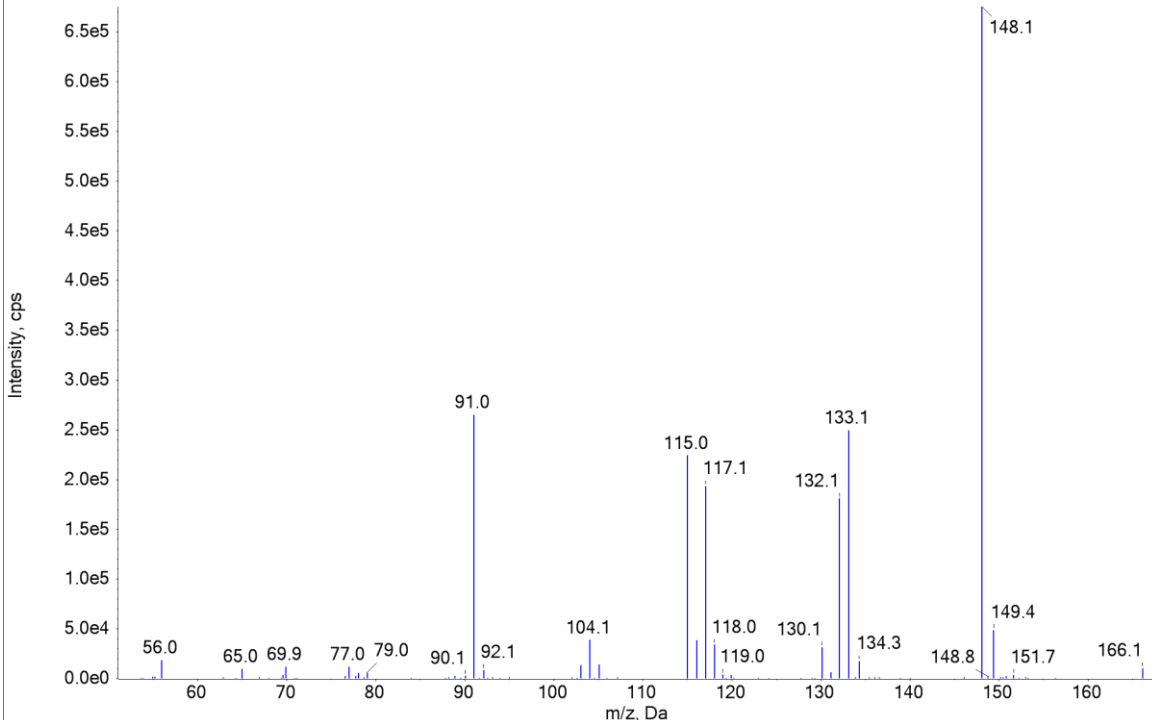
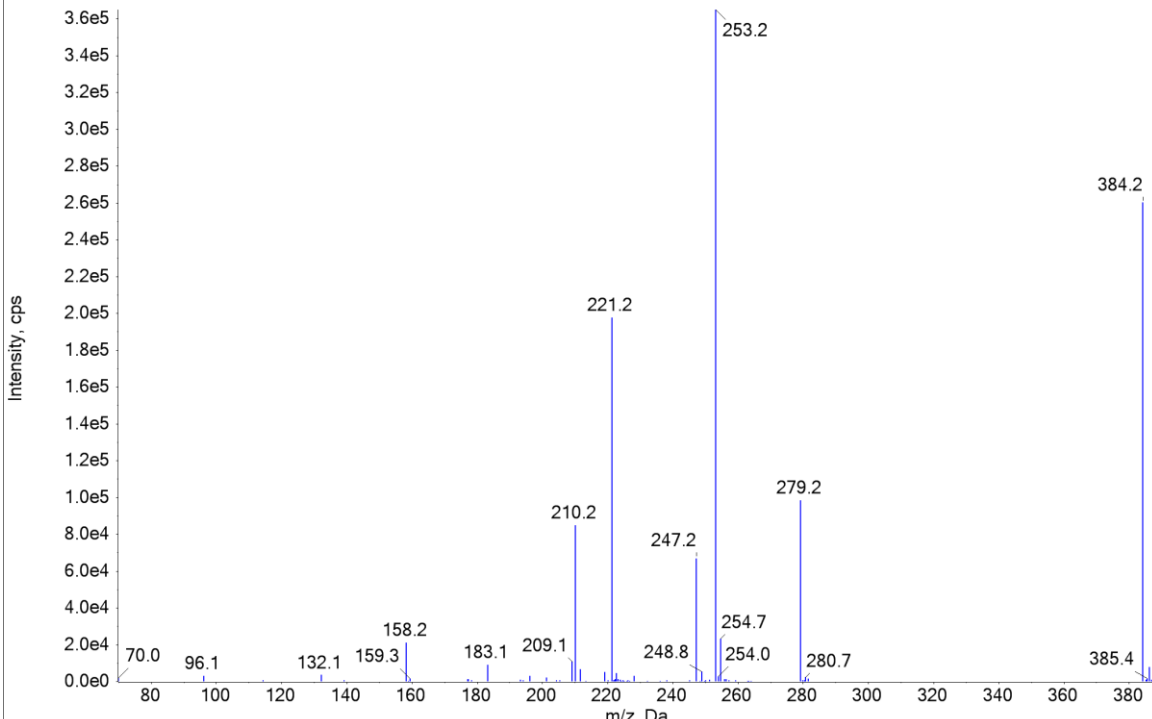
205	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Pregabalin	3.41	160.2	142

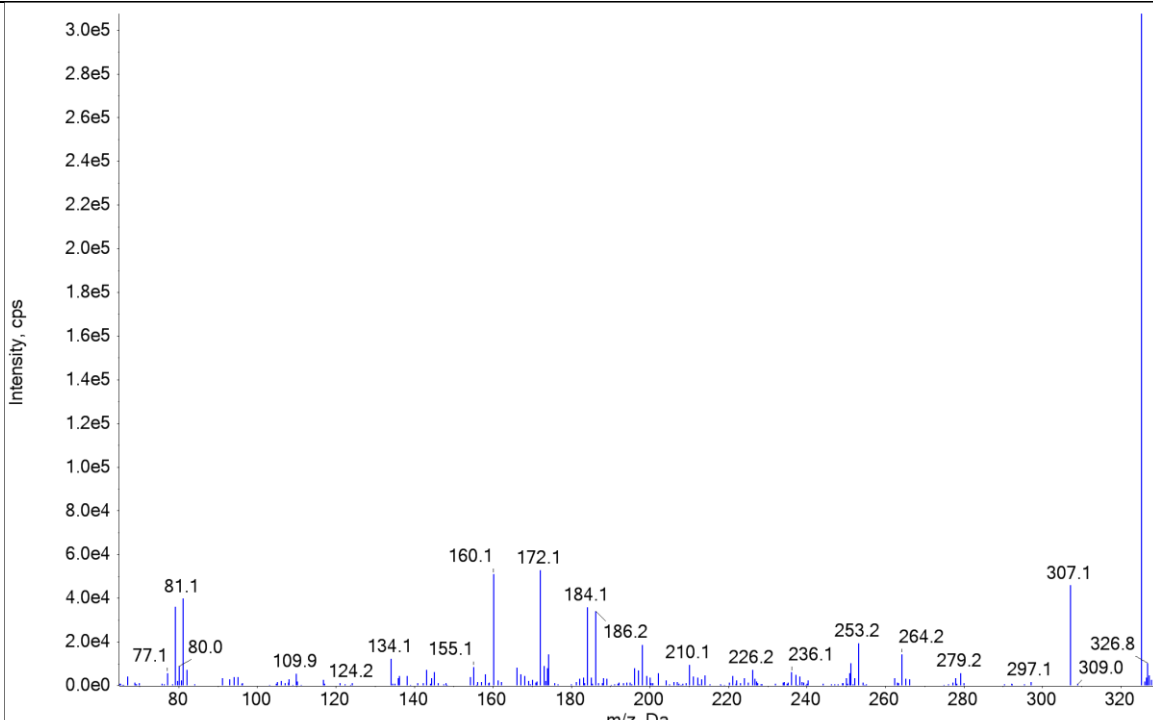
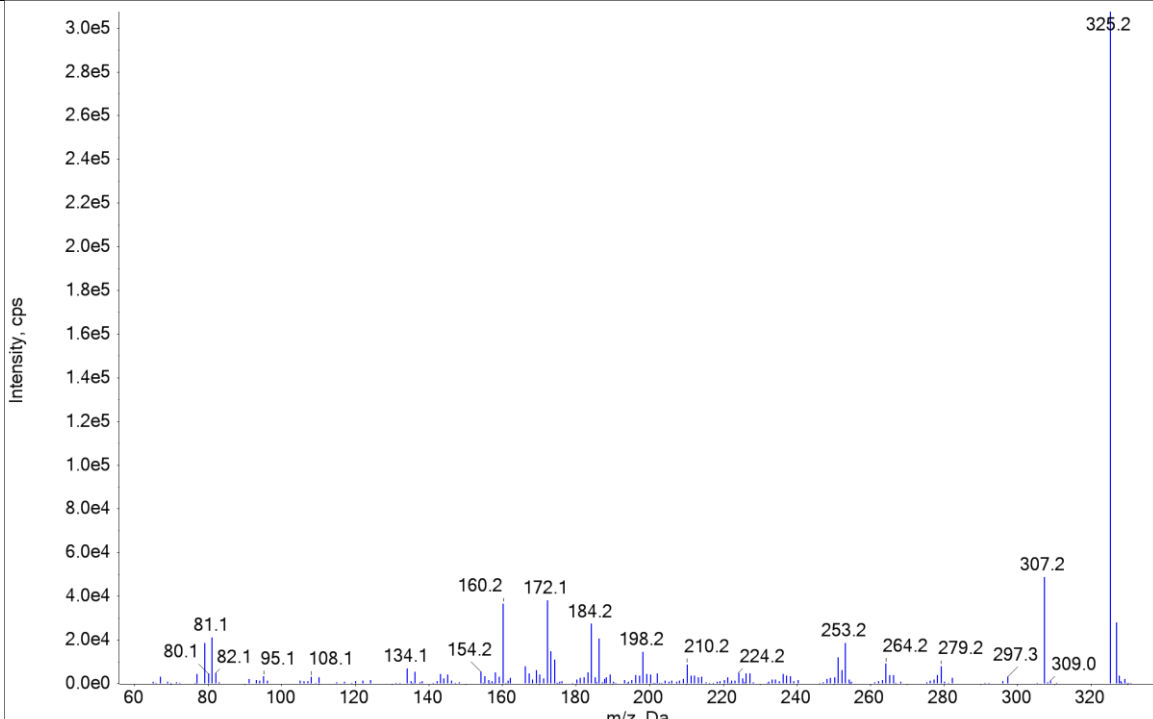
206	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Primidone	4.85	219.1	91

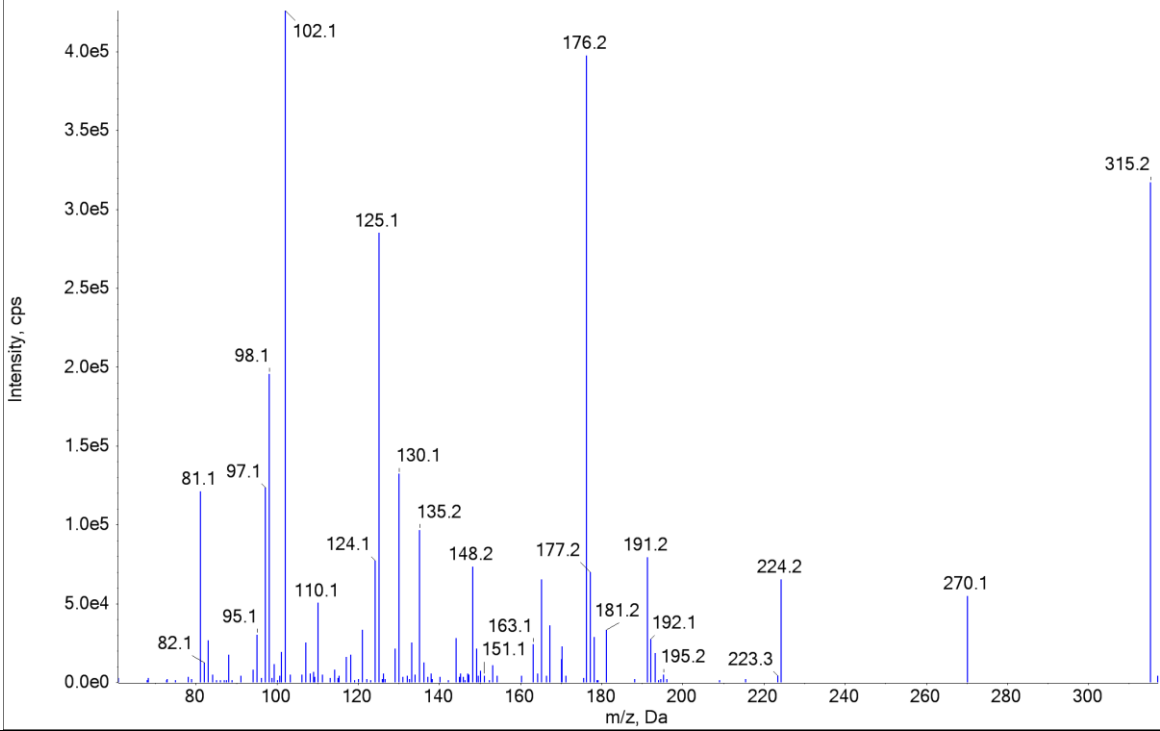
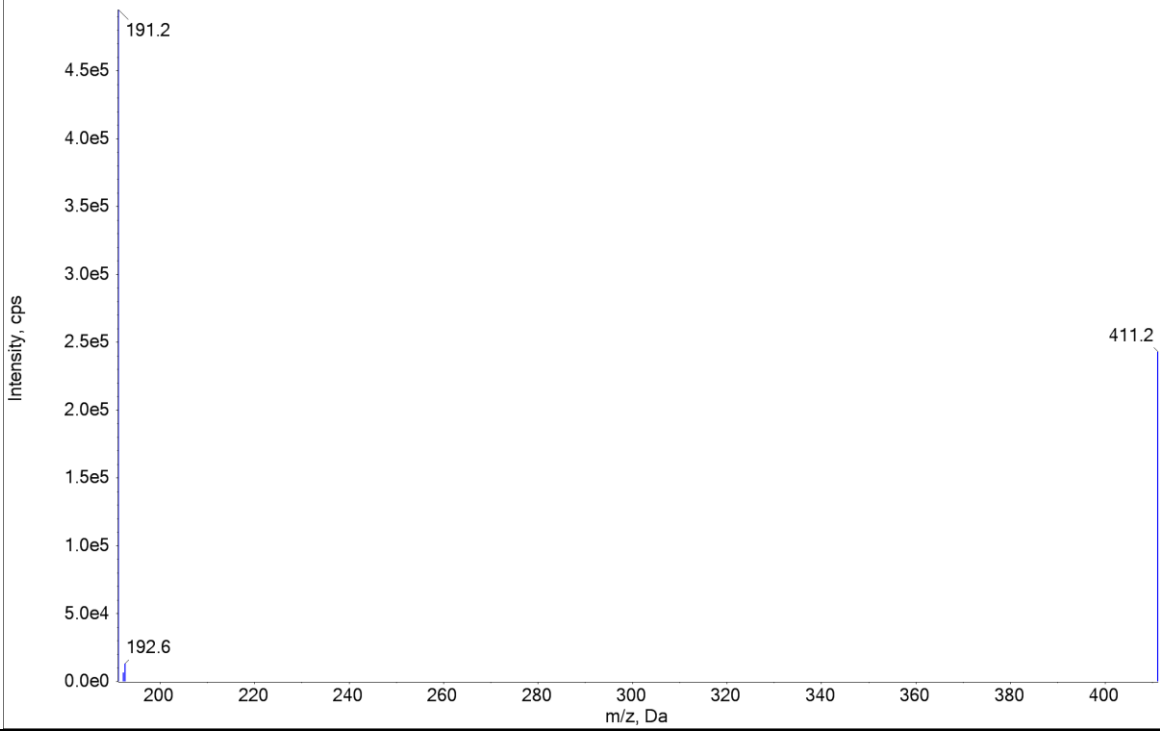
207	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Procaine	4.5	237.2	120
208	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Promethazine	7.34	285.1	198.1

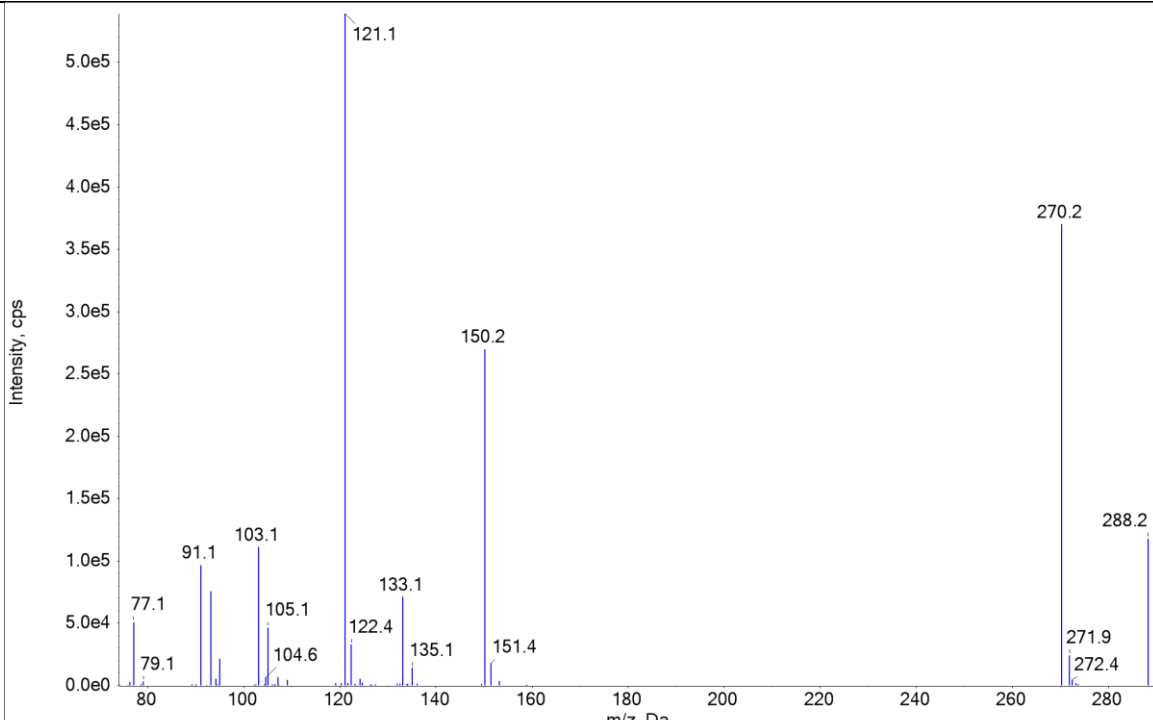
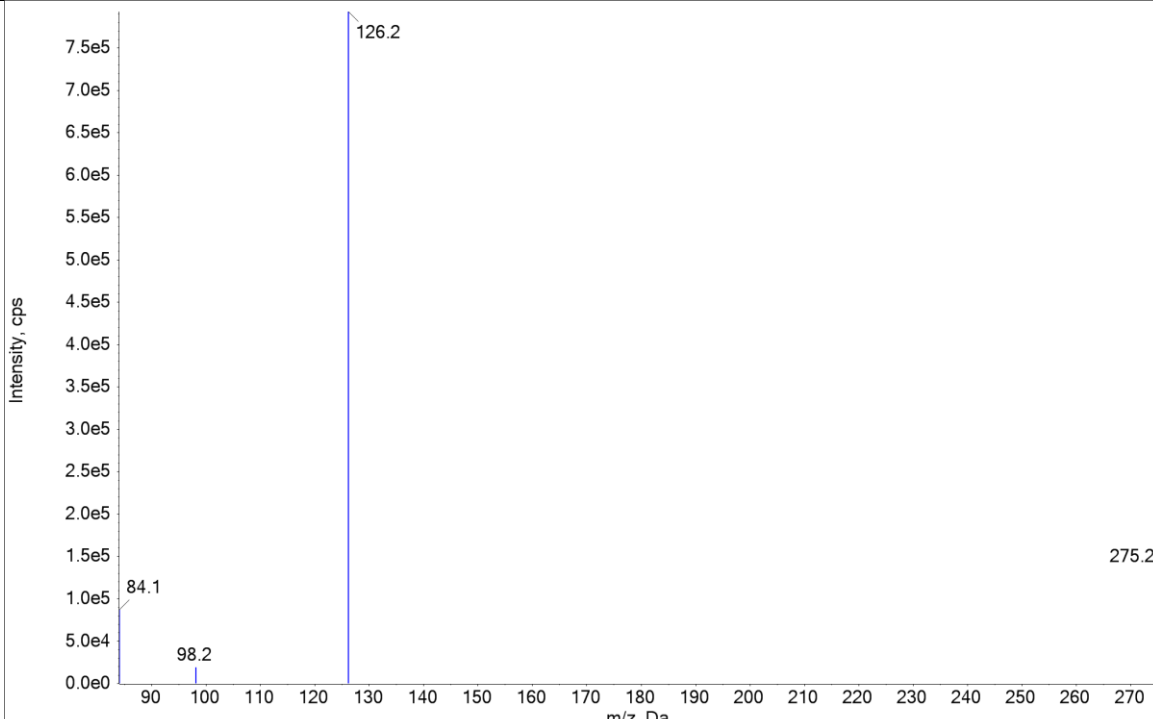
209	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Prometryn	8.46	242.1	200.2
210	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Propafenone	7.28	342.2	116.1

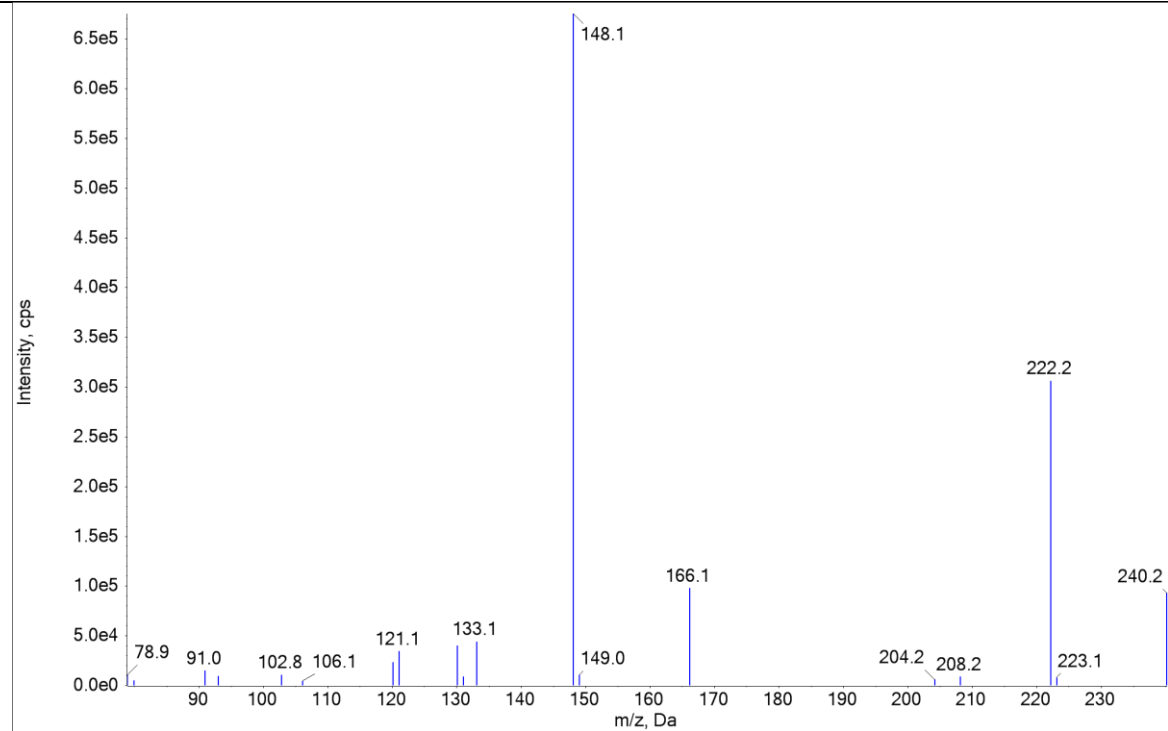
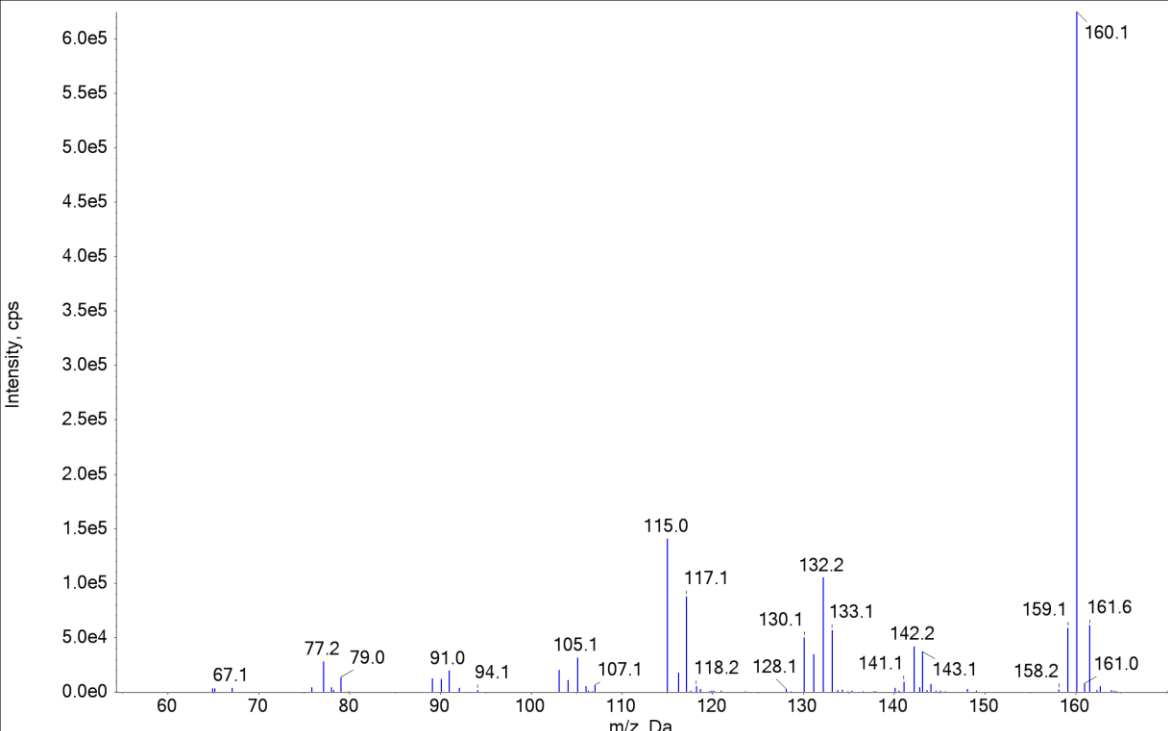
211	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Propranolol	6	260.2	183.2
212	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Protriptyline	7.2	264.2	191.2

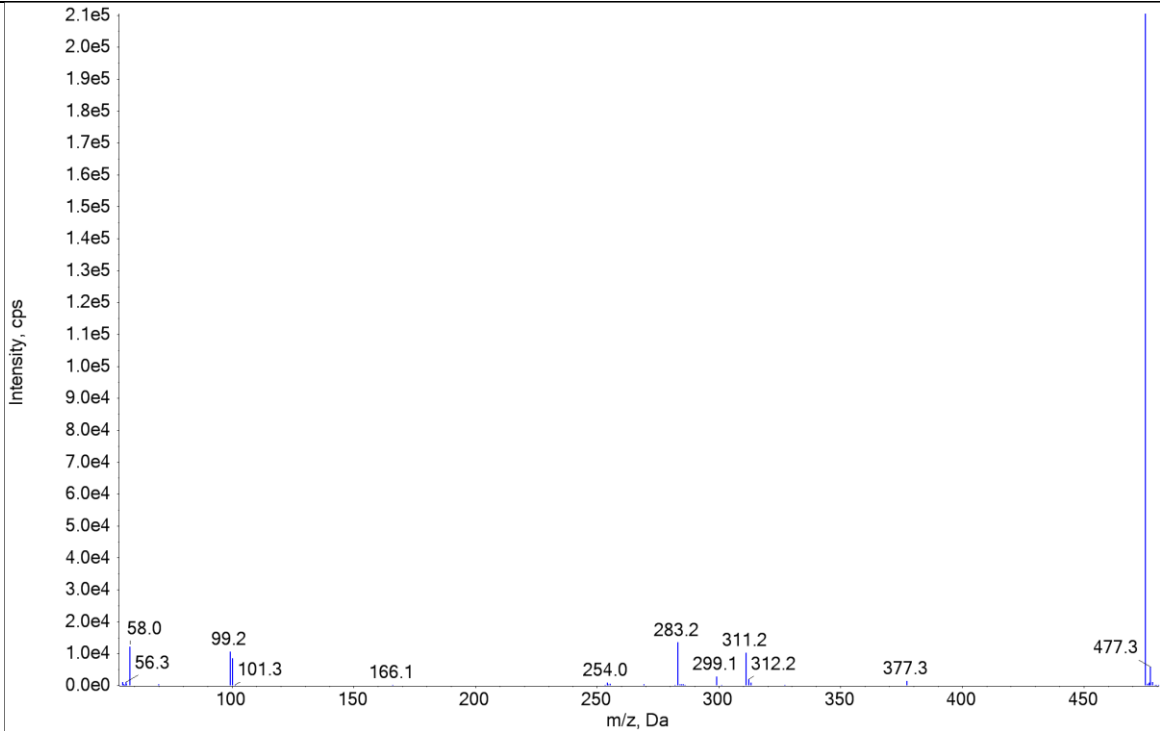
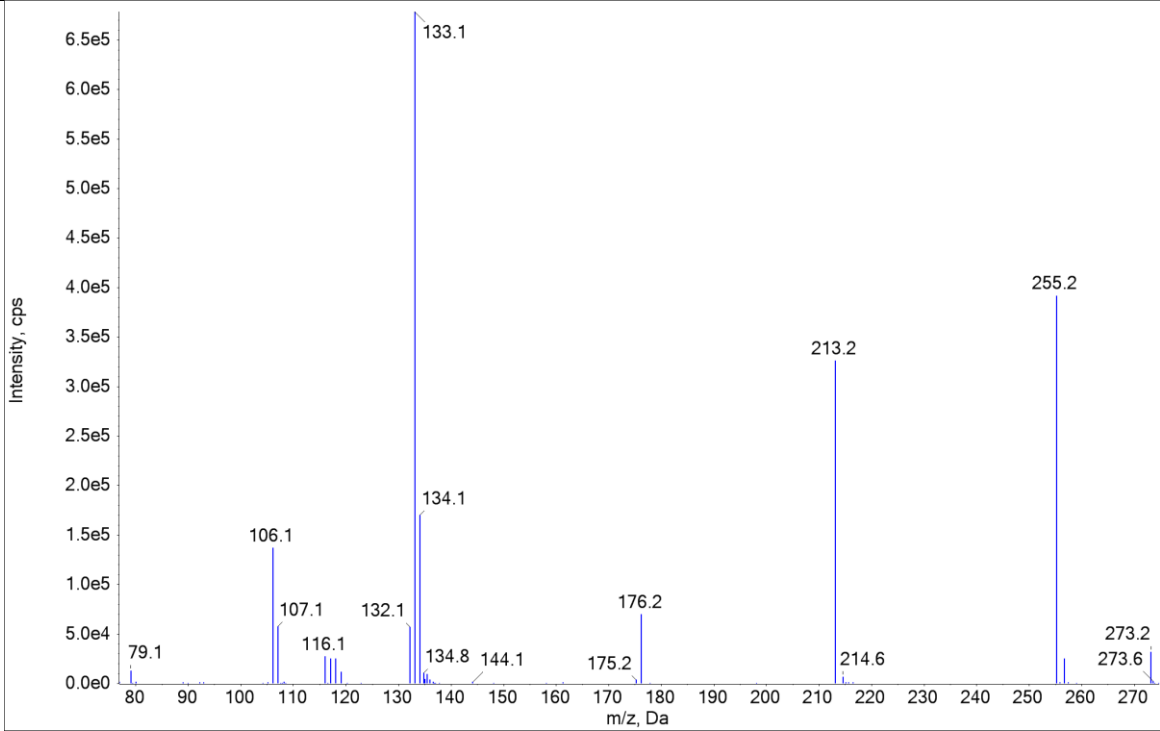
213	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Pseudoephedrine	3.4	166.1	148.1
214	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Quetiapine	7.6	384.2	253.2

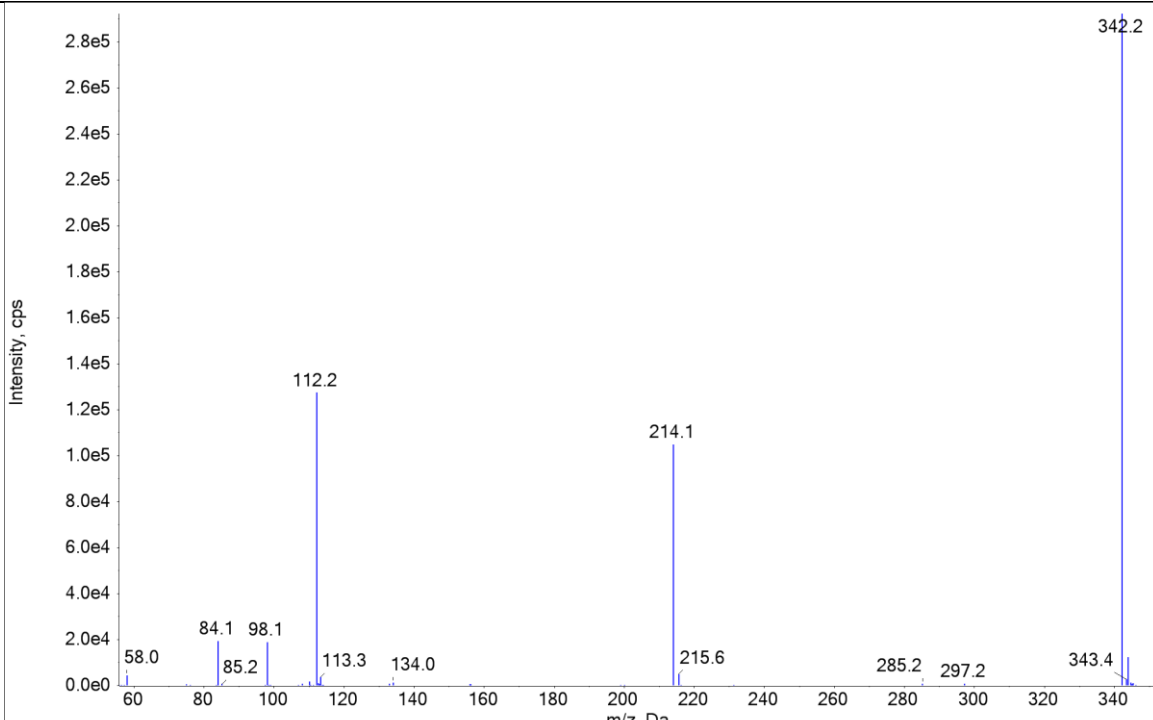
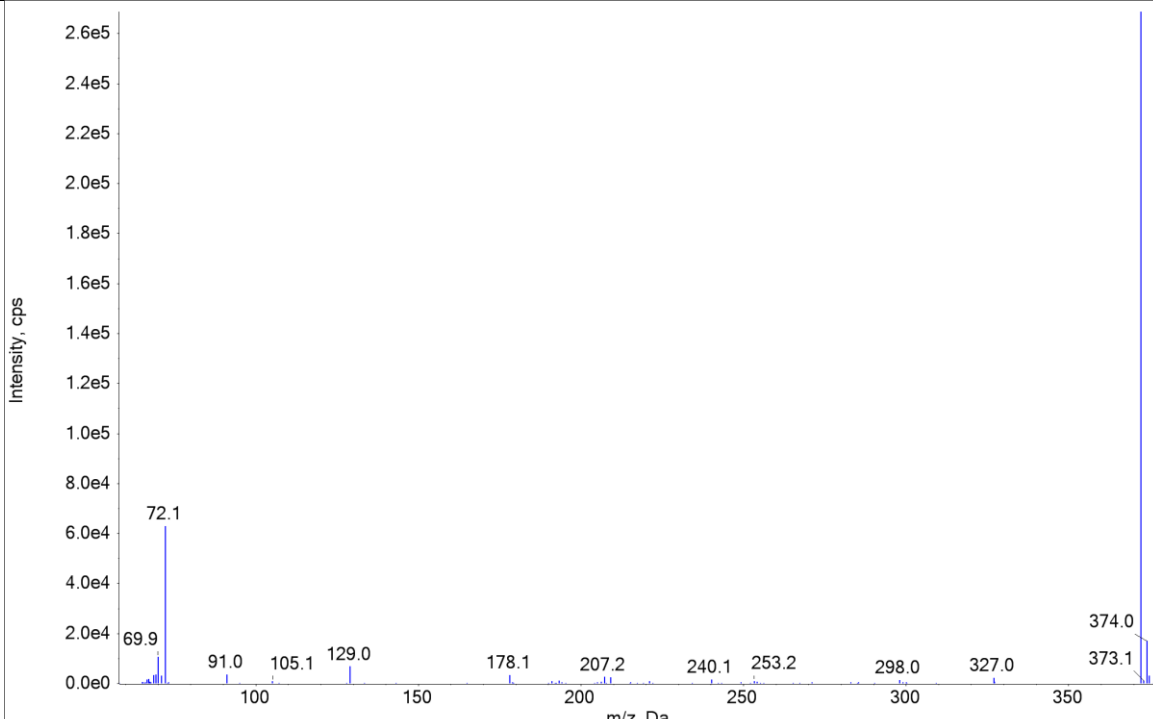
215	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Quinidine	5.9	325.2	172.1
216	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Quinine	5.98	325.2	79

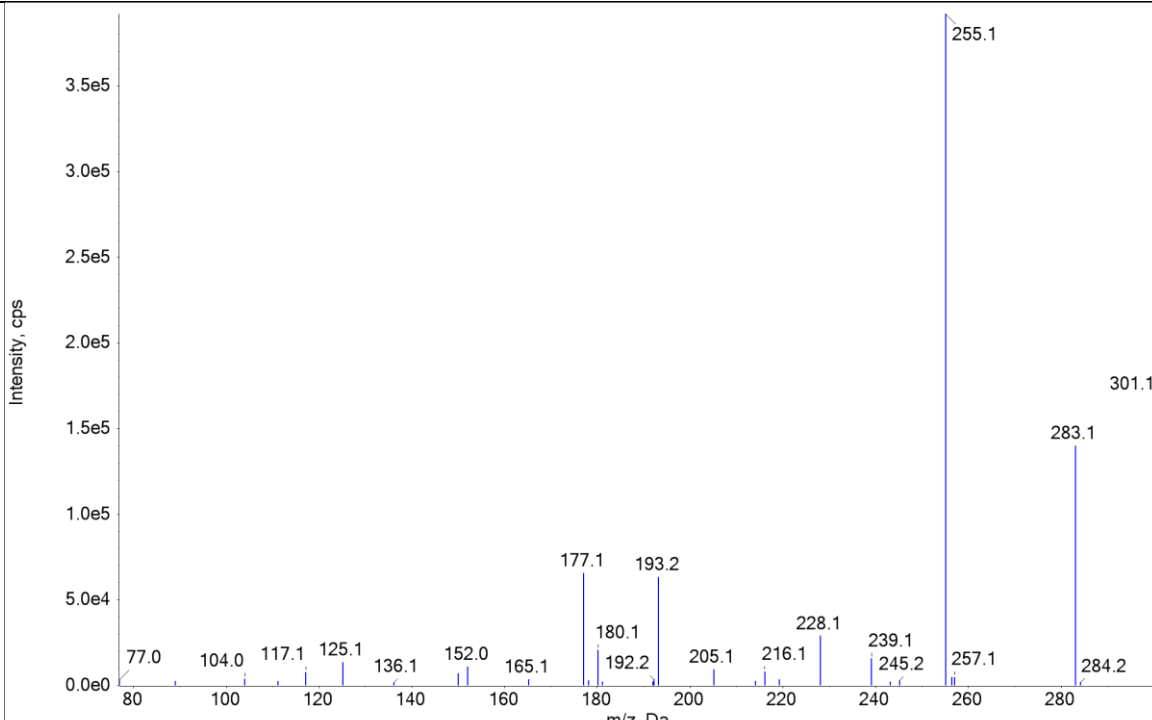
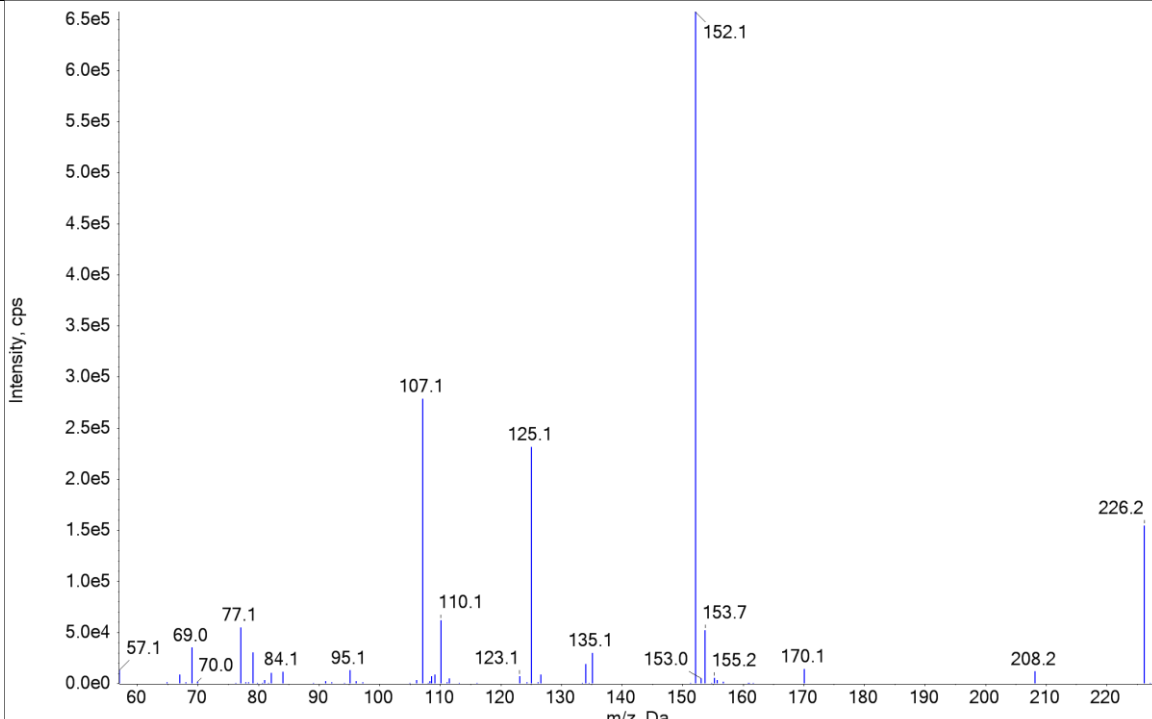
217	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Ranitidine	3.5	315.1	176.1
218	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Risperidone	6.46	411.2	191.2

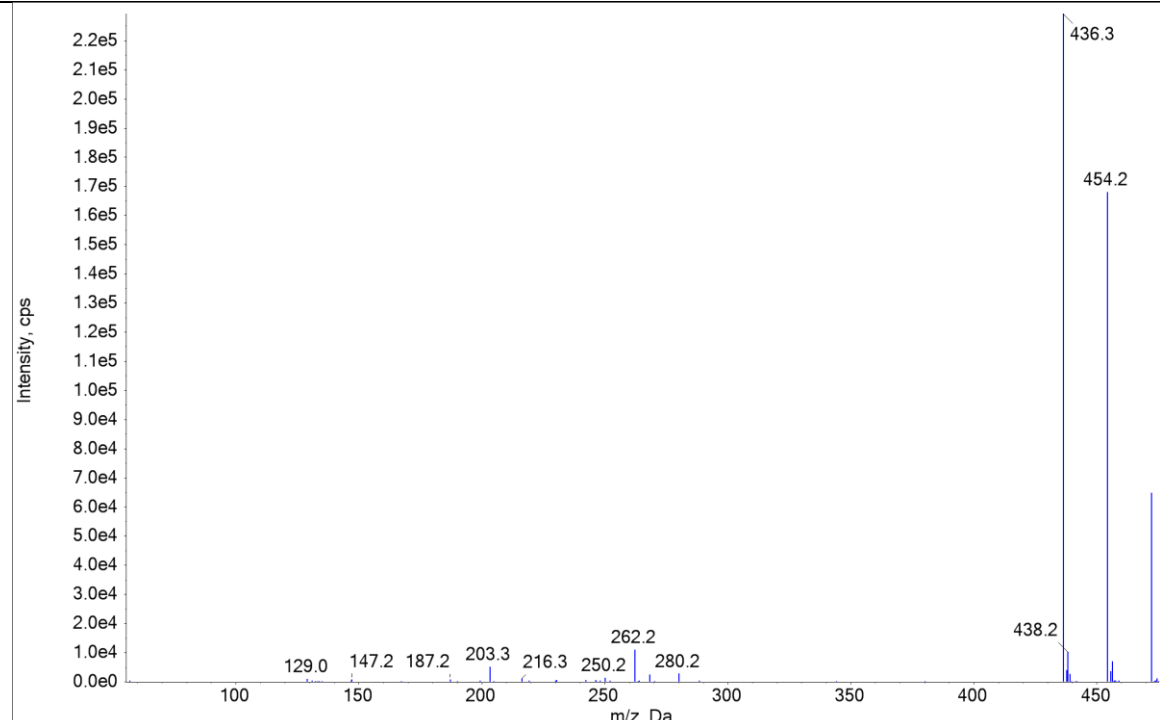
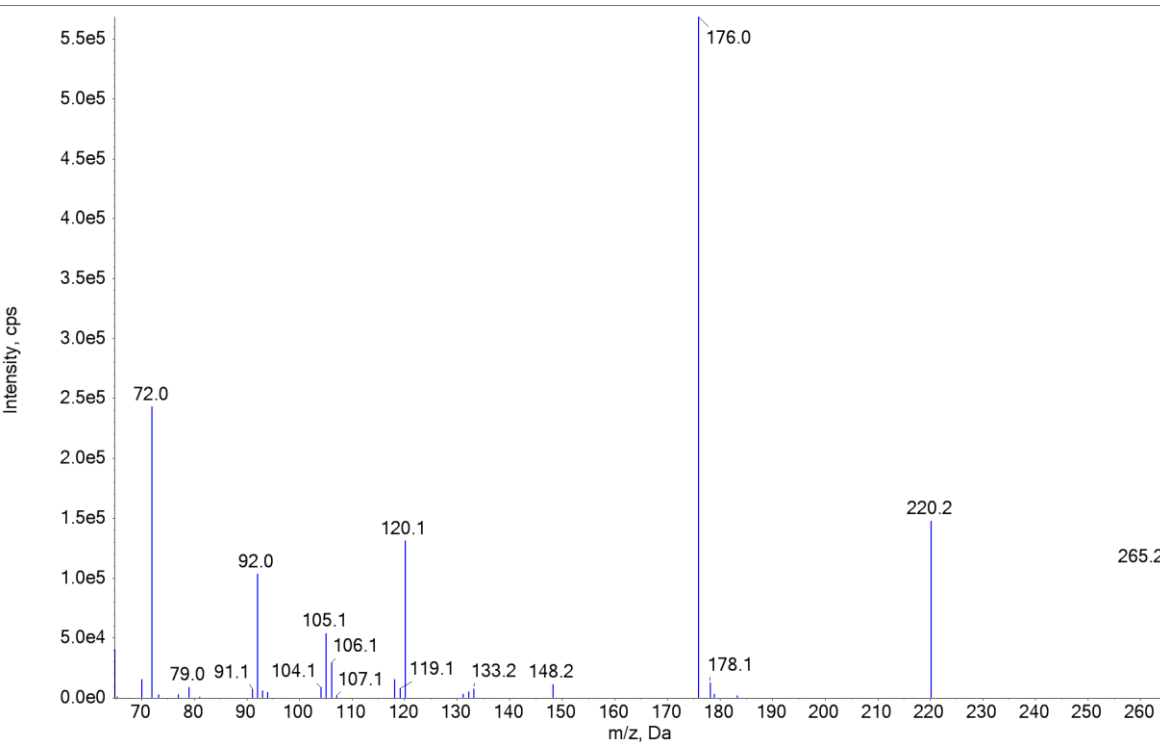
219	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Ritodrine	4.27	288.2	121.1
220	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Ropivacaine	7.09	275.2	126.1

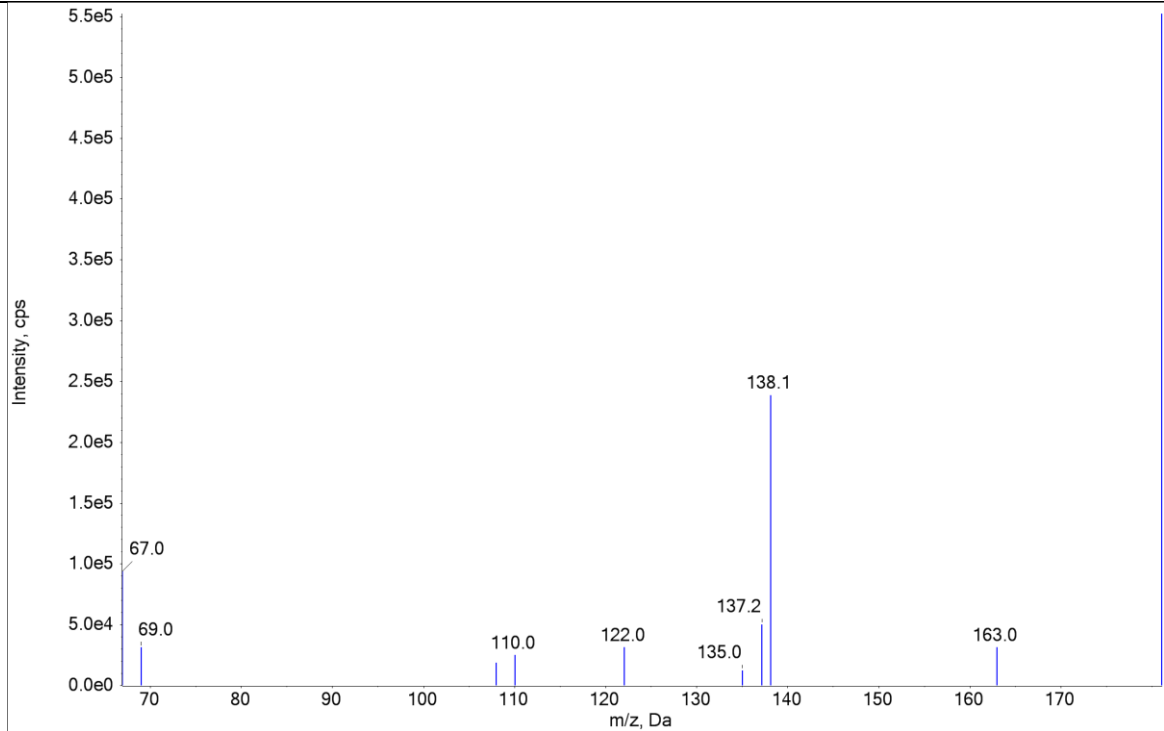
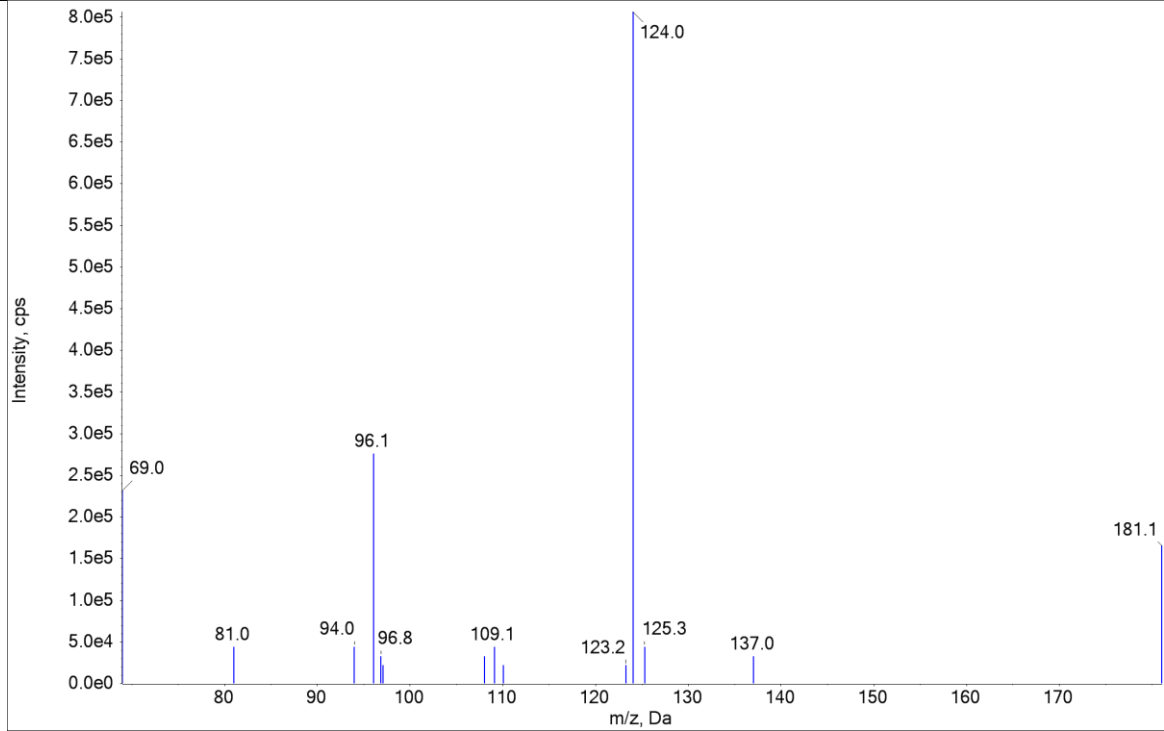
221	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Salbutamol. The x-axis represents m/z (Da) from 90 to 230, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 6.5e5. The base peak is at m/z 148.1. Other labeled peaks include 78.9, 91.0, 102.8, 106.1, 121.1, 133.1, 149.0, 166.1, 204.2, 208.2, 222.2, 223.1, and 240.2.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Salbutamol	3.25	240.2	148.2
222	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Serotonin. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 160, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 6.0e5. The base peak is at m/z 160.1. Other labeled peaks include 67.1, 77.2, 79.0, 91.0, 94.1, 105.1, 107.1, 115.0, 117.1, 118.2, 128.1, 130.1, 132.2, 133.1, 141.1, 142.2, 143.1, 158.2, 159.1, 161.0, and 161.6.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Serotonin	1.28	177.1	160.1

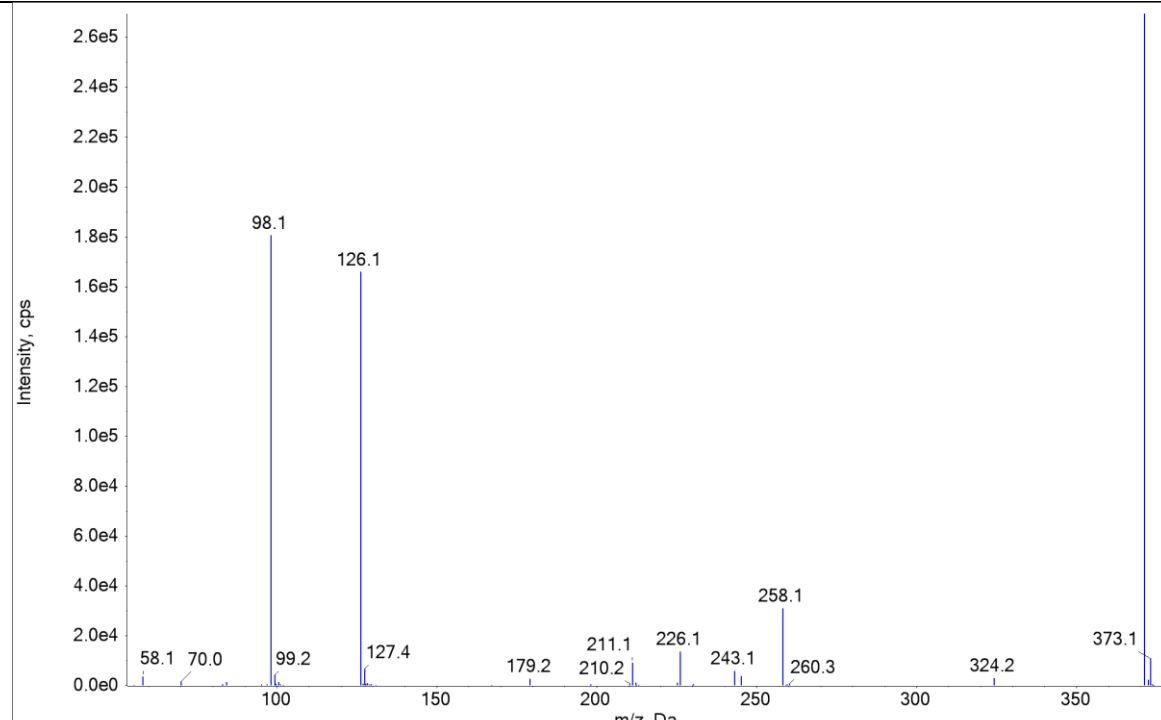
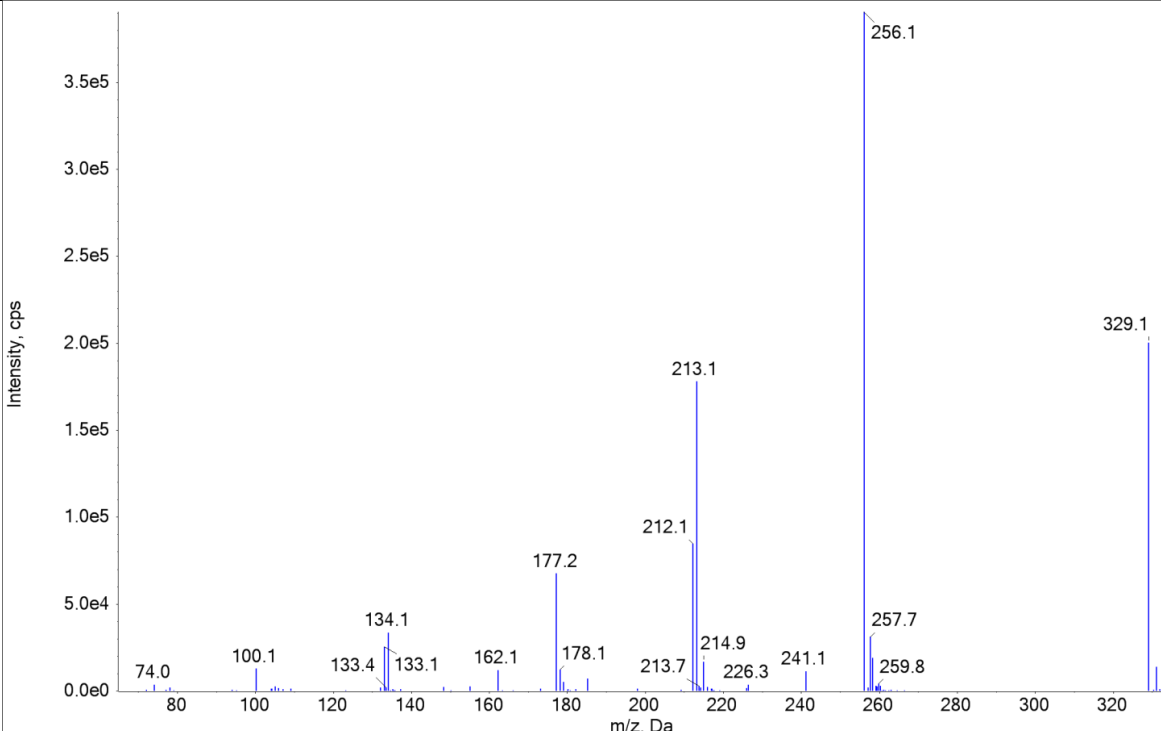
223	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Sildenafil	6.7	475.2	58
224	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Sotalol	3.38	273.1	133.1

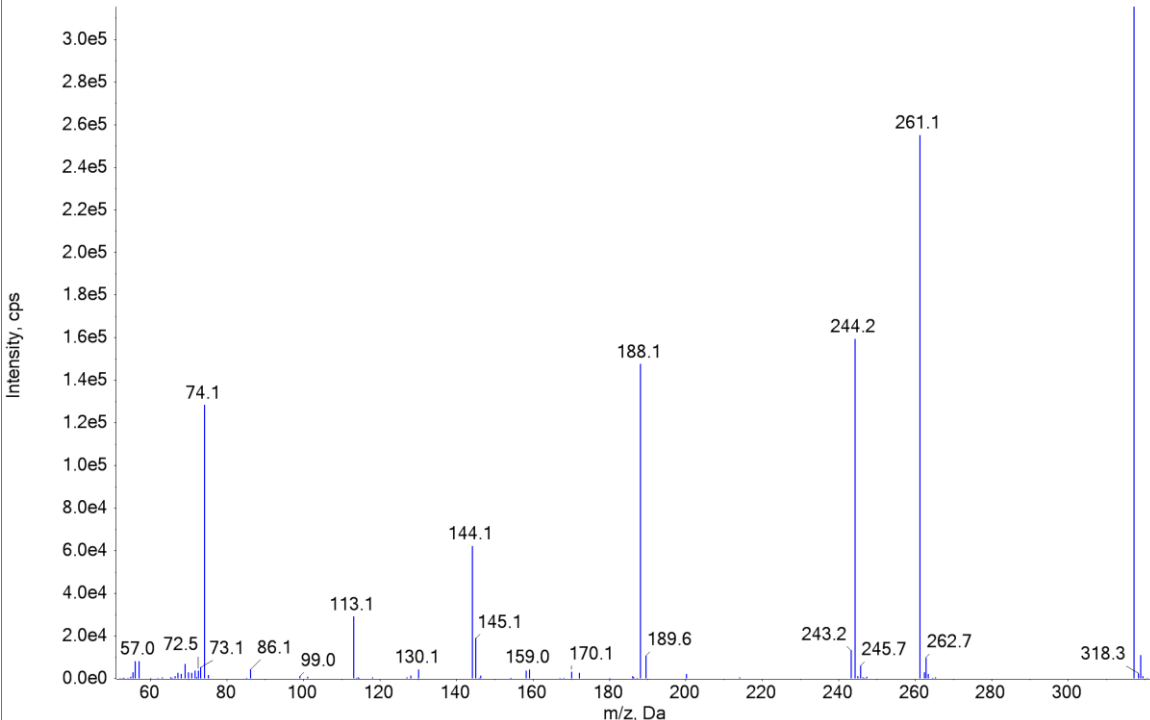
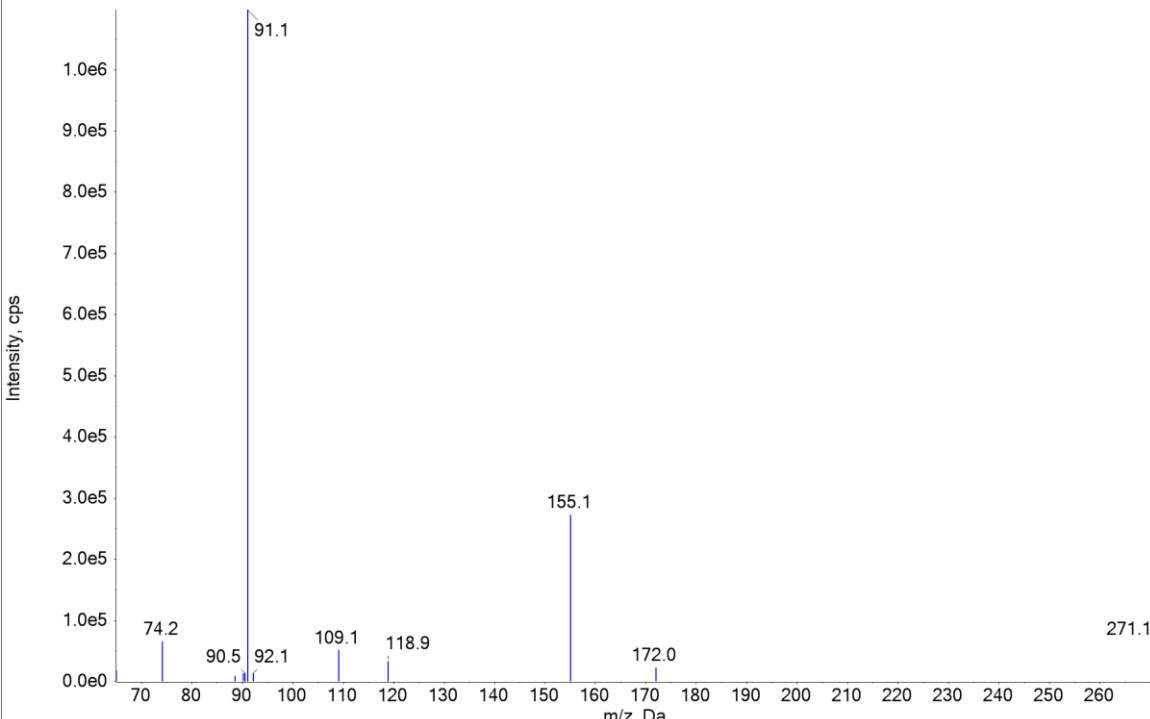
225	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Sulpiride. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 340, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 2.8e5. The base peak is at m/z 342.2. Other labeled peaks include 58.0, 84.1, 85.2, 98.1, 112.2, 113.3, 134.0, 214.1, 215.6, 285.2, 297.2, and 343.4.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Sulpiride	4.72	342.1	112.2
226	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Tamoxifen. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 350, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 2.6e5. The base peak is at m/z 372.2. Other labeled peaks include 69.9, 72.1, 91.0, 105.1, 129.0, 178.1, 207.2, 240.1, 253.2, 298.0, 327.0, 373.1, and 374.0.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Tamoxifen	9.41	372.2	72.1

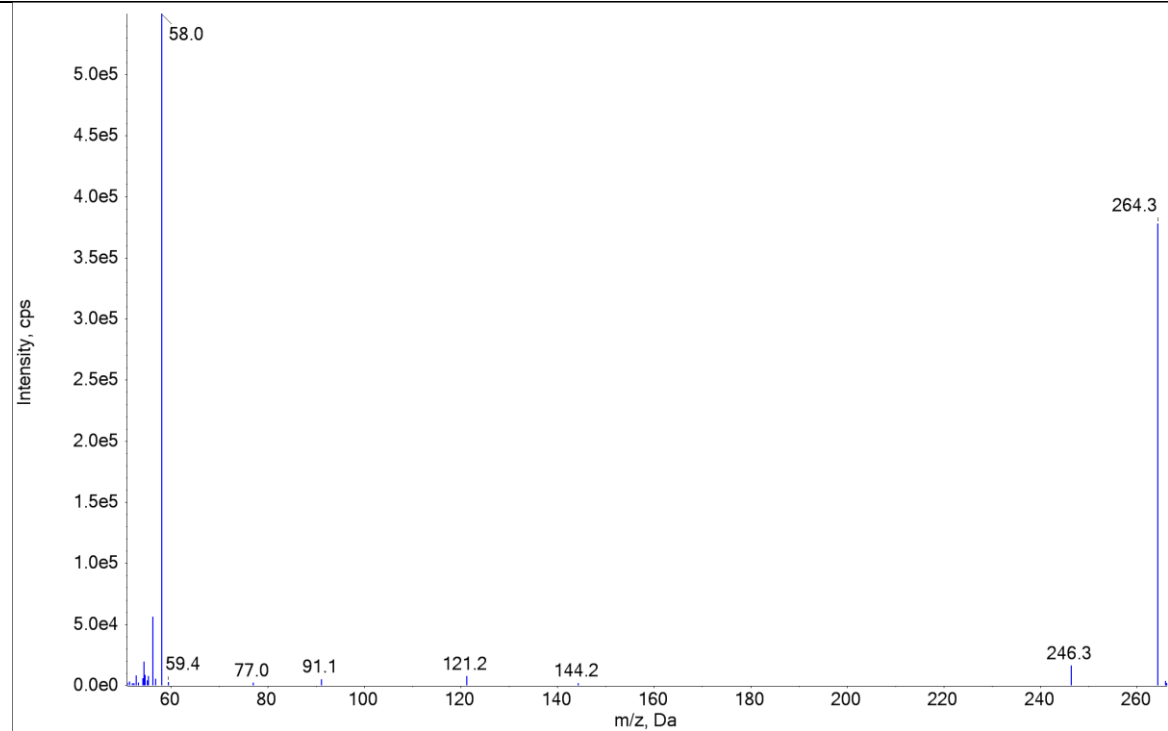
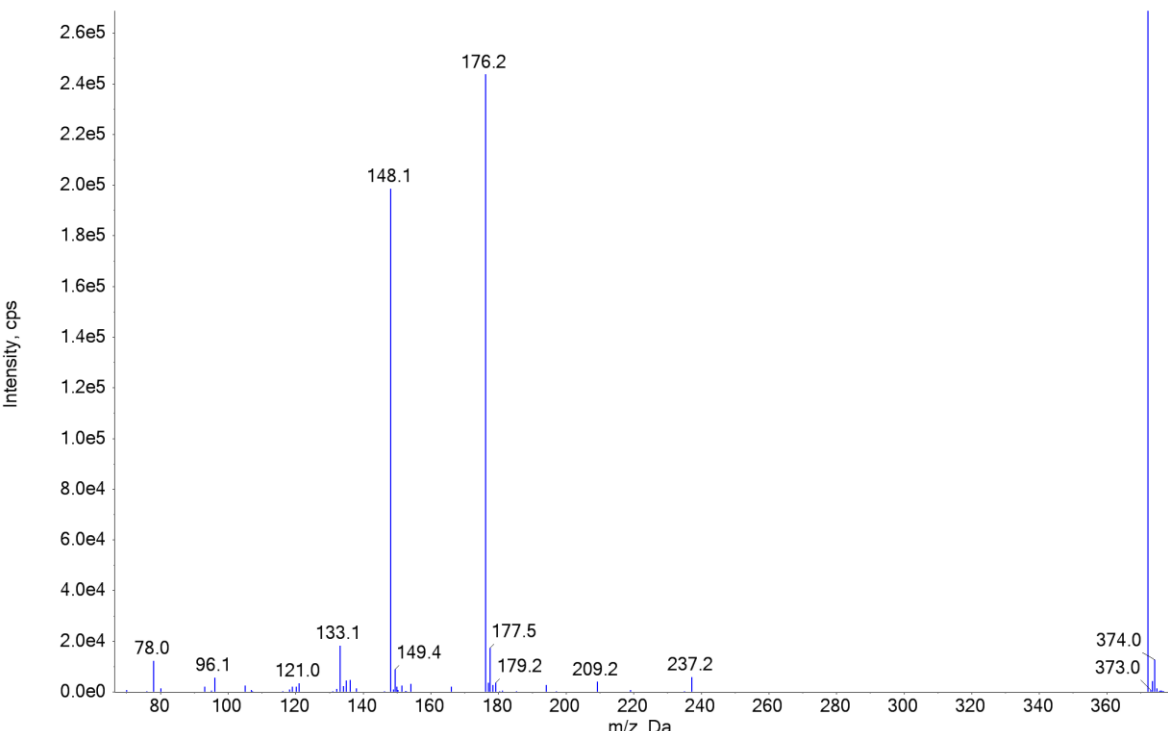
227	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Temazepam (Hydroxy-Diazepam)	7.58	301.1	255.2
228	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Terbutaline	3.19	226.1	152.11

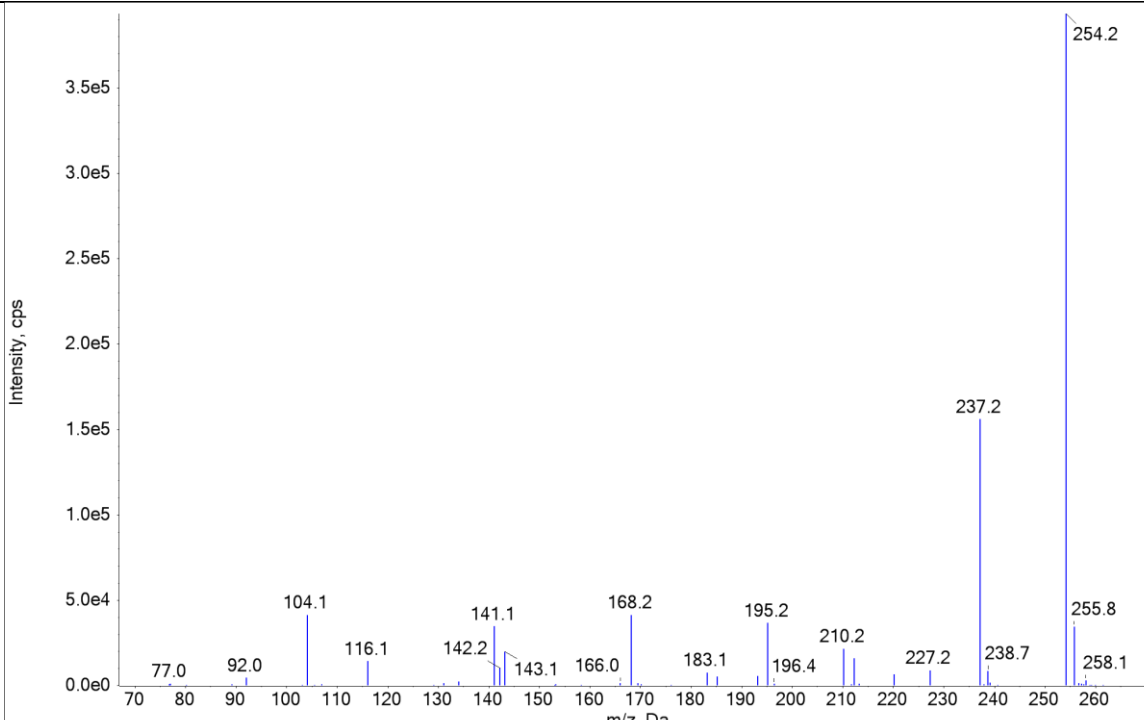
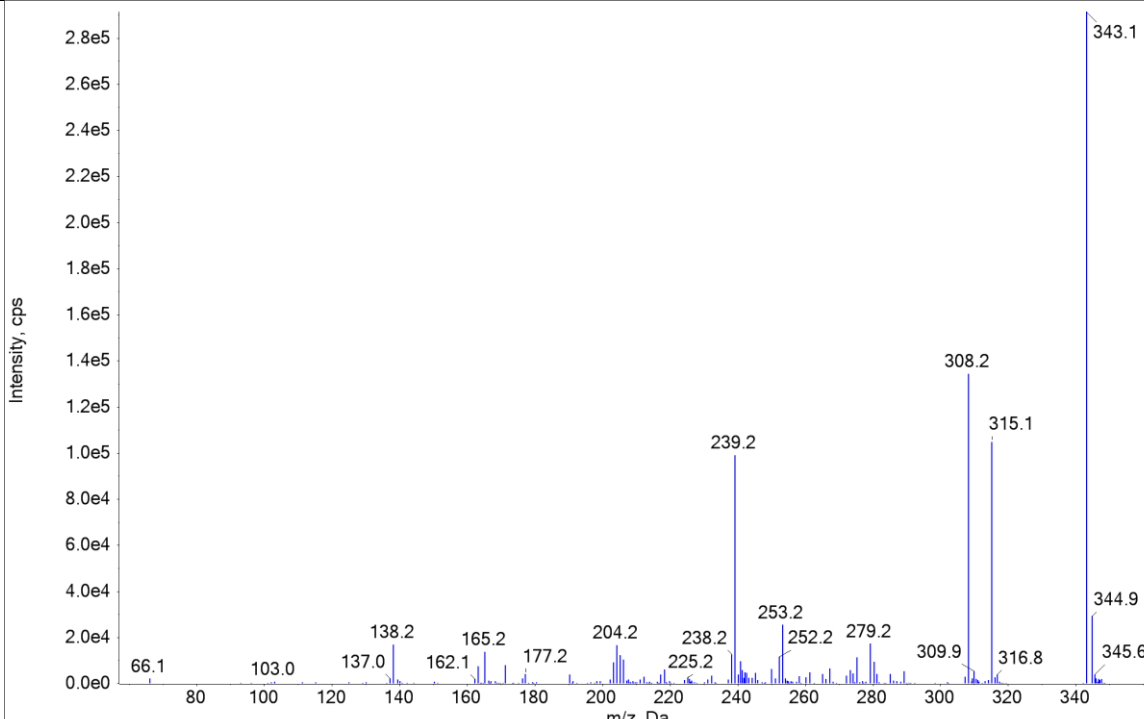
229	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Terfenadine	8.73	472.3	436.3
230	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Tetracaine	6.8	265.2	176.2

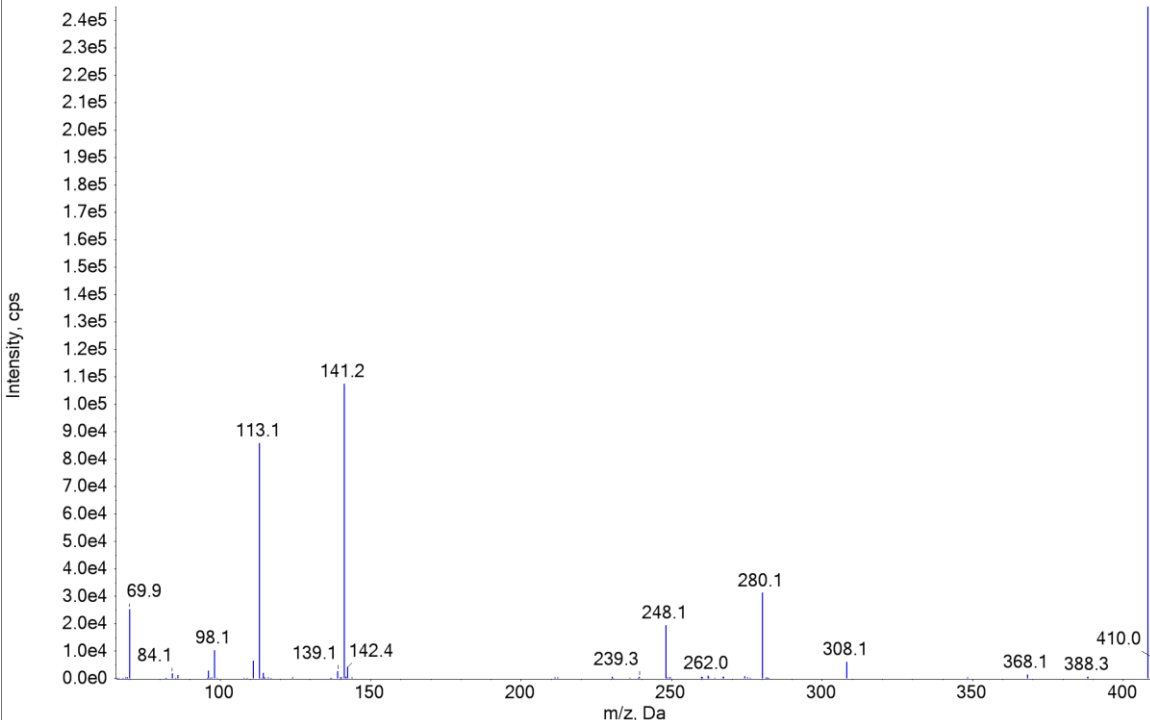
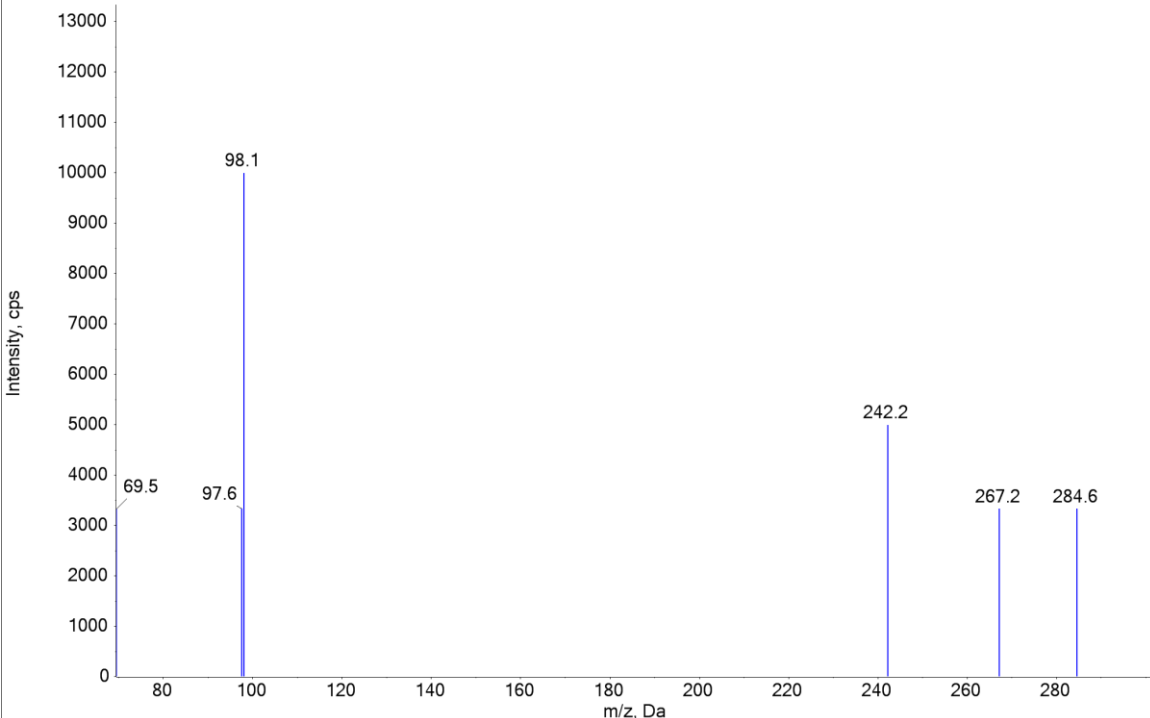
231	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Theobromine	2.98	181.1	138.1
232	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Theophylline	3.56	181.1	124

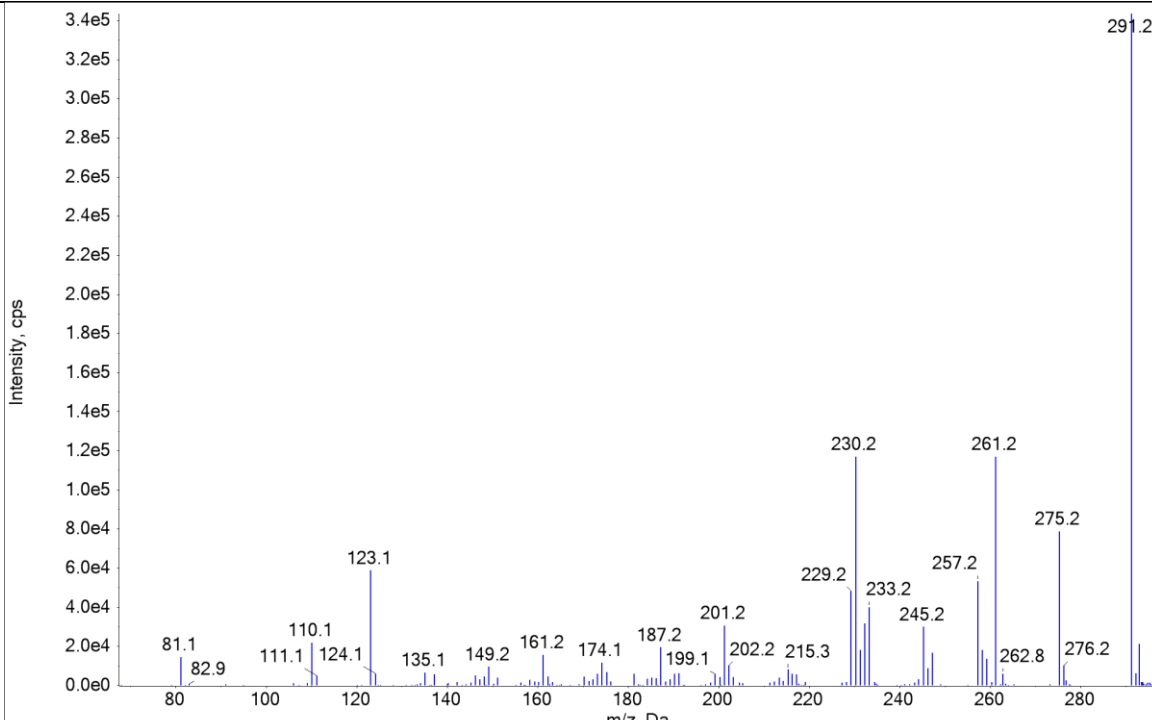
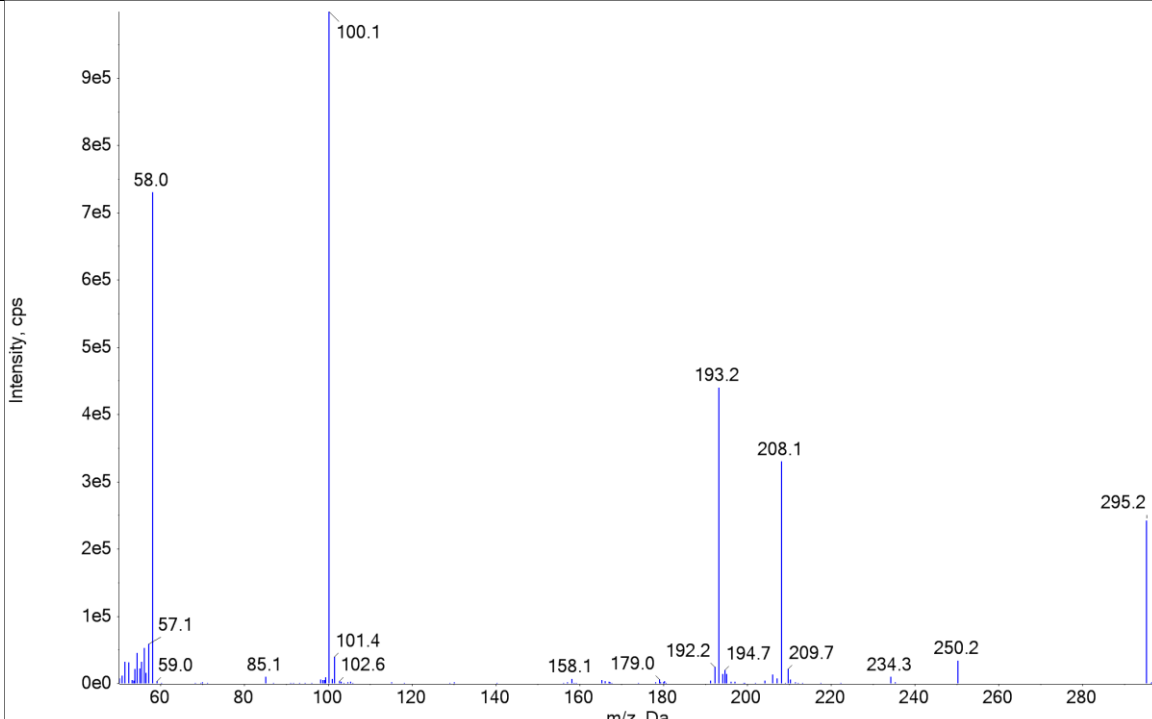
233	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Thioridazine	8.29	371.2	98.1
234	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Tiapride	4.01	329.1	256.1

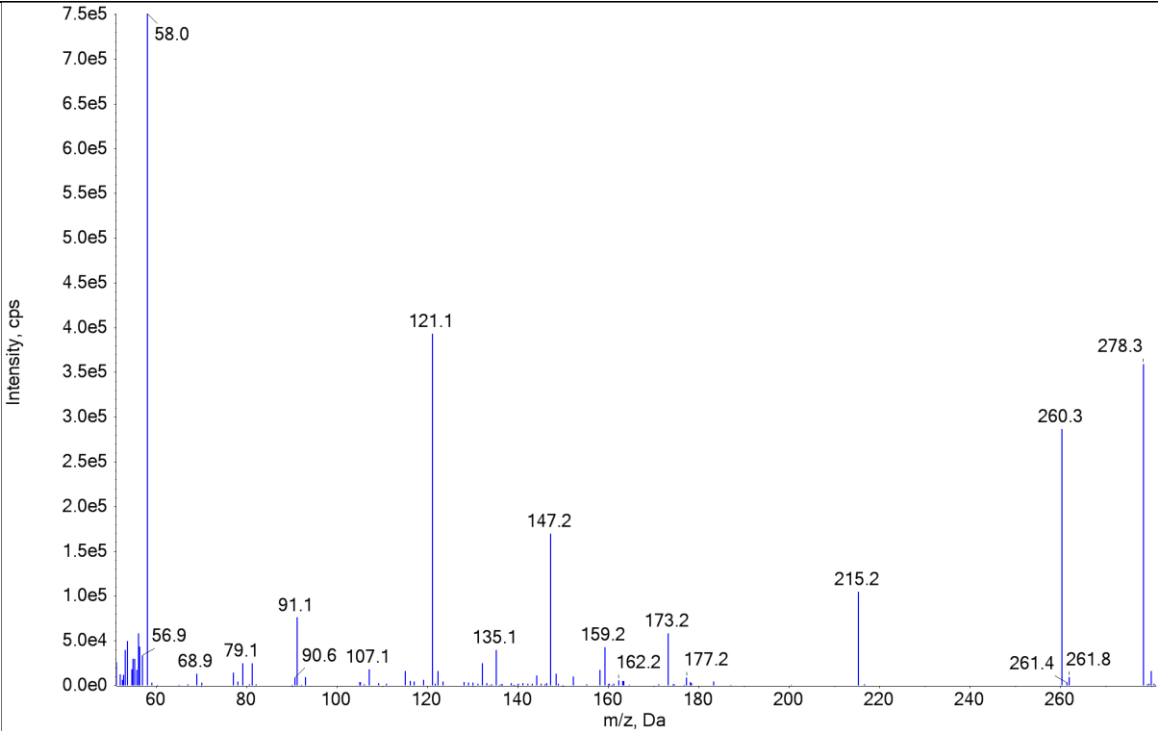
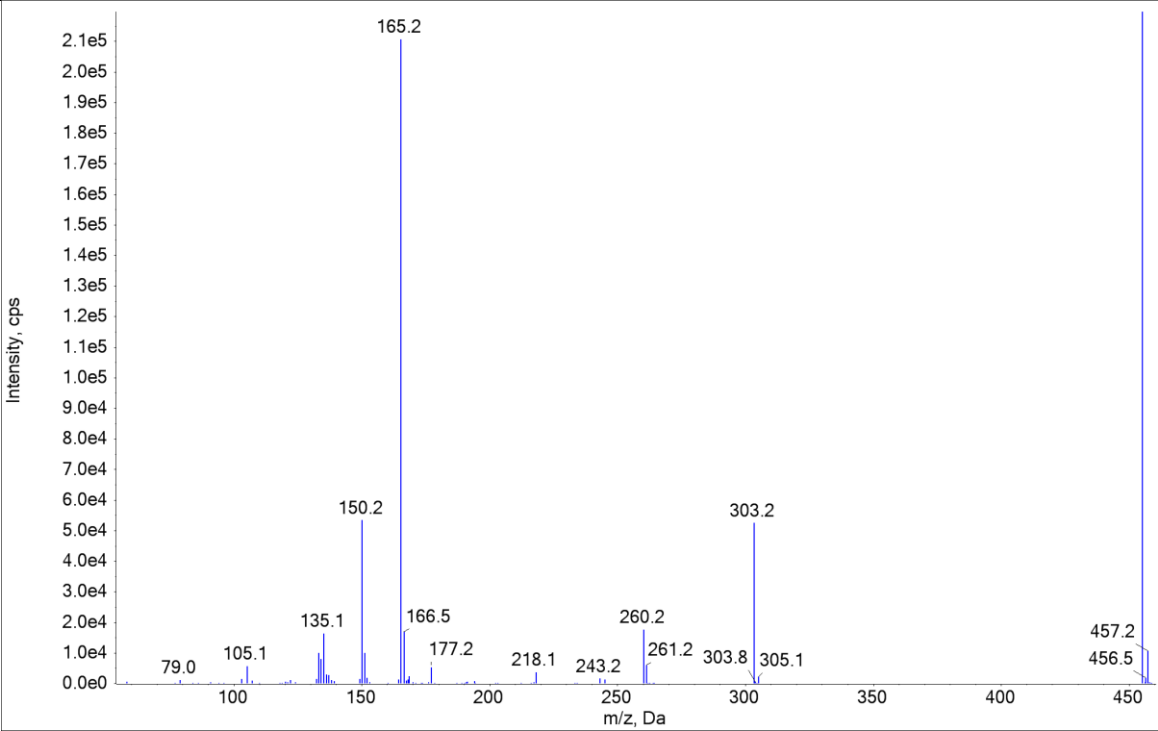
235	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Timolol	5.19	317.2	261.2
236	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Tolbutamide	6.65	271.1	91.1

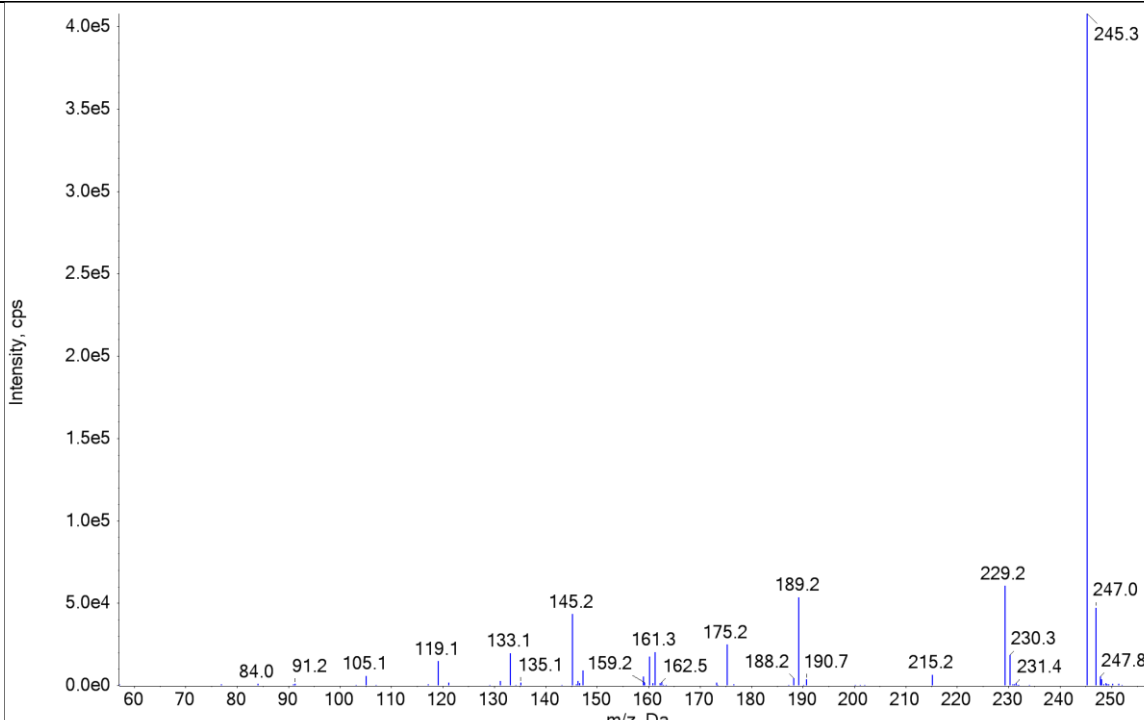
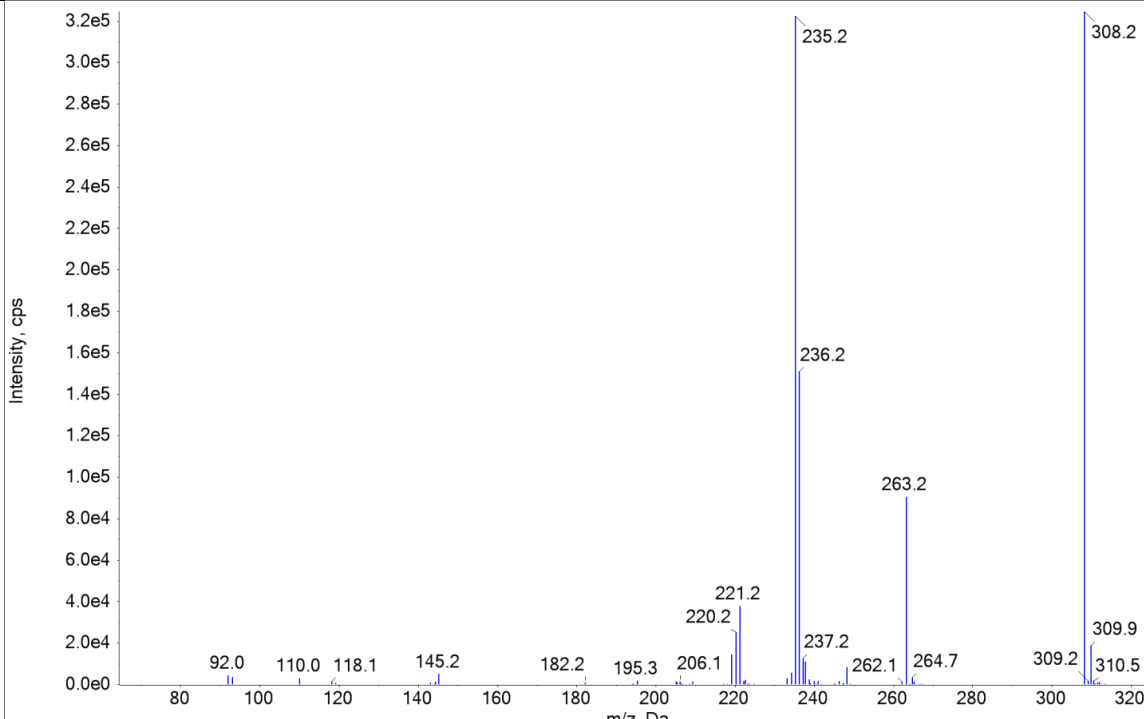
237	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Tramadol. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 260, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 5.0e5. The base peak is at m/z 58.0. Other labeled peaks include 59.4, 77.0, 91.1, 121.2, 144.2, 246.3, and 264.3.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Tramadol	5.13	264.2	58
238	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Trazodone. The x-axis represents m/z (Da) from 80 to 360, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 2.6e5. The base peak is at m/z 373.0. Other labeled peaks include 78.0, 96.1, 121.0, 133.1, 148.1, 149.4, 176.2, 177.5, 179.2, 209.2, 237.2, and 374.0.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Trazodone	7.6	372.2	176.1

239	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Triamterene. The x-axis represents m/z (Da) from 70 to 260, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 3.5e5. The base peak is at m/z 254.2. Other labeled peaks include 77.0, 92.0, 104.1, 116.1, 142.2, 143.1, 141.1, 166.0, 168.2, 183.1, 195.2, 196.4, 210.2, 227.2, 237.2, 238.7, 255.8, and 258.1.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Triamterene	4.02	254.1	237.2
240	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Triazolam. The x-axis represents m/z (Da) from 80 to 340, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 2.8e5. The base peak is at m/z 343.1. Other labeled peaks include 66.1, 103.0, 137.0, 138.2, 162.1, 165.2, 177.2, 204.2, 225.2, 238.2, 239.2, 252.2, 253.2, 279.2, 309.9, 315.1, 316.8, 344.9, and 345.6.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Triazolam	7.43	343.0	239.1

241	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Trifluoperazin	9.66	408.2	141.2
242	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Trihexyphenidyl	8.28	302.4	98.1

243	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Trimethoprim	4.87	291.1	230.2
244	Масс спектр			
				
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Trimipramine	7.74	295.2	100.1

247	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Venlafaxine. The x-axis represents m/z (Da) from 60 to 260, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 7.5e5. The base peak is at m/z 58.0. Other labeled peaks include 56.9, 68.9, 79.1, 91.1, 90.6, 107.1, 121.1, 135.1, 147.2, 159.2, 162.2, 173.2, 177.2, 215.2, 260.3, 261.4, 261.8, and 278.3.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Venlafaxine	6.05	278.2	58
248	Масс спектр			
	 Mass spectrum of Verapamil. The x-axis represents m/z (Da) from 100 to 450, and the y-axis represents Intensity (cps) from 0.0e0 to 2.1e5. The base peak is at m/z 165.2. Other labeled peaks include 79.0, 105.1, 135.1, 150.2, 166.5, 177.2, 218.1, 243.2, 260.2, 261.2, 303.2, 303.8, 305.1, 457.2, and 456.5.			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Verapamil	7.29	455.3	165.1

249	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Xylometazoline	6.52	245.0	229
250	Масс спектр			
	 Intensity, cps m/z, Da			
	Вещество	Время удерживания	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)
	Zolpidem	6.7	308.1	235.2